


Massagesessel iRest EasyQ (A166)

Bedienungsanleitung

**BEWAHREN SIE DIE BETRIEBSANLEITUNG FÜR
SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF**

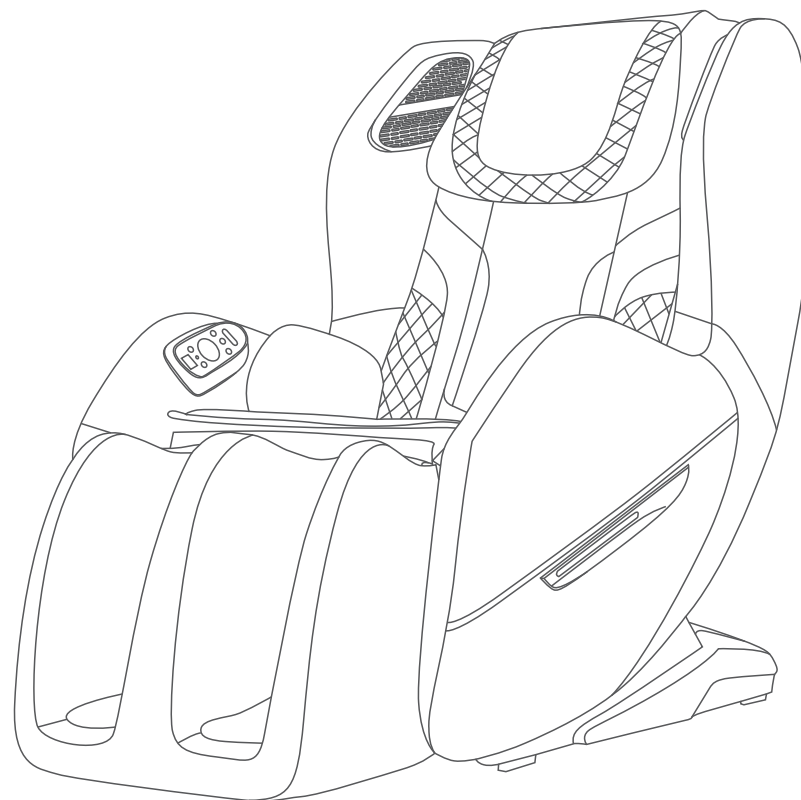

Vielen Dank für den Kauf dieses Geräts. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um sich vor der Inbetriebnahme des Massagesessels mit dessen korrekter Verwendung vertraut zu machen. Bitte beachten Sie insbesondere die Kontraindikationen und die Sicherheitshinweise.

Hinweis: Der Verkäufer behält sich das Recht vor, Änderungen am Design und an der Beschreibung des Geräts vorzunehmen. Sollten Unterschiede zwischen der Funktion des auf dem Markt erhältlichen Geräts und der Beschreibung in der Anleitung bestehen, so sind diese auf eine normale Aktualisierung des Geräts zurückzuführen, und der Hersteller ist nicht verpflichtet, darüber zu informieren. Die in der Bedienungsanleitung abgebildete Farbe entspricht nicht der aktuellen Farbgebung des Massagesessels.

INHALTSVERZEICHNIS

Vor dem ersten Gebrauch

Vorsichtsmaßnahmen	02-04
Montageteile	05
Aufstellung des Massagesessels	06-07
Vor dem Gebrauch	08-09
Aufbau des Geräts	10-13

Verwendung

Bedienungsanleitung	14-18
Beenden der Massage	18

Pflege

Reinigung und Pflege	19
----------------------------	----

Wichtig

Fehlerbehebung	20
Technische Daten des Geräts	21

Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden

- Lesen Sie vor Gebrauch alle wichtigen Anweisungen sorgfältig durch.
- Die hierin enthaltenen Anweisungen helfen dabei, das Gerät sicher und richtig zu benutzen.

■ Um das Ausmaß möglicher Verletzungen und Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen können, deutlich zu machen, sind Informationen mit der Überschrift „**Warnung**“ oder „**Hinweis**“ gekennzeichnet.

 Warnung	Zeigt an, dass bei unsachgemäßem Gebrauch schwere Verletzungen oder Tod auftreten können.
 Hinweis	Zeigt an, dass bei unsachgemäßem Gebrauch leichte Verletzungen oder Sachschäden auftreten können.

■ Beachten Sie das Symbol vor jedem Sicherheitselement.

 Verbot	Absolut verboten
---	------------------

Personen mit folgenden Beschwerden sollten dieses Gerät nicht benutzen

 Forbidden	■ Das Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit körperlichen, sensorischen oder neurologischen Behinderungen oder mangelnder Erfahrung und Vernunft bestimmt, es sei denn, sie werden von für ihre Sicherheit verantwortlichen Personen beaufsichtigt und in die Benutzung des Geräts eingewiesen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit den Geräten spielen. ■ Personen mit Osteoporose. ■ Personen mit Herzerkrankungen oder Personen, die medizinische elektronische Geräte wie Herzschrittmacher benutzen. ■ Personen mit Fieber. ■ Frauen, die schwanger sind oder ihre Menstruation haben. ■ Patienten mit Wunden oder Hauterkrankungen. ■ Kinder unter 14 Jahren oder Personen mit psychischen Störungen dürfen das Gerät nicht unbeaufsichtigt benutzen. ■ Personen, denen ärztlich Ruhe verordnet wurde oder die sich unwohl fühlen. ■ Personen, deren Körper nass ist, dürfen das Gerät nicht benutzen. ■ Das Gerät hat eine beheizte Oberfläche. Personen, die nicht hitzeempfindlich sind, müssen bei der Benutzung des Geräts vorsichtig sein. ■ Ein beschädigtes Netzteil muss vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden. Vorsichtsmaßnahmen (müssen beachtet werden) Wichtige Sicherheitshinweise
---	---

Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden

Wichtige Sicherheitshinweise	
 Warnung	■ Kinder dürfen die beweglichen Teile des Geräts nicht berühren. ■ Verwenden Sie eine für dieses Gerät geeignete, ordnungsgemäß geerdete Stromquelle. ■ Um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden, ziehen Sie nach Gebrauch oder vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose. ■ Betreiben Sie das Gerät gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung. ■ Verwenden Sie kein nicht empfohlenes Zubehör. ■ Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien. ■ Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen. ■ Jede andere, nicht in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Verwendung ist verboten. ■ Es wird eine einmalige Verwendung von 20 Minuten empfohlen. ■ Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Leder Risse oder Beschädigungen aufweist. ■ Werfen Sie keine Gegenstände in das Gerät. ■ Schlafen Sie während der Benutzung des Geräts nicht ein. ■ Benutzen Sie das Gerät nicht unter Alkoholeinfluss oder bei Krankheit. ■ Benutzen Sie das Gerät nicht innerhalb einer Stunde nach einer Mahlzeit. ■ Um Verletzungen zu vermeiden, wenden Sie die Massagefunktion nicht zu stark an.

Vorsichtsmaßnahmen	
 Hinweis	■ Prüfen Sie, ob die Spannung den Spezifikationen des Geräts entspricht. ■ Ziehen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen heraus oder stecken Sie ihn ein. ■ Lassen Sie kein Wasser in das Gerät eindringen, da dies zu Stromschlägen oder Geräteschäden führen kann. ■ Ziehen Sie beim Anschließen oder Trennen nicht am Netzteil. Gehen Sie nicht gewaltsam mit den Kabeln um. ■ Beschädigen Sie das Netzteil nicht und verändern Sie die Schaltung des Geräts nicht. ■ Reinigen Sie elektrische Teile wie Schalter und Stecker mit einem trockenen Tuch. ■ Setzen Sie sich nicht auf das ausgeschaltete Gerät, um Verletzungen durch plötzliche Wiederherstellung der Stromversorgung zu vermeiden. ■ Beenden Sie die Verwendung des Geräts, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, und wenden Sie sich umgehend an Ihren lokalen Herstellervertreter. ■ Beenden Sie die Verwendung dieses Produkts, wenn Sie sich unwohl fühlen, und suchen Sie einen Arzt auf.

Lagerbedingungen	
 Hinweis	■ Innentemperatur: 5 °C bis 40 °C ■ Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 80 %, keine korrosiven Gase, gut belüfteter Raum.




Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden

Wartung und Instandhaltung des Geräts	
 Hinweis	■ Dieses Gerät darf nur von einem vom Hersteller benannten Servicecenter gewartet werden. Benutzer sollten das Gerät nicht selbst zerlegen oder reparieren. ■ Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch unbedingt aus. ■ Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Steckdose locker ist. ■ Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, rollen Sie Kabel auf und lagern Sie das Gerät an einem trockenen und staubfreien Ort. ■ Lassen Sie das Gerät nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen oder in der Nähe von Feuer liegen und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung über längere Zeit. ■ Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Verdünner, Benzin oder Alkohol. ■ Die mechanischen Teile dieses Geräts wurden speziell entwickelt und gefertigt, sodass keine intensive Wartung erforderlich ist. ■ Verwenden Sie keine scharfen Werkzeuge zum Öffnen des Gehäuses. ■ Rollen oder ziehen Sie das Gerät nicht über unebenen Boden. Heben Sie es vor dem Transport an. ■ Das Gerät sollte mit Unterbrechungen benutzt werden; lassen Sie es nicht über längere Zeit im Dauerbetrieb laufen.
Nutzungsumgebung	
 Hinweis	■ Benutzen Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit, wie z. B. im Badezimmer. ■ Benutzen Sie das Gerät nicht unmittelbar nach einem plötzlichen Temperaturwechsel. ■ Benutzen Sie das Gerät nicht in sehr staubiger oder korrosiver Umgebung. ■ Benutzen Sie das Gerät nicht an Orten mit unzureichendem Platzangebot oder unzureichender Belüftung.
Fehlerbehebung	
 Hinweis	■ Es ist normal, dass der Motor während des Betriebs Geräusche macht. ■ Sollte die Steuerung nicht ordnungsgemäß funktionieren, prüfen Sie bitte, ob Stecker und Buchse richtig angeschlossen sind und stellen Sie sicher, dass der Schalter eingeschaltet ist. ■ Nach Ablauf der angegebenen Betriebszeit schaltet sich das Gerät automatisch aus. Bei längerem Dauerbetrieb schaltet der Thermoschutz das Gerät automatisch ab. Nach einer halben Stunde Ruhezeit können Sie es wieder einschalten.

Montageteile

Installationsanleitung für das Wadenmassagegerät.

1. Setzen Sie die Trennteile in die Haken an der Unterseite der Fußeinheit ein (Abbildung 1).
2. Heben Sie die Fußeinheit an, setzen Sie die Haken ordnungsgemäß ein und stecken Sie anschließend den Sicherungsstift ein. Führen Sie abschließend den R-förmigen Stift in die Öffnung in der Welle ein (Abbildung 2).
3. Nachdem Sie den Luftschlauch und den Kabelbaum der Fußeinheit mit dem Massagesessel verbunden haben, prüfen Sie, ob sich diese problemlos auf und ab drehen lässt, und schließen Sie die Montage der Fußeinheit ab (Abbildung 3).

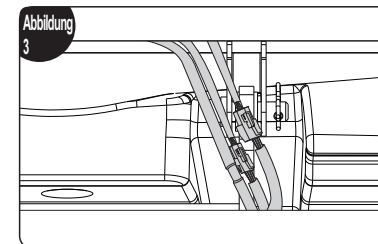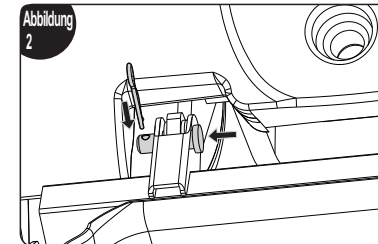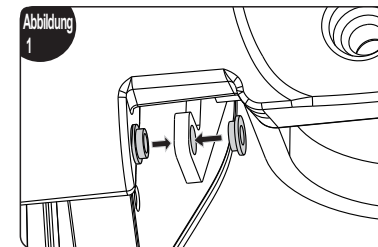


Aufstellung des Massagesessels

Montageort

Stellen Sie sicher, dass ausreichend Platz vorhanden ist, da der Massagesessel zum Ausklappen mindestens 30 cm Platz benötigt.


Setzen Sie den Massagesessel keiner direkten Hitze (z. B. vor Heizgeräten) und keiner direkten Sonneneinstrahlung aus; stellen Sie ihn an einem Ort auf, an dem hohe Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung vermieden werden können. Bei längerem Gebrauch an einem festen Standort wird empfohlen, eine weiche Matte unterzulegen. Beim Verlegen einer solchen Matte sollte deren Größe ausreichen, um die Standfläche des Gerätes abzudecken. Beachten Sie den Bereich, in dem das Gerät den Boden berührt, und die Stelle, an der Ihre Füße den Boden berühren.

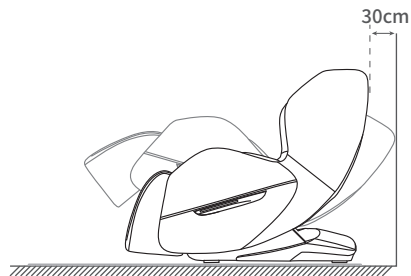

Hebehinweise

Zum Heben und Bewegen des Massagesessels ist Teamarbeit erforderlich, um Verletzungsrisiken zu vermeiden.

1. Heben Sie den Massagesessel an, um ihn auf einem empfindlichen Untergrund, z. B. auf Holzböden, zu transportieren.
2. Wenn Sie das Gerät auf einem Holzboden bewegen, wird empfohlen, es anzuheben. Vermeiden Sie Beschädigungen an den Rollen. Achten Sie beim Anheben und Bewegen des Massagesessels an die gewünschte Position auf Ihre Hände, um Verletzungen zu vermeiden, und achten Sie darauf, dass Ihre Füße nicht eingeklemmt werden. Lassen Sie das Gerät nicht los, bevor der Korpus vollständig flach auf dem Boden steht, da der Boden sonst beschädigt werden kann. Es wird daher empfohlen, eine Matte darunter zu legen.

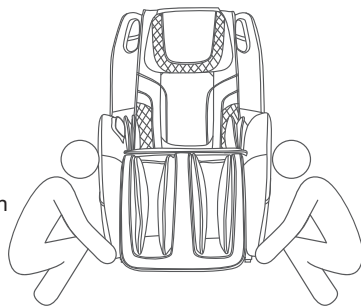


Aufstellung des Massagesessels

Transport



Nutzen Sie die Hinterräder, um den Massagesessel zu bewegen. Neigen Sie den Massagesessel um ca. 45° nach hinten, wie in der Abbildung gezeigt. HINWEIS: Übermäßige Kraft beim Neigen kann zum Umkippen des Massagesessels und zur Beschädigung des Geräts führen.

1. Schalten Sie das Gerät vor dem Transport ordnungsgemäß aus, um es zurückzusetzen, und ziehen Sie anschließend den Netzstecker.
2. Während des Transports darf nichts auf dem Massagesessel liegen (Personen, Haustiere oder Gegenstände).
3. Lassen Sie den Massagesessel beim Transport nicht aus einer Höhe von mehr als 2 mm fallen und überschreiten Sie keinen Spalt von mehr als 5 mm.
4. Beim Transport des Geräts mit den Rädern wird ein einmaliges Anschieben nicht empfohlen. Bei Entfernungen von über 50 Meter sollte das Gerät langsam und gleichmäßig bewegt werden.

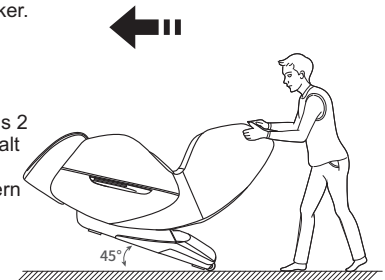

Demontage und Verwendung des Kopf- und Rückenlehnenkissens


Die Verwendung des Kopfkissens kann die Intensität der Knetmassage im Nacken- und Schulterbereich reduzieren. Die Verwendung des Kopfkissens kann je nach Bedarf gewählt werden (wir empfehlen es). Das Rückenlehnenkissen und die Rückenlehne sind durch einen Reißverschluss (1) verbunden, das Kopfkissen und das Rückenlehnenkissen sind ebenfalls durch einen Reißverschluss (2) verbunden.

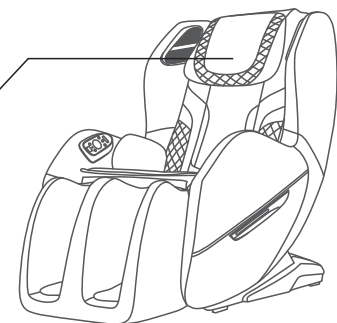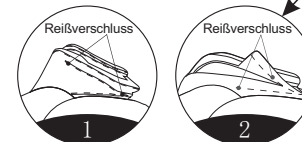

Vor dem Gebrauch

Überprüfung der Umgebung

Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen, Haustiere oder andere Gegenstände in der Nähe des Geräts befinden.

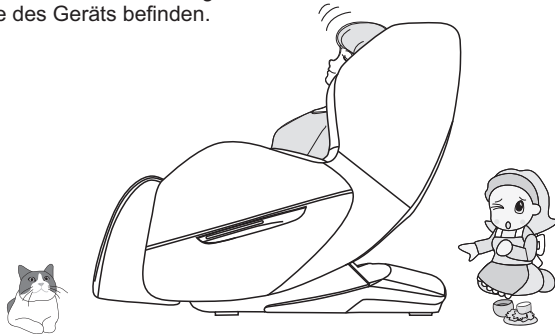

Stellen Sie sicher, dass sich keine Gegenstände in den Zwischenräumen des Geräts befinden.

Stellen Sie vor der Massage sicher, dass sich keine Fremdkörper in der Fußstütze, an den Füßen usw. befinden.

Unter keinen Umständen dürfen Hände, Füße oder der Kopf in den Bereich zwischen dem unteren Fußstützenmechanismus und dem Hauptkorpus oder in den Bereich zwischen der Armlehne und der Rückenlehne gelangen.

Unter keinen Umständen dürfen Hände, Füße oder der Kopf unter den Stoff oder das Leder der Massagefläche gelangen.




Vor dem Gebrauch


Einschalten




Netzteil anschließen

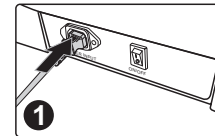

Anschlussplan

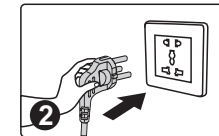


Netzschalter einschalten
(Position „I“)

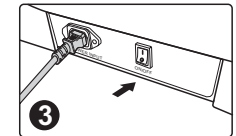

- Prüfen Sie vor der Anwendung, ob Netzteil und Stecker unbeschädigt sind.
- Die Stromversorgung dieses Geräts muss den Anforderungen für die Betriebsspannung entsprechen.
- Die Verwendung einer anderen als der Nennstromversorgung dieses Gerät ist strengstens untersagt.
- Es ist strengstens verboten, ohne Rücksprache verschiedene Spannungswandler an die Stromversorgung dieses Geräts anzuschließen.


Geräteaufbau

Beschreibung der einzelnen Komponenten

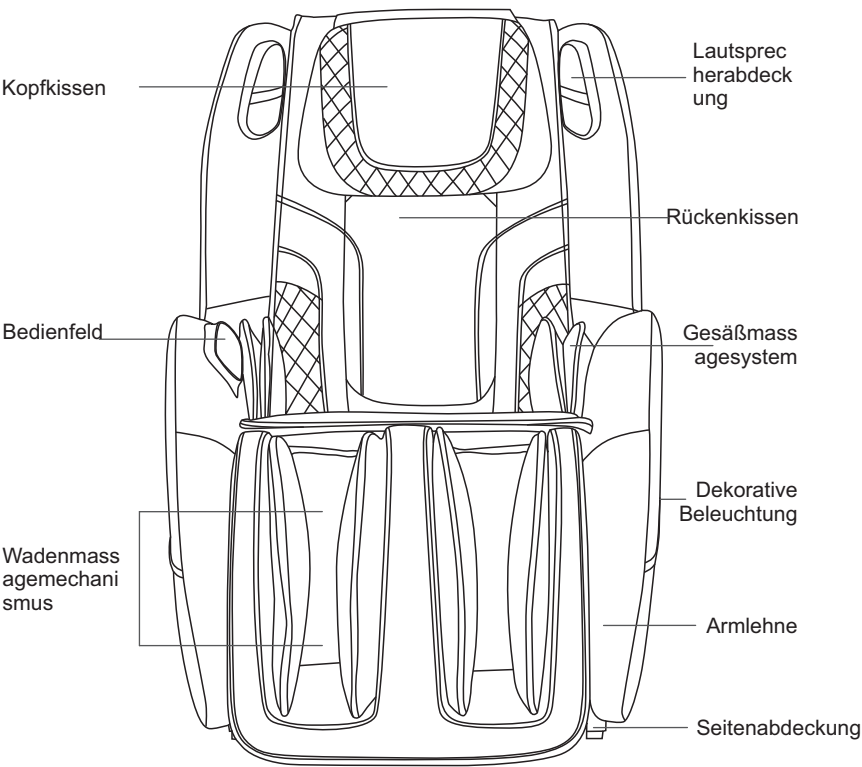


Geräteaufbau

Beidseitig am Kopf

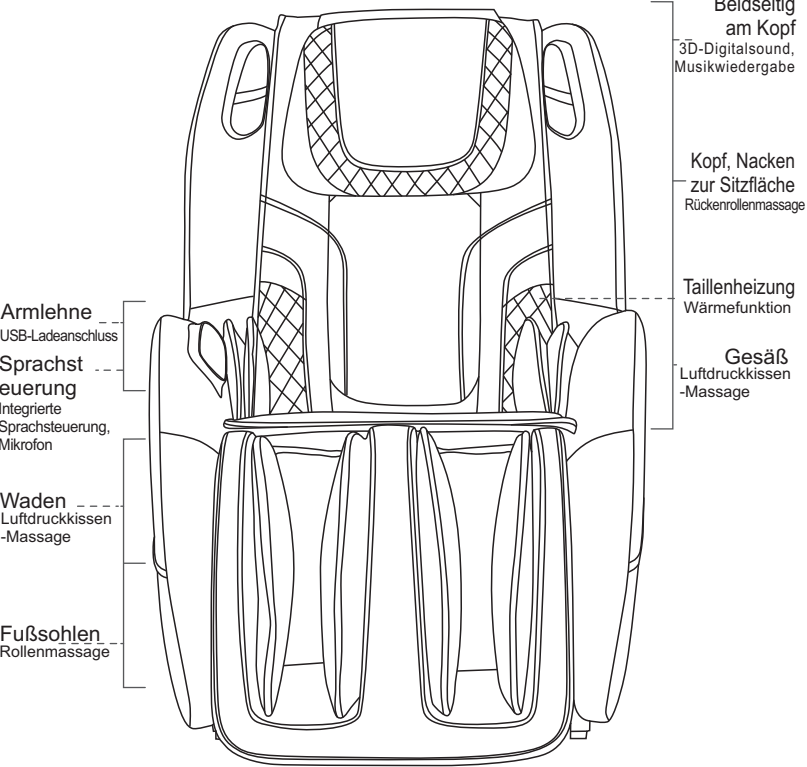

Geräteaufbau

I .Präsentation des Bedienfelds in der Armlehne

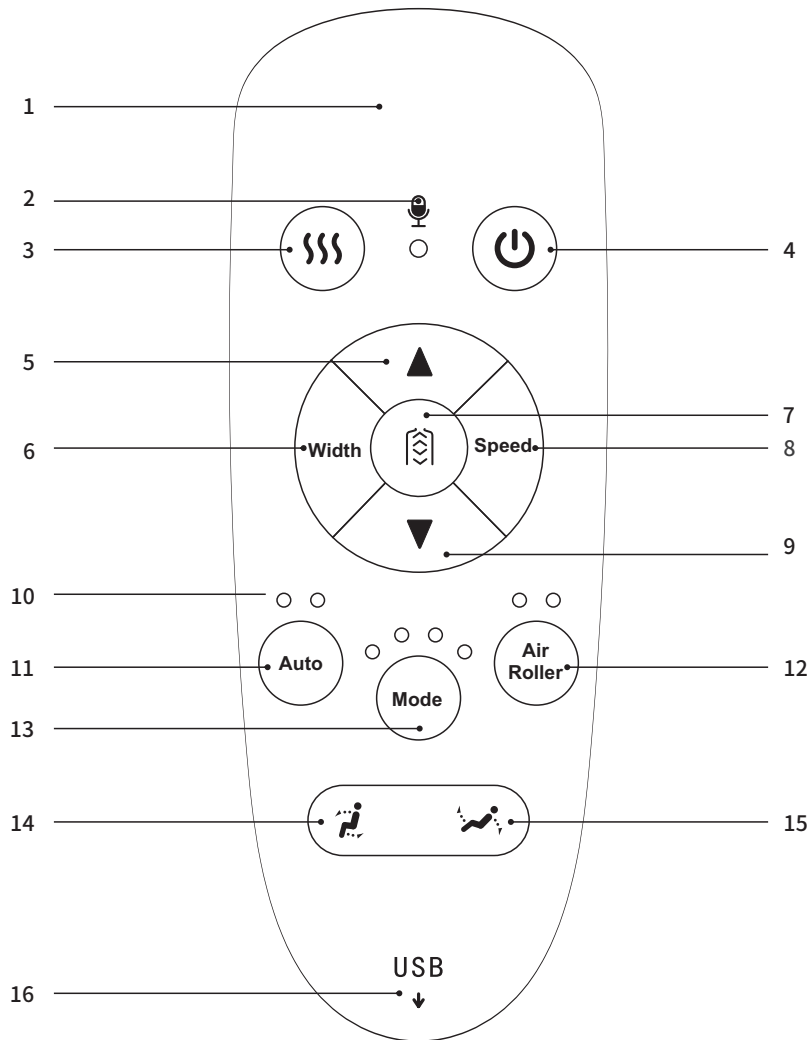

Geräteaufbau

1. Display – Zeigt Messagemodus und -dauer an.
2. Spracherkennungsmikrofon – Aktiviert die Spracherkennung.
3. Heizfunktionstaste – Kurz drücken: Schaltet die Heizfunktion ein/aus. Lang drücken: Aktiviert die Sprachsteuerung.
4. Ein/Aus – Alle Massagefunktionen ein-/ausschalten.
5. Massagebereichseinstellung – Positioniert das Massagegerät oben.
6. Breiteneinstellung – Passt die Breite der Massagebälle an.
7. Massagebereichseinstellung – Passt den Massagebereich an.
8. Geschwindigkeitseinstellung – Passt die Massagegeschwindigkeit an.
9. Massagebereichseinstellung – Positioniert das Massagegerät unten.
10. Funktionsanzeige (LED) – Zeigt die Massagefunktion an.
11. Automatische Massageprogramme – Automatisches Umschalten des Massagezyklus.
12. Luftdruck – Kurz drücken: Wählt die Luftdruckfunktion – schwach, stark, aus. Lang drücken: Schaltet die Rollenfunktion ein/aus.
13. Massagetechnik – Stellt die Massagetechnik ein.
14. Hebetaste – Stellt die Position ein, in der sich die Rückenlehne anhebt und die Fußstütze absenkt.
15. Neigungstaste – Stellt die Position ein, in der sich die Rückenlehne absenkt und die Fußstütze anhebt.
16. USB-Anschluss – USB-Anschluss zum Laden externer Geräte.

Bedienungsanleitung

II. Massage starten

1. Drücken Sie die Einschalttaste , um die Massage zu starten. Der Massagesessel neigt sich automatisch nach hinten.
2. Wenn Sie einen unterbrochenen Signalton („Bi Bi“, Anzeige HH) hören, können Sie die Schulterposition mit den Oben-/Unten-Tasten anpassen. Wenn Sie innerhalb von 5 Sekunden keine Änderungen vornehmen, startet die Massage automatisch.
3. Die Standardeinstellung ist die Automatikmassage, Sie können aber auch andere Massagemodi auswählen.

A). Automatikmassage

Name	Taste	Massagefunktion	Symbol im Display
Automatikmassage		Schnellmassage: Erleben Sie schnell alle Massageeffekte.	A1
		Wohlfühlmassage: Das wohltuendste Massageerlebnis.	A2
		Entspannungsmassage: Eine sanfte und angenehme Tiefenmassage, die Müdigkeit lindert und den Körper entspannt.	A3
		Ganzkörpermassage: Eine Tiefenmassage, die dem Körper neue Vitalität verleiht.	A4
		Nacken- und Schultermassage: Mit der einzigartigen Nacken- und Schultermassagemethode können durch die effektive Massage der Halswirbelsäule und des Schulterblatts Nacken- und Schulterschmerzen gelindert und die Ermüdung von Nacken und Schultern reduziert werden.	A5
		Rücken- und Taillenmassage: Konzentriert sich auf Rücken und Lendenwirbelsäule, um Schmerzen in diesem Bereich zu lindern.	A6
		Dehnmassage: Das Beinmodul und die Rückenlehne werden angehoben und abgesenkt, um Beine und Lendenwirbelsäule zu dehnen und zu straffen. Dies lindert effektiv Müdigkeit, reduziert Gelenkschmerzen und stellt die Vitalität wieder her.	A7
		Sportregeneration: Schnelle Regeneration des Körpers nach dem Training.	A8

Bedienungsanleitung

B). Manuelle Massage

Name	Taste	Massagefunktion	Symbol im Display
Modus		Kneten: Geschwindigkeit einstellbar; Anzeige I leuchtet.	● ○ ○ ○
		Klatschen: Geschwindigkeit und Breite einstellbar; Anzeige II leuchtet.	○ ● ○ ○
		Kneten und Klatschen: Geschwindigkeit einstellbar; Anzeige III leuchtet.	○ ○ ● ○
		Shiatsu: Geschwindigkeit und Breite einstellbar; Anzeige IV leuchtet.	○ ○ ○ ●
		Tippen: Geschwindigkeit und Breite einstellbar; Anzeigen I und II leuchtet.	● ● ○ ○
Breitentaste		In drei Intensitätsstufen einstellbar	d1、d2、d3
Geschwindigkeitstaste		In drei Geschwindigkeiten einstellbar	P1、P2、P3

C). Massagebereich einstellen

Name	Taste	Massagefunktion	Symbol im Display
Massagebereich		Einzelbereichsmassage: Massage an einer festen Position.	H0
		Sektionale Massage: Teilmassage eines kleinen Bereichs.	H1
		Oberkörper: Massage des Oberkörpers.	H2
		Unterkörper: Massage des Unterkörpers.	H3
		Ganzkörper: Massage des gesamten Körpers.	H4
Oben-Taste		Massageposition einstellen (im Einzelbereich- und Segmentalen Modus können Sie die Position des Massagegeräts mit den Oben- und Unten-Tasten anpassen).	Massagearme nach oben
Unten-Taste			Massagearme nach unten

Bedienungsanleitung

D). Heizfunktion

Name	Taste	Messagefunktion	Symbol im Display
Heizung		Kurz drücken: Heizfunktion ein- oder ausschalten.	h1、h0
		Lang drücken: Sprachsteuerung aktivieren.	/

E). Luftdruckkissen-Massagemodus

Name	Taste	Messagefunktion	Symbol im Display
Luftdruckkissen-Massagemodus		Kurz drücken, um die Luftdruckkissen-Massagefunktion auszuwählen: schwach, stark und aus.	schwach stark  
		Lang drücken: Rollenfunktion ein- oder ausschalten.	L1、L0

F). The position of back frame adjustment

Name	Taste	Messagefunktion
Hebetaste		Halten Sie diese Taste gedrückt. Die Rückenlehne hebt sich langsam an, die Fußstütze senkt sich langsam. Durch Loslassen der Taste wird die Bewegung gestoppt. Wenn Sie aufrecht sitzen, stoppen Sie das
Neigungstaste		Halten Sie diese Taste gedrückt. Die Rückenlehne neigt sich langsam nach hinten und die Fußstütze hebt sich langsam bis zum Anschlag. Durch Loslassen der Taste wird die Bewegung gestoppt.

Bedienungsanleitung

Sprachsteuerung

- Wenn der Massagesessel eingeschaltet ist oder sich im Standby-Modus befindet, aktiviert die Meldung „Hi Alice“ oder „Hey Alice“ die Sprachsteuerung.
- Nach erfolgreicher Aktivierung der Sprachsteuerung antwortet der Massagesessel mit „I am here.“ [„Ich bin hier.“] Wird innerhalb von sechs Sekunden der korrekte Sprachbefehl eingegeben, startet der entsprechende Modus nach Erhalt der Antwort vom Massagesessel. Wird der korrekte Sprachbefehl nicht innerhalb von sechs Sekunden eingegeben, wird die Sprachsteuerung automatisch deaktiviert und muss erneut aktiviert werden.
- Hinweis: Beim Starten der Sprachsteuerung sollte Englisch verwendet und die Sprechgeschwindigkeit moderat sein. Die Sprachbefehle müssen mit den eingegebenen Sprachbefehlen übereinstimmen.

Sprachbefehl		
Eingabe: „Hi Alice“ oder „Hey Alice“. Antwort: I am here.		
No.	Sprachbefehl	Antwort
1	Massage on	Ok, massage on
2	Massage close	Ok, massage close
3	Comfort massage	Ok, comfort massage
4	Relax massage	Ok, relax massage
5	Full body massage	Ok, full body massage
6	Neck and shoulder massage	Ok, neck and shoulder massage
7	Back and waist massage	Ok, back and waist massage
8	Stretch massage	Ok, stretch massage
9	Fixed massage	Ok, fixed massage
10	Change the other mode	Ok, change the other mode
11	Go little down	Ok, go little down
12	Go little up	Ok, go little up
13	Open the air pressure	OK, Open the air pressure
14	Close the air pressure	OK, , Close the air pressure
15	Up the seat position	Ok, Up the seat position
16	Down the seat position	Ok, Down the seat position
17	Stop adjustment	Ok, stop adjustment

Bedienungsanleitung

IV. Bedienungsanleitung für Bluetooth-Lautsprecher

1. Öffnen Sie das Hauptmenü Ihres Smartgeräts. Öffnen Sie „Einstellungen“ und wählen Sie „Bluetooth“. Öffnen Sie „Bluetooth“, und Bluetooth sucht automatisch nach einem neuen Bluetooth-Gerät.
2. Das Smartgerät findet die entsprechende Verbindung (z. B. IMCM-XXXX). Klicken Sie auf „Koppeln“. Wenn Sie gefragt werden, ob eine Kopplung mit dem Gerät erfolgen soll, wählen Sie einfach „Koppeln“, um die Kopplung abzuschließen.
3. Schalten Sie den „Musik-Player“ auf Ihrem Smartgerät ein und wählen Sie ein Lied aus.

V. Massage beenden

Drücken Sie während der Massage die Einschalttaste  an der Armlehne, um das Gerät auszuschalten. Dadurch werden alle Massagefunktionen sofort deaktiviert und Rückenlehne und Fußstütze zurückgesetzt. Ist die Massagezeit abgelaufen, werden alle Massagefunktionen automatisch deaktiviert, Rückenlehne und Beinmechanismus kehren jedoch nicht in die Ausgangsposition zurück.

Trennen Sie die Stromversorgung des gesamten Geräts wie in der beigefügten Abbildung gezeigt (Abbildung zum Trennen der Stromversorgung des gesamten Geräts).



Reinigung und Pflege

Reinigung von Kunstleder und Kunststoffteilen

Wischen Sie das Leder mit einem weichen, trockenen Tuch ab:

- Verwenden Sie keine Chemikalien wie Verdünner, Benzin, Alkohol usw. zur Reinigung des Geräts.
- Wenn Sie handelsübliche Lederpflegemittel verwenden, beachten Sie die Bedienungsanleitung.
- Wenn das Kunstleder besonders schmutzig ist, wischen Sie es wie folgt ab:

- ① Tauchen Sie ein weiches Tuch in Wasser oder warmes Wasser mit 3 % bis 5 % neutralem Reinigungsmittel und wischen Sie es dann gründlich ab.
- ② Wischen Sie die Oberfläche des Leders mit einem weichen Tuch ab.
- ③ Wischen Sie die Reinigungslösung mit einem in sauberem Wasser getränkten und gründlich ausgedrückten Tuch ab.
- ④ Wischen Sie mit einem weichen Tuch nach.
- ⑤ Frei trocknen lassen.


- Wenn sich Flecken nur schwer entfernen lassen, tauchen Sie einen handelsüblichen Melaminschwamm in neutrales Reinigungsmittel und wischen Sie das Gerät damit ab.

- Verwenden Sie zum Trocknen der Oberfläche keinen Haartrockner.

- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Geräte in Jeans und farbigen Stoffen verwenden, da die Farbe des Stoffes die Oberfläche des Kunstleders verfärben kann.

- Vermeiden Sie den Kontakt dieser Teile mit Kunststoff über längere Zeit, da dies die Oberfläche des Kunstleders verfärben kann.

- Kunstleder kann sich verfärben. Decken Sie daher die von Haaren berührten Teile, z. B. nach der Verwendung von Haarfärbemitteln, mit einem Handtuch ab.

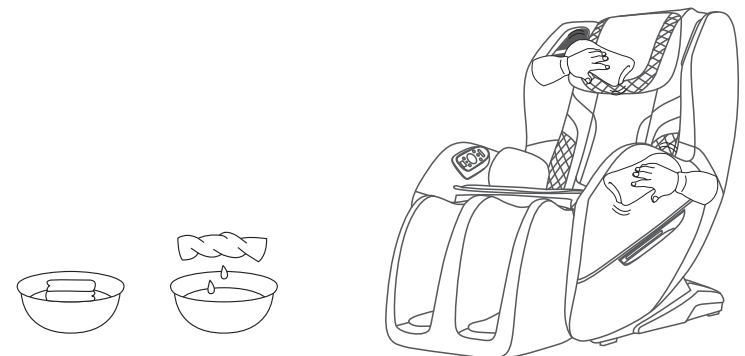

Fehlerbehebung Fehler

Fehler	Wenn die Fußstütze oder Rückenlehne eine bestimmte Position erreicht, drücken Sie die entsprechende Einstelltaste, es erfolgt jedoch keine Veränderung und ein unterbrochenes Tonsignal ertönt.
Lösung	Aufgrund der Bauweise und ergonomischer Anforderungen verfügt der Massagesessel über eine Schutzbegrenzung für die maximale Positionsverstellung. Bei Erreichen dieser Begrenzung ertönt ein Erinnerungston.

Fehler	Die Funktion oder einige Funktionen funktionieren nach dem Einschalten des Gerät nicht.
Lösung	Nach dem Einschalten des Geräts durch Drücken der Einschalttaste wählen Sie das automatische Massageprogramm oder einen anderen Betriebsmodus manuell aus. Wenn das Gerät nicht funktioniert, schaltet es sich nach 20 Minuten automatisch ab. Bei Auswahl des manuellen Programmiermodus können nicht ausgewählte Funktionen deaktiviert werden. Der Betriebsmodus muss dann manuell eingestellt werden.

Fehler	Beim Einstellen der Massagesesselposition ist das Reiben des Leders am Massagesessel hörbar.
Lösung	Dieses Gerät besteht aus hochwertigem, strapazierfähigem Leder, das den Umweltschutzanforderungen entspricht. Aufgrund der Materialeigenschaften von Leder ist beim Reiben und bei relativer Bewegung ein hörbares Geräusch zu hören. Dies ist normal. Hinweis: Wenn Sie während der Benutzung des Gerät ein reiðendes Geräusch im Stoff oder Leder hören, stellen Sie die Benutzung sofort ein und wenden Sie sich an einen Kundendienst.

Fehler	Die Massagearme erreichen die Schultern und den Nacken nicht.
Lösung	Wenn Ihr Kopf das Kissen hinter Ihrem Kopf nicht berührt oder Ihr Rücken die Rückenlehne nicht berührt, ist die Position der Arme möglicherweise niedriger als die tatsächliche Position während der Körpererkennung. Setzen Sie sich in die tiefste Sitzposition, stützen Sie Ihren Kopf auf die Kopfstütze und beginnen Sie von vorne.

Fehler	Das Gerät ist beschädigt. Das Netzteil oder der Stecker ist ungewöhnlich heiß.
Lösung	Um Unfälle zu vermeiden, wenden Sie sich an ein autorisiertes Kundendienstzentrum.

Bei Fragen oder Anliegen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den zuständigen Kundendienst.

Technische Daten des Geräts

Modellinformationen
 Modellname: iREST EASYQ
 Symbol: A166
 Produktname: Massagesessel
 Nennspannung: 220-240 V~ 50 Hz/60 Hz
 Nennleistung: 90 W
 Nennbetriebsdauer: 20 Minuten
 Sicherheitsklasse: Klasse I

Gerätespezifikation
 Bluetooth-Standardfrequenzbereich: konform
 Bluetooth-Sendeleistung: 2,5 mW

Herstellereklärung
 Produkt entspricht der Richtlinie: 2014/53/UE.
 Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie auf der Website:
<http://restlords.com/deklaracja>

BEWAHREN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF

Lieber Benutzer, Sie können zum Umweltschutz beitragen. Handeln Sie umweltbewusst und geben Sie das Altgerät an der von Ihrer Gemeinde/Ihrem Land vorgesehenen Sammelstelle ab. Die zur Herstellung des Geräts verwendeten Materialien können wertvolle Sekundärrohstoffe sein und bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt schädigen. Bitte beachten: Werfen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll.

Importeur und bevollmächtigter Vertreter in der EU :
 iRest Europe Sp. z o.o.
 Szewczenki 7/11
 10-274 Olsztyn, Poland
 e-mail: irest@irest-europe.com

Hersteller:
 Zhejiang Haozhonghao Health Product Co., Ltd
 No.18 XingLong Road, Furniture Garden, Wanquan
 Industrial Base, Pingyang, Zhejiang, China
 e-mail: irest@irest.com

