


**iRest**

**IREST GRANDEASE  
(A550)  
MASSAGESESSEL**

**BEWAHREN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG  
FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF**

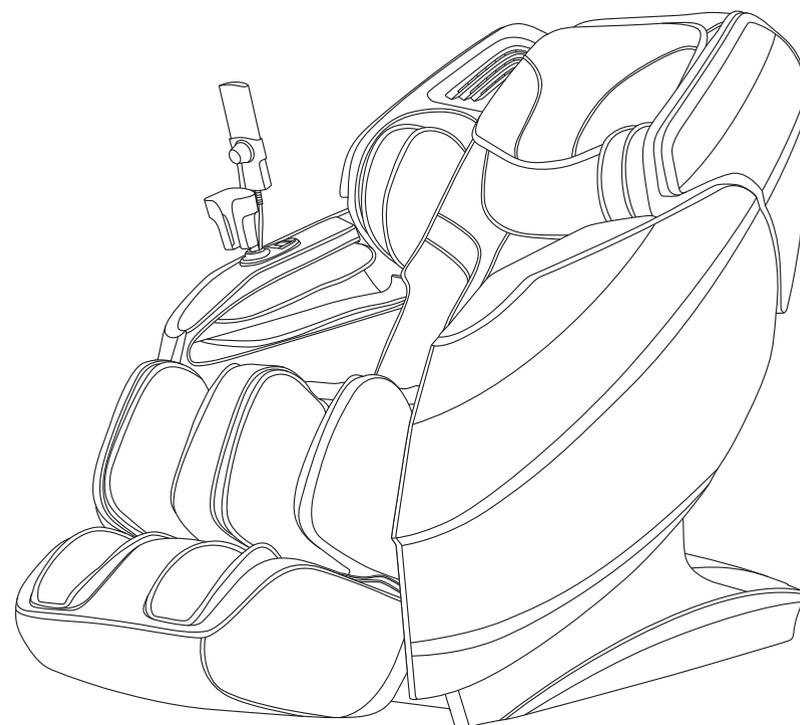

Vielen Dank für den Kauf dieses Geräts. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um sich vor der Inbetriebnahme des Massagesessels mit dessen korrekter Verwendung vertraut zu machen. Bitte beachten Sie insbesondere die Kontraindikationen und die Sicherheitshinweise.

Hinweis: Der Verkäufer behält sich das Recht vor, Änderungen am Design und an der Beschreibung des Geräts vorzunehmen. Sollten Unterschiede zwischen der Funktion des auf dem Markt erhältlichen Geräts und der Beschreibung in der Anleitung bestehen, so sind diese auf eine normale Aktualisierung des Geräts zurückzuführen, und der Hersteller ist nicht verpflichtet, darüber zu informieren. Die in der Bedienungsanleitung abgebildete Farbe entspricht nicht der aktuellen Farbgebung des Massagesessels.

## **INHALTSVERZEICHNIS**

### **Vor dem Gebrauch**

---

Vorsichtsmaßnahmen .....	02-05
Montageteile .....	06
Aufstellung des Massagesessels .....	07-08
Vor dem Gebrauch .....	09
Geräteaufbau .....	10-11
Aufbau des Geräts .....	12-15

### **Verwendung**

---

Bedienungsanleitung .....	16-30
Beenden der Massage .....	31

### **Wartung**

---

Reinigung und Pflege .....	32
----------------------------	----

### **Wichtig**

---

Fehlerbehebung .....	33
Technische Daten des Geräts .....	34

**Vorsichtsmaßnahmen** müssen beachtet werden

- Lesen Sie vor Gebrauch alle wichtigen Anweisungen sorgfältig durch.
- Die hierin enthaltenen Anweisungen helfen dabei, das Gerät sicher und richtig zu verwenden.
- Um das Ausmaß möglicher Verletzungen und Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen können, deutlich zu machen, sind Informationen mit der Überschrift „**Warnung**“ oder „**Hinweis**“ gekennzeichnet. Beide sind wichtig für die Sicherheit und müssen beachtet werden.

 <b>Warnung</b>	Zeigt an, dass bei unsachgemäßem Gebrauch schwere Verletzungen oder Tod auftreten können.
 <b>Hinweis</b>	Zeigt an, dass bei unsachgemäßem Gebrauch leichte Verletzungen oder Sachschäden auftreten können.

■ Beachten Sie das Symbol vor jedem Sicherheitselement.

 <b>Verbot</b>	Absolut verboten
---	------------------

**Personen mit folgenden Beschwerden sollten dieses Gerät nicht verwenden**

 <b>Verbot</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Das Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit körperlichen, sensorischen oder neurologischen Behinderungen oder durch Personen bestimmt, die nicht in der Lage sind, das Gerät zu verwenden, es sei denn, sie werden von für ihre Sicherheit verantwortlichen Personen beaufsichtigt und in die Benutzung des Geräts eingewiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.</li> <li>■ Personen mit Osteoporose.</li> <li>■ Personen mit Herzerkrankungen oder Personen, die medizinische elektronische Geräte wie Herzschrittmacher verwenden.</li> <li>■ Personen mit Fieber (über 38 °C).</li> <li>■ Frauen, die schwanger sind, vor Kurzem entbunden haben oder ihre Menstruation haben.</li> <li>■ Personen, denen der Arzt aufgrund von Thrombosen, Aneurysmen, schweren Krampfadern oder anderen Kreislauferkrankungen Massagen untersagt hat. Innerhalb von zwei Wochen nach Auftreten von Blutgerinnseln ist die Anwendung von Massagen an Körperstellen, an denen Blutgerinnsel auftreten, strengstens verboten.</li> <li>■ Patienten mit Verletzungen oder Hauterkrankungen.</li> <li>■ Kinder unter 14 Jahren oder unerfahrene Personen dürfen das Gerät nicht unbeaufsichtigt benutzen.</li> <li>■ Personen, denen ärztlich Ruhe verordnet wurde oder die sich unwohl fühlen.</li> <li>■ Personen mit Wirbelsäulendefekten oder Skoliose, denen die Verwendung dieser Art von Geräten von Ärzten verboten wurde, auch aufgrund anderer Krankheiten.</li> </ul>
---	--

**Vorsichtsmaßnahmen** müssen beachtet werden

 <b>Verbot</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Personen mit nassem Körper dürfen dieses Produkt nicht benutzen.</li> <li>■ Das Gerät hat eine beheizte Oberfläche. Personen, die nicht hitzeempfindlich sind, müssen bei der Benutzung des Geräts vorsichtig sein.</li> </ul>
---	---

**Wichtige Sicherheitshinweise**

 <b>Warnungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Erlauben Sie Kindern nicht, die beweglichen Teile dieses Massagesessels zu berühren.</li> <li>■ Verwenden Sie ein gut geerdetes Netzteil, das für dieses Produkts geeignet ist.</li> <li>■ Ziehen Sie nach Gebrauch oder vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose, um Verletzungen oder Schäden am Produkt zu vermeiden.</li> <li>■ Bedienen Sie den Massagesessel gemäß der Bedienungsanleitung.</li> <li>■ Verwenden Sie keine Zubehörteile, die nicht empfohlen sind.</li> <li>■ Verwenden Sie den Massagesessel nicht im Freien.</li> <li>■ Benutzen Sie den Massagesessel nicht in der Nähe von offenem Feuer (z. B. einem Herd) und rauchen Sie nicht während der Benutzung.</li> <li>■ Benutzen Sie während der Benutzung des Massagesessels keine Heizgeräte wie Heizdecken.</li> <li>■ Setzen Sie sich nicht auf die Rückenlehne, Fußstütze, Unterarm- und Armmassagegeräte und stellen Sie sich nicht auf die Sitzfläche.</li> <li>■ Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.</li> <li>■ Verwenden Sie diesen Massagesessel niemals für andere als die in diesem Dokument genannten Zwecke.</li> <li>■ Es wird eine Nutzungsdauer von jeweils 20 Minuten empfohlen.</li> <li>■ Verwenden Sie den Massagesessel nicht, wenn die Abdeckung oder das Leder beschädigt oder defekt ist.</li> <li>■ Lassen Sie keine Gegenstände auf den Massagesessel fallen.</li> <li>■ Schlafen Sie nicht ein, während Sie den Massagesessel benutzen.</li> <li>■ Verwenden Sie den Massagesessel nicht, wenn Sie betrunken sind oder sich unwohl fühlen.</li> <li>■ Verwenden Sie den Massagesessel nicht innerhalb einer Stunde nach dem Essen.</li> <li>■ Stellen Sie keine zu hohe Massageintensität ein, um Verletzungen zu vermeiden.</li> <li>■ Verwenden Sie den Massagesessel ausschließlich zur Massage.</li> <li>■ Ein beschädigtes Netzkabel muss durch den Kundendienst des Herstellers, dessen Wartungsabteilung oder eine vergleichbare Abteilung ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.</li> </ul>
--	--

## Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden

<b>Nutzungsumgebung</b>	
 <b>Hinweis</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Räumen mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit, wie z. B. im Badezimmer.</li><li>■ Stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein, wenn sich die Umgebungstemperatur plötzlich ändert.</li><li>■ Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer staubigen oder korrosiven Umgebung.</li><li>■ Verwenden Sie dieses Produkt nicht in kleinen Räumen oder an Orten ohne gute Belüftung.</li></ul>

<b>Lagerbedingungen</b>	
 <b>Hinweis</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Innentemperatur: 5 °C bis 40 °C</li><li>■ Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 80 %, keine korrosiven Gase, gut belüfteter Raum.</li></ul>

<b>Service und Wartung</b>	
 <b>Hinweis</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Dieses Produkt darf nur von einem vom Hersteller benannten Kundendienstzentrum gewartet werden. Benutzer dürfen das Produkt nicht ohne Genehmigung zerlegen oder warten.</li><li>■ Schalten Sie den Hauptschalter nach Gebrauch aus.</li><li>■ Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn sich die Steckdose löst.</li><li>■ Wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird, rollen Sie das Netzteil auf und lagern Sie es an einem trockenen und staubfreien Ort.</li><li>■ Lagern Sie den Massagesessel nicht bei hohen Temperaturen oder in der Nähe von offenem Feuer. Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.</li><li>■ Reinigen Sie den Massagesessel mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie niemals Verdünner, Benzin oder Alkohol.</li><li>■ Die mechanischen Komponenten des Massagesessels sind speziell konstruiert und gefertigt, sodass keine besondere Wartung erforderlich ist.</li><li>■ Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände und stanzen Sie keine Löcher in den Sitz.</li><li>■ Rollen oder ziehen Sie den Massagesessel nicht über unebenen Boden. Heben Sie es vor dem Transport an.</li><li>■ Der Massagesessel sollte nur zeitweise benutzt werden. Verwenden Sie es nicht über längere Zeit ununterbrochen.</li></ul>

## Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden




<b>Behebung häufiger Störungen</b>	
 <b>Hinweis</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Es ist normal, dass die Aktuatoren während der Verwendung des Massagesessels Geräusche verursachen.</li><li>■ Wenn die Fernbedienung nicht normal funktioniert, überprüfen Sie, ob der Stecker und die Steckdose richtig angeschlossen sind und ob der Netzschalter eingeschaltet ist.</li><li>■ Wenn die Nennbetriebszeit abgelaufen ist, aktiviert der Massagesessel automatisch die Ausschalttaste. Wenn der Massagesessel über einen längeren Zeitraum ununterbrochen verwendet wird, schaltet er sich bei Erreichen einer hohen Temperatur automatisch aus. Warten Sie mindestens eine halbe Stunde, bevor Sie den Massagesessel weiter verwenden.</li></ul>

<b>Vorsichtsmaßnahmen</b>	
 <b>Hinweis</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Prüfen Sie, ob die Spannung den Spezifikationen dieses Produkts entspricht.</li><li>■ Ziehen Sie den Stecker niemals mit nassen Händen heraus.</li><li>■ Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser in das Produkt, um Stromschläge oder Produktschäden zu vermeiden.</li><li>■ Ziehen Sie beim Anschließen oder Trennen nicht am Netzteil. Grobe Handhabung ist verboten.</li><li>■ Beschädigen Sie das Netzteil nicht und verändern Sie die Schaltung des Geräts nicht.</li><li>■ Reinigen Sie elektrische Teile wie Schalter und Stecker mit einem trockenen Tuch.</li><li>■ Setzen Sie sich nicht auf das ausgeschaltete Gerät, um Verletzungen durch plötzliche Wiederherstellung der Stromversorgung zu vermeiden.</li><li>■ Beenden Sie die Verwendung des Geräts, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, und wenden Sie sich umgehend an Ihren lokalen Herstellervertreter.</li><li>■ Beenden Sie die Verwendung dieses Produkts, wenn Sie sich unwohl fühlen, und suchen Sie einen Arzt auf.</li></ul>

## Montageteile

### Montageanleitung für das Wadenmassagegerät

1. Führen Sie die Kabel und den Luftschlauch des Wadenmassagegeräts in die entsprechenden Buchsen an der Vorderseite des Rahmens (Abbildung 1).
2. Öffnen Sie nach der Kabelinstallation die Befestigungsabdeckungen des Wadenmassagegeräts auf beiden Seiten des Rahmens (Abbildung 2).
3. Heben Sie das Massagegerät in die Aussparung, schließen Sie die Montageabdeckungen und befestigen Sie es mit 2 M4\*10-Schrauben (Abbildung 3).

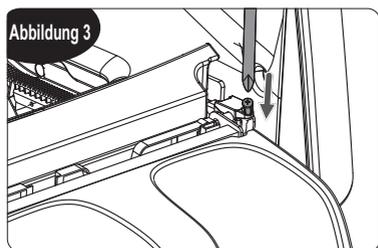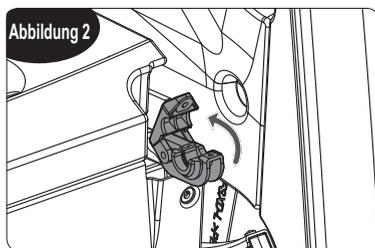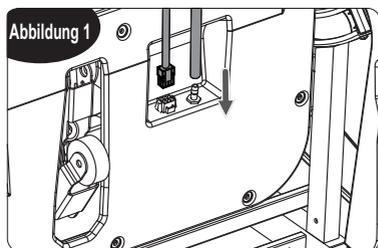

## Aufstellung des Massagesessels


### Montageort

**Stellen Sie sicher, dass ausreichend Platz vorhanden ist, da der Massagesessel zum Ausklappen mindestens 12 cm Platz benötigt.**



Hinweis

Setzen Sie den Massagesessel keiner direkten Hitze (z. B. vor Heizgeräten) und keiner direkten Sonneneinstrahlung aus; stellen Sie ihn an einem Ort auf, an dem hohe Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung vermieden werden können. Bei längerem Gebrauch an einem festen Standort wird empfohlen, eine weiche Matte unterzulegen. Beim Verlegen einer solchen Matte sollte deren Größe ausreichen, um die Standfläche des Gerätes abzudecken. Beachten Sie den Bereich, in dem das Gerät den Boden berührt, und die Stelle, an der Ihre Füße den Boden berühren.

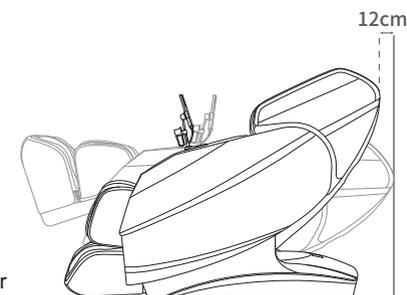


### Hinweise zum Anheben des Gerätes

**Zum Heben und Bewegen des Massagesessels ist Teamarbeit erforderlich, um Verletzungsrisiken zu vermeiden.**



Hinweis

1. Heben Sie den Massagesessel an, um ihn auf einem empfindlichen Untergrund, z. B. auf Holzböden, zu transportieren.
2. Wenn Sie das Gerät auf einem Holzboden bewegen, wird empfohlen, es anzuheben. Vermeiden Sie Beschädigungen an den Rollen. Achten Sie beim Anheben und Bewegen des Massagesessels an die gewünschte Position auf Ihre Hände, um Verletzungen zu vermeiden, und achten Sie darauf, dass Ihre Füße nicht eingeklemmt werden. Lassen Sie das Gerät nicht los, bevor der Korpus vollständig flach auf dem Boden steht, da der Boden sonst beschädigt werden kann. Es wird daher empfohlen, eine Matte darunter zu legen.

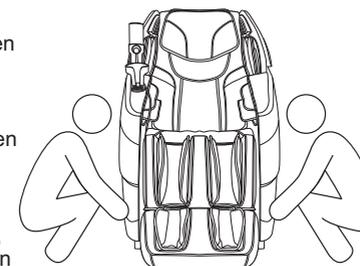

## Aufstellung des Massagesessels


### Transport

**Nutzen Sie die Hinterräder, um den Massagesessel zu bewegen. Um den Massagesessel zu verschieben, kippen Sie ihn wie in der Abbildung gezeigt um etwa 45° nach hinten. HINWEIS: Übermäßige Kraft beim Neigen kann zum Kippen des Massagesessels und zur Beschädigung des Geräts führen.**



Hinweis

1. Schalten Sie das Gerät vor dem Transport ordnungsgemäß aus, um es zurückzusetzen, und ziehen Sie anschließend den Netzstecker.
2. Während des Transports darf nichts auf dem Massagesessel liegen (Personen, Haustiere oder Gegenstände).
3. Lassen Sie den Massagesessel beim Transport nicht aus einer Höhe von mehr als 2 mm fallen und überschreiten Sie keinen Spalt von mehr als 5 mm.
4. Beim Transport des Geräts mit den Rädern wird ein einmaliges Anschieben nicht empfohlen. Bei Entfernungen von über 50 Meter sollte das Gerät langsam und gleichmäßig bewegt werden.


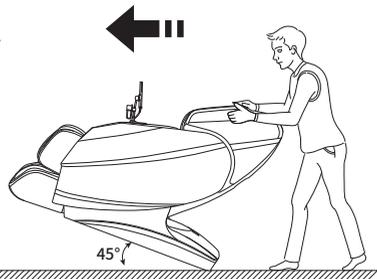


### Demontage und Verwendung des Kopf- und Rückenlehnenkissens

Die Verwendung des Kopfkissens kann die Intensität der Knetmassage im Nacken- und Schulterbereich reduzieren. Die Verwendung des Kopfkissens kann je nach Bedarf gewählt werden (wir empfehlen es). Das Rückenlehnenkissen und die Rückenlehne sind durch einen Reißverschluss (1) verbunden, das Kopfkissen und das Rückenlehnenkissen sind ebenfalls durch einen Reißverschluss (2) verbunden.



Hinweis

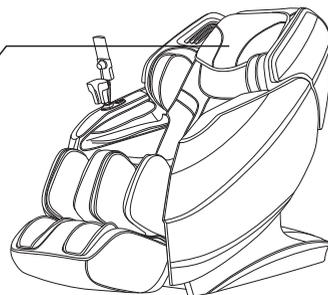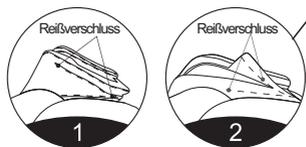

## Vor dem Gebrauch

### Überprüfung der Umgebung



Hinweis

Stellen Sie sicher, dass sich keine Gegenstände in den Zwischenräumen des Geräts befinden.




### Stellen Sie sicher, dass sich keine Gegenstände in den Zwischenräumen des Geräts befinden.



Hinweis


Stellen Sie vor der Massage sicher, dass sich keine Fremdkörper in der Fußstütze, den Füßen usw. befinden. Unter keinen Umständen dürfen Hände, Füße oder der Kopf in den Bereich zwischen dem unteren Fußstützenmechanismus und dem Hauptkorpus oder in den Bereich zwischen der Armlehne und der Rückenlehne gelangen. Unter keinen Umständen dürfen Hände, Füße oder der Kopf unter den Stoff oder das Leder der Massagefläche gelangen.

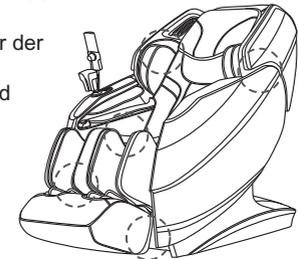


### Einschalten




Hinweis

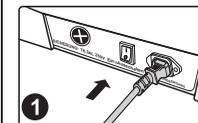

1 Netzteil anschließen

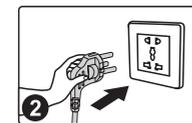

2 Anschlussplan

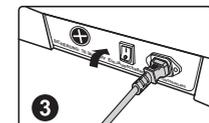

3 Netzschalter einschalten (Position „I“)




Warnungen

- Prüfen Sie vor der Anwendung, ob Netzteil und Stecker unbeschädigt sind.
- Die Stromversorgung dieses Geräts muss den Anforderungen für die Betriebsspannung entsprechen.
- Die Verwendung einer anderen als der Nennstromversorgung dieses Produkts ist strengstens untersagt.
- Der Anschluss von unbefugten Spannungswandlern an dieses Produkt ist strengstens untersagt.

## Aufbau des Geräts


### Beschreibung der einzelnen Komponenten

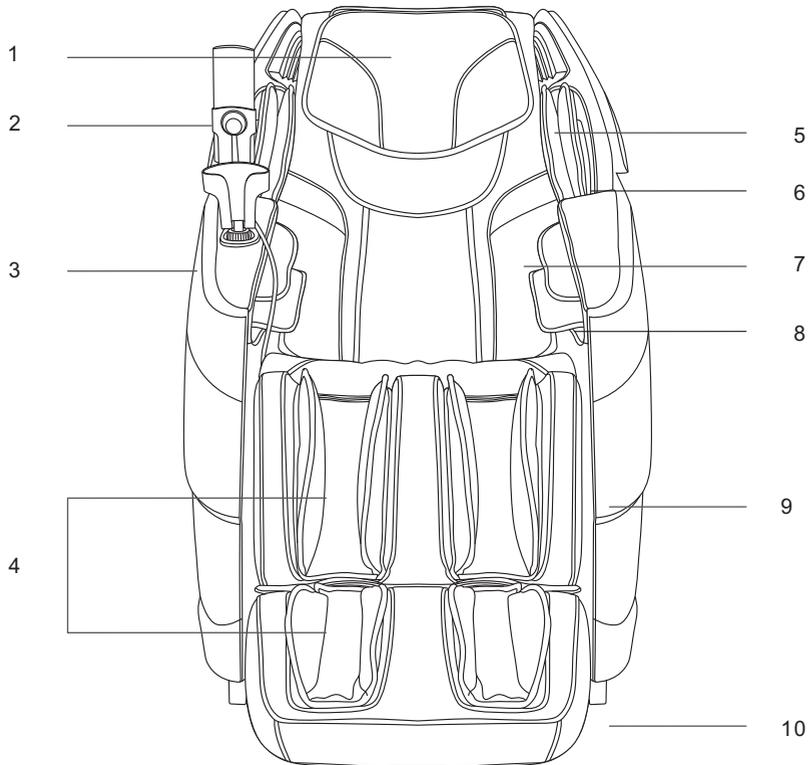

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1. Rückenlehnenkissen                       | 6. Armluftdruckkissen       |
| 2. Fernbedienung                            | 7. Armmassagemechanismus    |
| 3. Schnellzugriffstasten<br>in der Armlehne | 8. Unterarm-Luftdruckkissen |
| 4. Beinmassagegerät                         | 9. Armlehne                 |
| 5. Rückenlehnenkissen                       | 10. Seitenabdeckung         |

## Aufbau des Geräts

### Funktionsverteilungsdiagramm

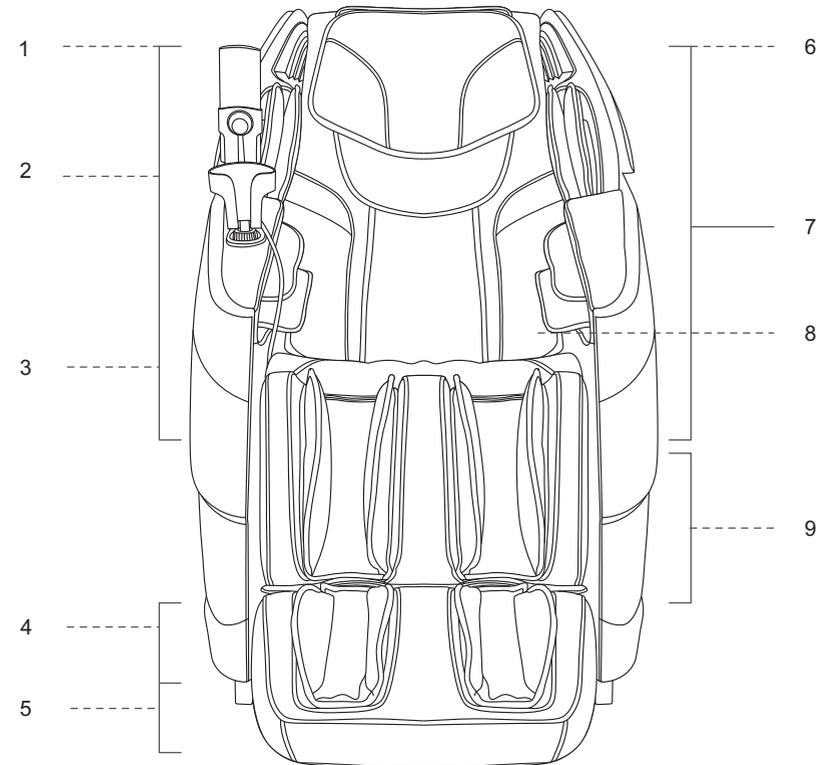


- |   |  |
|---|--|
| 1. Arme:<br>Luftdruckkissen-Massage   | 5. Füße:<br>Rollenmassage  |
| 2. Unterarme:<br>Fernbedienungshalterung<br>Telefonhalterung<br>USB-Ladeanschluss | 6. Beidseitig am Kopf:<br>3D-Soundwiedergabe                             |
| 3. Hände:<br>Luftdruckkissen-Massage  | 7. Vom Kopf und Nacken bis zum Gesäß:<br>Massage mit Massagearmen        |
| 4. Beine:<br>Luftdruckkissen-Massage  | 8. Wärmebehandlung für Rücken,<br>Taille und Schultern:<br>Wärmefunktion |
|   | 9. Beine:<br>Luftdruckkissen-Massage                                     |


## Aufbau des Geräts

### Anwendung der Heizweste


- Der Massagesessel verfügt über eine einzigartige Weste mit innovativen Heizfunktionen aus Graphen für Arme, Rücken, Taille und Bauch ausgestattet. Benutzer können die Weste je nach Bedarf an verschiedenen Massagestellen platzieren. An den Schultern erwärmt sie mithilfe von Graphen die Akupunkturpunkte Bingfeng, Tianzong, Yunmen und Qihu an Schulter und Schlüsselbein. Dadurch werden die Symptome der Glenohumeralarthritis und des Hustens wirksam gelindert und Kälte und Feuchtigkeit aus den Schultergelenken entfernt.
- An Bauch und Rücken (Doppelfunktion) wirkt die Weste durch Graphenerwärmung gegen Kälte und Schmerzen. Sie erwärmt die Energiebahnen und löst Blutstauungen im Rücken und Bauch. Qi und Blut werden in die Meridiane von Rücken und Bauch geleitet. Darüber hinaus werden Beschwerden bei unregelmäßiger Menstruation und Menstruationsschmerzen gelindert, Schmerzen im unteren Rücken und Nierenfunktionsstörungen gelindert, Darm und Magen erwärmt und Erkältungen im Darm beseitigt. Dies wirkt sich positiv auf Menschen mit Qi-Mangel sowie Milz- und Mageninsuffizienz aus.

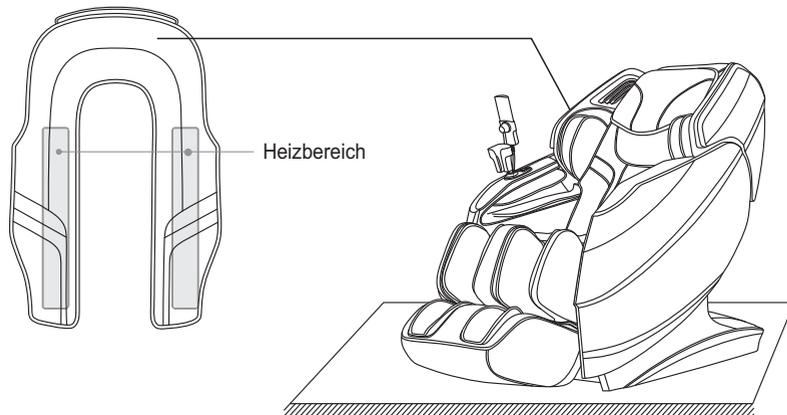

## Aufbau des Geräts

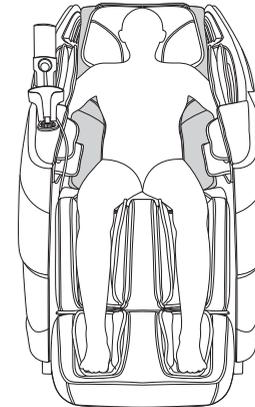


Anwendungsdiagramm für  
Rücken und in Taille

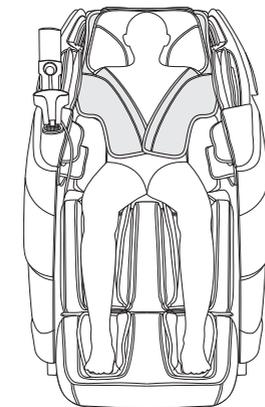

Anwendungsdiagramm für  
Schultern und Bauch

## Aufbau des Geräts

### I. Bedienungsanleitung der Fernbedienung

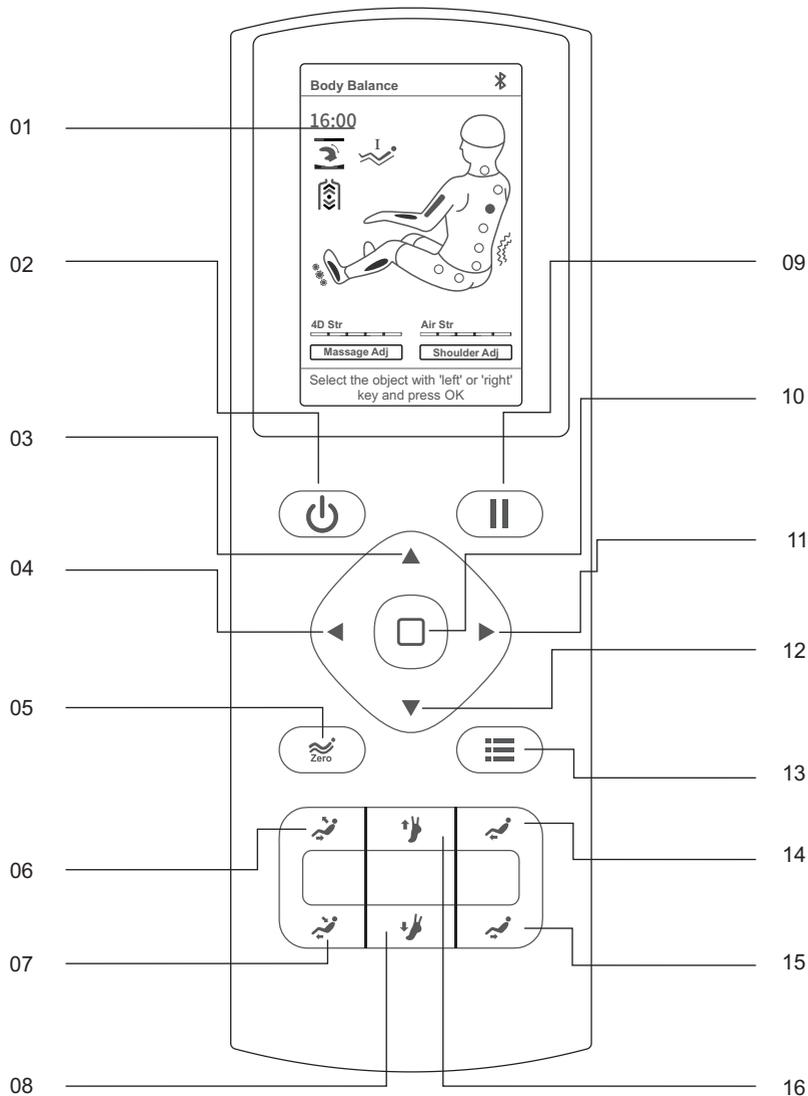


## Aufbau des Geräts

- 01. Anzeige
- 02. Ein-/Aus-Taste  
Ein- oder Ausschalten des Massagesessels.
- 03. Oben-Taste  
Navigationstaste nach oben. Mit dieser Taste können Sie nach oben scrollen, um einen Menüpunkt auszuwählen oder die Erhöhung einzustellen.
- 04. Linkstaste  
Linksnavigationstaste. Mit dieser Taste können Sie nach links scrollen, um einen Punkt auszuwählen oder zum vorherigen Menü zurückzukehren.
- 05. Zero Gravity-Taste  
Stellen Sie den Zero Gravity-Winkel auf „Zero Gravity I“, „Zero Gravity II“, „Zero Gravity III“ oder „Aus“ ein.
- 06. Taste zum Anheben des Massagesessels in die Sitzposition  
Hebt den Massagesessel an.
- 07. Taste zum Aufklappen des Massagesessels in Liegeposition  
Massagesessel in Liegeposition aufklappen.
- 08. Taste zur Verlängerung des Beinmassagegeräts  
Vergrößerung der Verlängerung des Beinmassagegeräts.
- 09. Pausetaste  
Pausieren der Massage oder Beenden der Pause – Start der Massage.
- 10. OK-Taste  
Bestätigt die Auswahl der Massagefunktion oder bricht sie ab.
- 11. Rechtstaste  
Navigationstaste rechts. Mit dieser Taste können Sie nach rechts scrollen, um einen Punkt auszuwählen oder zum nächsten Menü zu wechseln.
- 12. Unten-Taste  
Navigationstaste nach unten. Mit dieser Taste können Sie nach unten scrollen, um einen Menüpunkt auszuwählen oder die Verringerung einzustellen.
- 13. Menü-Teste  
Bringt zum Hauptmenübildschirm.
- 14. Taste zum Anheben des Beinmassagegeräts  
Hebt das Beinmassagegerät an.
- 15. Taste zum Senken des Beinmassagegeräts  
Absenken des Beinmassagegeräts.
- 16. Taste zur Verkürzung der Beinmassagegerät-Verlängerung  
Verkürzung der Beinmassagegerät-Verlängerung.

## Aufbau des Geräts

### II. Beschreibung des integrierten Armlehnen-Bedienfelds

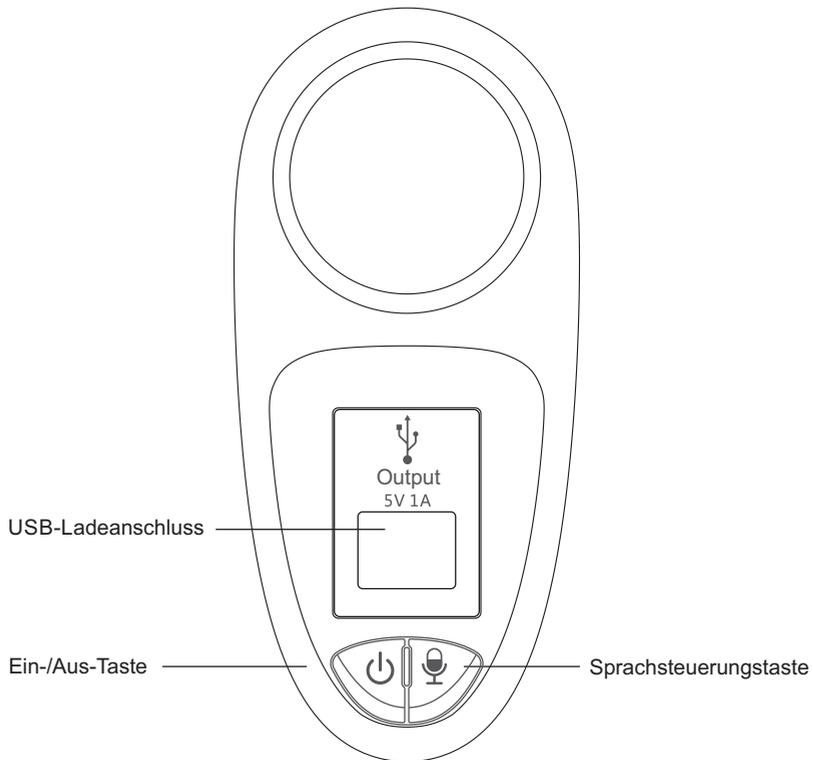

USB-Ladeanschluss 

Zum Aufladen von Mobiltelefonen oder anderen elektronischen Geräten.

Ein-/Aus-Taste 

Drücken Sie diese Taste lange, um den Massagesessel ein- oder auszuschalten.  
Drücken Sie kurz, um die Massage zu pausieren oder zu beenden.

Sprachsteuerungstaste 

Drücken Sie diese Taste lange, um den Sprachassistenten ein- oder auszuschalten.  
Drücken Sie kurz, um den Assistenten zu aktivieren.

## Bedienungsanleitung

### III. Massage starten

1. Drücken Sie die Ein-/ Aus-Taste  auf der Fernbedienung oder halten Sie die Ein-/ Aus-Taste  an der rechten Armlehne gedrückt, um den Massagesessel einzuschalten.
2. Warten Sie, bis das Automatikprogramm ausgewählt ist. Wählen Sie das Automatikprogramm über die Fernbedienung oder Sprachsteuerung. Wird der Massagesessel länger als 20 Minuten nicht benutzt, schaltet er sich automatisch aus.
3. Automatische Neigungseinstellung: Nach Auswahl des Automatikprogramms stellt sich der Massagesessel automatisch auf die Zero Gravity-Position ein. Sie können warten, bis die Einstellung abgeschlossen ist, oder die OK-Taste  drücken, um zum nächsten Schritt zu gelangen.

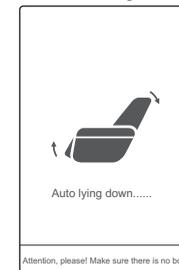


Diagramm der Neigungseinstellung



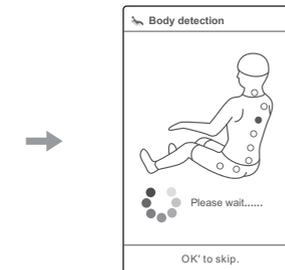


Diagramm der Körperformerkennung


4. Sie können warten, bis die Körperformerkennung abgeschlossen ist, oder die OK-Taste  drücken, um die Erkennung zu überspringen und die Massage zu starten.
5. Feineinstellung der Massagearmposition: Nach Abschluss der Körperformerkennung werden Sie über die Fernbedienung oder per Sprachansage aufgefordert, die Armposition fein einzustellen. Wenn die Massagerollen einfach auf Höhe Ihrer Schultern enden, ist diese Einstellung nicht notwendig und Sie können sie überspringen und die Massage durch Drücken der OK-Taste  starten. Andernfalls passen Sie bitte die Position der Massagearme durch Drücken der Oben-  und Unten-  Tasten an und drücken Sie dann die OK-Taste , um die Massage zu starten. Wenn innerhalb von 20 Sekunden keine Aktion erfolgt, kehren die Massagearme in die aktuelle Position zurück und die Massage beginnt.

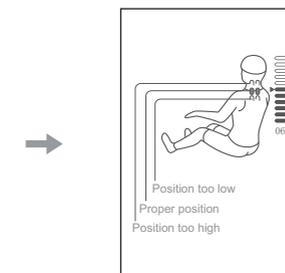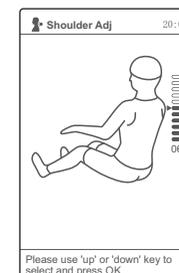

## Bedienungsanleitung

### IV. Pausetaste (Diese Funktion ist nach dem Einschalten des Massagesessels verfügbar)

Drücken Sie nach dem Einschalten des Massagesessels die Pausetaste  oder den Ein-/Aus-Schalter  an der Armlehne, um den Pausenmodus zu aktivieren. Alle Massagefunktionen werden gestoppt. Drücken Sie die Pausetaste  oder den Ein-/Aus-Schalter  an der Armlehne erneut, um die Massage fortzusetzen. Hinweis: Im Pausenmodus funktionieren keine Funktionen außer dem Ausschalten.

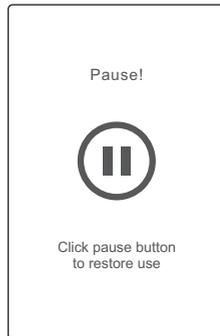


Pausestatusdiagramm

### V. Automatikprogramm (Funktion nur nach dem Einschalten des Geräts verwenden)


1. Automatikprogramm auswählen

- (1) Drücken Sie die Menütaste auf der Fernbedienung, um das Hauptmenü zu öffnen.
- (2) Wählen Sie die Option „Automatikprogramm“  und drücken Sie OK , um die Benutzeroberfläche des Automatikprogramms aufzurufen.

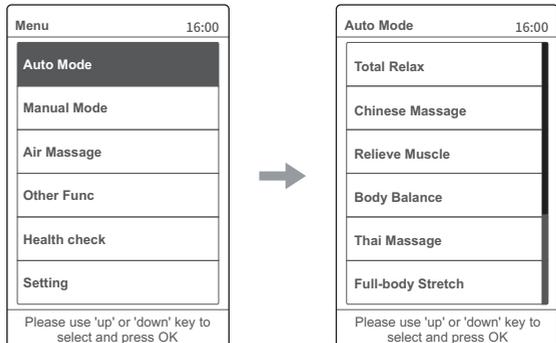

## Bedienungsanleitung

- (3) Wählen Sie das gewünschte Automatikprogramm und drücken Sie OK , um die Massage zu starten.

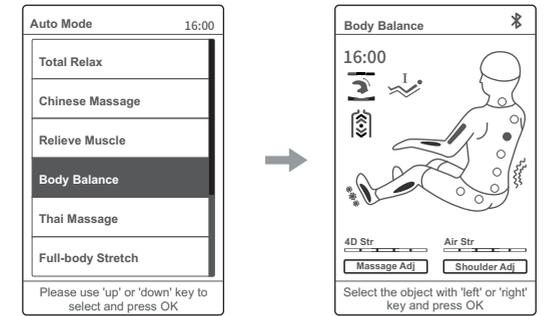

Hauptinformationsoberfläche

### 2. Einführung in die Automatikprogramme

Funktion	Beschreibung
Total Relax	Durch die Bewegung des 3D-Massageräts entlang der geteilten iOpen-Führung und die flache Sitzposition wird ein Dehnungseffekt erzielt, der eine korrekte Körperhaltung unterstützt. Die Massage in dieser Position lindert effektiv Schmerzen in der Lendenmuskulatur und beseitigt Müdigkeit und Stress von Körper und Geist.
Chinese Massage	Die Massage nutzt hauptsächlich Massagetechniken der Traditionellen Chinesischen Medizin und eine 3D-Rücken- und -Lendenmassage. Sie regt die Durchblutung im Rücken und in der Lendenwirbelsäule an, beruhigt die Meridiane und löst Blockaden im Rücken- und Lendenbereich. Sie eignet sich für Personen mit Rücken- und Lendenschmerzen sowie Verspannungen der Lendenmuskulatur. Die Massageintensität ist sanft.
Relieve Muscle	Massage durch Druck auf Nacken, Rücken, Taille, Gesäß und Beine mit Knet-, Klatsch- und Fingerdrucktechniken. Sie lindert hauptsächlich körperliche Ermüdung und ermöglicht eine bessere Entspannung.
Body Balance	Luftdruckkissen-Massage mit Knet- und Drucktechniken zur Anregung der Durchblutung, Linderung von Schmerzen in verschiedenen Körperteilen und zur tiefen Linderung von Muskelermüdung (Massage mit allen Luftdruckkissen und häufigem Drücken der Luftdruckkissen).
Thai Massage	Durch die aktive Bewegung der Fußstütze und die gezielte Wirkung der Luftdruckkissen wird eine Dehnungsmassage durchgeführt. Gleichzeitig führen die Massagearme ständig 3D-Bewegungen auf Rücken und Taille aus, sodass der Körper in einen thailändischen Dehnungszustand versetzt wird. Diese Massage eignet sich für Personen mit hohem Stress, zur Verbesserung der Stimmung und zur Lösung von Verspannungen im Schulter- und Nackenbereich. Die Massageintensität ist hoch.

## Bedienungsanleitung

Full Body Stretch	Dehnung des gesamten Körpers durch Knet-, Klatsch-, Fingerknet- und therapeutische Massagetechniken sowie Luftdruckkissenmassage der Beine, Hände und Arme. Dehnmassage, die die Meridiane beruhigt, die Durchblutung anregt und Blockaden im Körper löst.
Neck & Shoulder Care	Massage von Nacken und Schultern hauptsächlich mit Knet- und Dehntechniken sowie des oberen Rückens mit therapeutischer Massage und der Jianjing-Akupunktur. Lindert zervikale Spondylose und hilft bei der Entspannung der Nacken- und Schultermuskulatur. Die Massageintensität ist sanft und eignet sich für Büroangestellte mit Ermüdungserscheinungen der Halswirbelsäule.
Spine Traction	Massiert die Taille hauptsächlich durch Kneten, Klatschen und therapeutische Massage. Die Massagearme bewegen sich dreidimensional entlang der Wirbelsäule und Taille, um Schmerzen in der Lendenwirbelsäule zu lindern. Die Kombination aus Massage und Wärme verbessert die Wirksamkeit der Massagesitzung. Die sanfte und moderate Massageintensität sowie die Wärme sorgen für ein sehr angenehmes Erlebnis.
Leg&foot Relieve	Massage der Arme und der Taille hauptsächlich durch Kneten, Klatschn und eine Kombination dieser Techniken. Die Knetmassage der Beine und Füße mit Luftdruckkissen gibt ihnen ihre Leichtigkeit zurück. Geeignet für Personen mit sitzender Tätigkeit und geringer Belastung der Beine und Füße. Lindert Schmerzen in der Hals- und Lendenwirbelsäule und sorgt für Entspannung und Entspannung in Beinen und Füßen. Die Massageintensität ist sanft.
Superior Enjoyable	Ganzkörpermassage mit Luftdruckkissen, kombiniert mit Fußrollenmassage und Wadenknetmassage. Die Wadendehnfunktion ist deaktiviert. Geeignet für Senioren und Personen mit Rückenbeschwerden. Die Massageintensität ist sanft.
President Cosy	Massage der Schultern, des Nackens, des Rückens und der Taille, hauptsächlich durch Kneten und Klatschen sowie durch Kombination beider Techniken. Lindert Müdigkeit, regt die Durchblutung an und baut Stress durch Tiefenmassage ab. Die Massageintensität ist mäßig.
Keep Fit	Massage von Schultern, Nacken, Taille und Hüften mit Knet- und Knettechniken mit den Fingern. Ganzkörpermassage zur Entspannung von Körper und Geist und für höchstes Genussgefühl. Diese Massage wird für Frauen empfohlen. Die Massageintensität ist sanft.


## Bedienungsanleitung

Office Regimen	Massage von Schultern, Nacken und Taille, hauptsächlich mit Knet-, Klatsch- und einer Kombination aus beiden Techniken. Löst Verspannungen in Schultern und Nacken und lindert durch die Tiefenmassage Muskelkater in der Lendenwirbelsäule. Geeignet für Menschen mit geistiger Arbeit und sitzender Tätigkeit. Die Massageintensität ist mäßig.
Health Recharge	Tiefenmassage des gesamten Körpers mit Knet-, Klatsch- und Shiatsu-Techniken. Regt die Durchblutung im gesamten Körper an und beugt der Bildung von Blutgerinnseln vor. Geeignet für Menschen, die viel Zeit zu Hause verbringen und nicht gerne ausgehen. Die Massageintensität ist mäßig sanft.
Energy Boost	Tiefenmassage der Taille, Schultern und des Nackens mit Knet-, Klatsch- und Shiatsu-Techniken und einer Kombination dieser Techniken. Ziel ist es, die Vitalität zu stärken und die Energie zu stimulieren. Die Massageintensität ist hoch, weshalb sie für Personen empfohlen wird, die unter starkem Stress leiden, z. B. Sportler, die vor dem Wettkampf eine Stimulation benötigen.
Lunch Break	Rücken- und Tailenmassage mit Knet- und Klopftechniken, gefolgt von Druck auf Shenyu-Akupunkturpunkte. Ein Energieschub für die nächste Hälfte des Arbeitstages. Die Massage ist für Büroangestellte geeignet. Die Massageintensität ist sanft.
Back Spa	Tiefenmassage des gesamten Körpers durch Druck auf Akupunkturpunkte mit Hilfe von Kneten, Klatschen, Fingerkneten und anderen Massagetechniken, die bis in die tiefen Schichten des Muskelgewebes reicht und ein lokales Wärmegefühl (mit Heizfunktion) hervorruft, Qi und Blutdruck reguliert, um einen wärmenden und feuchtigkeitssausleitenden Effekt zu erzielen. (Hinweis: Ganzkörpermassage kombiniert mit Erwärmung)
Sweet Dream	Schulter-, Nacken-, Rücken- und Tailenmassage mit Knettechniken, therapeutischer Massage und Druck auf Fengchi- und Shenyu-Akupunkturpunkte. Ziel ist es, das Einschlafen zu erleichtern und die Qualität des Schlafs zu verbessern. Die Massageintensität ist sanft.

## Bedienungsanleitung

### VI. Benutzerspezifisches Programm (Diese Funktion ist nach dem Einschalten des Massagesessels verfügbar)

1. Massagemodus: Öffnen Sie wie in der Abbildung unten gezeigt das Menü, um den Massagetypp auszuwählen.

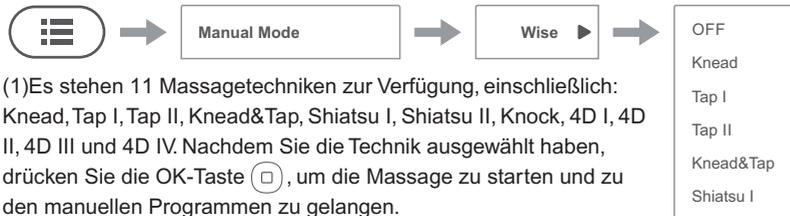


(1) Es stehen 11 Massagetechniken zur Verfügung, einschließlich: Knead, Tap I, Tap II, Knead&Tap, Shiatsu I, Shiatsu II, Knock, 4D I, 4D II, 4D III und 4D IV. Nachdem Sie die Technik ausgewählt haben, drücken Sie die OK-Taste (□), um die Massage zu starten und zu den manuellen Programmen zu gelangen.

(2) Die Massagetechnik wird auf dem Display angezeigt.

Funktion	Massagegerät-Einstellung		
OFF	Drücken Sie diese Taste für eine Massage ohne Massagetechnik.		
Knead	Geschwindigkeit und Stärke lassen sich einstellen.	Geschwindigkeit in 5 Stufen einstellen.	
Tap I	Geschwindigkeit, Breite und Stärke lassen sich einstellen.		
Tap II	Geschwindigkeit, Breite und Stärke lassen sich einstellen.		
Knead&Tap	Geschwindigkeit und Stärke lassen sich einstellen.		
Shiatsu I	Geschwindigkeit, Breite und Stärke lassen sich einstellen.		
Shiatsu II	Geschwindigkeit, Breite und Stärke lassen sich einstellen.		Breite in 5 Stufen einstellen.
Knock	Geschwindigkeit und Stärke lassen sich einstellen.		Intensität in 5 Stufen einstellen.
4D I <b>4D</b>	Geschwindigkeit und Stärke lassen sich einstellen.		
4D II <b>4D</b>	Geschwindigkeit und Stärke lassen sich einstellen.		
4D III <b>4D</b>	Geschwindigkeit, Breite und Stärke lassen sich einstellen.		
4D IV <b>4D</b>	Geschwindigkeit, Breite und Stärke lassen sich einstellen.		

## Bedienungsanleitung

2. Massagebereich: Öffnen Sie, wie in der Abbildung unten gezeigt, das Menü und wählen Sie „Area“ (Bereich), um den Massagebereich auszuwählen.

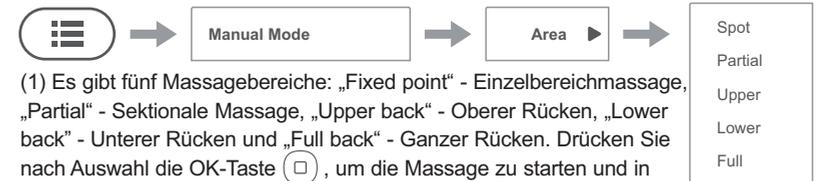

(1) Es gibt fünf Massagebereiche: „Fixed point“ - Einzelbereichsmassage, „Partial“ - Sektionale Massage, „Upper back“ - Oberer Rücken, „Lower back“ - Unterer Rücken und „Full back“ - Ganzer Rücken. Drücken Sie nach Auswahl die OK-Taste (□), um die Massage zu starten und in den manuellen Modus zu wechseln.

(2) Massage part display on the information interface.

Funktion	Beschreibung	
Point	Einzelbereichsmassage an einer festen Position.	Mit den UP- und DOWN-Tasten auf dem Display können Sie den Massagebereich einstellen.
Partial	Sektionale Massage mit kleinem Bereich und vor und zurück.	
Upper	Massage des oberen Rückens vor und zurück.	
Lower	Massage des unteren Rückens vor und zurück.	
Full	Massage des gesamten Rückens, vor und zurück.	

3. Massagebreite: Öffnen Sie das Menü (siehe Abbildung unten) und wählen Sie „Width“ (Breite), um die Massagebreite einzustellen.



(1) Sie können die Breite erst anpassen, nachdem Sie eine Massagetechnik oder einen Massagebereich ausgewählt und den manuellen Modus aufgerufen haben.

(2) Es gibt fünf Massagebreiten, wobei 1 die Mindestbreite und 5 die Maximalbreite ist. Sie können die Breite für folgende Massagetechniken anpassen: Stop, Tap I, Tap II, Shiatsu I, Shiatsu II, 4D III und 4D IV.

(3) Displayansicht - Massagebreite.



## Bedienungsanleitung

4. Massagegeschwindigkeit: Öffnen Sie das Menü (siehe Abbildung unten) und wählen Sie „Speed“ (Geschwindigkeit), um die Massagegeschwindigkeit einzustellen.



(1) Sie können die Massagegeschwindigkeit erst anpassen, nachdem Sie eine Massagetechnik oder einen Massagebereich ausgewählt und den manuellen Modus aufgerufen haben.

(2) Es gibt fünf Massagegeschwindigkeiten, wobei 1 die Mindestgeschwindigkeit und 5 die Maximalgeschwindigkeit ist. Wenn die Massage gestoppt wurde, können Sie die Geschwindigkeit nicht mehr anpassen.


(3) Displayansicht - Massagegeschwindigkeit.



## VII. Manueller Modus (Diese Funktion ist nach dem Einschalten des Massagesessels verfügbar)

### 1. Luftdruckkissen-Massage

(1) Luftdruckkissen-Massage auswählen. Öffnen Sie wie in der Abbildung unten gezeigt das Menü und wählen Sie „Air Massage“ (Luftdruckkissen-Massage), um die Luftdruckkissen-Druckmassage zu starten. Es gibt drei Luftdruckkissen-Massagezonen: Upper Body (Oberkörper), Lower Body (Unterkörper), Whole Body (Ganzkörper). Ober- und Unterkörper werden gleichzeitig durch Druck massiert. Wählen Sie Off, um die Massage zu deaktivieren.

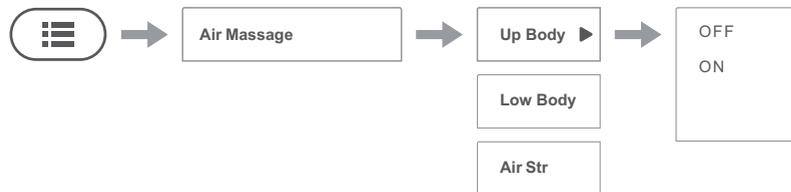


(2) Intensität einstellen. Nach dem Einschalten der Luftdruckkissen-Massage können Sie den Luftdruck in den Luftdruckkissen, die sogenannte Intensität, einstellen. Es gibt fünf Intensitätsstufen: 1 ist die niedrigste und 5 die höchste.



## Bedienungsanleitung

### (3) Displayansicht - Luftdruckkissen-Intensität

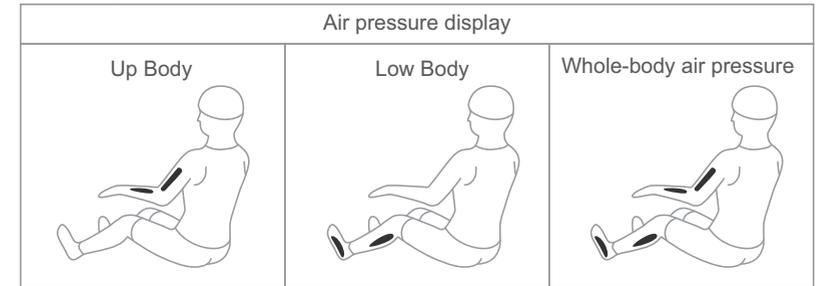


### 2. Heizung

(1) Heizung einschalten: Öffnen Sie wie in der Abbildung unten gezeigt das Menü und wählen Sie „Other Func -> Back heat“ (Weitere Funktionen -> Rückenheizung), um die Rückenheizung ein-/auszuschalten.




### (2).Displayansicht - Heizung

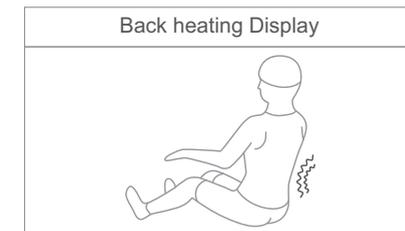


### 3. Fußrollenmassage

(1) Fußrollenmassage einschalten: Öffnen Sie wie in der Abbildung unten gezeigt das Menü und wählen Sie „Other Func-> Roll“ (Weitere Funktionen -> Rollen), um die Fußrollenmassage ein- oder auszuschalten.

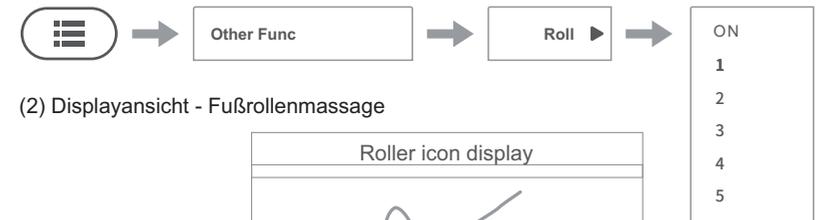

### (2) Displayansicht - Fußrollenmassage

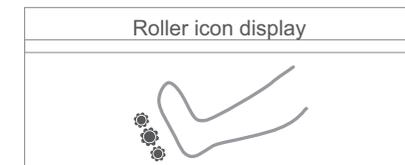


## Bedienungsanleitung

### VIII. 4D-Massageintensität einstellen (Diese Funktion ist nach dem Einschalten des Massagesessels verfügbar)


#### 1. 4D-Massageintensität einstellen

Öffnen Sie wie in der Abbildung unten gezeigt das Menü, wählen Sie „Massage Adj“ und gehen Sie zu „4D Str“ (4D-Intensitätseinstellung), um die 4D-Intensität anzupassen. Es gibt fünf 4D-Intensitätsstufen, wobei Stufe 1 die minimale und Stufe 5 die maximale Intensität darstellt. Je höher die 4D-Intensität, desto stärker sind die Massagearme und desto stärker ist die Massageintensität. (Auf dem Hauptbildschirm der Fernbedienung)

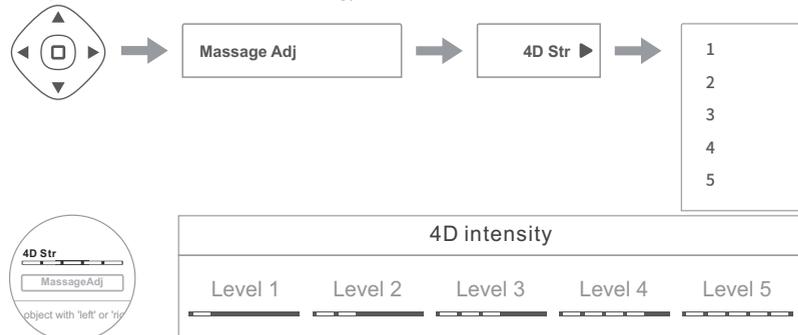


#### 3. Massagedauer einstellen

Öffnen Sie das Menü (siehe Abbildung unten), wählen Sie „Massage Adj“ und anschließend „Time Adj“, um die Massagedauer zu verlängern oder zu verkürzen. Der Einstellbereich liegt zwischen 0 und 40 Minuten. Nach Abschluss der Massage schaltet sich der Massagesessel automatisch aus, die Massagearme kehren in die Ausgangsposition zurück und die Position des Massagesessels bleibt unverändert.

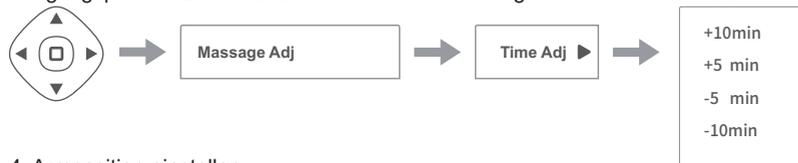

#### 4. Armposition einstellen

Öffnen Sie wie in der Abbildung unten gezeigt das Menü und wählen Sie „Shoulder Adj“, um die Armposition nach oben oder unten anzupassen. Wenn Sie das Gefühl haben, dass die Massagearme nicht gut zu Ihrer Rückenform passen, können Sie ihre Position manuell anpassen.

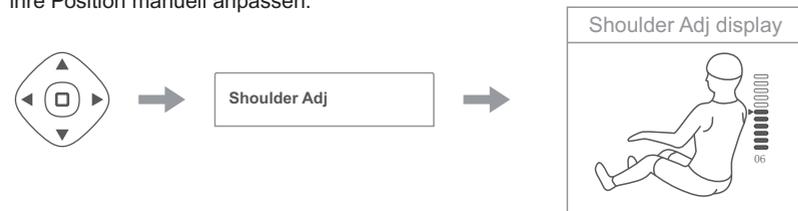


## Bedienungsanleitung

### IX. Liegeposition des Massagesessels einstellen (Diese Funktion ist nach dem Einschalten des Massagesessels verfügbar)


#### 1. Zero Gravity

Es gibt drei Stufen, die den drei Winkeln des Massagesessels entsprechen. Mit der Taste „Zero Gravity“ können Sie wiederholt zwischen den drei Zero Gravity-Stufen wechseln oder diese Position deaktivieren.

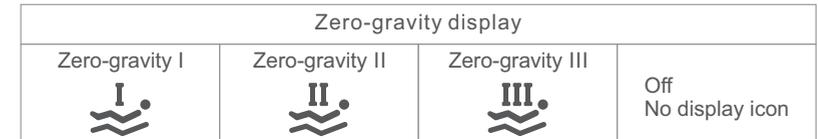

#### 2. Massagesesselposition – Ganzkörper

- Halten Sie die Liegepositionstaste auf der Fernbedienung gedrückt, um den Massagesessel nach unten zu verstellen. Die Rückenlehne senkt sich, das Beinmassagegerät hebt sich. Die Verstellung endet mit dem Loslassen der Taste. Sobald die Rückenlehne vollständig ausgefahren ist, ertönt ein „Bi-Bi-Bi“-Ton. Nach Abschluss der Neigungsverstellung erkennt der Beinmassagemechanismus automatisch die Fußlänge.
- Halten Sie die Sitzhöhenverstellungstaste auf der Fernbedienung gedrückt, um den Massagesessel nach oben zu verstellen. Die Rückenlehne hebt sich, das Beinmassagegerät senkt sich. Die Verstellung endet mit dem Loslassen der Taste. Sobald die Rückenlehne in die Ausgangsposition zurückkehrt, ertönt ein „Bi-Bi-Bi“-Ton. Nach Abschluss der Neigungsverstellung erkennt der Beinmassagemechanismus automatisch die Fußlänge.

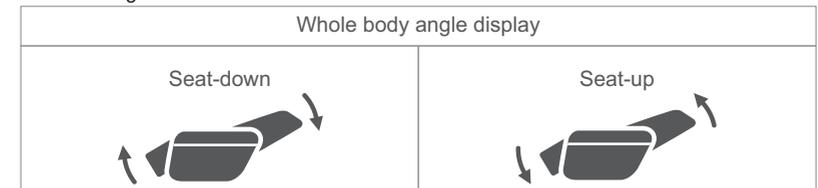

#### 3. Fußstützenneigung verstellen

- Halten Sie die Fußstützen-Absenktaste gedrückt, um die Beine abzusenken. Die Verstellung ist abgeschlossen, wenn Sie die Taste loslassen. Die Verstellung stoppt und ein „Bi-Bi-Bi“-Ton ertönt, wenn die Fußstütze in die Ausgangsposition zurückkehrt. Nach dem Absenken der Fußstütze erkennt der Beinmassagemechanismus automatisch die Fußlänge.
- Halten Sie die Fußstützen-Anhebetaste auf der Fernbedienung gedrückt, um das Beinmassagegerät anzuheben. Die Verstellung ist abgeschlossen, wenn Sie die Taste loslassen. Die Verstellung stoppt und ein „Bi-Bi-Bi“-Ton ertönt, wenn die Fußstütze maximal angehoben ist. Nach dem Anheben der Fußstütze erkennt der Beinmassagemechanismus automatisch die Fußlänge.




## Bedienungsanleitung

### 4. Fußstützenlänge

Halten Sie die Taste zum Ausfahren des Fußstützenmechanismus gedrückt  und lassen Sie die Taste los, um die Verstellung zu stoppen.

Halten Sie die Taste zum Verkürzen des Fußstützenmechanismus auf  der Fernbedienung gedrückt, um die Fußstütze zu verkürzen. Lassen Sie die Taste los, um die Verstellung zu stoppen.


Wenn die Verstellung die Endposition erreicht, stoppt sie und ein Signalton ertönt.

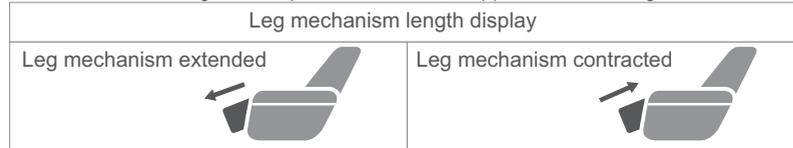

### X. Favoriten (Diese Funktion ist nach dem Einschalten des Massagesessels verfügbar)

Öffnen Sie die Menüoberfläche „Meine Favoriten“, wie in der Abbildung unten gezeigt. Wählen Sie „+“ und drücken Sie die OK-Taste , um das aktuell laufende Massageprogramm zu „Meinen Favoriten“ hinzuzufügen. Wenn Sie dieses Massageprogramm das nächste Mal ausführen möchten, wählen Sie einfach das hinzugefügte Programm in der „Meine Favoriten“-Oberfläche aus und drücken Sie die OK-Taste . Dasselbe Massageprogramm kann nicht wiederholt hinzugefügt werden. Sie können maximal 3 Massageprogramme speichern.

Wählen Sie Ihr Lieblingsprogramm auf der Fernbedienung aus und halten Sie die OK-Taste  gedrückt, um das Lieblingsprogramm zu löschen.

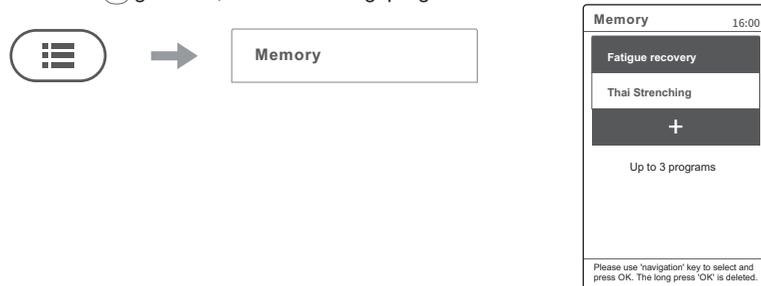

### XI. Systemeinstellungen (Diese Funktion ist nach dem Einschalten des Massagesessels verfügbar)

1. Bluetooth: Öffnen Sie wie in der Abbildung unten gezeigt das Bluetooth-Einstellungsmenü, um die Bluetooth-Lautsprecher ein- oder auszuschalten.

Nach dem Einschalten der Bluetooth-Lautsprecherfunktion können Sie Musik abspielen, indem Sie Ihr Gerät (Mobiltelefon, Tablet usw.) verbinden. So geht's:

(1) Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Geräts, suchen Sie nach dem Bluetooth-Namen mit den Wörtern „IMCM-XXXXXX“ und stellen Sie die Verbindung her.

(2) Öffnen Sie den Musik-Player Ihres Geräts, um Musik abzuspielen.



## Bedienungsanleitung

2. Sprachassistent: Öffnen Sie wie in der Abbildung unten gezeigt das Sprachassistent-Einstellungsmenü, um die Sprachassistentenfunktion ein- oder auszuschalten, oder halten Sie die Sprachtaste an der rechten Armlehne gedrückt , um die Sprachassistentenfunktion ein- oder auszuschalten. Nachdem der Sprachassistent aktiviert ist, können Sie den Massagesessel damit steuern. Die Bedienung erfolgt wie folgt:



(1) Sagen Sie „Hi Alice“ oder „Hey Alice“ in den Lautsprecher oder drücken Sie die Sprachsteuerungstaste an der rechten Armlehne , um die Sprachsteuerungsfunktion zu aktivieren. Nach erfolgreicher Aktivierung der Sprachsteuerung antwortet der Massagesessel mit „I am here“.

(2) Wenn die Sprachsteuerung aktiviert ist, sprechen Sie innerhalb von 6 Sekunden die weiteren Befehle, um die weiteren Funktionen des Massagesessels zu steuern. Nach Erhalt der Antwort vom Massagesessel können Sie die folgenden Befehle sprechen. Damit die Sprachsteuerung aktiv ist, achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen den Sprachbefehlen mindestens sechs Sekunden beträgt. Andernfalls müssen Sie die Funktion erneut aktivieren. Englische Sprachbefehle:

Sprachsteuerung aktivieren		
Befehl: „Hi Alice“ oder „Hey Alice“. Antwort: "I am here" (Ich bin hier)		
No.	Sprachsteuerungsbefehle	Massagesessel-Antwort
1	Message on	Massage starten. Antwort: Ok, massage on
2	Message close	Massage beenden. Antwort: Ok, massage close
3	Total Relax	Entspannende Massage. Antwort: Ok, Total Relax
4	Energy Boost	Belebende Massage. Antwort: Ok, Energy Boost
5	Sweet Dream	Gute-Nacht-Massage. Antwort: Ok, Sweet Dream
6	Neck & Shoulder Care	Nacken- und Schultermassage. Antwort: Ok, Neck & shoulder Care
7	Lunch Break	Massage während der Mittagspause. Antwort: Ok, Lunch Break
8	Thai Massage	Thai-Massage Antwort: Ok, Thai Massage
9	Open the air pressure	Luftdruckkissen-Massage einschalten. Antwort: Ok, open the air pressure
10	Close the air pressure	Luftdruckkissen-Massage ausschalten. Antwort: Ok, close the air pressure
11	Up the seat position	In eine sitzende Position bringen. Antwort: Ok, up the seat position
12	Down the seat position	In eine liegende Position absenken. Antwort: Ok, down the seat position
13	Change the other mode	Modus wechseln. Antwort: OK, change the other mode
14	Go little down	Etwas nach unten. Antwort: OK, go little down
15	Go little up	Etwas nach oben. Antwort: Ok, go little up


Hinweis: Die Befehle 14 und 15 können erst nach Befehl 13 verwendet werden.

## Bedienungsanleitung


4. Sprachansage: Wie in der Abbildung unten dargestellt, können Sie die Sprachansage und die Hintergrundmusik im Einstellungsmenü ein- oder ausschalten.

(1) Sprachansage: Bei der Benutzung des Massagesessels wird der Benutzer in die korrekte Bedienung eingewiesen, damit sich neue Benutzer schneller mit der Massagefunktion vertraut machen können.


(2) Hintergrundmusik: Die vier automatischen Programme „Total Relax“, „Chinese Massage“, „Relieve Muscle“ und „Sweet Dream“ spielen Hintergrundmusik.

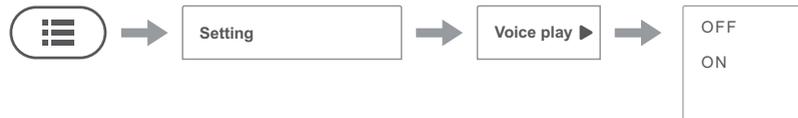

3. Lautstärke: Wie in der Abbildung unten dargestellt, können Sie das Lautstärkemenü öffnen, um die Systemlautstärke einzustellen, und mit den Oben-△ und Unten-▽ Tasten anpassen. Es stehen 15 Lautstärkestufen zur Verfügung.

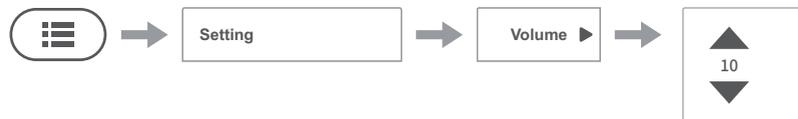

4. Sprache: Wie in der Abbildung unten dargestellt, können Sie das Sprachmenü öffnen, um die Systemsprache einzustellen. Die Standardsprache ist Chinesisch. Englisch ist optional.

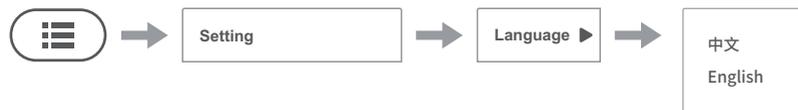


5. Weitere Informationen: Wie in der Abbildung unten dargestellt, können Sie die Seriennummer usw. des Produkts im Menü „Einstellungen“ einsehen.



## Bedienungsanleitung

### XII. Beenden der Massage

1. Drücken Sie während der Massage die Touch-Ein-/Aus-Taste  auf der Fernbedienung oder die Ein-/Aus-Taste  an der rechten Armlehne, um das Gerät auszuschalten. Alle Massagefunktionen werden sofort deaktiviert, und Rückenlehne und Fußstütze werden in die Ausgangsposition zurückgestellt. Nach Ablauf der Massagezeit werden alle Massagefunktionen automatisch abgeschaltet, Rückenlehne und Fußstütze werden jedoch nicht in die Ausgangsposition zurückgestellt.

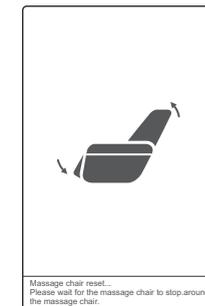

Trennen Sie das gesamte Gerät vom Stromnetz, wie in der Abbildung (Diagramm zur Schalterstellung) dargestellt.

Schalten Sie den Netzschalter um (Position „0“)



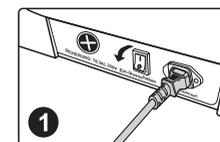


Diagramm zum Ziehen des Netzsteckers

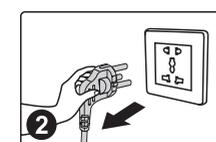

Entfernen Sie das Netzteil des Geräts

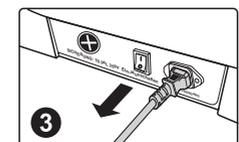

## Reinigung und Pflege

### Reinigung von Kunstleder und Kunststoffteilen

Wischen Sie das Leder mit einem weichen, trockenen Tuch ab:

■ Verwenden Sie keine Chemikalien wie Verdünner, Benzin, Alkohol usw. zur Reinigung des Geräts.

■ Wenn Sie handelsübliche Lederpflegemittel verwenden, beachten Sie die Bedienungsanleitung.

■ Wenn das Kunstleder besonders schmutzig ist, wischen Sie es wie folgt ab:

- ① Tauchen Sie ein weiches Tuch in Wasser oder warmes Wasser mit 3 % bis 5 % neutralem Reinigungsmittel und wischen Sie es dann gründlich ab.
- ② Wischen Sie die Oberfläche des Leders mit einem weichen Tuch ab.
- ③ Wischen Sie die Reinigungslösung mit einem in sauberem Wasser getränkten und gründlich ausgedrückten Tuch ab.
- ④ Wischen Sie mit einem weichen Tuch nach.
- ⑤ Frei trocknen lassen.


■ Wenn sich Flecken nur schwer entfernen lassen, tauchen Sie einen handelsüblichen Melaminschwamm in neutrales Reinigungsmittel und wischen Sie das Gerät damit ab.

■ Verwenden Sie zum Trocknen der Oberfläche keinen Haartrockner.

■ Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Geräte in Jeans und farbigen Stoffen verwenden, da die Farbe des Stoffes die Oberfläche des Kunstleders verfärben kann.

■ Vermeiden Sie den Kontakt dieser Teile mit Kunststoff über längere Zeit, da dies die Oberfläche des Kunstleders verfärben kann.

■ Kunstleder kann sich verfärben. Decken Sie daher die von Haaren berührten Teile, z. B. nach der Verwendung von Haarfärbemitteln, mit einem Handtuch ab.

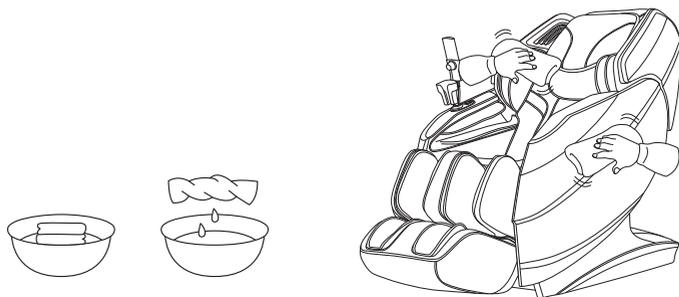

## Fehlerbehebung

<b>Fehler</b>	Wenn die Fußstütze oder Rückenlehne eine bestimmte Position erreicht, drücken Sie die entsprechende Einstelltaste, es erfolgt jedoch keine Veränderung und ein unterbrochenes Tonsignal ertönt.
<b>Lösung</b>	Aufgrund der Bauweise und ergonomischer Anforderungen verfügt der Massagesessel über eine Schutzbegrenzung für die maximale Positionsverstellung. Bei Erreichen dieser Begrenzung ertönt ein Erinnerungston.

<b>Fehler</b>	Die Funktion oder einige Funktionen funktionieren nach dem Einschalten des Gerät nicht.
<b>Lösung</b>	Nach dem Einschalten des Geräts durch Drücken der Einschalttaste wählen Sie das automatische Massageprogramm oder einen anderen Betriebsmodus manuell aus. Wenn das Gerät nicht funktioniert, schaltet es sich nach 20 Minuten automatisch ab. Bei Auswahl des manuellen Programmiermodus können nicht ausgewählte Funktionen deaktiviert werden. Der Betriebsmodus muss dann manuell eingestellt werden.

<b>Fehler</b>	Beim Einstellen der Massagesesselposition ist das Reiben des Leders am Massagesessel hörbar.
<b>Lösung</b>	Dieses Gerät besteht aus hochwertigem, strapazierfähigem Leder, das den Umweltschutzanforderungen entspricht. Aufgrund der Materialeigenschaften von Leder ist beim Reiben und bei relativer Bewegung ein hörbares Geräusch zu hören. Dies ist normal. Hinweis: Wenn Sie während der Benutzung des Gerät ein reißendes Geräusch im Stoff oder Leder hören, stellen Sie die Benutzung sofort ein und wenden Sie sich an einen Kundendienst.

<b>Fehler</b>	Die Massagearme erreichen die Schultern und den Nacken nicht.
<b>Lösung</b>	Wenn Ihr Kopf das Kissen hinter Ihrem Kopf nicht berührt oder Ihr Rücken die Rückenlehne nicht berührt, ist die Position der Arme möglicherweise niedriger als die tatsächliche Position während der Körpererkennung. Setzen Sie sich in die tiefste Sitzposition, stützen Sie Ihren Kopf auf die Kopfstütze und beginnen Sie von vorne.

<b>Fehler</b>	Das Gerät ist defekt. Das Netzteil oder der Stecker ist ungewöhnlich heiß.
<b>Lösung</b>	Um Unfälle zu vermeiden, wenden Sie sich an ein autorisiertes Kundendienstzentrum.

Bei Fragen oder Anliegen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den zuständigen Kundendienst.

## Technische Daten des Geräts

---

Modell: iRest GRANDEASE (A550)

Bezeichnung: Massagesessel

Nennspannung: 110-120 V~ 60 Hz

220-240 V~ 50 Hz/60 Hz

Nennleistung: 120W

Nennzeit: 20 Minuten

Sicherheitsklasse: Klasse I

BEWAHREN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR SPÄTERES  
NACHSCHLAGEN AUF

Lieber Benutzer, Sie können zum Umweltschutz beitragen.  
Handeln Sie umweltbewusst und geben Sie das Altgerät an der von Ihrer  
Gemeinde/Ihrem Land vorgesehenen Sammelstelle ab.  
Die zur Herstellung des Geräts verwendeten Materialien können wertvolle  
Sekundärrohstoffe sein und bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt schädigen.  
Bitte beachten: Werfen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll.

Verwendete Materialien: PVC, PA, Stahlteile sowie elektrische und elektronische  
Teile

KUNSTSTOFF	PU	LEDER	STOFF	HOLZ



Importeur und bevollmächtigter Vertreter in der EU :

iRest Europe Sp. z o.o.

Szewczenki 7/11

10-274 Olsztyn, Poland

e-mail: [irest@irest-europe.com](mailto:irest@irest-europe.com)

Hersteller:

Zhejiang Haozhonghao Health Product Co., Ltd

No.18 XingLong Road, Furniture Garden, Wanquan

Industrial Base, Pingyang, Zhejiang, China

e-mail: [irest@irest.com](mailto:irest@irest.com)