


iRest

**MASSAGESESSEL
iRest MAESTHRON A801-2**

**BEWAHREN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG
FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF**

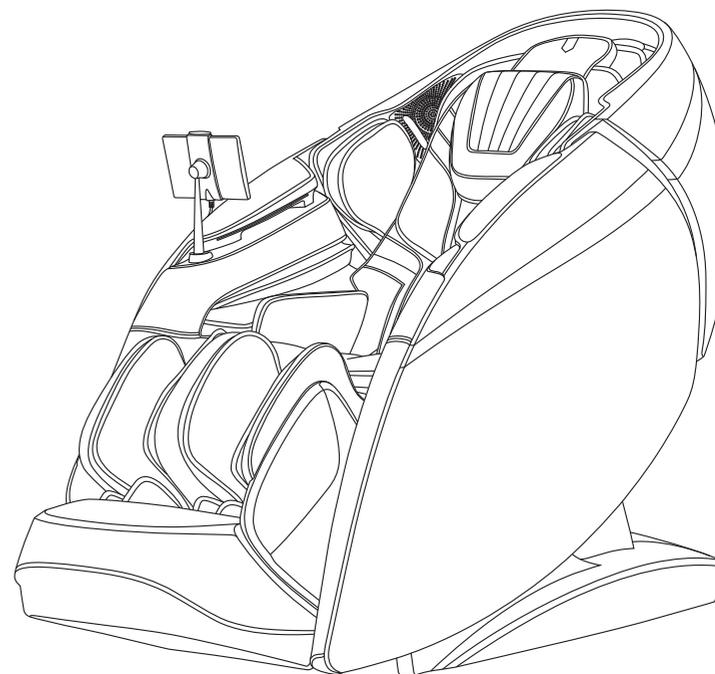

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank für den Kauf dieses Geräts. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um sich vor der Inbetriebnahme des Massagesessels mit dessen korrekter Verwendung vertraut zu machen. Bitte beachten Sie insbesondere die Kontraindikationen und die Sicherheitshinweise.

Hinweis: Der Verkäufer behält sich das Recht vor, Änderungen am Design und an der Beschreibung des Geräts vorzunehmen. Sollten Unterschiede zwischen der Funktion des auf dem Markt erhältlichen Geräts und der Beschreibung in der Anleitung bestehen, so sind diese auf eine normale Aktualisierung des Geräts zurückzuführen, und der Hersteller ist nicht verpflichtet, darüber zu informieren. Die in der Bedienungsanleitung abgebildete Farbe entspricht nicht der aktuellen Farbgebung des Massagesessels.

INHALTSVERZEICHNIS

Vor dem ersten Gebrauch

Vorsichtsmaßnahmen	02-05
Montageteile	06-08
Aufstellung des Massagesessels	09-10
Vor dem Gebrauch	11-12
Aufbau des Massagesessels	13-19

Verwendung

Bedienungsanleitung	20-57
Beende der massage	57

Wartung

Reinigung und Pflege	58
----------------------------	----

Wichtig

Fehlerbehebung	59
Technische Daten des Geräts	60

Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden

- Lesen Sie vor Gebrauch alle wichtigen Anweisungen sorgfältig durch.
- Die hierin enthaltenen Anweisungen helfen dabei, das Gerät sicher und richtig zu verwenden.
- Um das Ausmaß möglicher Verletzungen und Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen können, deutlich zu machen, sind Informationen mit der Überschrift „**Warnung**“ oder „**Hinweis**“ gekennzeichnet. Beide sind wichtig für die Sicherheit und müssen beachtet werden.

 Warnung	Zeigt an, dass bei unsachgemäßem Gebrauch schwere Verletzungen oder Tod auftreten können.
 Hinweis	Zeigt an, dass bei unsachgemäßem Gebrauch leichte Verletzungen oder Sachschäden auftreten können.

- Beachten Sie das Symbol vor jedem Sicherheitselement.

 Verboten	Absolut verboten
---	------------------

Folgenden Personen ist die Benutzung des Massagesessels untersagt	
 Verboten	<ul style="list-style-type: none"> ■ Das Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit körperlichen, sensorischen oder neurologischen Behinderungen oder mangelnder Erfahrung und Vernunft bestimmt, es sei denn, sie werden von für ihre Sicherheit verantwortlichen Personen beaufsichtigt und in die Benutzung des Geräts eingewiesen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit den Geräten spielen. ■ Patienten mit Osteoporose. ■ Patienten mit Herzerkrankungen oder elektronischen medizinischen Geräten, wie z. B. einem Herzschrittmacher. ■ Personen mit Fieber. ■ Schwangere oder Frauen während der Menstruation. ■ Patienten mit Verletzungen oder Hauterkrankungen. ■ Kinder unter 14 Jahren oder psychisch instabile Personen dürfen dieses Gerät nicht unbeaufsichtigt benutzen. ■ Personen, denen ärztlich Ruhe verordnet wurde oder die sich unwohl fühlen. ■ Personen mit nassem Körper dürfen dieses Produkt nicht benutzen. ■ Das Gerät hat eine beheizte Oberfläche. Personen, die nicht hitzeempfindlich sind, müssen bei der Benutzung des Geräts vorsichtig sein. ■ Wenn das Netzteil beschädigt ist, muss es vom Hersteller/Kundendienst oder einer Person mit vergleichbarer Qualifikation ausgetauscht werden.

Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden

Wichtige Sicherheitshinweise	
 Warnhinweise	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lassen Sie Kinder nicht mit den beweglichen Teilen dieses Massagesessels in Berührung kommen. ■ Verwenden Sie ein gut geerdetes Netzteil, das für dieses Produkt geeignet ist. ■ Ziehen Sie nach Gebrauch oder vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose, um Verletzungen oder Schäden am Produkt zu vermeiden. ■ Bedienen Sie den Massagesessel gemäß der Bedienungsanleitung. ■ Verwenden Sie keine Zubehörteile, die nicht empfohlen sind. ■ Verwenden Sie den Massagesessel nicht im Freien. ■ Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch. ■ Verwenden Sie dieses Produkt niemals für andere als die in diesem Dokument genannten Zwecke. ■ Es wird eine Nutzungsdauer von jeweils 20 Minuten empfohlen. ■ Verwenden Sie den Massagesessel nicht, wenn die Abdeckung oder das Leder beschädigt oder defekt ist. ■ Lassen Sie keine Gegenstände auf den Massagesessel fallen. ■ Schlafen Sie nicht ein, während Sie den Massagesessel benutzen. ■ Verwenden Sie den Massagesessel nicht, wenn Sie betrunken sind oder sich unwohl fühlen. ■ Verwenden Sie den Massagesessel nicht innerhalb einer Stunde nach dem Essen. ■ Stellen Sie keine zu hohe Massageintensität ein, um Verletzungen zu vermeiden.

Vorsichtsmaßnahmen	
 Hinweis	<ul style="list-style-type: none"> ■ Prüfen Sie, ob die Spannung den Spezifikationen dieses Produkts entspricht. ■ Ziehen Sie den Stecker niemals mit nassen Händen heraus. ■ Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser in das Produkt, um Stromschläge oder Produktschäden zu vermeiden. ■ Ziehen Sie beim Anschließen oder Trennen nicht am Netzteil. Grobe Handhabung ist verboten. ■ Beschädigen Sie das Netzteil nicht und verändern Sie die Schaltung des Geräts nicht. ■ Reinigen Sie elektrische Teile wie Schalter und Stecker mit einem trockenen Tuch. ■ Setzen Sie sich nicht auf das ausgeschaltete Gerät, um Verletzungen durch plötzliche Wiederherstellung der Stromversorgung zu vermeiden. ■ Beenden Sie die Verwendung des Geräts, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, und wenden Sie sich umgehend an Ihren lokalen Hersteller. ■ Beenden Sie die Verwendung dieses Produkts, wenn Sie sich unwohl fühlen, und suchen Sie einen Arzt auf.

Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden

Lagerbedingungen	
 Hinweis	<ul style="list-style-type: none">■ Innentemperatur: 5 °C bis 40 °C.■ Relative Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 80 %, keine korrosiven Gase, gut belüfteter Raum.

Service und Wartung	
 Hinweis	<ul style="list-style-type: none">■ Dieses Produkt darf nur von einem vom Hersteller benannten Kundendienstzentrum gewartet werden. Benutzer dürfen das Produkt nicht ohne Genehmigung zerlegen oder warten.■ Schalten Sie den Hauptschalter nach Gebrauch aus.■ Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn sich die Steckdose löst.■ Wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird, rollen Sie das Netzteil auf und lagern Sie es an einem trockenen und staubfreien Ort.■ Lagern Sie das Produkt nicht bei hohen Temperaturen oder in der Nähe von offenem Feuer. Vermeiden Sie längere direkte Sonneneinstrahlung.■ Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie niemals Verdüner, Benzin oder Alkohol.■ Die mechanischen Komponenten dieses Produkts sind speziell konstruiert und gefertigt, sodass keine besondere Wartung erforderlich ist.■ Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, die das Produkt beschädigen können.■ Rollen oder ziehen Sie das Gerät nicht über unebenen Boden. Heben Sie es vor dem Transport an.■ Das Produkt sollte nur gelegentlich verwendet werden. Verwenden Sie es nicht über längere Zeit ununterbrochen.

Nutzungsumgebung	
 Hinweis	<ul style="list-style-type: none">■ Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Räumen mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit, wie z. B. im Badezimmer.■ Stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein, wenn sich die Umgebungstemperatur plötzlich ändert.■ Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer staubigen oder korrosiven Umgebung.■ Verwenden Sie dieses Produkt nicht in kleinen Räumen oder an Orten ohne gute Belüftung.



Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden

Behebung häufiger Störungen	
 Hinweis	<ul style="list-style-type: none">■ Es ist normal, dass die Aktuatoren während der Verwendung des Massagesessels Geräusche verursachen.■ Wenn die Steuerung nicht normal funktioniert, überprüfen Sie, ob der Stecker und die Steckdose richtig angeschlossen sind und ob der Netzschalter eingeschaltet ist.■ Wenn die Nennbetriebszeit abgelaufen ist, aktiviert der Massagesessel automatisch die Ausschalttaste. Wenn der Massagesessel über einen längeren Zeitraum ununterbrochen verwendet wird, schaltet er sich bei Erreichen einer hohen Temperatur automatisch aus. Warten Sie mindestens eine halbe Stunde, bevor Sie den Massagesessel weiter verwenden.



Montageteile

Montageanleitung für das Wadenmassagegerät

1. Senken Sie nach dem Einschalten der Stromversorgung den Rückenlehnenrahmen mit der Fernbedienung ab.
2. Platzieren Sie den Kabelbaumstecker und den Luftschlauch entsprechend an der Seite des Stahlrahmens in der Position, die der Armlehne entspricht (Abbildung 1).
3. Heben Sie die Armlehne mit dem eingelegten Luftschlauch und Kabel an und befestigen Sie alle Halterungen an der Armlehne auf beiden Seiten des Stahlrahmens (Abbildung 2).

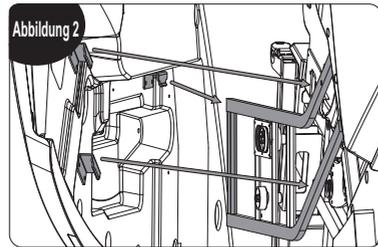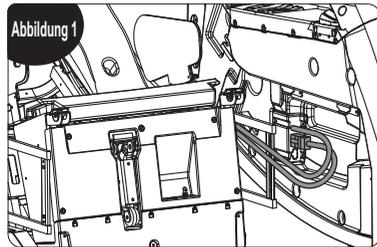




4. Setzen Sie die Rolle an der Rückseite der Armlehne in die entsprechende Befestigungsfläche ein (Abbildung 3) und senken Sie die Armlehne nach hinten ab. Schieben Sie die Armlehne anschließend zurück und befestigen Sie sie mit zwei M5-Schrauben (Abbildung 4).

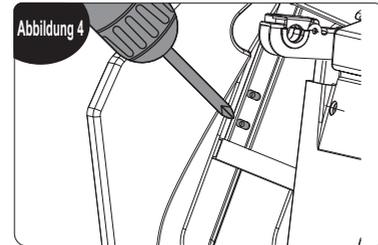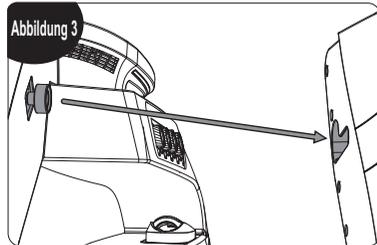

Montageteile

Montageanleitung für das Wadenmassagegerät




1. Führen Sie die Kabel und den Luftschlauch des Wadenmassagegeräts in die Schlitze am vorderen Ende des Rahmens ein (Abbildung 1).
2. Öffnen Sie nach der Kabelinstallation die Befestigungsabdeckungen des Wadenmassagegeräts auf beiden Seiten des Rahmens (Abbildung 2).
3. Heben Sie das Massagegerät an, setzen Sie es in den Schlitz ein, decken Sie die Befestigungsabdeckung ab und befestigen Sie es mit zwei M4-Schrauben (Abbildung 3).

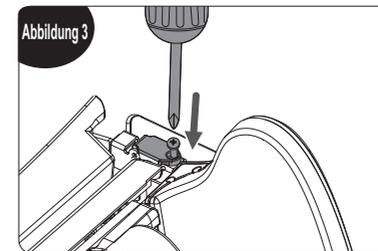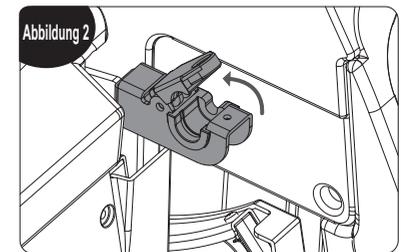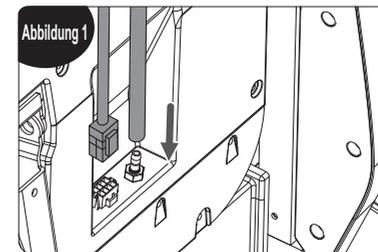

Montageteile

Imontageanleitung für die Touchscreen-Halterung

1. Richten Sie die Halterung an der Öffnung an der Vorderseite der Armlehne (rechts) aus und befestigen Sie sie mit M5-Schrauben (Abbildung 1).
2. Richten Sie die Halterungsabdeckung an der Halterung aus und drücken Sie die Halterungsstange bis zum Anschlag entlang. (Abbildung 2)
3. Nachdem die gesamte Halterung montiert ist, schütteln Sie sie leicht, um sicherzustellen, dass sie sicher befestigt ist. Die Installation der Halterung ist abgeschlossen. (Abbildung 3)

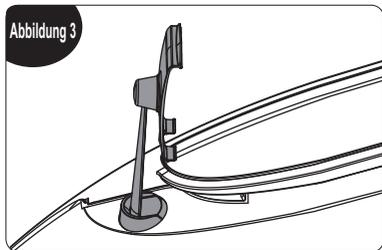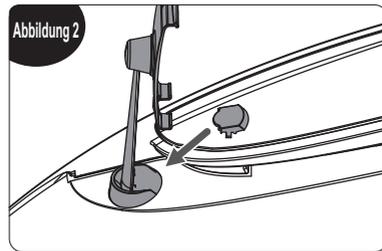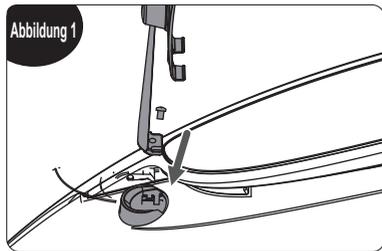


Aufstellung des Massagesessels

Montageort

Stellen Sie sicher, dass ausreichend Platz vorhanden ist, da der Massagesessel zum Ausklappen mindestens 10 cm Platz benötigt.



Setzen Sie den Massagesessel keiner direkten Hitze (z. B. vor Heizgeräten) und keiner direkten Sonneneinstrahlung aus; stellen Sie ihn an einem Ort auf, an dem hohe Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung vermieden werden können. Bei längerem Gebrauch an einem festen Standort wird empfohlen, eine weiche Matte unterzulegen. Beim Verlegen einer solchen Matte sollte deren Größe ausreichen, um die Standfläche des Gerätes abzudecken. Beachten Sie den Bereich, in dem das Gerät den Boden berührt, und die Stelle, an der Ihre Füße den Boden berühren.

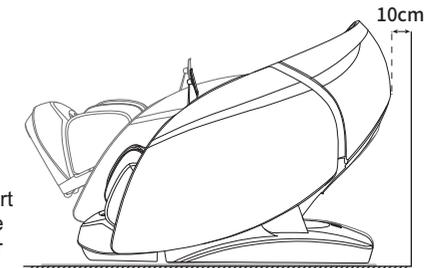


Heben des Massagesessels

Zum Heben und Bewegen des Massagesessels ist Teamarbeit erforderlich, um Verletzungsrisiken zu vermeiden.



1. Heben Sie den Massagesessel an, um ihn auf einem empfindlichen Untergrund, z. B. auf Holzböden, zu transportieren.
2. Wenn Sie das Gerät auf einem Holzboden bewegen, wird empfohlen, es anzuheben. Vermeiden Sie Beschädigungen an den Rollen. Achten Sie beim Anheben und Bewegen des Massagesessels an die gewünschte Position auf Ihre Hände, um Verletzungen zu vermeiden, und achten Sie darauf, dass Ihre Füße nicht eingeklemmt werden. Lassen Sie das Gerät nicht los, bevor der Korpus vollständig flach auf dem Boden steht, da der Boden sonst beschädigt werden kann. Es wird daher empfohlen, eine Matte darunter zu legen.

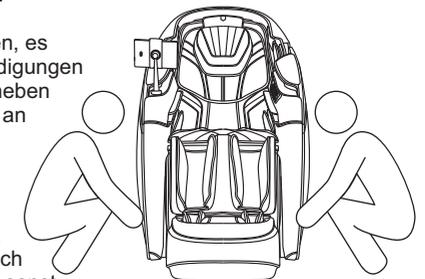


Aufstellung des Massagesessels

Transport

Nutzen Sie die Hinterräder, um den Massagesessel zu bewegen. Neigen Sie den Massagesessel um ca. 45° nach hinten, wie in der Abbildung gezeigt. **HINWEIS:** Übermäßige Kraft beim Neigen kann zum Umkippen des Massagesessels und zur Beschädigung des Geräts führen.





1. Schalten Sie das Gerät vor dem Transport ordnungsgemäß aus, um es zurückzusetzen, und ziehen Sie anschließend den Netzstecker.
2. Während des Transports darf nichts auf dem Massagesessel liegen (Personen, Haustiere oder Gegenstände).
3. Lassen Sie den Massagesessel beim Transport nicht aus einer Höhe von mehr als 2 mm fallen und überschreiten Sie keinen Spalt von mehr als 5 mm.
4. Beim Transport des Geräts mit den Rädern wird ein einmaliges Anschieben nicht empfohlen. Bei Entfernungen von über 50 Meter sollte das Gerät langsam und gleichmäßig bewegt werden.

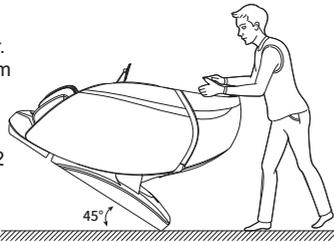

Demontage und Verwendung des Kopf- und Rückenlehnenkissens


Die Verwendung des Kopfkissens kann die Intensität der Knetmassage im Nacken- und Schulterbereich reduzieren. Die Verwendung des Kopfkissens kann je nach Bedarf gewählt werden (wir empfehlen es). Das Rückenlehnenkissen und die Rückenlehne sind durch einen Reißverschluss (1) verbunden, das Kopfkissen und das Rückenlehnenkissen sind ebenfalls durch einen Reißverschluss (2) verbunden.

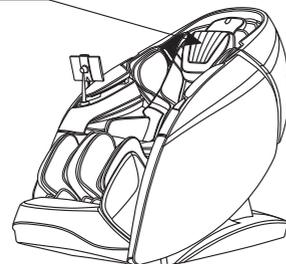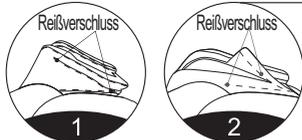

Vor dem Gebrauch

Überprüfung der Umgebung

Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen, Haustiere oder andere Gegenstände in der Nähe des Geräts befinden.

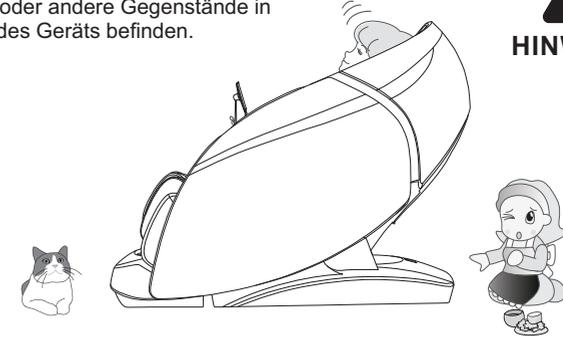


Stellen Sie sicher, dass sich keine Gegenstände in den Zwischenräumen des Geräts befinden

Stellen Sie vor der Massage sicher, dass sich keine Fremdkörper in der Fußstütze, an den Füßen usw. befinden.



Unter keinen Umständen dürfen Hände, Füße oder der Kopf in den Bereich zwischen dem unteren Fußstützenmechanismus und dem Hauptkorpus oder in den Bereich zwischen der Armlehne und der Rückenlehne gelangen.

Unter keinen Umständen dürfen Hände, Füße oder der Kopf unter den Stoff oder das Leder der Massagefläche gelangen.

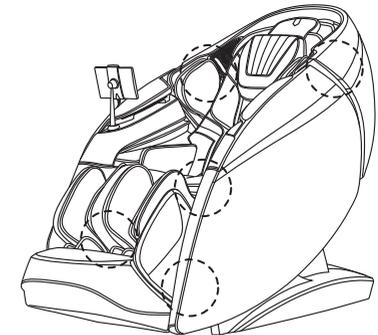

Vor dem Gebrauch


Einschalten



HINWEIS



1
Netzteil anschließen

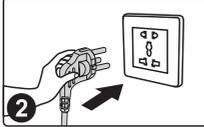

2
Anschlussplan



3
Netzschalter einschalten (Position „I“)




Warnhinweis

- Prüfen Sie vor der Anwendung, ob Netzteil und Stecker unbeschädigt sind.
- Die Stromversorgung dieses Geräts muss den Anforderungen für die Betriebsspannung entsprechen.
- Die Verwendung einer anderen als der Nennstromversorgung dieses Produkts ist strengstens untersagt.
- Der Anschluss von unbefugten Spannungswandlern an dieses Produkt ist strengstens untersagt.

Aufbau des Massagesessels

Beschreibung der einzelnen Komponenten

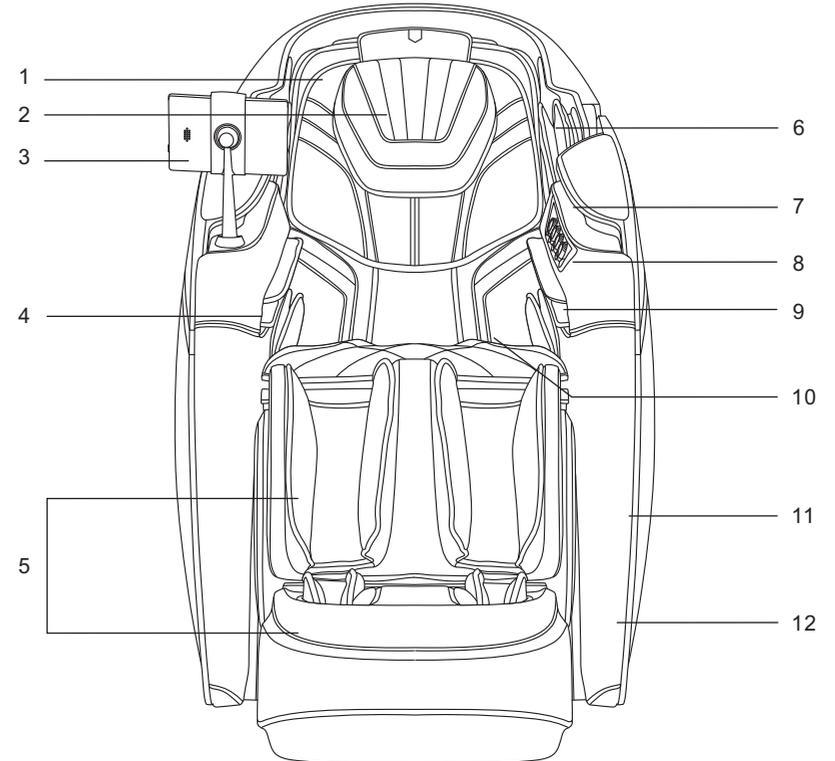


1. Großes Kopfkissen
2. Kleines Kopfkissen
3. Fernbedienung
4. Unterarm-Luftdruckkissen
5. Beinmassage-Elemente
6. Schulter-Luftdruckkissen

7. Ambiente-Beleuchtung
8. Schnellzugriffstasten in der Armlehne
9. Gesundheitssensor-Scanner
10. Rückenlehnenkissen
11. Seitenpaneel
12. Ambiente-Beleuchtung

Aufbau des Massagesessels

Funktionsverteilungsdiagramm

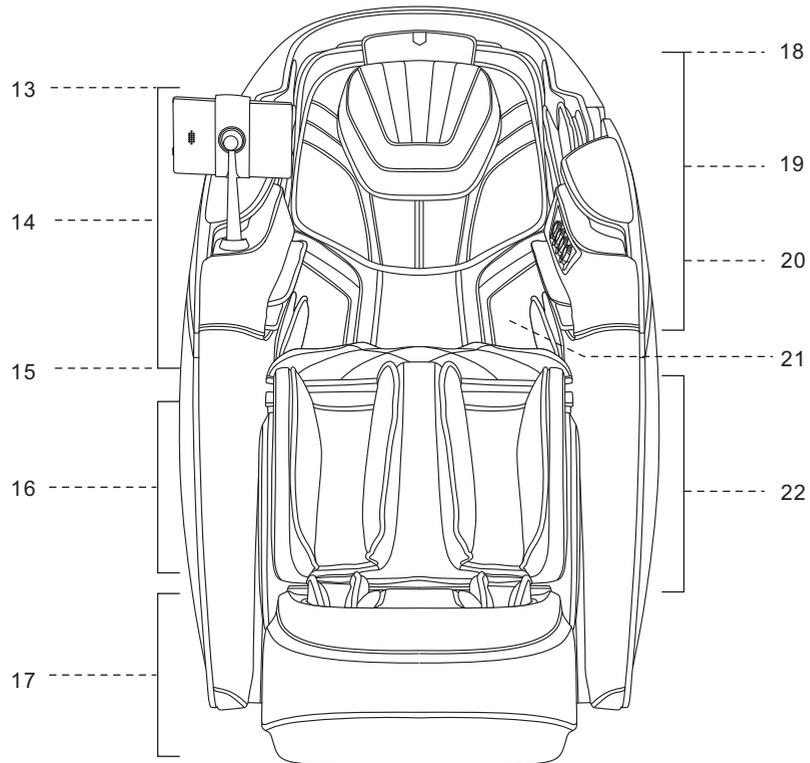


- 13. Schultern
 - Luftdruckkissen-Massage
- 14. Unterarme
 - Fernbedienungshalterung
 - Sprachsteuerung
 - Luftdruckkissen-Massage
- 15. Hände
 - Luftdruckkissen-Massage
- 16. Beine
 - Luftdruckkissen-Massage
- 17. Füße
 - Airbag-Massage
 - Rollenmassage
 - Elektrisch verstellbarer Fuß teleskopierbar
 - Automatische Beinlängenerkennung
- 18. Beidseitig am Kopf
 - 3D-Digitalplayer
 - Musikplayer

- 19. Unterarme
 - Kabelloses Ladegerät
 - USB-Ladeanschluss
 - Luftdruckkissen-Massage
 - Luftionisator
- 20. Vom Kopf bis zum Gesäß
 - Doppelter mechanischer Kern
 - Wärmemassage
- 21. Schultern, Rücken, Taille, Bauch
 - Wärmefunktion
- 22. Beine
 - Luftdruckkissen-Massage
 - Knetmassage
 - Wadenmassagegerät
 - Beinverstellung nach oben und unten

Aufbau des Massagesessels


Anwendung der Heizweste

Der Massagesessel verfügt über eine einzigartige Weste mit innovativen Heizfunktionen für Schultern, Rücken, Taille und Bauch. Sie können die Weste je nach Wunsch in verschiedene Massagepositionen bringen.

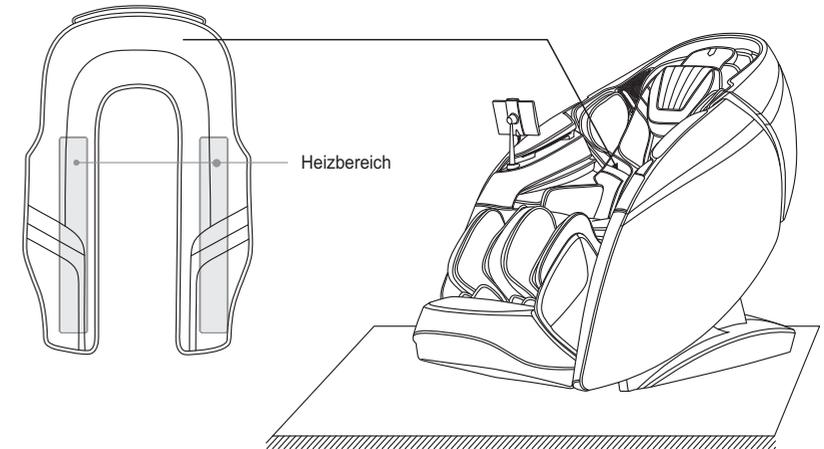

Anwendungsdiagramm für Rücken und Taille

Wenn die Weste auf Rücken und Taille gelegt wird, erwärmt die eingebaute Wärme die tiefen Meridiane des Rückens, fördert die Durchblutung und wärmt die Nieren, lindert Rückenschmerzen, kältebedingte Rückensteifheit, Schmerzen und andere Beschwerden.

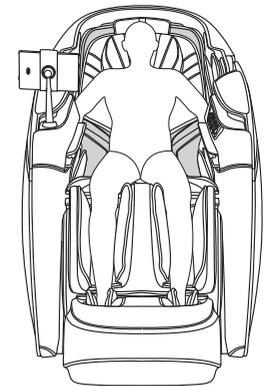

Aufbau des Massagesessels

Anwendungsdiagramm für Schultern und Bauch

Wenn die Weste auf den Schultern (vorne/hinten) gelegt wird, erwärmt sie die Akupunkturpunkte wie Bingfeng, Tianzong, Yunmen und Qihu um Schultern und Schlüsselbein herum. Sie kann auch auf der Vorderseite angelegt werden, um den Bauch zu wärmen.

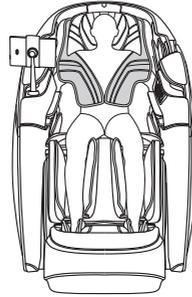


Diagramm – Richtige Anwendung der Heizweste





HINWEIS

1. Richtige Platzierung und Anwendung: Wenn die Weste auf dem Rücken getragen wird (oder der Massagesessel nicht eingeschaltet ist), platzieren Sie sie bitte auf beiden Seiten der Rückenlehne und stellen Sie den unteren Magneten und das Rückenlehnenpolster auf die Lendenwirbelposition ein.


Wenn Sie die Weste nicht nutzen möchten, heben Sie sie vorsichtig an und legen Sie sie vorsichtig hinter die Rückenlehne.

2. Falsche Platzierung und Anwendung: Wenn die Weste auf dem Rücken getragen wird (oder der Massagesessel nicht eingeschaltet ist), drücken Sie die Weste nicht im Arbeitsbereich des Hauptmassagegeräts entlang der Wirbelsäule ein. Dies kann zu einem Ausfall der Heizfunktion, Schäden am Massagesessel und anderen schwerwiegenden Störungen führen. Rollen, verdrehen oder kreuzen Sie die Weste nicht und tragen Sie den Schal nicht auf dem Rücken.

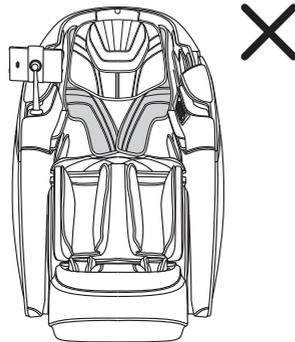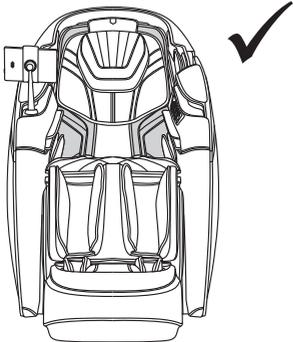


Aufbau des Massagesessels

Bedienungsanleitung der Fernbedienung

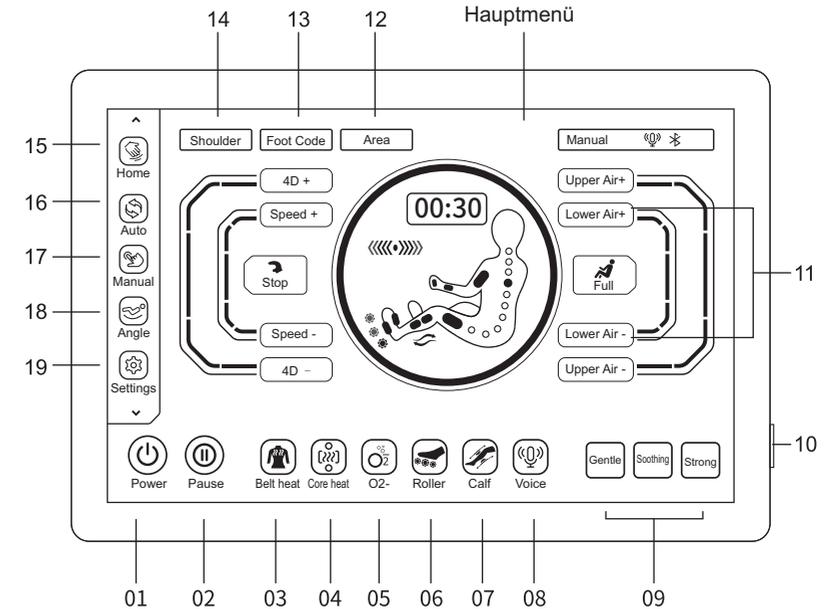

01. Ein/Aus: Ein-/Ausschalten der Massagesesselfunktionen
02. Pause: Pausierung oder Fortsetzung der Massage
03. Heizung - Weste Ein-/Ausschalten der Heizfunktion
04. Heizung - Massagekern Ein-/Ausschalten der Heizfunktion im Massagearmkern
05. O2-Ionisator: Ein-/Ausschalten der Luftionisierungsfunktion
06. Fußrollenmassage: Ein-/Ausschalten der Fußrollenmassage
07. Wadenknetmassage: Ein-/Ausschalten der Wadenknetfunktion
08. Sprachsteuerung: Ein-/Ausschalten der Sprachsteuerung
09. Massageintensität: Wählen Sie eine von drei automatischen Massageintensitäten (sanft/angenehm/stark).
10. Ein/Aus: Ein-/Ausschalten des Massagesessels
11. Intensitätseinstellung der Luftdruckkissen-Massage - Unterkörperpartien: Druck der Luftdruckkissen erhöhen / verringern
12. Massagebereich: Wählen Sie den gewünschten Körperteil (nur bei manuellen Programmen)
13. Fußgröße: Wählen Sie die richtige Fußgröße.
14. Armposition einstellen: Stellen Sie die gewünschte Armposition ein und bestätigen Sie die Auswahl.


Aufbau des Massagesessels

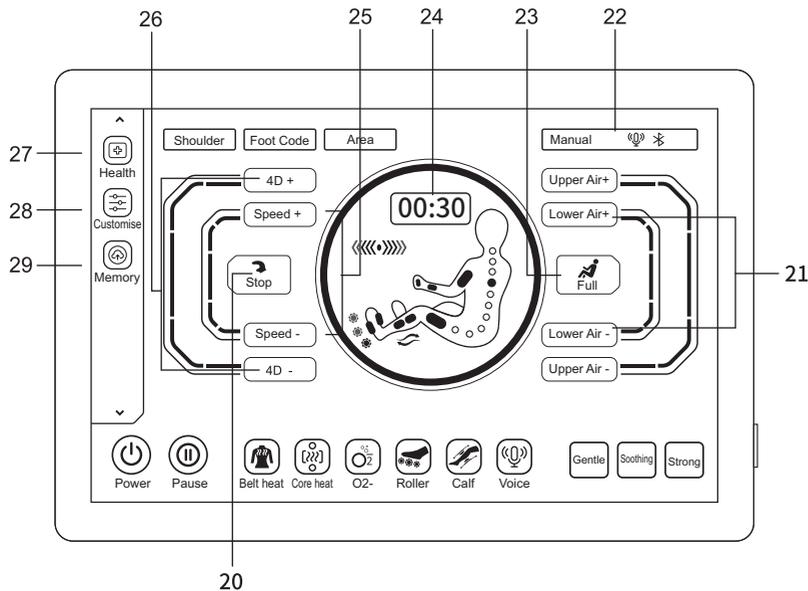

15. Hauptbildschirm: Eingabetaste, um die aktuellen Einstellungen des Massagesessels anzuzeigen.
16. Automatikprogramme: Eingabetaste, um ein automatisches Massageprogramm auszuwählen.
17. Manuelle Funktionen: Eingabetaste, um manuelle Massagefunktionen einzustellen.
18. Position: Eingabetaste, um die Liegeposition des Massagesessels einzustellen.
19. Einstellungen: Aufrufen des Einstellungsmenüs
20. Massagetechniken: Wählen Sie die Massagetechnik aus
21. Intensitätseinstellung der Luftdruckkissen-Massage - Oberkörperpartien: Druck der Luftdruckkissen erhöhen / verringern.
22. Aktueller Status: Anzeigen der Informationen zum aktuellen Status des Massageprogramms.
23. Luftdruckkissen-Massage: Wählen Sie Körperteile aus.
24. Zeit: Stellen Sie die Massagedauer ein.
25. Massagegeschwindigkeit: Passen Sie die Massagegeschwindigkeit an.
26. 26.
- 4D-Massageintensität: Anpassung der Intensität der 4D-Massage.
- Gesundheitserkennung: Wählen Sie diese Option aus, um Gesundheitsparameter zu scannen.
28. Benutzereinstellungen.
29. Speicher.

Aufbau des Massagesessels

Beschreibung der Schnellwahl-tasten an der Armlehne

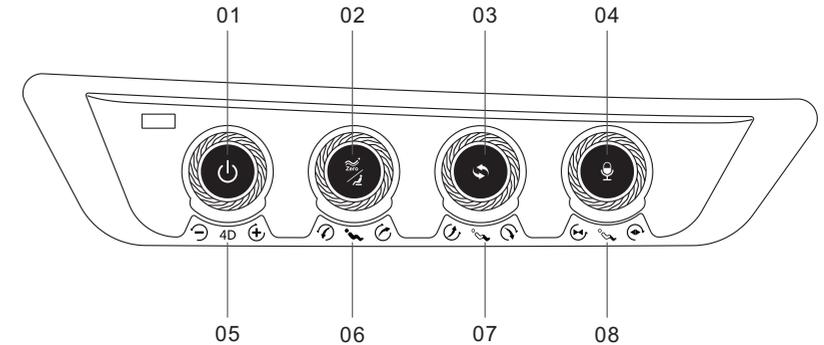


01. Ein-/Aus-schalten des Massagesessels.
- Halten Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Massagesessel ein- oder auszuschalten. Drücken Sie nach dem Einschalten der Massage kurz die Pause/Start-Taste.
02. Zero Gravity
- Drücken Sie diese Taste, um den Zero Gravity-Winkel (zwei Stufen) automatisch einzustellen. Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um in die Ausgangsposition zurückzukehren, die Fußstütze in die niedrigste Position abzusenken und die Rückenlehne in die höchste Position anzuheben.
03. Automatische Programme
- Automatisches Umschalten des Massageprogramms
04. Sprachsteuerung
- Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Sprachsteuerung ein-/auszuschalten. Drücken Sie die Taste kurz, um die Funktion zu aktivieren.
05. Einstellknopf für die 4D-Intensität
- Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um die 4D-Intensität zu erhöhen. Drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, um die 4D-Intensität zu verringern.
06. Einstellknopf für die Rückenlehne
- Drehen Sie den Knopf, um die Rückenlehne langsam anzuheben oder abzusenken.
 - Die Position der Fußstütze passt sich automatisch an.
07. Einstellknopf für die Fußstützenposition
- Drehen Sie den Knopf, um die Fußstütze langsam anzuheben oder abzusenken. Die Position der Fußstütze passt sich automatisch an,
 - wenn der Knopf nicht verwendet wird.
08. Einstellknopf für die Fußstützenabstand
- Drehen Sie den Knopf, um die Fußstütze langsam vom Körper weg oder näher heranzubewegen.
 - Der Mechanismus stoppt, wenn der Knopf nicht mehr bewegt wird.

Bedienungsanleitung


I. Massage starten

1. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste  auf dem integrierten Bedienfeld oder halten Sie die Ein-/Aus-Taste an der Armlehne gedrückt.
2. Wählen Sie nach dem Einschalten des Systems die Massageintensität mit einer der Tasten auf dem Bildschirm: Sanft , Wohltuend  oder Stark , um den Körper zu scannen und die Massage zu starten. Wenn die Massageintensität nicht innerhalb von 5 Minuten gewählt wird, schaltet sich der Massagesessel automatisch ab.

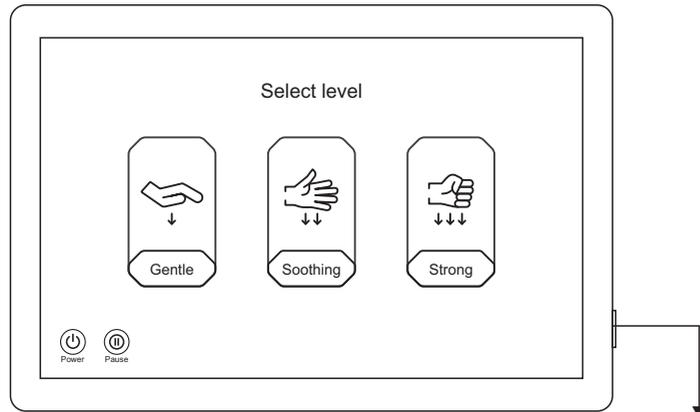


Drücken Sie diese Taste, um den Massagesessel einzuschalten.

3. Wählen Sie bei automatischer Einstellung der Liegeposition des Massagesessels das automatische Programm. Der Massagesessel wird dann in die Zero Gravity-Position gebracht. Warten Sie, bis die Anpassung abgeschlossen ist. Um einen Schritt zu überspringen, drücken Sie die Taste Überspringen , um direkt zum nächsten Schritt zu gelangen.

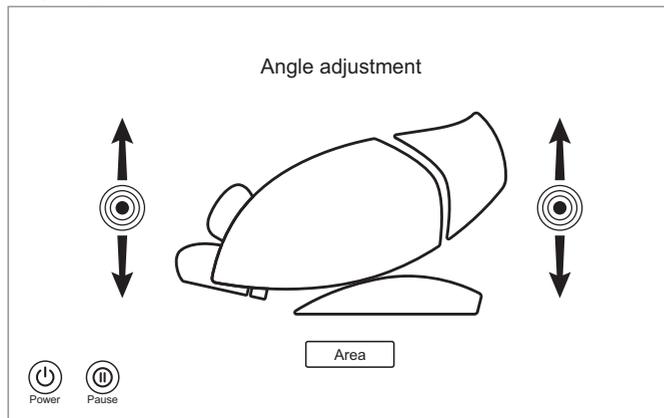


Bedienungsanleitung


4. Warten Sie, bis das Scannen der Körperform abgeschlossen ist, oder drücken Sie die Taste Überspringen , um den Scan zu überspringen und die Massage sofort zu beginnen.

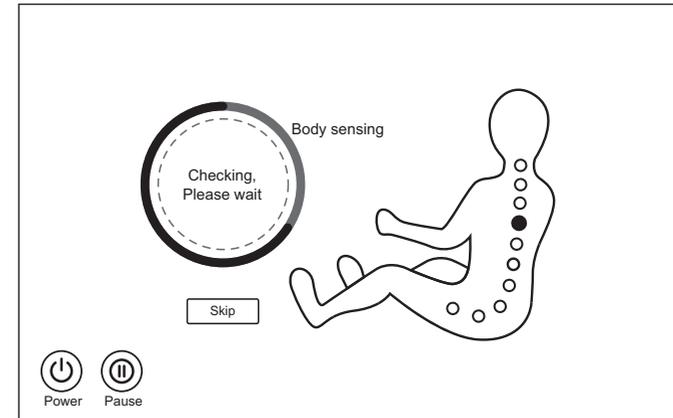

- Um die Position der Arme fein einzustellen, werden Sie nach dem Scannen der Körperform über die Fernbedienung oder einen Sprachbefehl daran erinnert, die Position der Arme fein einzustellen. Wenn die Massagearme in der richtigen Höhe anhalten, drücken Sie sofort die OK-Taste , um die Massage zu starten. Wenn nicht, verwenden Sie die Auf-  /Ab-Taste , um die Massagearme in die richtige Position zu bringen, und drücken Sie dann die OK-Taste , um die Massage zu starten. Wenn innerhalb von 20 Sekunden keine Aktion erfolgt, wird die Standardposition der Massagearme gewählt und die Massage beginnt.

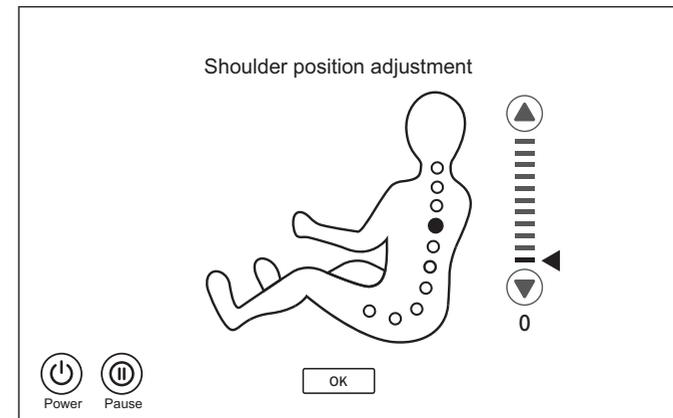

Bedienungsanleitung

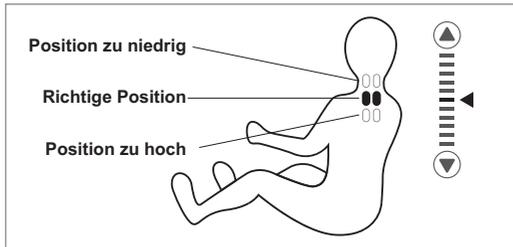

II. Pausenfunktion (nur bei eingeschaltetem Massageessel)

Wenn der Massageessel eingeschaltet ist, drücken Sie die Pausentaste , um die Massage zu unterbrechen. Alle Massagefunktionen werden angehalten. Drücken Sie anschließend die Pausentaste erneut , um den vorherigen Zustand wiederherzustellen. Hinweis: Im Pausemodus funktionieren keine Funktionen außer dem Ausschalten.

III. Automatikprogramm (Sie können diese Funktion nutzen, wenn der Massageessel eingeschaltet ist)

1. Automatische Programmauswahl

- (1) Wählen Sie die Taste Automatik  in der linken Menüleiste, um auf die Schnittstelle für die automatische Auswahl zuzugreifen.
- (2) Es stehen 20 Automatikprogramme zur Verfügung: Totale Entspannung, Stressabbau, Luftdruckkissen-Massage, Chinesische Massage, Thai-Massage, Meridianmassage, Nacken und Schulter, Taille, Taillen- und Gesäßformung, Bein- und Fußentspannung, Komfort, Fitness, Außergewöhnliches Vergnügen, Büroangestellter, Regeneration, Energieschub, Mittagspause, Gute Nacht, Erholung, Verjüngung.
- (3) Wählen Sie das gewünschte automatische Massageprogramm und klicken Sie, um die Massage zu starten.

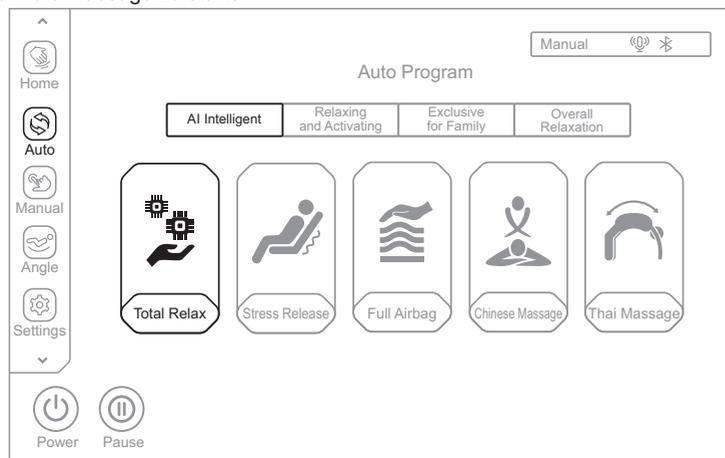


Diagramm zur Auswahl des automatischen Massageprogramms

Bedienungsanleitung

KI-Massageprogramme	
Funktion	Beschreibung
Totale Entspannung	Die oberen Massagearme massieren Nacken, Schultern und Fengchi-Akupunkturpunkte durch Kneten, Klopfen und Shiatsu-Techniken (Ganzkörpermassage). Der untere Massagearm massiert Taille und Hüften durch Kneten und Klopfen. Die beiden Massagearme wirken zusammen, um die Muskeln des gesamten Körpers zu entspannen und Müdigkeit zu lindern.
Stressabbau	Massage von Nacken, Schultern und Dazhui-Akupunkturpunkten, hauptsächlich durch Knetetechniken, um allgemeine Verspannungen zu lösen und Druck abzubauen.
Luftdruckkissen-Massage	Eine Ganzkörper-Kompressionsmassage (Druckmassage), kombiniert mit Fußrollenmassage und Wadenknetmassage. Mit der Wadendehnungsfunktion wirkt der mechanische Druck automatisch, als ob er durch den Druck der Hände ausgeübt würde.
Chinesische Massage	Eine Massage basierend auf der traditionellen chinesischen Medizin. Die 4D-Massage von Rücken und Taille regt die Durchblutung in Rücken und Taille an, beruhigt die Meridiane und löst Blockaden in Rücken und Taille.
Thai-Massage	Die Massage wird hauptsächlich mit Luftdruckkissen durchgeführt, die Beine, Hände, Schultern und Hüften und anschließend die Waden straffen. Die Kombination aus dem Neigungswinkel der Rückenlehne und dem Druck der Massagearme im Tailenbereich erzeugt einen Dehnungseffekt. Hinweis: Es gibt drei Dehnungsintensitätsstufen. Für eine sanfte Dehnung wählen Sie die niedrigste Massageintensitätsstufe aus. Für eine kräftige Dehnung wählen Sie die stärkste Massageintensitätsstufe aus.

Bedienungsanleitung

Massageprogramme (Entspannung und Stimulation)	
Funktion	Beschreibung
Meridianmassage	Massage von Schultern, Nacken, Rücken und Taille mit Knet-, Klopf- und Shiatsu-Techniken. Ziel ist die Aktivierung der Meridiane.
Nacken und Schultern	Massage von Nacken und Schultern hauptsächlich mit Knet- und Dehntechniken sowie des oberen Rückens mit therapeutischer Massage und Druck auf die Jianjing-Akupunkturpunkte. Lindert zervikale Spondylose und entspannt die Nacken- und Schultermuskulatur.
Taille	Taillenmassage mit Knet-, Klatsch- und Klopftechniken sowie 4D-Taillenmassage.
Taillen- und Gesäßformung	Die Massage beginnt am Gesäß und wird hauptsächlich durch Knet- und therapeutische Massagen durchgeführt. Anschließend gelangt das Massagegerät durch Klopfen und Kneten tief unter das Gesäß, um die Muskeln zu entspannen und die Hüften anzuheben. Geeignet für Frauen – entspannt die Muskulatur im Hüftbereich – und auch für Männer mit Prostataproblemen.
Bein- und Fußentspannung	Die Waden- und Fußmassage wird mit Luftdruckkissen durchgeführt und ist eine entspannende Kompressionsmassage. Gleichzeitig werden Schultern und Taille massiert, hauptsächlich mit Knet- und Klopftechniken.

Bedienungsanleitung

Massageprogramme (Familienprogramme)	
Funktion	Beschreibung
Komfort	Lindert Müdigkeit, regt die Durchblutung an und ermöglicht Stressabbau durch eine Tiefenmassage mit Knet- und Klopftechniken, einzeln und kombiniert.
Fitness	Eine Massage von Schultern, Nacken, Taille und Hüften mit Knet- und Shiatsu-Techniken. Entspannt Körper und Geist durch eine Ganzkörpermassage. Die Massageintensität ist sanft.
Außergewöhnliches Vergnügen	Eine sanfte Ganzkörpermassage mit Fußrollenmassage und Wadenknetmassage. Löst Verspannungen im Rückenbereich.
Büroangestellter	Eine Massage von Schultern, Nacken und Taille, hauptsächlich mit Knet-, Klopf- und einer Kombination aus beiden Techniken. Löst Verspannungen in Schultern und Nacken an und lindert durch die Tiefenmassage Muskelkater in der Lendenwirbelsäule. Geeignet für Menschen mit geistiger Arbeit und sitzender Tätigkeit.
Regeneration	Eine Tiefenmassage des gesamten Körpers mit Knet-, Klopf- und Shiatsu-Techniken. Regt die Durchblutung im gesamten Körper an und beugt der Bildung von Blutgerinnseln vor. Geeignet für Menschen, die viel Zeit zu Hause verbringen und nicht gerne ausgehen. Die Massageintensität ist mäßig sanft.


Bedienungsanleitung

Massageprogramme (Entspannung pur)	
Funktion	Beschreibung
Energieschub	Eine Tiefenmassage des gesamten Körpers mit Knet-, Klopf- und Shiatsu-Techniken. Ziel ist es, die Vitalität zu stärken und die Energie zu stimulieren.
Mittagspause	Eine Rücken- und Taillenmassage mit Knet- und Klopftechniken, gefolgt von Druck auf Shenyu-Akupunkturpunkte. Ein Energieschub für die nächste Hälfte des Arbeitstages.
Gute Nacht	Eine Schulter-, Nacken-, Rücken- und Taillenmassage mit Knettechniken, therapeutischer Massage und Druck auf Fengchi- und Shenyu-Akupunkturpunkte. Ziel ist es, das Einschlafen zu erleichtern und die Qualität des Schlafs zu verbessern.
Erholung	Eine Schulter-, Nacken-, Rücken- und Taillenmassage mit Knet-, 4D-Knet- und Shiatsu-Techniken. Ermöglicht es Ihnen, durch Tiefenmassage ein hohes Maß an körperlicher und geistiger Harmonie zu erreichen. Die Massageintensität ist sanft.
Verjüngung	Eine Massage des Rückens und der Taille, hauptsächlich durch Knet- und Klopftechniken, um die Blutzirkulation anzuregen, lokale Muskelschmerzen zu beseitigen, die Ausscheidung von Milchsäure zu beschleunigen und die Vitalität zu fördern.

Bedienungsanleitung

IV. Manuelles Programm (bitte verwenden Sie diese Funktion nur nach dem Einschalten des Geräts)

1. Auswählen des manuellen Programms Wählen Sie die Fernbedienungstaste  in der linken Menüleiste aus und klicken Sie darauf, um das Fernbedienungs Menü aufzurufen und die Massagetechnik, den Massagebereich, die 4D-Intensität, die Einstellung des Massagearms, die Massagebreite, die Massagegeschwindigkeit, die Intensität der Luftdruckkissen-Massage und andere Funktionen auszuwählen. (1). Im Menü Massagetechnik stehen insgesamt 17 Optionen zur Verfügung, darunter Kneten, Klatschen I, Klatschen II, Kneten und Klatschen, Fingerdruck I, Fingerdruck II, Schultergriff, 4DI, 4DII, 4DIII und 4DIV. (Hinweis: Durch Klicken auf die Tasten „Pfeil nach links <“ und Pfeil nach rechts >“ im Menü „Manuelles Programm“ können Sie die Liste nach links und rechts scrollen, um weitere Massagetechniken anzuzeigen).

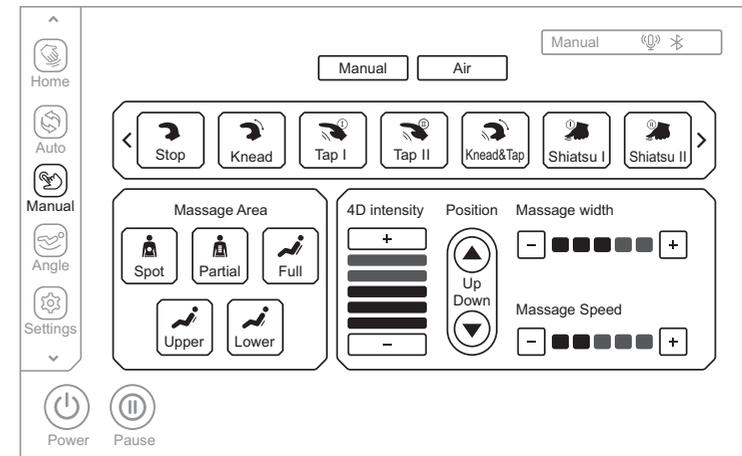


Manuelles Programm - Diagramm zur Auswahl der Technik

Funktion	Einstellungen der Massagearme	
4D I 	Geschwindigkeit und Kraft.	Geschwindigkeitseinstellung in fünf Stufen
4D II 	Geschwindigkeit und Kraft.	
4D III 	Geschwindigkeit, Breite und Kraft.	Breiteinstellung in fünf Stufen
4D IV 	Geschwindigkeit, Breite und Kraft.	Intensitätseinstellung in fünf Stufen

Bedienungsanleitung


Funktion	Einstellungen der Massagearme	
Stopp	Drücken Sie diese Taste, um ohne Technik zu massieren.	
Kneten	Geschwindigkeit und Intensität können eingestellt werden.	Geschwindigkeitseinstellung in fünf Stufen Breiteneinstellung in fünf Stufen Intensitätseinstellung in fünf Stufen
Klatschen I	Geschwindigkeit, Breite und Intensität können eingestellt werden.	
Klatschen II	Geschwindigkeit, Breite und Intensität können eingestellt werden.	
Kneten und Klopfen	Geschwindigkeit und Intensität können eingestellt werden.	
Shiatsu I	Geschwindigkeit, Breite und Intensität können eingestellt werden.	
Shiatsu II	Geschwindigkeit, Breite und Intensität können eingestellt werden.	
Greifen	Geschwindigkeit und Intensität können eingestellt werden.	

Hinweis: Im "Home" -Interface, Sie können auch auf die Hauptbildschirm-Taste  klicken und Stopp auswählen. Im angezeigten Fenster können Sie die gewünschte Massagetechnik auswählen (so können Sie die Massagetechnik schneller ändern).

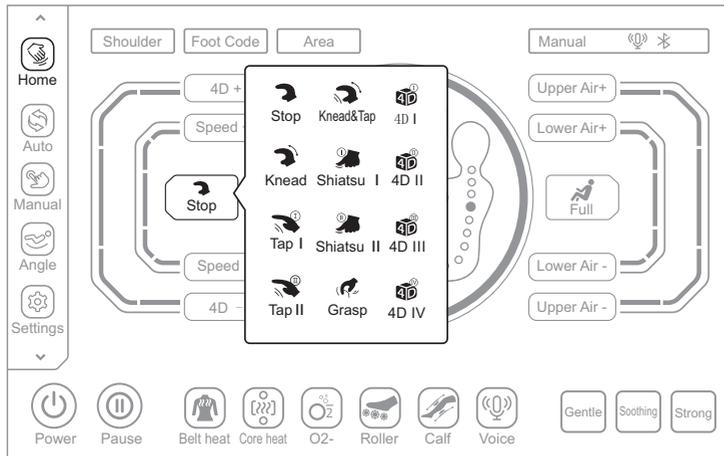

Bedienungsanleitung

2. Das Massagebereichsmenü enthält fünf Optionen: Einzelbereichsmassage, Sektionale Massage, Ganzkörpermassage, Oberkörpermassage und Unterkörpermassage. Wählen Sie den gewünschten Massagebereich.

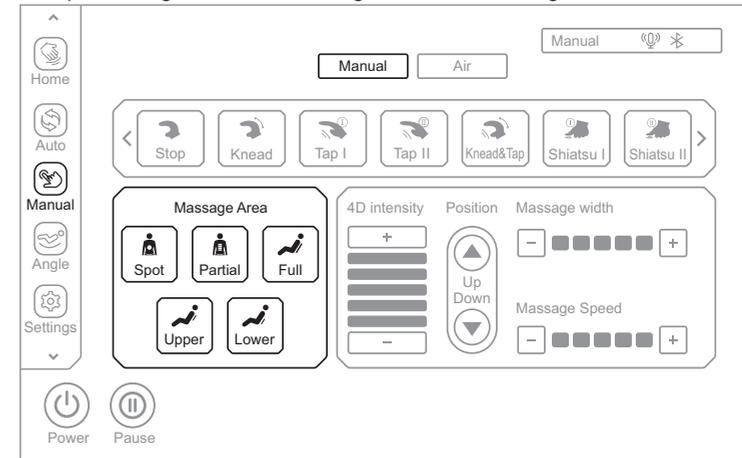


Manuelles Programm – Diagramm zur Auswahl des Massagebereichs

Taste	Beschreibung
	Einzelbereichsmassage an einer festen Position.
	Sektionale Massage in einem kleinen Bereich in beide Richtungen.
	Ganzrückenmassage in beide Richtungen.
	Oberrückenmassage in beide Richtungen.
	Unterrückenmassage in beide Richtungen.


Hinweis: Durch Klicken auf das „Hauptmenü“  können Sie auch über die Schaltfläche „Bereich Area“ den entsprechenden Massagebereich im integrierten Bedienfeld auswählen (so können Sie schneller zwischen den Massagebereichen auf dem aktuellen Bildschirm wechseln – Massagebereich).

Bedienungsanleitung

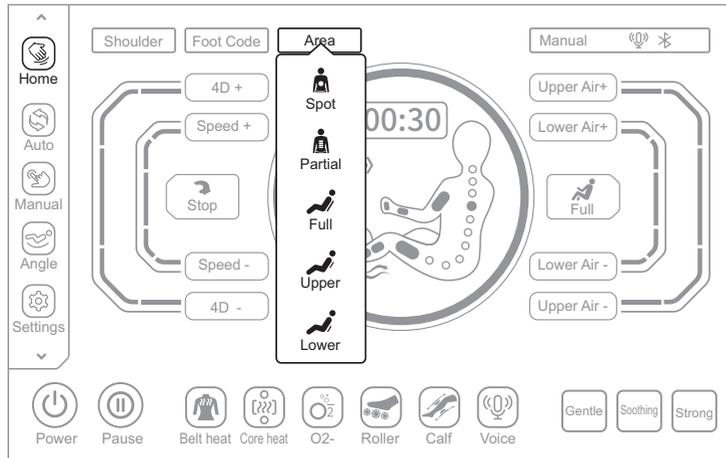


Aktueller Bildschirm – Diagramm zur Auswahl des Massagebereichs

3. Im 4D-Intensitätsmenü können Sie die Intensität der 4D-Massage einstellen. Es stehen 5 Stufen zur Auswahl, wobei 1 die schwächste und 5 die stärkste ist. Je höher die Intensität der 4D-Massage, desto stärker ist der Druck der Massagearme und desto intensiver ist die Massage. Die Intensität der 4D-Massage wird mit den Plus **+** und Minus **-** Tasten geändert.

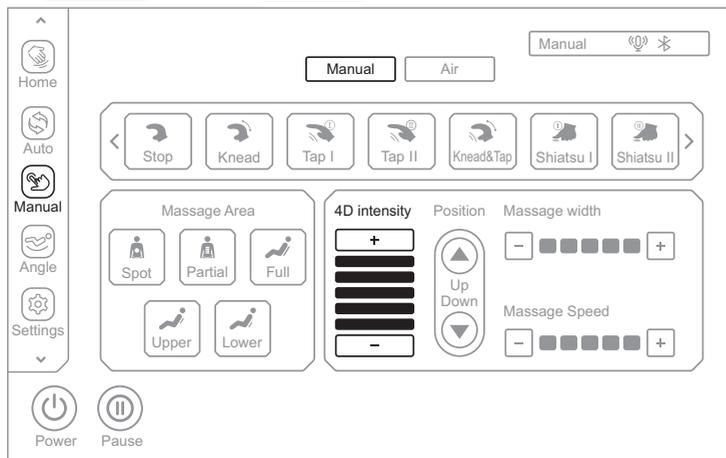


Manuelles Programm – Diagramm zur Einstellung der 4D-Massageintensität

Bedienungsanleitung

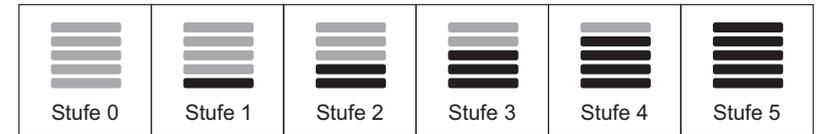


Taste	Beschreibung
+	Drücken Sie diese Taste, um die Intensität der 4D-Massage zu erhöhen (einstellbar von 1 bis 5).
-	Drücken Sie diese Taste, um die Intensität der 4D-Massage zu verringern (einstellbar von 1 bis 5).

Hinweis: Auf dem aktuellen Bildschirm können Sie auch 4D-Intensität **4D +** oder 4D-Intensität **4D -** auswählen, um die Intensität der 4D-Massage anzupassen. (So können Sie die Intensität der 4D-Massage im aktuellen Bildschirm des manuellen Programms – 4D-Intensität – schneller ändern.)

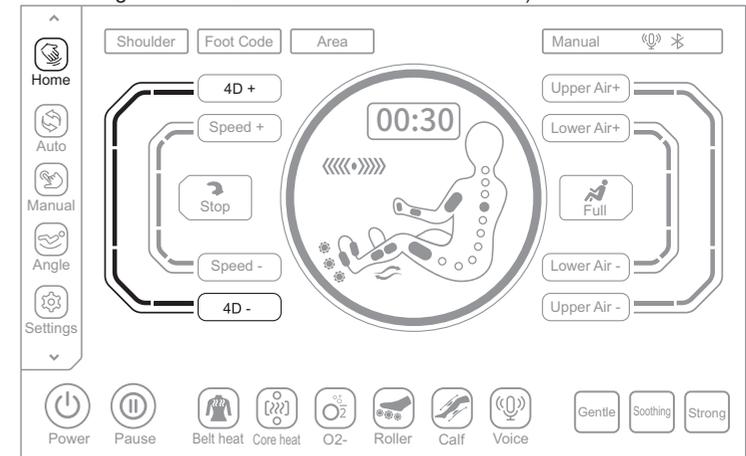


Aktueller Status – Manuelles Programm, 4D-Intensität

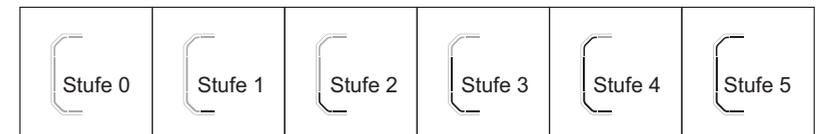

Taste	Beschreibung
4D +	Drücken Sie diese Taste, um die Intensität der 4D-Massage zu erhöhen (einstellbar von 1 bis 5).
4D -	Drücken Sie diese Taste, um die Intensität der 4D-Massage zu verringern (einstellbar von 1 bis 5).


Bedienungsanleitung

4. Für die Einzelbereich- und sektionale Massage stellen Sie den Manipulator mit den Pfeiltasten nach oben ▲ oder unten ▼, um die Position des Massagegeräts durch Bewegen nach oben oder unten anzupassen.

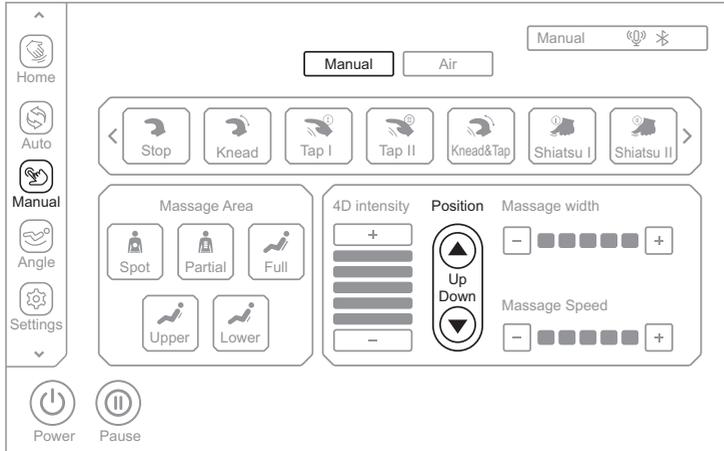

Manuelles Programm – Diagramm zur Einstellung der Massagegerätposition


5. Wie in der Abbildung unten dargestellt, wählen Sie zur Einstellung der Massagebreite die Option Massagebreite.

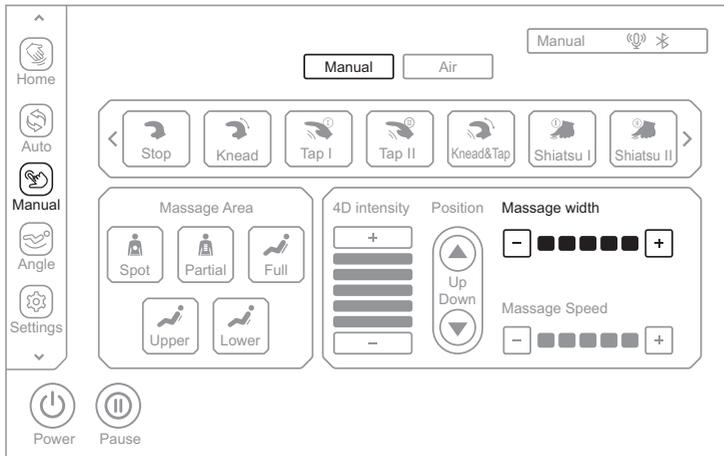

Manuelles Programm – Diagramm zur Einstellung der Massagebreite


Bedienungsanleitung

- (1). Die Breite kann nur im Fernbedienungsmodus eingestellt werden, wenn Sie eine Massagetechnik oder einen Massagebereich auswählen.
- (2). Die Massagebreite ist von 1 bis 5 einstellbar, wobei 1 die schmalste und 5 die breiteste Stufe ist. Verwenden Sie folgende Massagetechniken: Klatschen I, Klatschen II, Fingerdruck I, Fingerdruck II, 4D III und 4D IV.

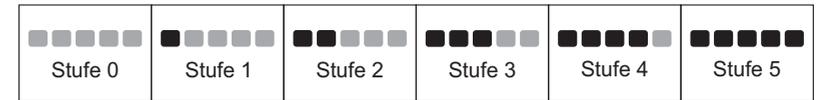


Taste	Beschreibung
+	Drücken Sie diese Taste, um die Breite der 4D-Massage zu erhöhen (einstellbar von 1 bis 5).
-	Drücken Sie diese Taste, um die Breite der 4D-Massage zu verringern (einstellbar von 1 bis 5).

6. Wie in der Abbildung unten dargestellt, wählen Sie zur Einstellung der Massagegeschwindigkeit die Option Massagegeschwindigkeit.

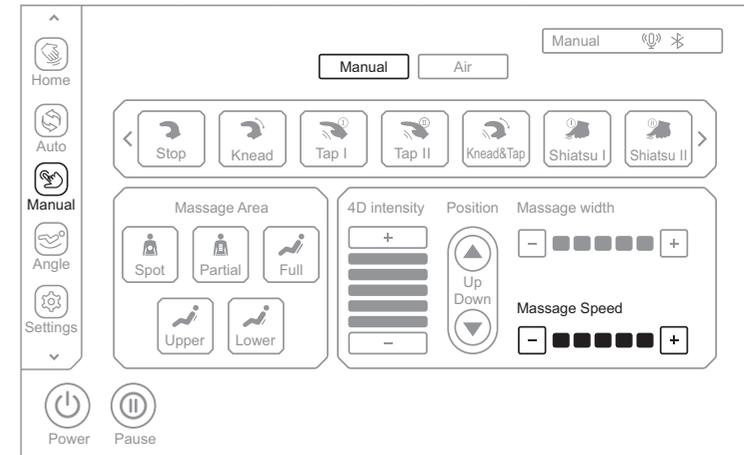

Manuelles Programm – Diagramm zur Einstellung der Massagegeschwindigkeit


- (1). Die Geschwindigkeit kann nur im manuellen Modus eingestellt werden, wenn Sie eine Massagetechnik oder -position auswählen.
- (2). Die Massagegeschwindigkeit ist von 1 bis 5 einstellbar, wobei 1 die schnellste und 5 die langsamste Stufe ist. Nach Beendigung der Massagetechnik kann die Geschwindigkeit nicht mehr angepasst werden.

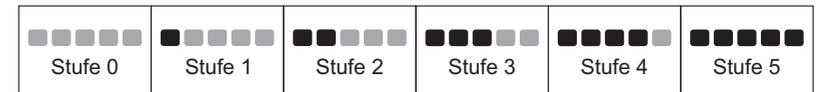


Bedienungsanleitung

Taste	Beschreibung
	Drücken Sie diese Taste, um die Massagegeschwindigkeit zu erhöhen (einstellbar von 1 bis 5).
	Drücken Sie diese Taste, um die Massagegeschwindigkeit zu verringern (einstellbar von 1 bis 5).

Hinweis: Sie können die Massagegeschwindigkeit auch über die Schaltflächen + Geschwindigkeit oder - Geschwindigkeit dem aktuellen Bildschirm anpassen

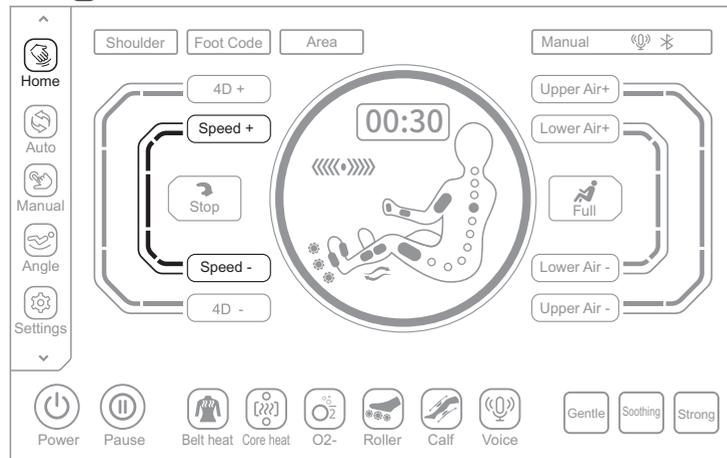


Aktueller Bildschirm – Diagramm zur Einstellung der Massagegeschwindigkeit

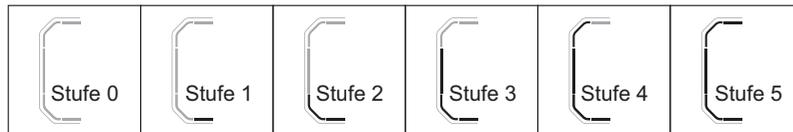

Taste	Beschreibung
	Drücken Sie diese Taste, um die Massagegeschwindigkeit zu erhöhen (einstellbar von 1 bis 5).
	Drücken Sie diese Taste, um die Massagegeschwindigkeit zu verringern (einstellbar von 1 bis 5).

Bedienungsanleitung

7. Für die Luftdruckkissen-Massage, wie in der Abbildung unten dargestellt, müssen Sie das Luftdruckkissen-Massage-Menü aufrufen und die Luftdruckkissen-Massage auswählen. Diese Massageart umfasst Oberkörper-, Unterkörper- und Ganzkörpermassage. Die Luftdruckkissen-Massagefunktion ist gesperrt, wenn keiner der oben genannten Modi aktiv ist.

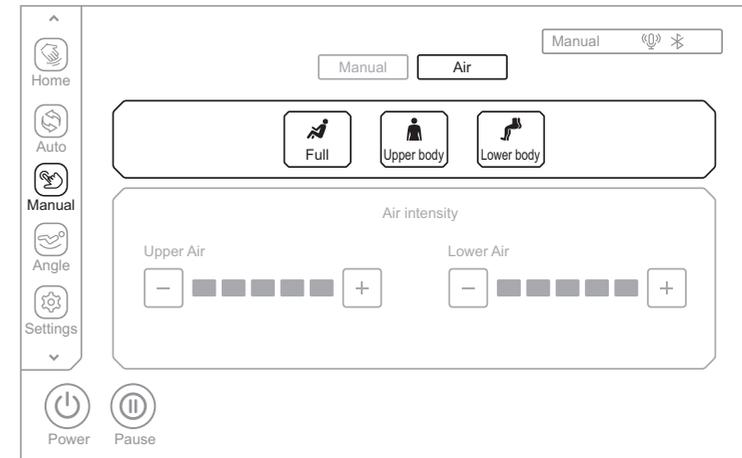


Manuelles Programm – Diagramm zur Luftdruckkissen-Massage

Taste	Beschreibung
	Drücken Sie diese Taste, um die Ganzkörper-Luftdruckkissen-Massagefunktion ein-/auszuschalten.
	Drücken Sie diese Taste, um die Oberkörper-Luftdruckkissen-Massagefunktion ein-/auszuschalten.
	Drücken Sie diese Taste, um die Unterkörper-Luftdruckkissen-Massagefunktion ein-/auszuschalten.




Bedienungsanleitung

Hinweis: Sie können auf dem aktuellen Bildschirm auch die Luftdruckkissen-Massagetaste „Ganz“ drücken und anschließend den entsprechenden Bereich im integrierten Bedienfeld auswählen . (So können Sie den Luftdruckkissen-Massagebereich im manuellen Programm schneller auswählen.)

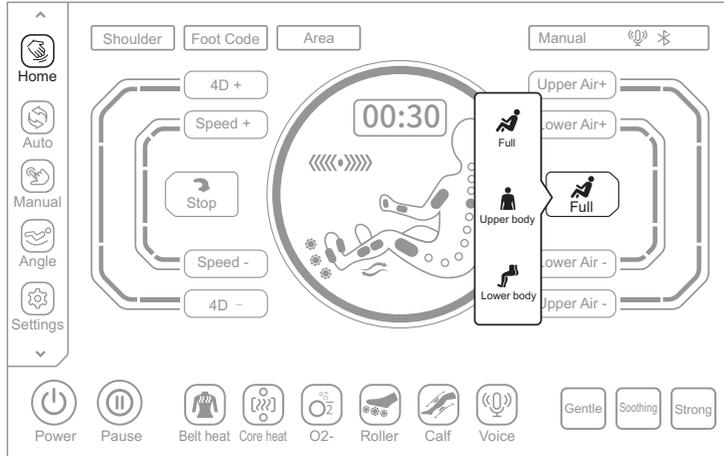


Aktueller Bildschirm – Diagramm zur Einstellung der Luftdruckkissen-Massage

8. Um die Intensität der Massage einzustellen, aktivieren Sie die Luftdruckkissen-Massagefunktion und stellen die Intensität auf eine von 5 Stufen ein, wobei 1 die schwächste und 5 die stärkste ist.

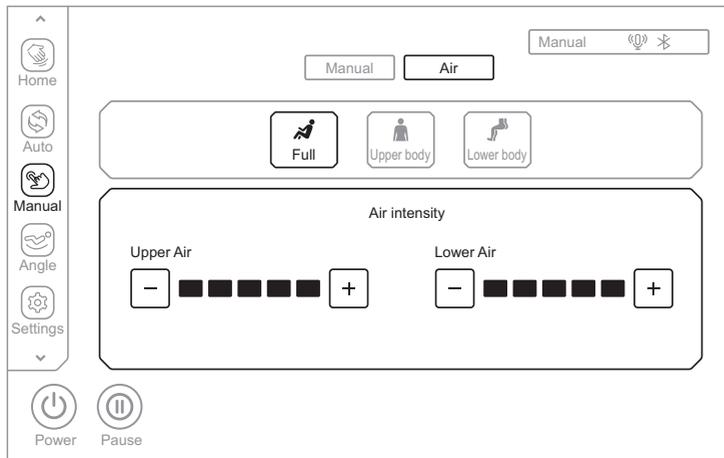


Bedienungsanleitung

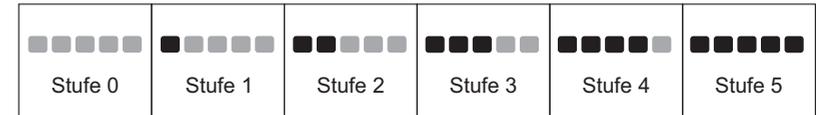


Taste	Beschreibung
	Drücken Sie diese Taste, um die Intensität der Luftdruckkissen-Massage zu erhöhen (einstellbar von 1 bis -5).
	Drücken Sie diese Taste, um die Intensität der Luftdruckkissen-Massage zu verringern (einstellbar von 1 bis -5).

Hinweis: Sie können auch die Intensität der Luftdruckkissen mit der Taste + oder - einstellen. kann auch die Taste für den unteren Körperluftdruck Lower Air oder die Taste für den unteren Körperluftdruck - Lower Air auswählen. Mit der Intensitätstaste auf dem Hauptbildschirm können Sie die Intensität der Luftdruckkissen-Massage in 5 Stufen einstellen.

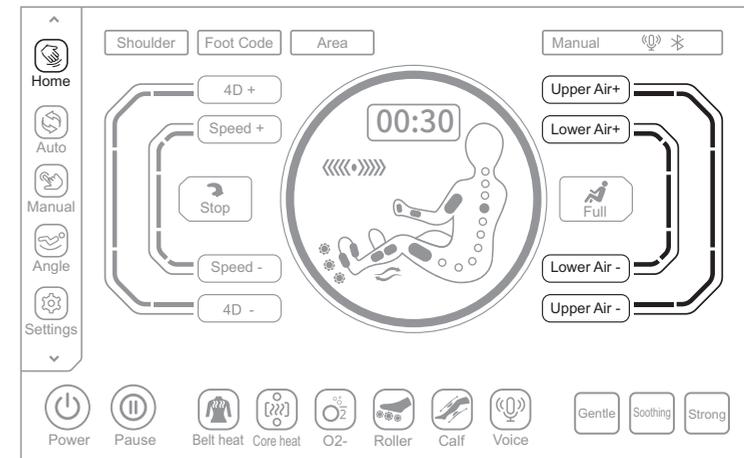

Aktueller Bildschirm – Diagramm zur Einstellung der Luftdruckkissen-Massage

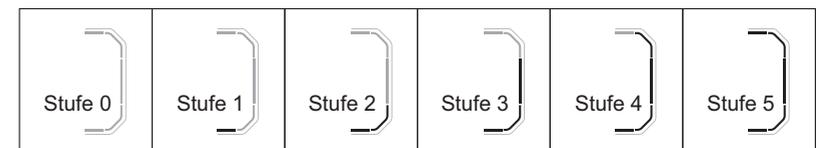

Bedienungsanleitung

Taste	Beschreibung
	Drücken Sie diese Taste, um die Luftintensität von 1 bis 5 zu erhöhen.
	Drücken Sie diese Taste, um die Luftintensität von 1 bis 5 zu verringern.

V. Einstellung der Liegeposition des Massagesessels

Klicken Sie in der Menüleiste links auf die Schaltfläche „Position“ , um die Liegeposition einzustellen. Der Einstellbereich umfasst das Ausfahren und Neigen der Fußstütze, das Anheben/Absenken der Rückenlehne, Zero Gravity I, Zero Gravity II und weitere Massagefunktionen.

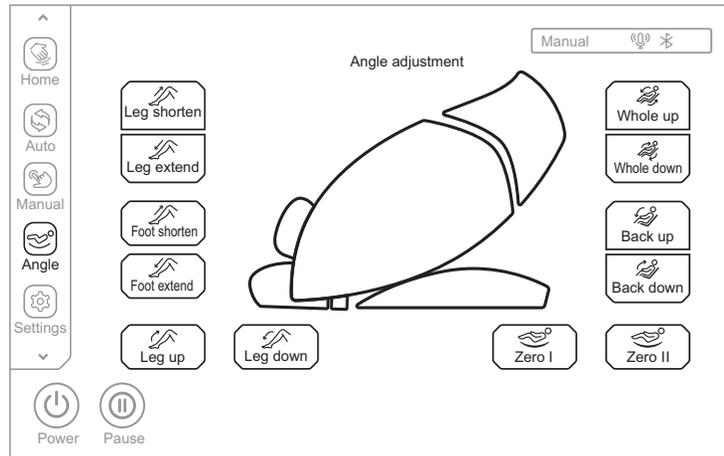


Diagramm zur Einstellung der Liegeposition des Massagesessels

1. Zero Gravity-Position einstellen

Taste	Beschreibung
 Zero I	Zero Gravity I-Taste: Automatische Einstellung der Beineinheit und der Rückenlehne in die Zero Gravity I-Position.
 Zero II	Zero Gravity II-Taste: Automatische Einstellung der Beineinheit und der Rückenlehne in die Zero Gravity I-Position.

Bedienungsanleitung

2. Einstellung der Fußstützenverlängerung/-verkürzung – Fußbereich

Taste	Beschreibung
 Fußstützenverkürzung	Taste zur Fußstützenverkürzung: Ermöglicht die Feineinstellung der Fußstützenverkürzung - Fußbereich. Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Fußstütze langsam nach oben zu bewegen. Die Bewegung stoppt, sobald Sie die Taste loslassen.
 Fußstützenverlängerung	Taste zur Fußstützenverlängerung: Ermöglicht die Feineinstellung der Fußstützenverlängerung - Fußbereich. Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Fußstütze langsam nach unten zu bewegen. Die Bewegung stoppt, sobald Sie die Taste loslassen.

3. Einstellung der Fußstützenanheben/-absenken

Taste	Beschreibung
 Fußstützenverkürzung	Taste zur Fußstützenverkürzung: Ermöglicht die Feineinstellung der Fußstützenverkürzung. Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Fußstütze langsam nach oben zu bewegen. Die Bewegung stoppt, sobald Sie die Taste loslassen.
 Fußstützenverlängerung	Taste zur Fußstützenverlängerung: Ermöglicht die Feineinstellung der Fußstützenverlängerung. Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Fußstütze langsam nach unten zu bewegen. Die Bewegung stoppt, sobald Sie die Taste loslassen.

4. Einstellung der Fußstützenanheben/-absenken

Taste	Beschreibung
 Fußstützenanheben	Taste zum Fußstützenanheben: Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Fußstütze langsam anzuheben. Lassen Sie sie los, um den Vorgang zu stoppen. Nach dem Anheben erkennt das Modul automatisch die Fußlänge.
 Fußstützenabsenken	Taste zum Fußstützenabsenken: Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Fußstütze langsam abzusenken. Lassen Sie sie los, um den Vorgang zu stoppen. Nach dem Absenken erkennt das Modul automatisch die Fußlänge.

5. Einstellung der Massagesesselposition

Taste	Beschreibung
 Alles anheben	Taste „Alles anheben“: Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Rückenlehne langsam anzuheben und gleichzeitig die Fußstütze langsam abzusenken; lassen Sie sie dann los, um das Anheben der Rückenlehne oder das Absenken der Fußstütze zu stoppen; wenn das Anheben abgeschlossen ist, erkennt die Fußstütze automatisch die Körpergröße.
 Alles absenken	Taste „Alles absenken“: Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Rückenlehne langsam abzusenken und gleichzeitig die Fußstütze langsam anzuheben, und lassen Sie sie dann los, um das Absenken der Rückenlehne oder das Anheben der Fußstütze zu stoppen; wenn das Absenken abgeschlossen ist, erkennt die Fußstütze automatisch die Körpergröße.


Bedienungsanleitung

6. Einstellung der Rückenlehne

Taste	Beschreibung
 Rückenlehnenanheben	Nach oben: Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Rückenlehne langsam anzuheben, und lassen Sie sie los, um das Anheben zu beenden.
 Rückenlehnenabsenken	Nach unten: Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Rückenlehne langsam abzusenken, und lassen Sie sie los, um das Absenken zu beenden.


VI. Einstellungen (Verwenden Sie diese Funktion nur, wenn das Gerät eingeschaltet ist)

- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Einstellungen“  in der Menüleiste auf der linken Seite des Bildschirms, um das Einstellungsfeld zu öffnen, in dem Sie die Seriennummer des Geräts, die Softwareversionsnummer, den ID-Code und die Systemversion sehen können. In diesem Menü können Sie die Sprache auswählen.
- Gerätemodell, Softwareversion, Seriennummer und Betriebssystemversion zeigen die Geräteinformationen an.
- Bluetooth (Bedienungsanleitung für Bluetooth-Lautsprecher)
Klicken Sie auf das Bluetooth-Symbol, um die Bluetooth-Funktion ein- oder auszuschalten. Nachdem das Bluetooth-fähige Quellgerät (z. B. Mobiltelefon, Tablet-MID usw.) mit dem Bluetooth-Modul des Massagesessels gekoppelt und verbunden wurde, kann die auf dem Quellgerät abgespielte Musik drahtlos per Bluetooth an das Audiosystem des Massagesessels übertragen werden, damit Sie während der Sitzung Musik hören können. Öffnen Sie das Hauptmenü des Smartgeräts. Öffnen Sie „Einstellungen“ und wählen Sie „Bluetooth“. Öffnen Sie „Bluetooth“, und das Gerät sucht automatisch nach einem neuen Bluetooth-Gerät („Search for a New Bluetooth Device“). Das Smartgerät findet die entsprechende Verbindung (z. B. IMCM-XXXX). Klicken Sie auf „Verbinden“. Wenn Sie gefragt werden, ob eine Kopplung mit dem Gerät erfolgen soll, wählen Sie einfach „Koppeln“, um die Kopplung abzuschließen. Schalten Sie „Musik“ auf Ihrem Smartgerät ein und wählen Sie ein Lied zum Anhören aus.

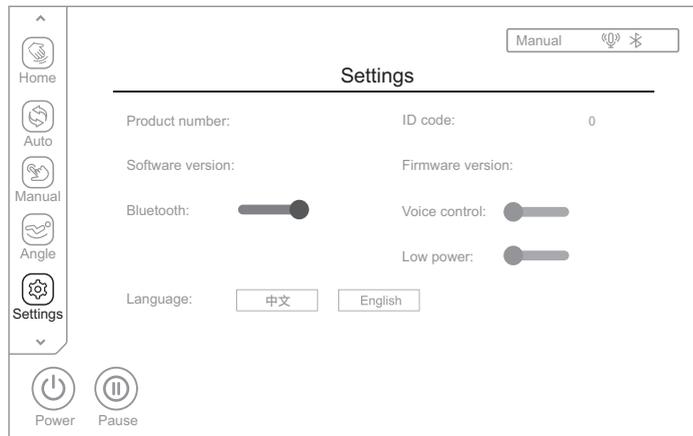

Bedienungsanleitung

- Sprachsteuerung: Klicken Sie auf den Schalter „Sprachsteuerung“, um die Sprachsteuerung ein-/auszuschalten. Nachdem die Sprachsteuerung aktiviert ist, können Sie den Massagesessel per Sprachbefehl steuern. Die Liste der Sprachbefehle finden Sie auf der nächsten Seite.

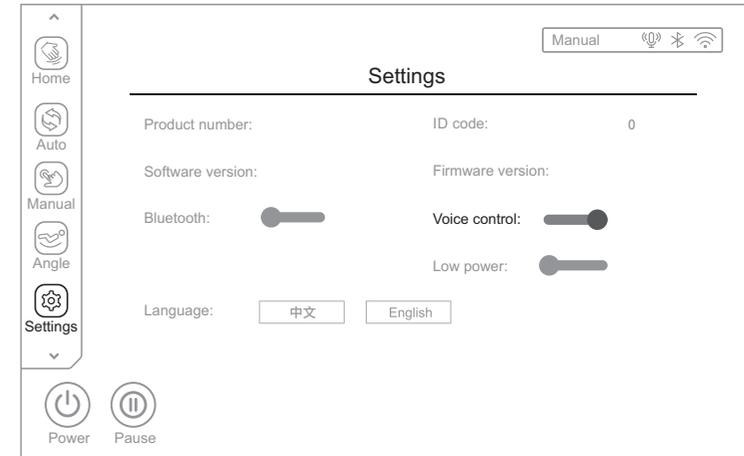

- Nach dem Einschalten des Massagesessels müssen Sie bestätigen, ob die Sprachsteuerung aktiviert ist (falls nicht, aktivieren Sie sie zunächst in den Einstellungen). Bei aktivierter Sprachsteuerung  können Sie die Sprachsteuerung auf der Fernbedienung drücken oder „Hi Alice“ oder „Hey Alice“ in den Lautsprecher sagen, um den Sprachassistenten zu starten. Wenn der Sprachassistent antwortet: „I am here“, können Sie den Massagesessel über die Sprachsteuerung steuern.
- Sie können auch die Taste „Sprachsteuerung“  auf dem Schnellwahlfeld in der Armlehne drücken, um den Sprachassistenten zu aktivieren, und diese Taste dann 3 Sekunden lang gedrückt halten, um ihn ein- oder auszuschalten.
- Nachdem Sie den Sprachassistenten aktiviert haben, sprechen Sie innerhalb von 6 Sekunden einen Befehl, um die Steuerung des Massagesessels zu starten. Wenn der Sprachassistent auf den Befehl reagiert, können Sie ihn weitersprechen.
Der Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Befehlen darf 6 Sekunden nicht überschreiten, andernfalls müssen Sie den Sprachassistenten erneut aktivieren. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Tabelle der Sprachbefehle: Hinweis: Bei der Verwendung der Sprachsteuerungsfunktion sollte die Sprechgeschwindigkeit nicht zu hoch sein und die Sprachbefehle sollten entsprechend dem Sprachsteuerungseintrag gegeben werden.

Bedienungsanleitung

Sprachsteuerung		
Befehl: "Hi Alice" oder "Hey Alice". Antwort: I am here.		
Nr.	Befehl	Antwort
1	Massage starten	Antwort: Ok, Massage on
2	Massage beenden	Antwort: Ok, Massage close
3	Totale Entspannung	Antwort: Ok, Total Relax
4	Energieschub	Antwort: Ok, Energy Boost
5	Gute Nacht	Antwort: Ok, Sweet Dream
6	Nacken und Schultern	Antwort: Ok, Neck & Shoulder Care
7	Mittagspause	Antwort: Ok, Lunch Break
8	Thai-Massage	Antwort: Ok, Thai Massage
9	Luftdruckkissen einschalten	Antwort: Ok, Open the air pressure
10	Luftdruckkissen ausschalten	Antwort: Ok, Close the air pressure
11	Rückenlehne anheben	Antwort: Ok, Up the seat position
12	Rückenlehne absenken	Antwort: Ok, Down the seat position
13	Massageprogramm ändern	Antwort: Ok, Change the other mode
14	leicht nach unten	Antwort: Ok, Go little down
15	leicht nach oben	Antwort: Ok, Go little up


Hinweis: Die Befehle 14 und 15 können erst nach Befehl 13 verwendet werden.

Bedienungsanleitung


4. Energiesparmodus aktivieren

Energiesparmodus aktiviert: Im Energiesparmodus können die Tastenkombinationen und die Sprachsteuerung der Armlehne nicht verwendet werden. Diese müssen im eingeschalteten Zustand verwendet werden.

Energiesparmodus deaktiviert: Die Tastenkombinationen und die Sprachsteuerung der Armlehne können auch im Standby-Modus verwendet werden.

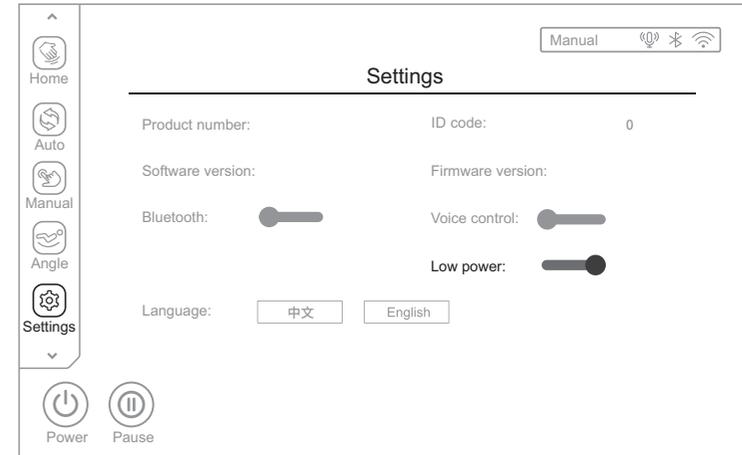

5. Sprachauswahl: Die Standardsprache ist Englisch. Polnisch und Chinesisch sind optional.

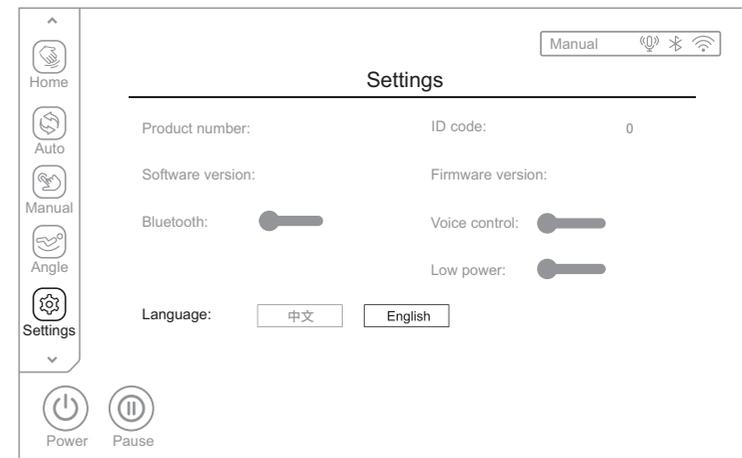


Bedienungsanleitung

VII. Gesundheitserkennung (Diese Funktion ist nur nach dem Einschalten des Geräts verfügbar.)

1. Gesundheitscheck startet Klicken Sie in der Menüleiste links auf „Gesundheit“ , um den Gesundheitserkennungsbildschirm zu öffnen. Drücken Sie die Schaltfläche  „Gesundheitserkennung starten“, um den Scanvorgang zu starten. Legen Sie anschließend Ihren Zeige- oder Mittelfinger vorsichtig auf den Sensor. Nach einigen Sekunden werden die aktuellen Daten zu Herzfrequenz, Sättigungsgrad (Sauerstoffgehalt im Blut) und Mikrozirkulation angezeigt. Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist.




Gesundheitserkennung

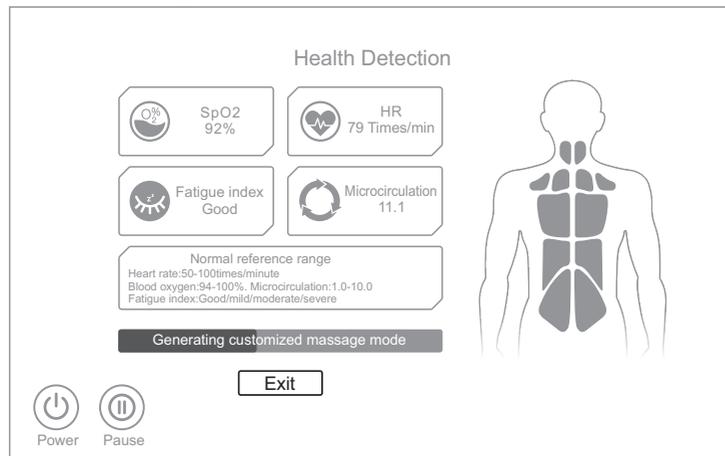

Bedienungsanleitung

2. Empfohlenes Programm Nach : Abschluss des Gesundheitsscans werden Herzfrequenz, Sättigung und Erschöpfungsgrad angezeigt. Sättigung bezeichnet die Sauerstoffkonzentration im Blut und liegt üblicherweise zwischen 95 % und 99 %. Der Erschöpfungsgrad wird in vier Stufen unterteilt: ausgeruht, leicht, mittel und stark. Abhängig von Ihrem Erschöpfungsgrad wird Ihnen ein Automatikprogramm empfohlen. Wählen Sie „Ja“, um das empfohlene Programm zu starten, oder „Nein“, um zur Massageart vor der Gesundheitserkennung zurückzukehren.

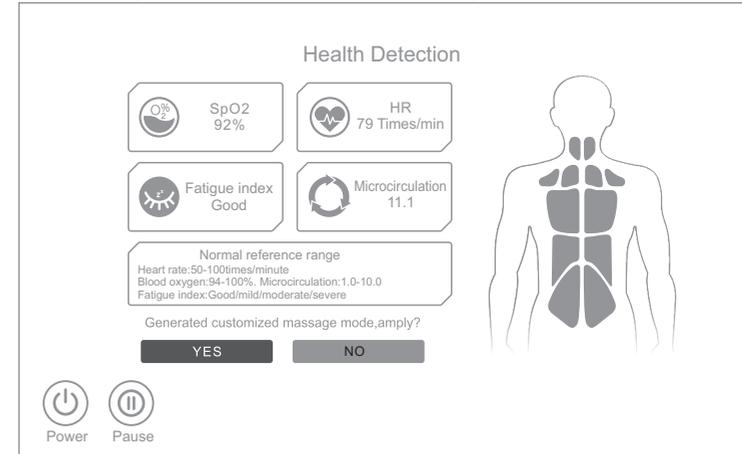


3. Keine gültigen Daten erkannt : Wenn die Daten nicht korrekt erkannt wurden, wird der Benutzer aufgefordert, die Erkennung erneut durchzuführen. Wählen Sie „Ja“, um die Gesundheitserkennung neu zu starten, oder „Nein“, um die Erkennung zu beenden und zur Massageart vor der Gesundheitserkennung zurückzukehren.



Bedienungsanleitung

4. Gesundheitserkennung beenden: Drücken Sie während der Gesundheitserkennung die **Exit** Taste „Beenden“, um die Erkennung zu beenden und zur Massageart vor der Gesundheitserkennung zurückzukehren.

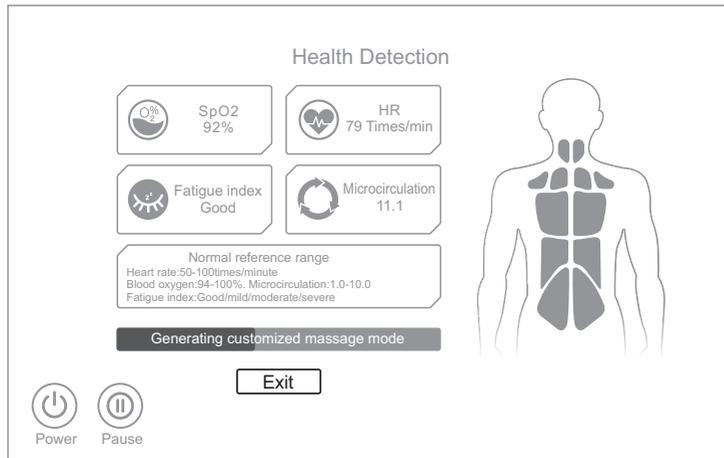

VIII. Persönliche Einstellungen (Diese Funktion können Sie nach dem Einschalten des Massagesessels nutzen)

Klicken Sie in der Menüleiste links auf dem Display auf „Persönlich“ , um das Menü „Persönliche Einstellungen“ aufzurufen. Wählen Sie für die Massage „Benutzer I“ oder „Benutzer II“ (nur wenn die entsprechenden Einstellungen zuvor festgelegt und gespeichert wurden).


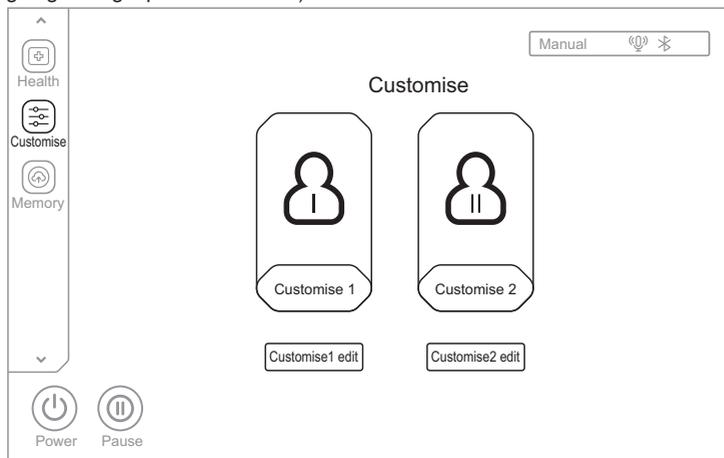


Diagramm zur persönlichen Einstellungen

Bedienungsanleitung


Wählen Sie „Benutzer 1“ oder „Benutzer 2“, um das Menü „Persönliche Einstellungen“ aufzurufen. Wählen Sie anschließend Ihre bevorzugte Massagetechnik (deren Symbol nach der Auswahl hervorgehoben wird) und wählen Sie Massagedauer, 4D-Intensität, Luftdruckkissen-Massage, Massagebreite, Massagegeschwindigkeit, Luftdruckkissen-Massageintensität, Heizung, Wadenmassage und weitere Funktionen. Klicken Sie anschließend auf „Speichern“, um die aktuellen Einstellungen als Benutzer 1 oder Benutzer 2 zu speichern. Nachdem die Benutzereinstellung erfolgreich gespeichert wurde, steht das Programm durch Anklicken der gespeicherten persönlichen Einstellungen sofort für die nächste Massage zur Verfügung.

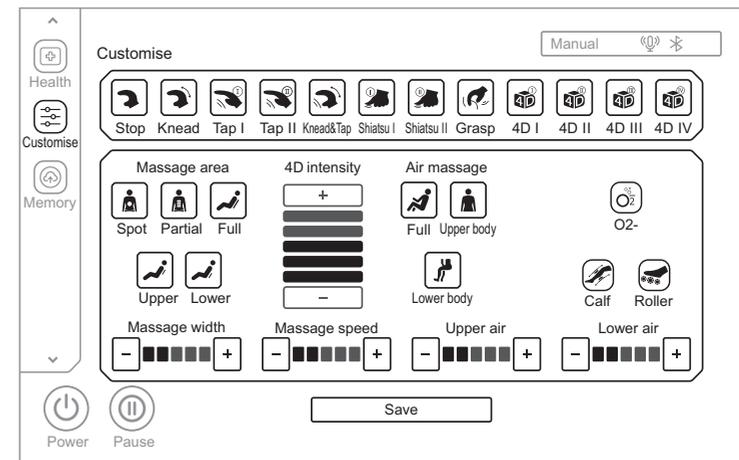

Bedienungsanleitung

IX. Speicher (Diese Funktion ist nach dem Einschalten des Massagesessels verfügbar)

Klicken Sie in der Menüleiste links auf dem Display auf „Speicher“ , um das Menü „Speichern der Massagefunktionen“ zu öffnen. Es bietet zwei Kategorien: „Massagefunktion speichern“ und „Massagefunktion laden“. Gespeichert: Gespeichert I, Gespeichert II und Gespeichert III. Massage auswählen: Auswahl I, Auswahl II und Auswahl III.

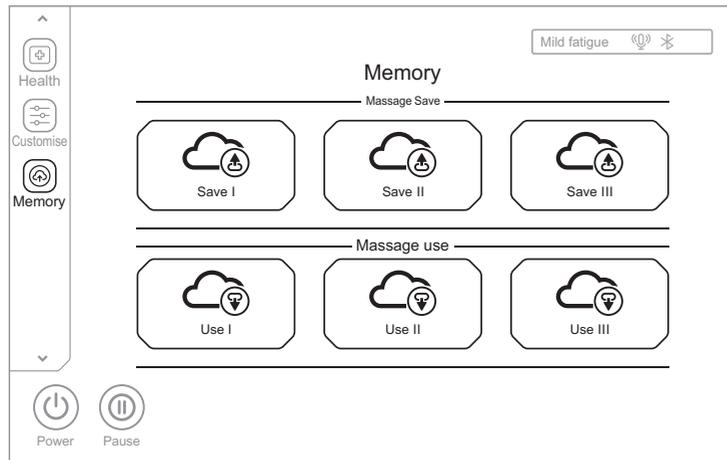


Taste	Beschreibung
	Gespeichert: Speichern des aktuellen Massageprogramms, einschließlich Automatikprogramm, Massagetechnik, Luftdruckkissen- und Intensitätseinstellungen, Fußstützen- und Rückenlehnenposition und -neigung sowie weiterer Massagefunktionen.
	Laden: Abrufen eines zuvor gespeicherten Massageprogramms, einschließlich Automatikprogramm, Massagetechnik, Luftdruckkissen- und Intensitätseinstellungen, Fußstützen- und Rückenlehnenposition und -neigung sowie weiterer Massagefunktionen.


Bedienungsanleitung

X. Weitere Funktionen (bitte verwenden Sie diese Funktion nach dem Einschalten des Stuhls)

Abrufen eines zuvor gespeicherten Massageprogramms , einschließlich Automatikprogramm, Massagetechnik, Luftdruckkissen- und Intensitätseinstellungen, Fußstützen- und Rückenlehnenposition und -neigung sowie weiterer Massagefunktionen. Nach 3 Minuten Heizfunktion  spüren Sie die Wärme.

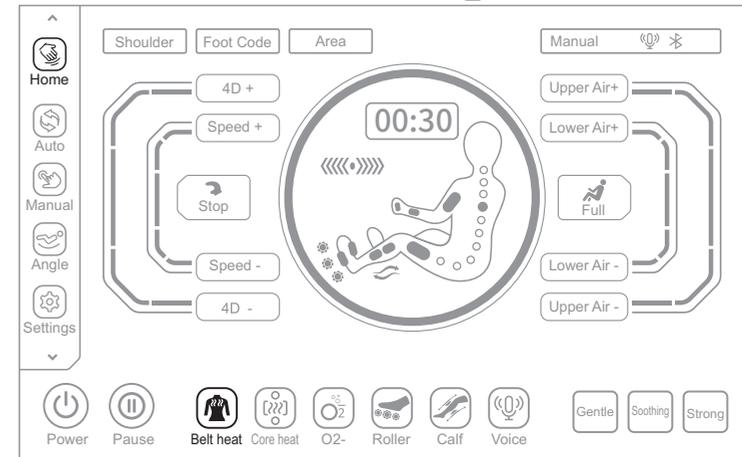


Wählen Sie im Hauptbildschirm die Schaltfläche „Heizung“ , um die mechanische Kernheizung (Jade-Heizung) ein- oder auszuschalten. Nach 3 Minuten Heizfunktion spüren Sie die Wärme.

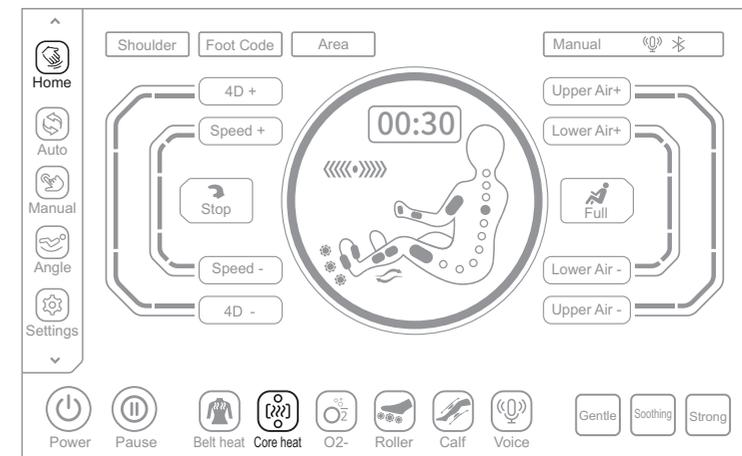


Bedienungsanleitung

Wählen Sie im Hauptbildschirm die Schaltfläche „O2-Ion“, um die Luftionisierungsfunktion ein- oder auszuschalten.

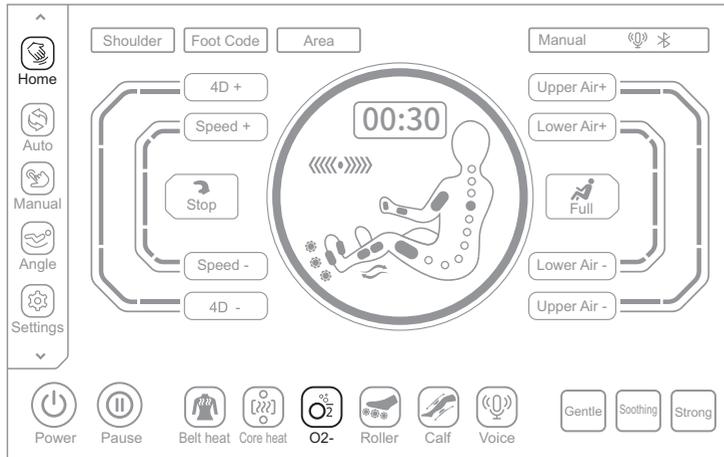


Klicken Sie im Hauptbildschirm auf die Schaltfläche „Roller“, um die Fußrollenmassage mit drei einstellbaren Geschwindigkeiten ein- oder auszuschalten. Ein Klick startet die Rollenmassage mit Geschwindigkeit 1, ein zweiter Klick erhöht die Massagegeschwindigkeit auf Stufe 2 und ein weiterer Klick führt zu Stufe 3 – der schnellsten. Ein vierter Klick schaltet die Fußmassagerollen aus. Diese Schaltfläche funktioniert wiederholt.

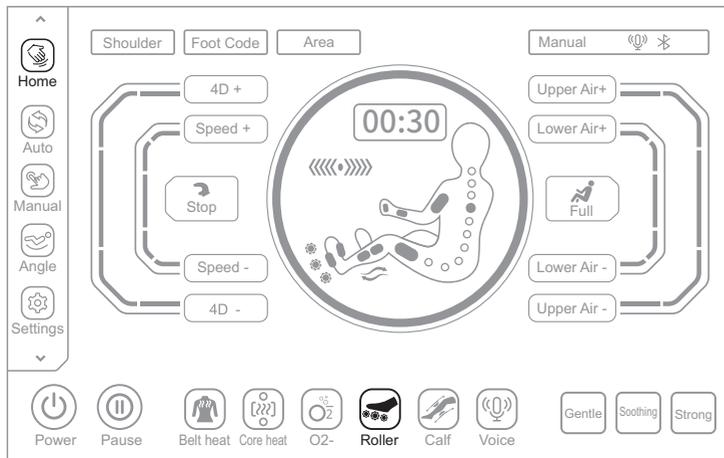


Bedienungsanleitung

Klicken Sie im Hauptbildschirm auf die Schaltfläche „Wadenmassage“, um die Wadenknetmassage ein- oder auszuschalten. Die Waden verfügen über Luftdruckkissen-Knet- und -Kompressionsysteme an der Innen- und Außenseite der Wade, die Verspannungen der Wadenmuskulatur durch langes Stehen lindern können.

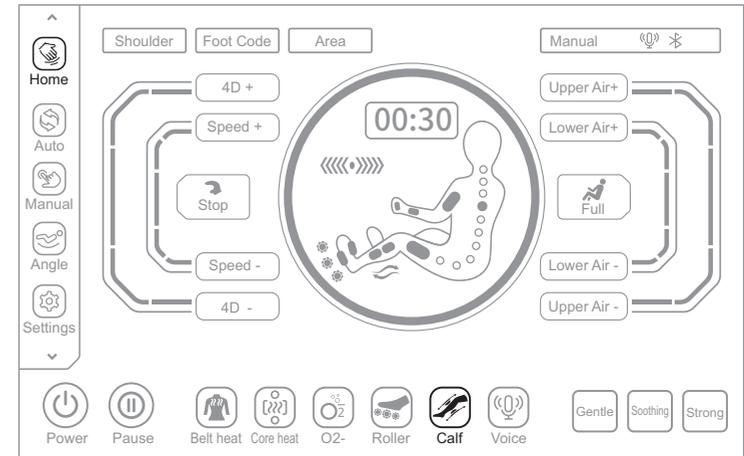


Wählen Sie im „Sprachassistent“ die Schaltfläche „Sprachsteuerung“, um die Sprachsteuerung zu aktivieren.

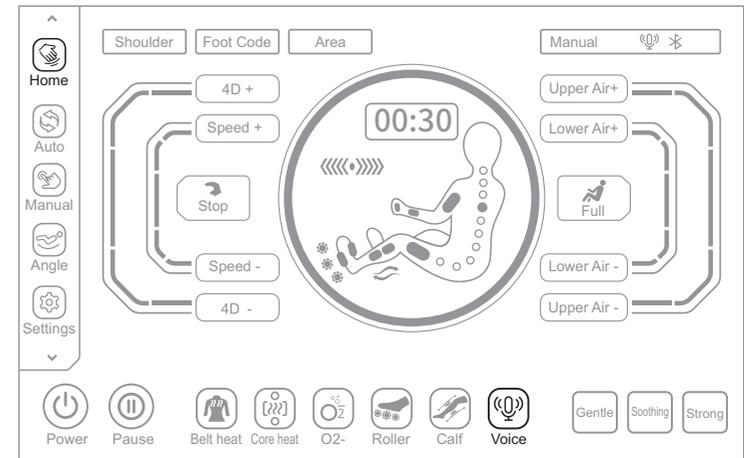


Bedienungsanleitung

Wählen Sie im Menü „Hauptbildschirm“ die Schaltfläche „Armposition einstellen“ **Shoulder** und drücken Sie anschließend die Pfeiltasten nach oben und unten im Pop-up-Menü, um die Armposition anzupassen (11 Anpassungsstufen).

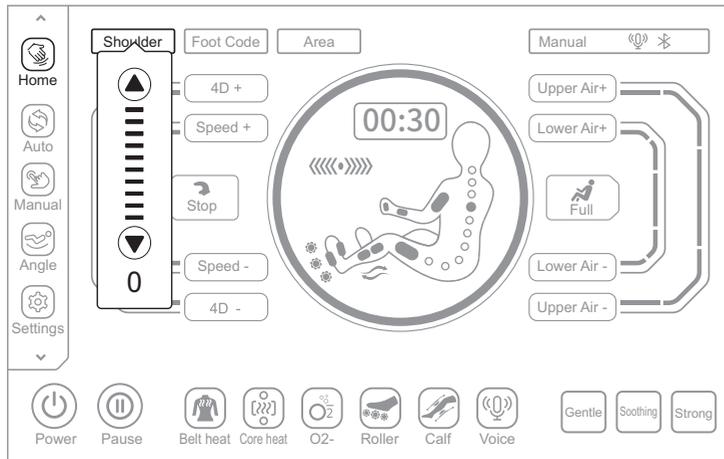


Wählen Sie im Menü „Hauptbildschirm“ die Schaltfläche „Fußgröße“ **Foot Code** und wählen Sie die entsprechende Fußgröße aus dem Dropdown-Menü aus.

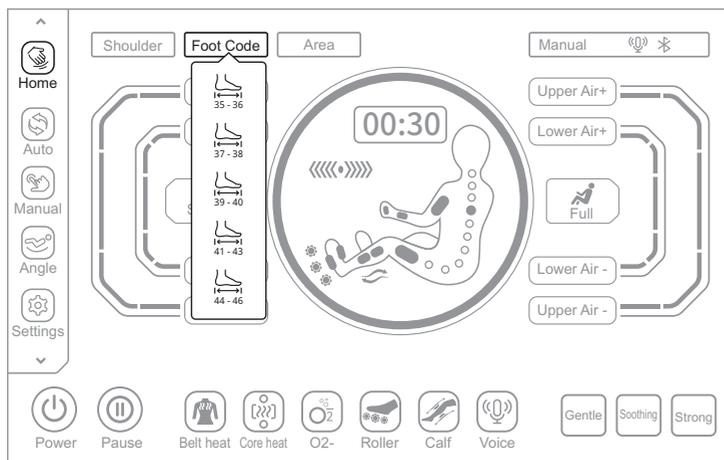


Bedienungsanleitung

Wählen Sie im Menü „Hauptbildschirm“ die Schaltfläche „Massagezeit“ **00:30**. Drücken Sie im Pop-up-Menü die Plus- und Minus-Pfeile, um die Massagezeit zu verlängern oder zu verkürzen. Klicken Sie auf „+“, um die Zeit um 5 Minuten zu verlängern. Die maximale Dauer kann auf 40 Minuten verlängert werden. Klicken Sie auf „-“, um die Zeit um 5 Minuten zu verkürzen.

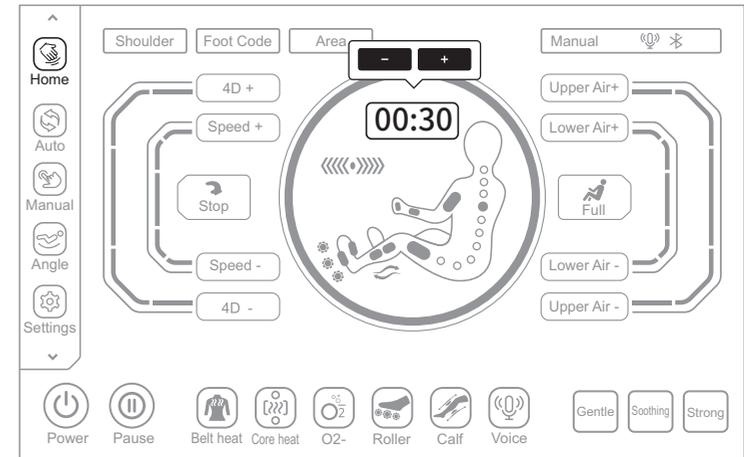

Wählen Sie im Menü „Hauptbildschirm“ die Schaltflächen „Sanft“ **Gentle**, „Angenehm“ **Soothing** oder „Stark“ **Strong**, um die gewünschte Massageintensität auszuwählen.

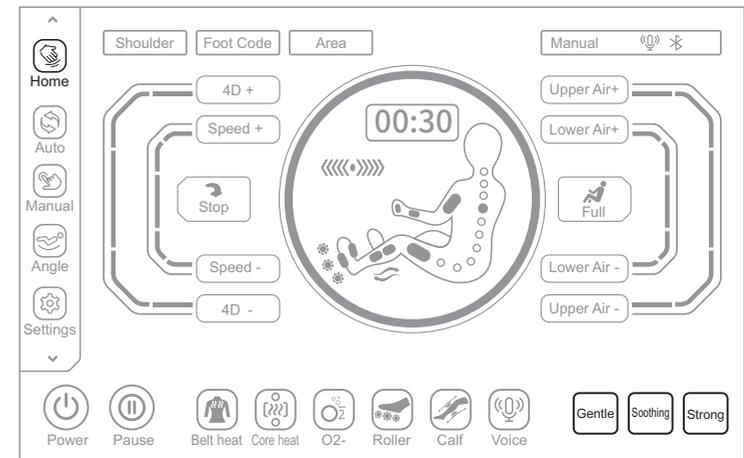

Bedienungsanleitung



HINWEIS Die Bedienungsanleitung der Fernbedienung des Massagesessels ist zu Ende.

XI. Downloaden und installieren Sie die Bluetooth-App

1. Downloaden und Installieren der App

- (1). Android-Download-Methode: Suchen Sie im Google Play (Google Store) nach der Download-Version von „Robot Massage“, downloaden und installieren Sie sie. Sie können auch den QR-Code unten scannen, um die App herunterzuladen und zu installieren. Nach erfolgreicher Installation können Sie die Bluetooth-App verwenden, um den Massagesessel zu bedienen.
- (2). Apple-Download-Methode: Suchen Sie im App Store (Apple App Store) nach der IOS-Version von „Robot Massage“, downloaden und installieren Sie sie. Sie können auch den QR-Code unten scannen, um die App herunterzuladen und zu installieren. Nach erfolgreicher Installation können Sie die Bluetooth-App verwenden, um den Massagesessel zu bedienen.



Robot Massage



Android QR Code




ISO QR Code

XII. Verbinden der App


1. Verbinden des Massagesessels mit der App

- (1). Wählen Sie „Einstellungen“  und klicken Sie auf Device Connection (Geräteverbindung)

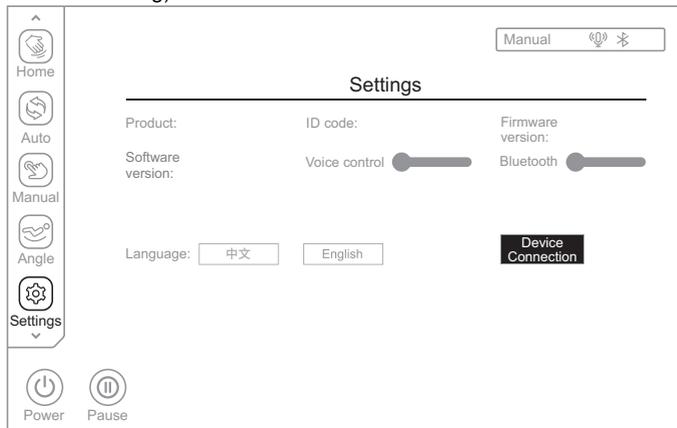


Bedienungsanleitung

- (2). Die App sucht automatisch nach der entsprechenden Gerätenummer (z. B. IMCM-XXXX). Klicken Sie auf die entsprechende Gerätenummer (die Verbindung wird angezeigt), um die Verbindung herzustellen.
- (3). Nach erfolgreicher Verbindung können Sie den Massagesessel bedienen.

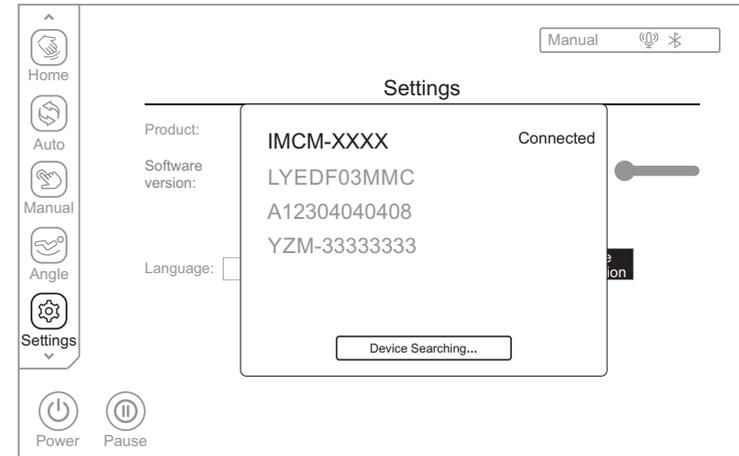


XIII. Bedienung der Bluetooth-App

1. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste , um die Massage zu starten.

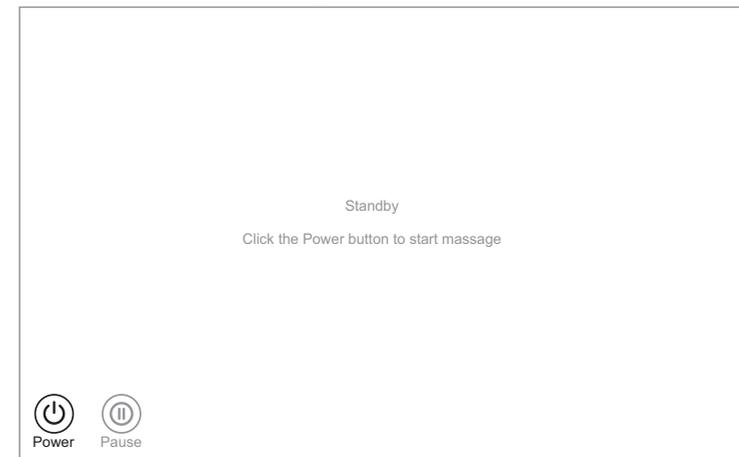

Bedienungsanleitung

2. Nach dem Einschalten des Massagesessels wechseln Sie zum Hauptbildschirm und wählen die gewünschte Massageart aus.

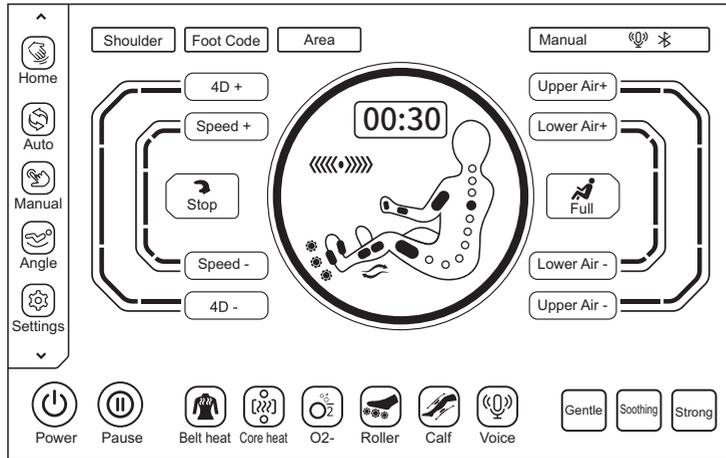


HINWEIS Die Bedienung der Bluetooth-App des Massagesessels finden Sie auf den Seiten 17–50 der Bedienungsanleitung der Fernbedienung.

Bedienungsanleitung

XIV. Ende der Massage

Drücken Sie während der Massage die Ein-/Aus-Taste (⏻) auf der Fernbedienung oder an der rechten Armlehne, um das Gerät auszuschalten. Alle Massagefunktionen werden sofort deaktiviert, und Rückenlehne und Fußstütze werden in die Ausgangsposition zurückgestellt. Nach Ablauf der Massagezeit werden alle Massagefunktionen automatisch deaktiviert, und Rückenlehne und Fußstütze werden ausgeklappt.

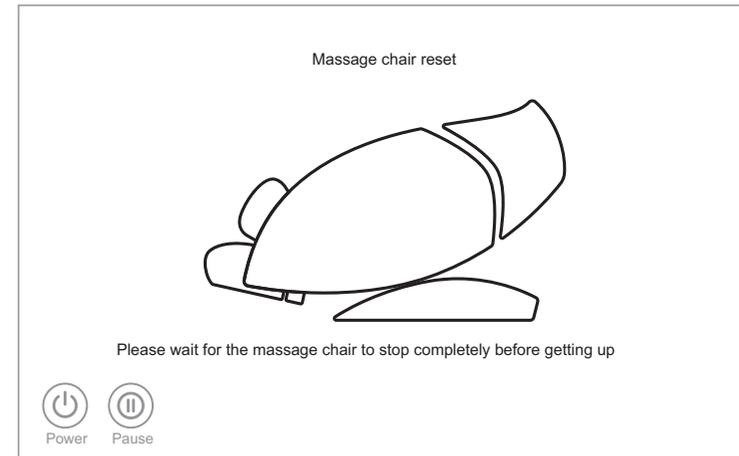

Trennen Sie das gesamte Gerät vom Stromnetz, wie in der Abbildung (Diagramm zur Schalterstellung) dargestellt.



Reinigung und Pflege

Reinigung von Kunstleder und Kunststoffteilen

Wischen Sie das Leder mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

■ **Verwenden Sie keine Chemikalien wie Verdünner, Benzin, Alkohol usw. zur Reinigung des Geräts.**

■ **Wenn Sie handelsübliche Lederpflegemittel verwenden, beachten Sie die Bedienungsanleitung.**

■ **Wenn das Kunstleder besonders schmutzig ist, wischen Sie es wie folgt ab:**

- ① **Tauchen Sie ein weiches Tuch in Wasser oder warmes Wasser mit 3 % bis 5 % neutralem Reinigungsmittel und wischen Sie es dann gründlich ab.**
- ② **Wischen Sie die Oberfläche des Leders mit einem weichen Tuch ab.**
- ③ **Wischen Sie die Reinigungslösung mit einem in sauberem Wasser getränkten und gründlich ausgedrückten Tuch ab.**
- ④ **Wischen Sie mit einem weichen Tuch nach.**
- ⑤ **Frei trocknen lassen.**

■ **Wenn sich Flecken nur schwer entfernen lassen, tauchen Sie einen handelsüblichen Melaminschwamm in neutrales Reinigungsmittel und wischen Sie das Gerät damit ab.**

■ **Verwenden Sie zum Trocknen der Oberfläche keinen Haartrockner.**

■ **Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Geräte in Jeans und farbigen Stoffen verwenden, da die Farbe des Stoffes die Oberfläche des Kunstleders verfärben kann.**

■ **Vermeiden Sie den Kontakt dieser Teile mit Kunststoff über längere Zeit, da dies die Oberfläche des Kunstleders verfärben kann.**

■ **Kunstleder kann sich verfärben. Decken Sie daher die von Haaren berührten Teile, z. B. nach der Verwendung von Haarfärbemitteln, mit einem Handtuch ab.**



Fehlerbehebung

Fehler	Wenn die Fußstütze oder Rückenlehne eine bestimmte Position erreicht, drücken Sie die entsprechende Einstelltaste, es erfolgt jedoch keine Veränderung und ein unterbrochenes Tonsignal ertönt.
Lösung	Aufgrund der Bauweise und ergonomischer Anforderungen verfügt der Massagesessel über eine Schutzbegrenzung für die maximale Positionsverstellung. Bei Erreichen dieser Begrenzung ertönt ein Erinnerungston.

Fehler	Die Funktion oder einige Funktionen funktionieren nach dem Einschalten des Massagesessels
Lösung	Nach dem Einschalten des Massagesessels durch Drücken der Einschalttaste müssen Sie das automatische Massageprogramm oder einen anderen Betriebsmodus manuell auswählen. Wenn der Massagesessel nicht funktioniert, schaltet er sich nach 20 Minuten automatisch ab. Bei Auswahl des manuellen Programmiermodus können nicht ausgewählte Funktionen deaktiviert werden. Der Betriebsmodus muss dann manuell eingestellt werden..

Fehler	Beim Einstellen der Massagesesselposition ist ein Reibgeräusch des Leders zu hören.
Lösung	Dieser Massagesessel besteht aus hochwertigem, strapazierfähigem Leder, das den Umweltschutzanforderungen entspricht. Aufgrund der Materialeigenschaften von Leder ist beim Reiben und bei relativer Bewegung ein hörbares Geräusch zu hören. Dies ist normal. Hinweis: Wenn Sie während der Benutzung des Massagesessels ein reißendes Geräusch im Stoff oder Leder hören, stellen Sie die Benutzung sofort ein und wenden Sie sich an einen Kundendienst.

Fehler	Die Massagearme erreichen die Schultern und den Nacken nicht.
Lösung	Wenn Ihr Kopf das Kissen hinter Ihrem Kopf nicht berührt oder Ihr Rücken die Rückenlehne nicht berührt, ist die Position der Arme möglicherweise niedriger als die tatsächliche Position während des Körperscans. Setzen Sie sich in die tiefste Sitzposition, stützen Sie Ihren Kopf auf die Kopfstütze und beginnen Sie den Scanvorgang von vorne.

Fehler	Der Massagesessel ist defekt. Das Netzteil oder der Stecker ist ungewöhnlich heiß.
Lösung	Um Unfälle zu vermeiden, wenden Sie sich an ein autorisiertes Kundendienstzentrum.

Wenn Sie Fragen oder Probleme mit dem Gerät haben, wenden Sie sich an den zuständigen Kundendienst.

Produktspezifikation

Modell: A801 iRest MAESTHRON

Konfiguration: 2

Bezeichnung: Massagesessel

Nennspannung: 110-120V~ 60Hz
220-240V~ 50Hz/60Hz

Nennleistung: 220W

Nennzeit: 20min

Schutzklasse: Klasse I

Importeur und bevollmächtigter Vertreter in der EU :

iRest Europe Sp. z o.o.

Szewczeni 7/11

10-274 Olsztyn, Poland

e-mail: irest@irest-europe.com

Hersteller:

Zhejiang Haozhonghao Health Product Co., Ltd

No.18 XingLong Road, Furniture Garden, Wanquan

Industrial Base, Pingyang, Zhejiang, China

e-mail: irest@irest.com

BEWAHREN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR SPÄTERES
NACHSCHLAGEN AUF

Lieber Benutzer, Sie können zum Umweltschutz beitragen.

Handeln Sie umweltbewusst und geben Sie das Altgerät an der von Ihrer
Gemeinde/Ihrem Land vorgesehenen Sammelstelle ab.

Die zur Herstellung des Geräts verwendeten Materialien können wertvolle
Sekundärrohstoffe sein und bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt schädigen.

Bitte beachten: Werfen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll.

