

irest ×



DualCore V8

INSTRUKCJA
OBSŁUGI



FC BAYERN
OFFICIAL LICENSED PRODUCT

© FC BAYERN MÜNCHEN AG

Dziękujemy za zakup urządzenia. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, aby przed uruchomieniem fotela masującego dowiedzieć się, jak prawidłowo z niego korzystać. W szczególności prosimy o zapoznanie się z przeciwwskazaniami oraz zasadami bezpiecznego użytkowania.

Uwaga: Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w projekcie urządzenia i jego opisie. Jeśli istnieje jakaś różnica między funkcją urządzenia dostępnego na rynku a opisem w instrukcji, to wynika ona ze zwykłej aktualizacji urządzenia, a producent nie ma obowiązku informowania o tym fakcie. Kolor przedstawiony w instrukcji obsługi nie reprezentuje rzeczywistej kolorystyki fotela masującego.

SPIS TREŚCI

Przed pierwszym użyciem

Środki ostrożności	2-5
Elementy montażowe	6-8
Umieszczenie fotela masującego	9-10
Przed użyciem	11
Budowa urządzenia	12-18

Sposób użytkowania

Instrukcja obsługi	19-79
Zakończenie masażu	79

Konserwacja

Czyszczenie i konserwacja	80
---------------------------------	----

Ważne

Rozwiązywanie problemów	81
Specyfikacja techniczna urządzenia	82

Środki ostrożności (muszą być przestrzegane)

- Przed użyciem dokładnie przeczytaj wszystkie istotne instrukcje.
- Uwagi oznaczone w tym miejscu pomogą Ci bezpiecznie i prawidłowo korzystać z produktu.
- Aby jasno wskazać stopień zagrożenia i uszkodzeń, które mogą wynikać z niewłaściwego użytkowania, środki ostrożności podzielono na „Ostrzeżenie” i „Uwaga”. Oba są istotne dla bezpieczeństwa i muszą być przestrzegane.

 Ostrzeżenie	Sygnalizuje, że w wyniku niewłaściwego użycia może dojść do poważnych obrażeń lub śmierci.
 Uwaga	Sygnalizuje, że w wyniku niewłaściwego użytkowania może dojść do niewielkich obrażeń lub uszkodzenia mienia.

- Należy zwrócić uwagę na symbol przed każdym elementem dotyczącym bezpieczeństwa.

 Zabronione	Absolutny zakaz
---	-----------------

Zabrania się używania fotela przez poniżej wymienione osoby

 Zabronione	■ Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z niepełnosprawnościami fizycznymi, zaburzeniami czucia lub neurologicznymi albo bez doświadczenia i zdrowego rozsądku, chyba że są one nadzorowane i poinstruowane przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Dzieci muszą być nadzorowane, aby nie używały urządzenia do zabawy. ■ Pacjenci z osteoporozą. ■ Pacjenci z ciężkimi chorobami serca oraz osoby z wszczepionymi urządzeniami medycznymi, takimi jak rozruszniki serca i defibrylatory wrażliwe na fale elektromagnetyczne. ■ Osoby z gorączką (powyżej 38 stopni). ■ Kobiety w ciąży oraz kobiety w okresie połogu lub menstruacji. ■ Osoby, które zgodnie z zaleceniami lekarza nie mogą korzystać z masażu z powodu zakrzepicy, tętniaków, ciężkich żylaków lub innych chorób układu krążenia. Przez dwa tygodnie po pojawieniu się zakrzepów krwi, surowo zabrania się masowania jakiegokolwiek części ciała, w której występują zakrzepy. ■ Pacjenci z urazami lub chorobami skóry. ■ Dzieci poniżej 14 roku życia bez nadzoru oraz osoby nieświadome. ■ Osoby, które zgodnie z zaleceniem lekarza potrzebują odpoczynku lub czują się źle. ■ Osoby z wadami kręgosłupa lub skoliozą nie mogą korzystać z produktu ze względów zdrowotnych. ■ Osoby, których ciało jest mokre, nie mogą korzystać z tego produktu. ■ Produkt posiada gorącą powierzchnię. Osoby niewrażliwe na ciepło powinny zachować szczególną ostrożność przy jego używaniu.
--	---

Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa	
 Ostrzeżenia	■ Nie pozwalaj dzieciom dotykać ruchomych części tego fotela masującego. ■ Używaj uziemionego zasilacza odpowiedniego dla tego produktu. ■ Wyciągnij wtyczkę z gniazdka po użyciu lub przed czyszczeniem, aby uniknąć uszkodzenia produktu lub urazu. ■ Korzystaj z produktu zgodnie z instrukcją obsługi. ■ Nie używaj żadnych części ani akcesoriów, które nie są zalecane. ■ Nie używaj tego produktu na zewnątrz. ■ Nie używaj produktu w pobliżu otwartego ognia, np. kuchenki, i nie pal papierosów podczas używania. ■ Nie używaj urządzeń grzewczych, takich jak elektryczne koce, razem z tym produktem. ■ Nie siadaj na oparciu fotela, masażerach nóg, podłokietnikach ani nie stawaj na siedzisku. ■ Przed rozpoczęciem używania dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. ■ Nie używaj tego produktu do żadnego innego celu niż opisany w instrukcji. ■ Zalecany czas korzystania to maksymalnie 20 minut jednorazowo. ■ Nie używaj produktu, jeśli pokrowiec lub obicie jest uszkodzone. ■ Nie wrzucaj żadnych przedmiotów do wnętrza urządzenia. ■ Nie zasypiaj podczas korzystania z tego produktu. ■ Nie używaj produktu, jeśli jesteś pod wpływem alkoholu lub źle się czujesz. ■ Nie używaj produktu w ciągu jednej godziny po posiłku. ■ Nie ustawiaj nadmiernej siły masażu, aby uniknąć urazu. ■ Nie używaj produktu do innych celów niż masaż. ■ Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, aby uniknąć zagrożenia, musi być wymieniony przez specjalistę wskazanego przez producenta, dział serwisu lub podobną jednostkę.

Środowisko użytkowania	
 Uwaga	■ Nie używaj tego produktu w bardzo wilgotnym środowisku, takim jak łazienka. ■ Natychmiast przerwij korzystanie z urządzenia, jeśli temperatura otoczenia gwałtownie się zmienia. ■ Nie używaj produktu w zapyłonym lub agresywnym chemicznie środowisku. ■ Nie używaj produktu w bardzo małych pomieszczeniach lub miejscach bez odpowiedniej wentylacji.

Warunki przechowywania	
 Uwaga	■ Temperatura przechowywania: od 5 °C do 40 °C. ■ Wilgotność względna (RH): od 20% do 80%; brak gazów korozyjnych; dobrze wentylowane pomieszczenie.



Serwis i konserwacja	
 Uwaga	■ Ten produkt powinien być serwisowany wyłącznie w autoryzowanym punkcie serwisowym wskazanym przez producenta. Użytkownik nie powinien samodzielnie rozkładać ani naprawiać urządzenia bez pozwolenia. ■ Nie zapomnij wyłączyć głównego wyłącznika zasilania po użyciu. ■ Nie używaj produktu, jeśli gniazdko zasilające jest luźne. ■ Jeśli produkt ma być nieużywany przez dłuższy czas, należy zwinąć kabel zasilający i przechowywać urządzenie w suchym i bezpyłowym środowisku. ■ Nie przechowuj produktu w wysokiej temperaturze ani w pobliżu otwartego ognia. Unikaj długotrwałej ekspozycji na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. ■ Czyść produkt suchą ściereczką. Nie używaj rozpuszczalników takich jak rozcieńczalnik, benzen lub alkohol. ■ Elementy mechaniczne tego produktu są specjalnie zaprojektowane i wyprodukowane, dlatego nie jest wymagana żadna specjalna konserwacja. ■ Nie używaj ostrych przedmiotów do klucia tego produktu. ■ Nie ciągnij ani nie przetaczaj urządzenia po nierównym podłożu. Przed przeniesieniem należy je unieść. ■ Używaj tego produktu z przerwami. Nie pozostawiaj go w trybie ciągłej pracy przez długi czas.

Rozwiązywanie zwykłych usterek	
 Uwaga	■ Jeśli podczas pracy urządzenia słychać dźwięk silnika, jest to normalny odgłos pracy. ■ Jeśli kontroler nie działa prawidłowo, sprawdź czy wtyczka i gniazdko są dobrze podłączone oraz czy wyłącznik zasilania jest włączony. ■ Po przekroczeniu zalecanego czasu pracy urządzenie automatycznie wyłączy się. Urządzenie można ponownie uruchomić po upływie pół godziny.



Środki ostrożności	
 Uwaga	■ Sprawdź, czy napięcie jest zgodne ze specyfikacją tego produktu. ■ Nigdy nie wkładaj ani nie wyjmuj wtyczki mokrą ręką. ■ Nie dopuść do dostania się wody do wnętrza urządzenia, aby uniknąć porażenia prądem lub uszkodzenia produktu. ■ Nie szarp przewodu zasilającego podczas podłączania lub odłączania wtyczki. ■ Nie uszkadzaj przewodu ani nie modyfikuj obwodu tego urządzenia. ■ Nie czyść mokrą ściereczką elementów pod napięciem, takich jak włącznik czy wtyczka. ■ W przypadku awarii zasilania oddal się od urządzenia, aby uniknąć obrażeń, jeśli zasilanie nagle powróci. ■ Natychmiast przestań używać urządzenia, jeśli działa ono w sposób nietypowy, i skontaktuj się z serwisem. ■ Przestań używać urządzenia, jeśli poczujesz się źle, i skonsultuj się z lekarzem.

Instrukcje montażu podłokietnika

1. Po włączeniu zasilania opuść ramę oparcia za pomocą pilota.
2. Włóż złącze przewodu oraz rurkę powietrzną znajdujące się z boku stalowej ramy do odpowiadających im gniazd w podłokietniku (Rysunek 1).
3. Unieś podłokietnik z włożoną rurką powietrzną i przewodem, a następnie zawieś wszystkie haczyki na podłokietniku po obu stronach stalowej ramy (Rysunek 2).

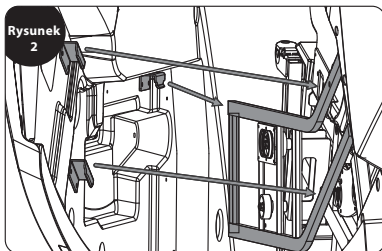
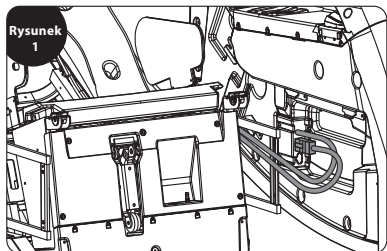


4. Ustaw rolękę znajdującą się na tylnej części podłokietnika przy powierzchni mocowania podłokietnika (Rysunek 3), a następnie opuść podłokietnik do tyłu i w dół.
5. Następnie przesunąć podłokietnik do tyłu i na końcu zabezpieczyć go dwiema śrubami M5 (Rysunek 4).

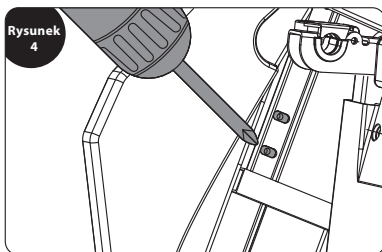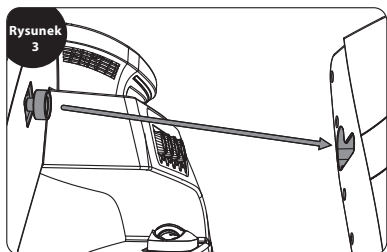


Instrukcje montażu masażera łydek

1. Włóż przewód oraz rurkę powietrzną masażera łydek do gniazd znajdujących się z przodu stalowej ramy (Rysunek 1).
2. Po zakończeniu podłączania, otwórz pokrywę mocującą masażera łydek po obu stronach stalowej ramy (Rysunek 2).

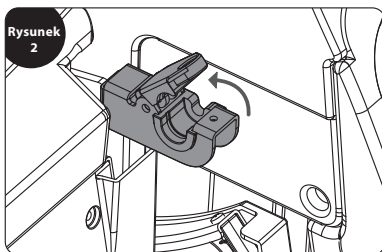
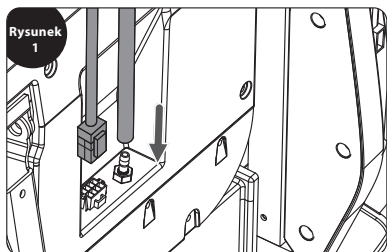


3. Unieś masażer i umieść go w szczelinie, przykryj pokrywą mocującą i na końcu przymocuj go za pomocą 2 śrub M4 (Rysunek 3).

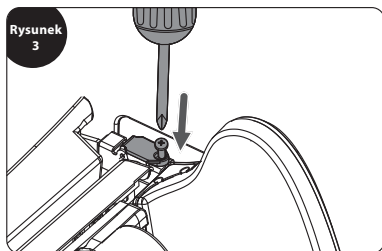


Instrukcje montażu uchwyty tabletu

1. Znajdź gniazdo z trzema metalowymi wypustkami znajdujące się na spodzie uchwyty tabletu i dopasuj do odpowiadających im metalowych wypustek w szczelinie uchwyty (Rysunek 1).
2. Trzymając uchwyt tabletu i szczelinę uchwyty w stanie połączonym, przekręć pokrętkę dołączoną do uchwyty, aby przymocować go do szczeliny (Rysunek 2).

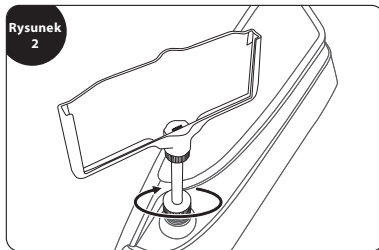
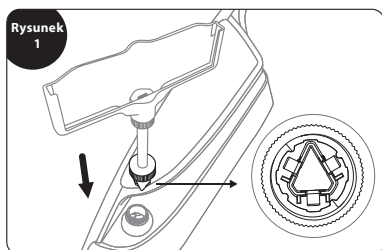


3. Sprawdź, czy uchwyt tabletu nie jest poluzowany oraz czy funkcja ładowania działa prawidłowo. Jeśli wszystko jest w porządku, instalacja została zakończona (Rysunek 3).

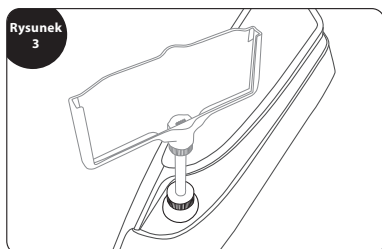

Instrukcje ładowania tabletu

1. Dopasuj punkt ładowania znajdujący się na spodzie tabletu do wycięcia w uchwycie kontrolera i wsuń go w dół (Rysunek 1).
2. Gdy punkt ładowania na spodzie kontrolera zetknie się z punktem zasilania wewnątrz wycięcia uchwytu, rozpocznie się ładowanie (Rysunek 2).

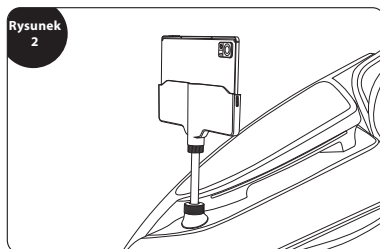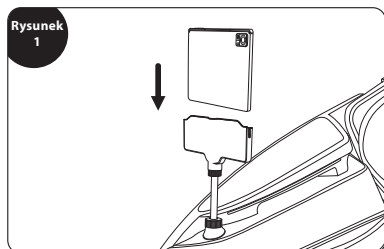

Uwaga: Zwróć uwagę, aby umieścić tablet w uchwycie odpowiednią stroną.


Ustawienie i montaż

Upewnij się, że fotel ma wystarczająco dużo miejsca, aby mógł się rozłożyć (co najmniej o 10 cm).

Uwaga



Nie wystawiaj fotela masującego bezpośrednio na działanie wysokiej temperatury (np. przed grzejnikami). Umieść go w miejscu, gdzie nie będzie narażony na wysoką temperaturę ani bezpośrednie światło słoneczne. Zaleca się położenie miękkiej podkładki w miejscu wyznaczonym do długotrwałego użytkowania fotela. Przy układaniu podkładki należy upewnić się, że jej rozmiar pokrywa całą powierzchnię, na której fotel i stopy użytkownika dotykają podłoża.

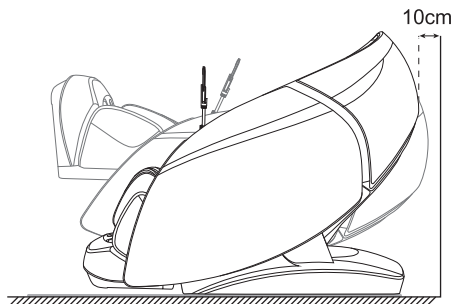


Podnoszenie fotela

Do podniesienia i przeniesienia fotela wymagana jest praca zespołowa, aby uniknąć ryzyka obrażeń.

Uwaga



1. Podnoś fotel masujący przy przenoszeniu go po delikatnym podłożu, takim jak drewniana podłoga.
2. W przypadku przemieszczania urządzenia na drewnianej podłodze, zaleca się podniesienie go. Należy unikać uszkodzenia kółek. Gdy fotel jest podnoszony i przesuwany do wyznaczonej pozycji, należy uważać na ręce, aby uniknąć obrażeń, oraz uważać na przygnięcie stóp. Nie puszczaj urządzenia, dopóki korpus nie stanie całkowicie płasko na ziemi. Podłoga może zostać uszkodzona, dlatego zaleca się umieszczenie na niej maty.

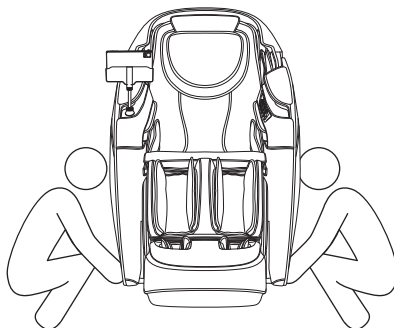


Sposób przenoszenia

Do przesuwania fotela masującego należy używać tylnych kółek. Przesuwaj fotel, przechylając go do tyłu pod kątem około 45°, jak pokazano na rysunku.

UWAGA: Nadmierna siła przy przechylaniu może spowodować przewrócenie się fotela i jego uszkodzenie.

1. Przed przeniesieniem należy prawidłowo wyłączyć urządzenie, aby zresetować cały system, a następnie odłączyć zasilanie.
2. Podczas przenoszenia fotel powinien być pusty (nie należy umieszczać na nim ludzi, zwierząt ani przedmiotów).
3. Podczas przenoszenia nie należy upuszczać fotela z wysokości większej niż 2 mm ani przekraczać szczeliny większej niż 5 mm.
4. Podczas przesuwania produktu za pomocą kółek nie należy wykonywać długotrwałego ruchu ciągłego; jeśli odległość przekracza 50 metrów, należy przemieszczać produkt powoli i równomiernie.

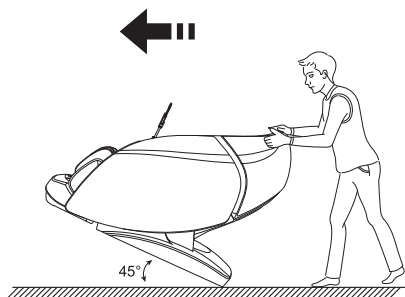


Uwaga


Jak zdemonstrować i używać poduszki zagłówka i oparcia


Używanie poduszki zagłówka może zmniejszyć intensywność masażu w okolicach szyi i ramion — decyzja o jej użyciu zależy od Twoich potrzeb (zalecane jest użycie poduszki zagłówka).




Poduszka oparcia jest połączona z oparciem zamkiem błyskawicznym (1), a poduszka zagłówka z poduszką oparcia (2).

Uwaga

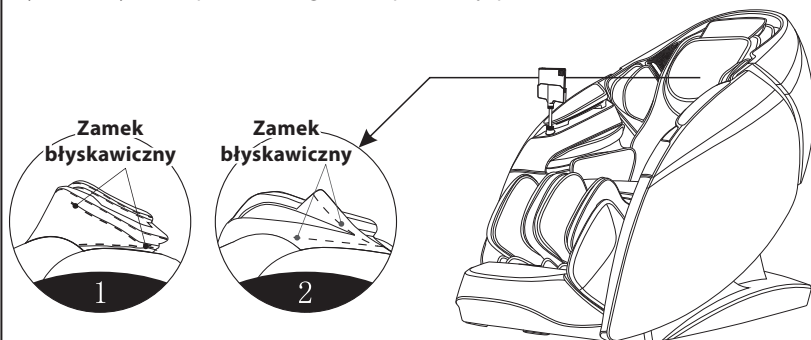

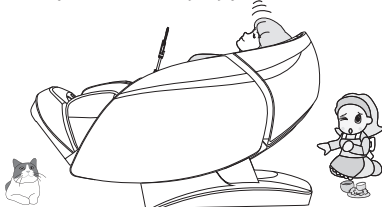
Sprawdzenie otoczenia	
 Uwaga	Upewnij się, że wokół urządzenia nie znajdują się ludzie, zwierzęta ani przedmioty. 

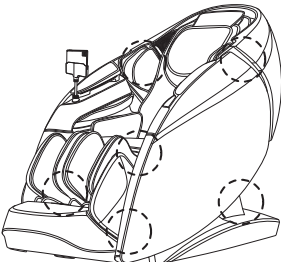Upewnij się, że w szczelinach urządzenia nie ma ciał obcych	
 Uwaga	Przed rozpoczęciem masażu upewnij się, że w obszarach nóg, stóp itd. nie ma żadnych przedmiotów. W żadnym wypadku nie wolno wkładać rąk, stóp ani głowy w przestrzeń między masażerem nóg a korpusem głównym, ani między podłokietnikiem a korpusem. W żadnym wypadku nie wolno wciskać rąk, stóp ani głowy pod tkaninę lub skórzaną powłokę fotela masującego. 

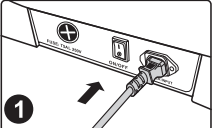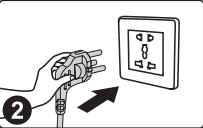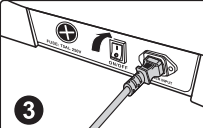Włączanie zasilania	
 Uwaga	 1 Podłącz przewód zasilający  2 Schemat włączania zasilania  3 Przełącz przełącznik zasilania do pozycji „I”

 Ostrzeżenia	■ Przed użyciem sprawdź, czy przewód zasilający i wtyczka nie są uszkodzone. ■ Zasilanie tego produktu powinno odpowiadać wymaganiom określonym w jego specyfikacji. ■ Surowo zabrania się używania innego źródła zasilania niż to przewidziane dla tego produktu. ■ Surowo zabrania się podłączania jakichkolwiek urządzeń konwertujących zasilanie bez autoryzacji w celu zasilania tego produktu.
---	---


Opis komponentów

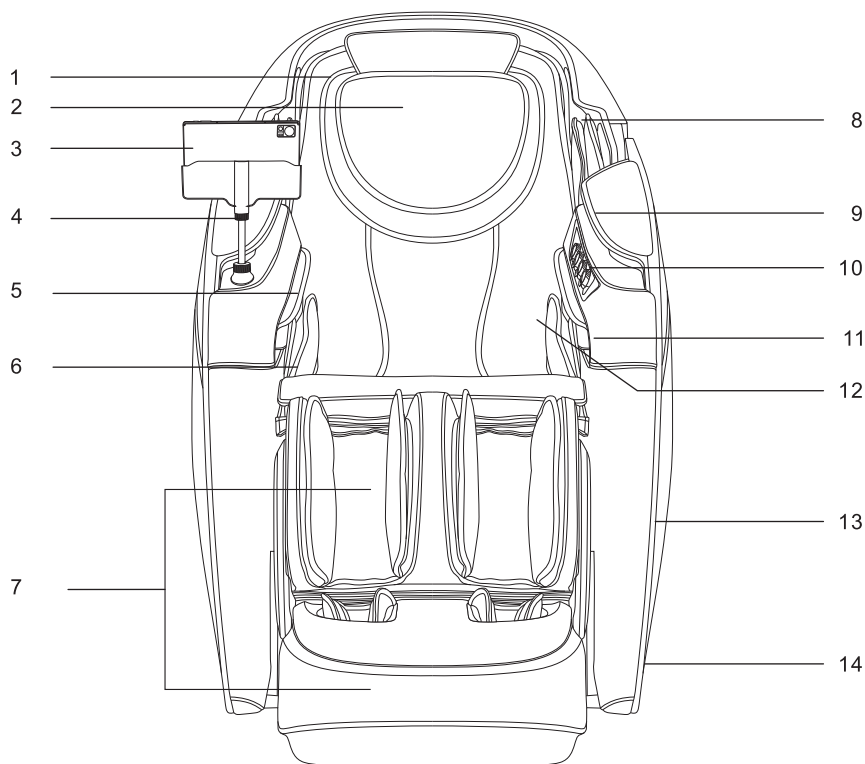

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. Duża poduszka pod głowę | 8. Masażer ramion |
| 2. Mała poduszka pod głowę | • Poduszki powietrzne |
| 3. Pilot (tablet) | 9. Podłokietnik |
| 4. Uchwyt pilota | • Górne oświetlenie Ambiente |
| 5. Masażer przedramion | 10. Podręczny panel sterujący |
| • Poduszki powietrzne | 11. Czujnik AI Health Detection |
| 6. Masażer pośladków i bioder | 12. Masażer pleców |
| • Poduszki powietrzne | • Poduszka oparcia |
| 7. Masażer nóg | 13. Panel boczny fotela masującego |
| • Mechanizmy masujące | 14. Panel boczny |
| | • Dolne oświetlenie Ambiente |

- ★ Inne funkcje konfiguracyjne
- Funkcja WIFI
 - Funkcja aplikacji Bluetooth


Schemat rozmieszczenia funkcji

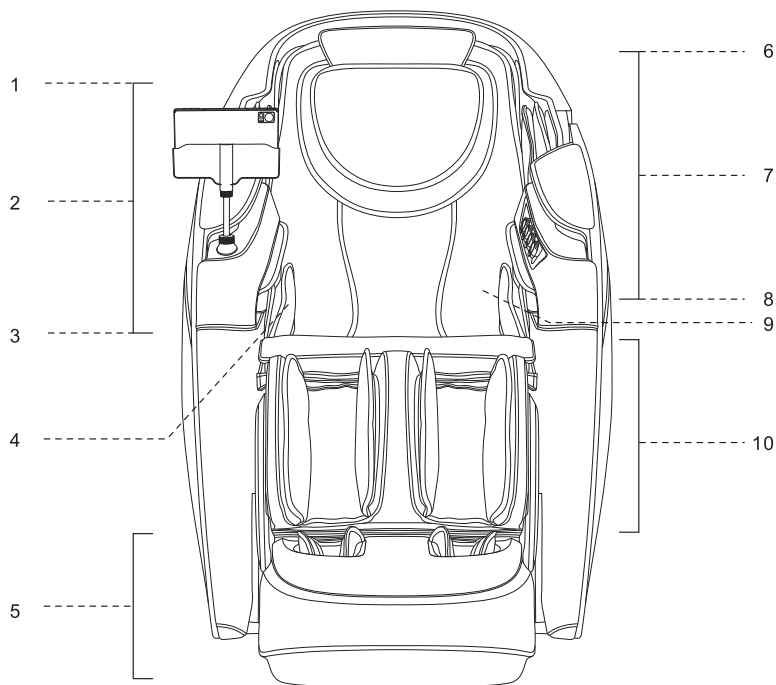

- | | |
|--|--|
| 1. Ramiona | 6. Obie strony głowy |
| • Masaż poduszkami powietrznymi | • Dźwięk cyfrowy 3D |
| 2. Przedramiona | • Odtwarzacz muzyki |
| • Uchwyt pilota | 7. Ramiona |
| • Funkcja sterowania głosowego | • Ładowarka bezprzewodowa |
| • Wbudowany mikrofon do sterowania głosowego | • Port ładowania USB |
| • Masaż poduszkami powietrznymi | • Masaż poduszkami powietrznymi |
| 3. Dłonie | • Jonizator powietrza |
| • Masaż poduszkami powietrznymi | 8. Od głowy i szyi do siedziska |
| • Masaż Piano | • Dwurdzeniowy masażer |
| 4. Od pośladków do ud | • Ogrzewanie w mechanizmie masującym |
| • Masaż poduszkami powietrznymi | 9. Ramiona, plecy, talia, brzuch |
| 5. Stopy | • Kołnierz grzewczy |
| • Masaż rolkowy | 9. Nogi |
| • Masaż poduszkami powietrznymi | • Masaż poduszkami powietrznymi |
| • Wybór rozmiaru stopy | • Masaż ugniatający |
| • Elektrycznie wysuwany podnóżek | • Mechaniczny masaż łydek |
| • Automatyczne wykrywanie długości stopy | • Elektrycznie regulowane wsunięcie podnóżka |


Sposób używania kołnierza grzewczego

Fotel posiada unikalny kołnierz z innowacyjnymi funkcjami ogrzewania ramion, pleców, talii i brzucha. Możesz umieszczać kołnierz w różnych pozycjach, w zależności od swoich preferencji.

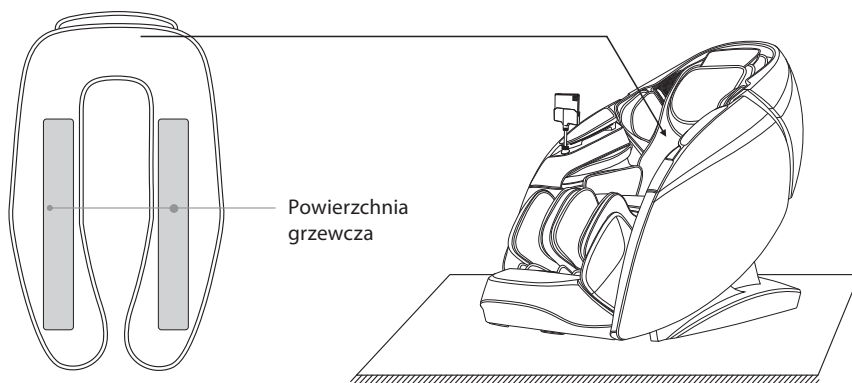


Schemat użycia na plecach i talii

Kiedy kołnierz jest umieszczony na plecach i w talii, poprzez wbudowane ogrzewanie, ciepło rozgrzewa głębokie meridiany pleców, wspomaga krążenie krwi i ogrzewa nerki, łagodzi ból krzyża, sztywność pleców z powodu zimna, ból i inne schorzenia.

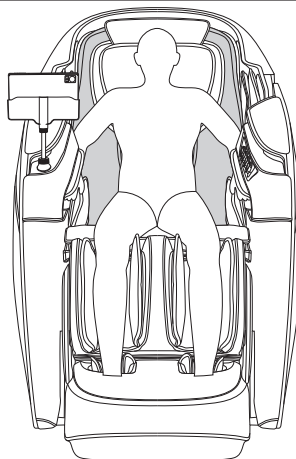

Schemat użycia na ramionach i brzuchu

Kiedy kołnierz zostanie umieszczony na ramionach (przód/tył), rozgrzeje punkty akupunkturowe, takie jak Bingfeng, Tianzong, Yunmen i Qihu wokół ramion i obojczyka, poprzez wbudowane w niego ogrzewanie. Można go również założyć na przód, aby ogrzać brzuch.


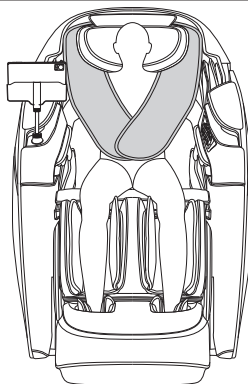


Schemat użycia na plecach




Uwaga


1. Prawidłowe umiejscowienie i użytkowanie: Gdy kołnierz jest używany na plecach (lub fotel masujący nie jest włączony), należy umieścić kołnierz po obu stronach oparcia i ustawić dolną część oraz poduszkę oparcia w pozycji wyjściowej. Jeśli nie chcesz korzystać z funkcji kołnierza, unieś go delikatnie i przełóż ostożnie za oparcie fotela.
2. Niewłaściwe umiejscowienie i użytkowanie: Gdy kołnierz jest używany na plecach (lub fotel masujący nie jest włączony), nie należy ścisnąć kołnierza w obszarze pracy głównego masażera, wzdłuż linii kręgosłupa, może to prowadzić do awarii funkcji ogrzewania, uszkodzenia fotela masującego i innych poważnych usterek. Nie należy związać, skręcać, krzyżować kołnierza oraz zakładać i nosić szala na plecach.

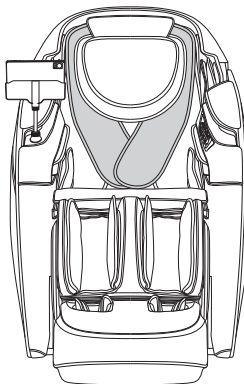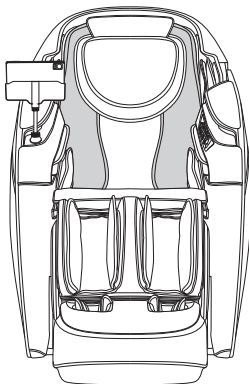

Opis klawiszy na tablecie sterującym

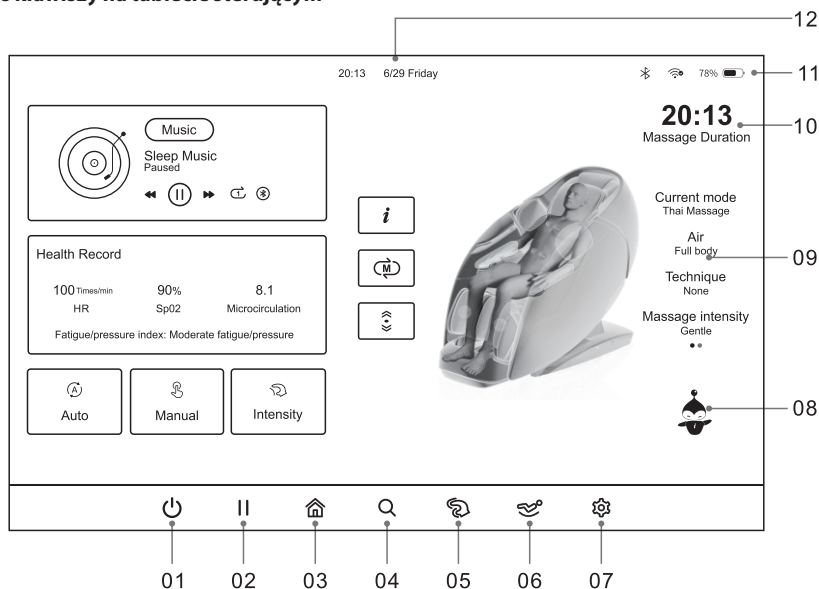


1. Włącz/Wyłącz: Włącza/wyłącza funkcje fotela masującego.
2. Pauza/Wznów: wstrzymuje lub wznowia aktualnie działający program masażu.
3. Strona główna: kliknij, aby wrócić do strony głównej.
4. AI Health Detection: kliknij, aby przejść do interfejsu funkcji Health Detection.
5. Intensywność masażu: kliknij, aby wejść do interfejsu wyboru intensywności masażu — do wyboru trzy tryby: delikatny, umiarkowany, mocny.
6. Regulacja pozycji: kliknij, aby wejść do interfejsu regulacji pozycji i dostosować kąt rozłożenia fotela masującego.
7. Ustawienia: kliknij, aby wejść do interfejsu ustawień — obejmuje 8 kategorii funkcji systemowych.
8. Asystent głosowy: kliknij, aby aktywować funkcję głosową — steruj fotelem za pomocą komend głosowych.
9. Obszar wyświetlania stanu masażu: pokazuje aktualny tryb masażu, tryb poduszek powietrznych, techniki masażu, moc masażu, intensywność, szerokość, prędkość masażu i prędkość rolek masujących stopy.

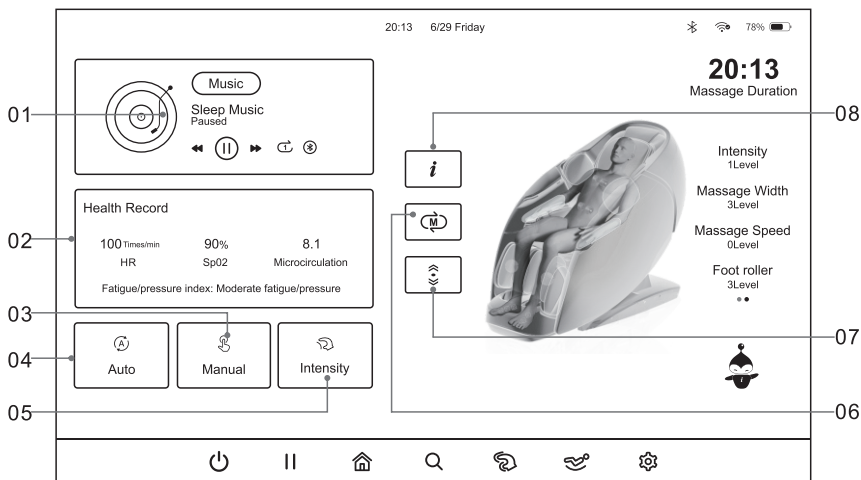

1. Muzyka relaksacyjna ułatwiająca zasypianie: pokazuje informacje o aktualnie odtwarzanej muzyce na stronie głównej; użytkownik może przełączać utwory, pauzować/wznawiać, ustawić odtwarzanie w pętli, połączyć się przez Bluetooth i korzystać z innych funkcji.
2. Profil zdrowotny: wyświetla dane, takie jak tętno, poziom tlenu we krwi, mikrokrążenie oraz wskaźnik zmęczenia/stresu na stronie głównej (funkcja dostępna po przeprowadzeniu Health Detecion).
3. Tryb manualny: kliknij, aby wejść do interfejsu trybu manualnego, który obejmuje: obszar masażu, techniki masażu, prędkość masażu, pozycję ramion masujących, szerokość masażu, masaż poduszkami powietrznymi — łącznie 6 kategorii.
4. Tryb automatyczny: kliknij, aby wejść do interfejsu programów automatycznych — do wyboru 4 kategorie, łącznie 20 programów automatycznych.
5. Intensywność masażu: kliknij, aby przejść do interfejsu regulacji intensywności masażu — dostosuj ogólną intensywność ramion masujących oraz masażu poduszkami powietrznymi górnej i dolnej części ciała.
6. Zapisane: kliknij, aby wejść do interfejsu zapisanych — użytkownik może zapisać aktualnie uruchomiony program masażu lub przywołać zapisany wcześniej (maksymalnie 3 programy).
7. Regulacja pozycji ramion: kliknij, aby wejść do interfejsu regulacji pozycji ramion i rozmiaru stóp. W przypadku niedopasowania ramion masujących do pozycji ramion użytkownika, można je dostosować; rozmiar stóp również można dostosować.
8. Funkcje pomocnicze: kliknij, aby wejść do interfejsu wyboru funkcji pomocniczych — do wyboru łącznie 7 różnych opcji.


Opis przycisków szybkiego wyboru na podłokietniku

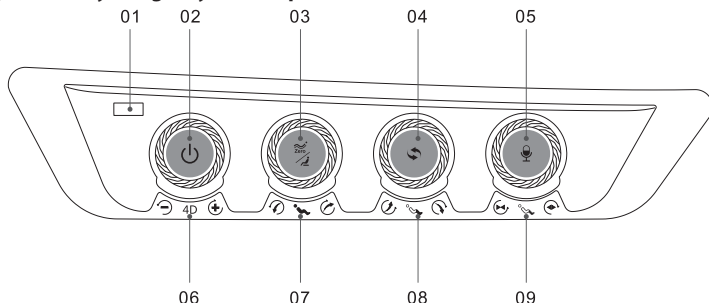

1. Port ładowania USB
 - Ładuje telefony komórkowe lub inne urządzenia elektroniczne.
2. Przycisk Włącz/Wyłącz
 - Przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć fotel masujący. Po uruchomieniu masażu, naciśnij krótko, aby skorzystać z przycisku pauzy/startu.
3. Przycisk Zero Gravity
 - Naciśnij ten przycisk, aby automatycznie dostosować kąt pozycji Zero Gravity — można ustawić dwa poziomy. Przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby przywrócić fotel do pozycji początkowej — opuścić tyłki do najniższego poziomu i podnieść oparcie do najwyższej pozycji.
4. Przycisk trybu automatycznego
 - Przełączanie programów automatycznych
5. Przycisk sterowania głosowego
 - Przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć funkcję asystenta głosowego. Krótkie naciśnięcie przycisku wybudza asystenta głosowego.
6. Pokrętko intensywności 4D
 - Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększa intensywność 4D, a przeciwnie do ruchu wskazówek zegara zmniejsza.
7. Pokrętko podnoszenia/opuszczania zsynchronizowanego
 - Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara powoduje powolne podnoszenie oparcia fotela przy jednoczesnym opuszczaniu masażera nóg; zatrzymanie obrotu zatrzymuje ruch oparcia i podnóżka. Po zakończeniu ruchu system automatycznie wykryje długość nóg.
 - Obrót przeciwnie do ruchu wskazówek zegara powoduje powolne opuszczanie oparcia fotela przy jednoczesnym podnoszeniu masażera nóg; zatrzymanie obrotu zatrzymuje ruch; po zakończeniu ruchu system automatycznie wykryje długość nóg.
8. Pokrętko podnoszenia/opuszczania podnóżka
 - Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara powoduje powolne opuszczanie masażera nóg; zatrzymanie ruchu powoduje zatrzymanie opuszczania; po zakończeniu ruchu długość nóg zostanie automatycznie wykryta.
 - Obrót przeciwnie do ruchu wskazówek zegara powoduje powolne podnoszenie masażera nóg; zatrzymanie ruchu powoduje zatrzymanie podnoszenia; po zakończeniu ruchu długość nóg zostanie automatycznie wykryta.
9. Pokrętko regulacji masażera stóp
 - Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara powoduje powolne wysunięcie masażera stóp; zatrzymanie obrotu zatrzymuje mechanizm.
 - Obrót przeciwnie do ruchu wskazówek zegara powoduje powolne wsunięcie masażera stóp; zatrzymanie obrotu zatrzymuje mechanizm.

I. Rozpoczęcie masażu


1. Włączanie kontrolera manualnego w formie tabletu: Przytrzymaj przycisk „zasilania” po prawej stronie u góry, aż ekran się zaświeci i uruchomi.
- 1.1. Odblokowanie ekranu: Przesuń palcem w górę, aby odblokować ekran po włączeniu tabletu (jeśli ustawiono zabezpieczenie takie jak hasło, wzór lub rozpoznawanie odcisku palca, należy odblokować zgodnie z ustawieniem).

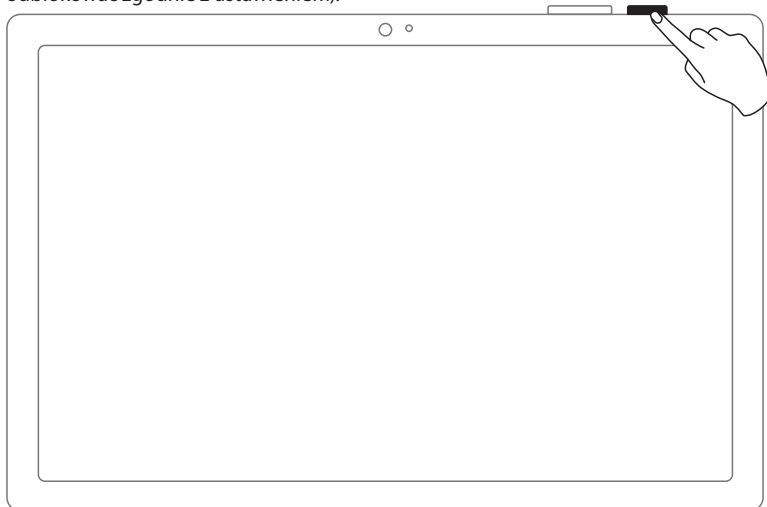


2. Połączenie z WiFi: przy pierwszym użyciu kontrolera należy połączyć się z siecią. System automatycznie przechodzi do interfejsu połączenia sieciowego — kliknij przycisk „Połączenie WiFi” na stronie sieci bezprzewodowej, a system przeniesie Cię bezpośrednio do strony połączenia z WiFi (jeśli wybierzesz „pomiń” połączenie, system przejdzie bezpośrednio do strony logowania).



- 2.1. Wybór sieci: wejdź do interfejsu wyszukiwania WiFi, włącz przełącznik WiFi – system automatycznie zeskanuje i wyszuka dostępne nazwy sieci WiFi. Po zakończeniu wyszukiwania nazwy WiFi zostaną wyświetlone na liście sieci. Wybierz nazwę sieci, z którą chcesz się połączyć i nawiąż połączenie.

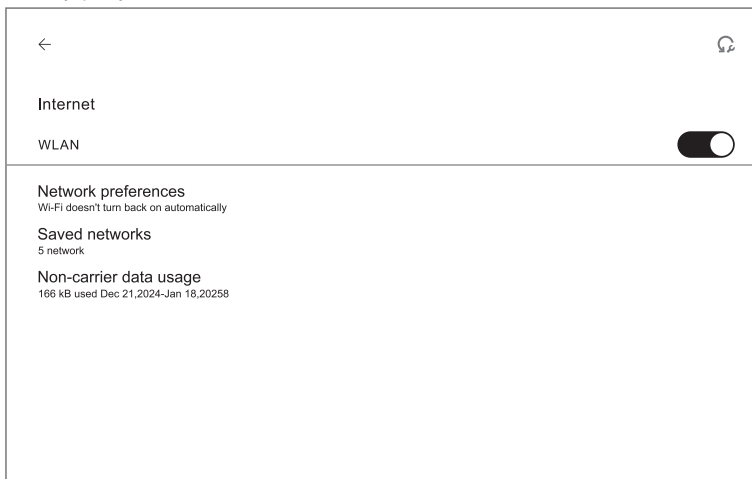


- 2.2. Zakończenie połączenia: po pomyślnym połączeniu system wyświetli komunikat „Połączono”, kliknij strzałkę „Wstecz” w lewym górnym rogu ekranu, aby wrócić do strony głównej.

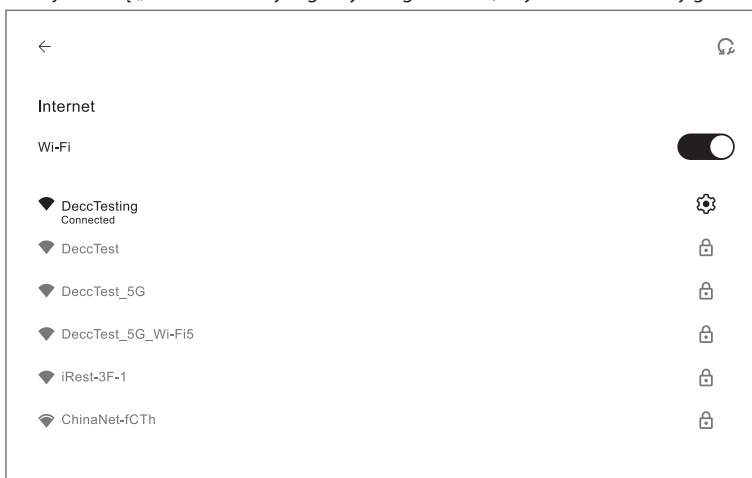


Uwaga: podczas wyszukiwania odnieś się do rzeczywistej nazwy sieci WiFi.

3. Połączenie Bluetooth: przy pierwszym logowaniu należy połączyć urządzenie Bluetooth – jak pokazano na rysunku poniżej, system automatycznie przejdzie do interfejsu połączenia Bluetooth i rozpocznie wyszukiwanie numerów Bluetooth. Na liście wyszukiwania znajdź odpowiedni numer Bluetooth (np. A1XXXXXXXXXXXX), kliknij i sparuj – przy wybranym numerze Bluetooth pojawi się symbol „✓”.

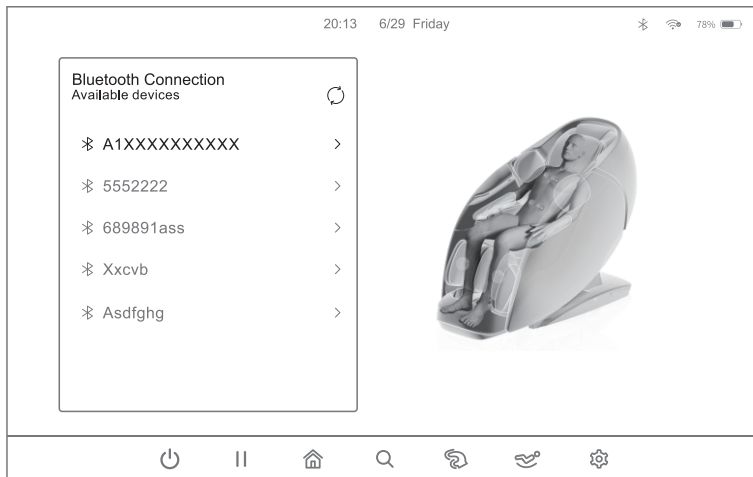


- 3.1. Po pomyślnym połączeniu Bluetooth ekran będzie wyglądał jak poniżej (strona ta będzie wyświetlana tylko wtedy, gdy fotel do masażu nie pracuje).

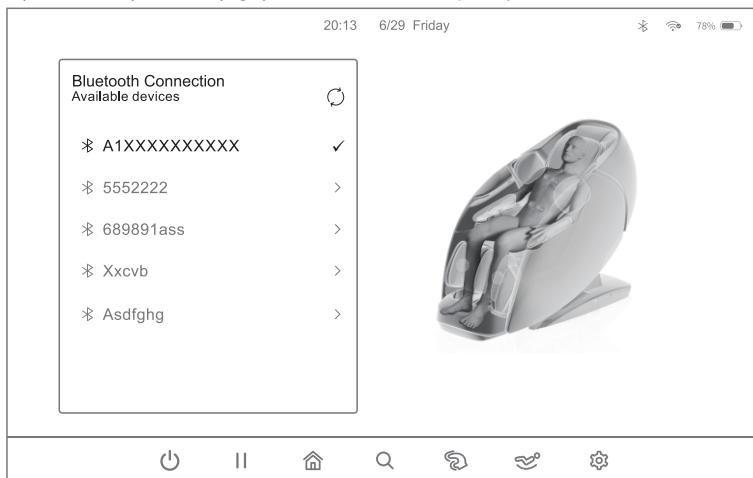


II. Rozpoczęcie masażu

1. Po pomyślnym połączeniu fotela masującego z siecią Wi-Fi i sparowaniu przez Bluetooth, system automatycznie przejdzie do interfejsu uruchamiania programu. Kliknij przycisk „Włącz/Wyłącz” znajdujący się w lewym dolnym rogu interfejsu tabletu, aby uruchomić funkcje fotela i przejść do kolejnego kroku.

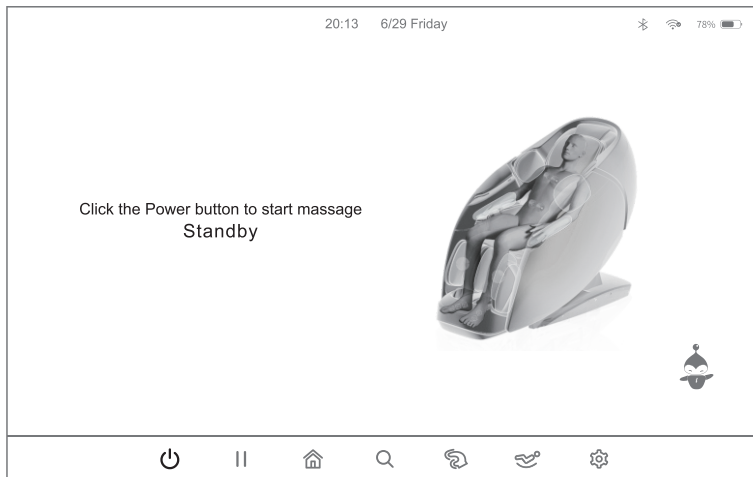


2. Po kliknięciu przycisku zasilania, fotel masujący przejdzie w tryb włączony. Poczekaj, aż system się uruchomi – system automatycznie przejdzie do interfejsu wyboru intensywności, zapisanych programów lub Health Detection.

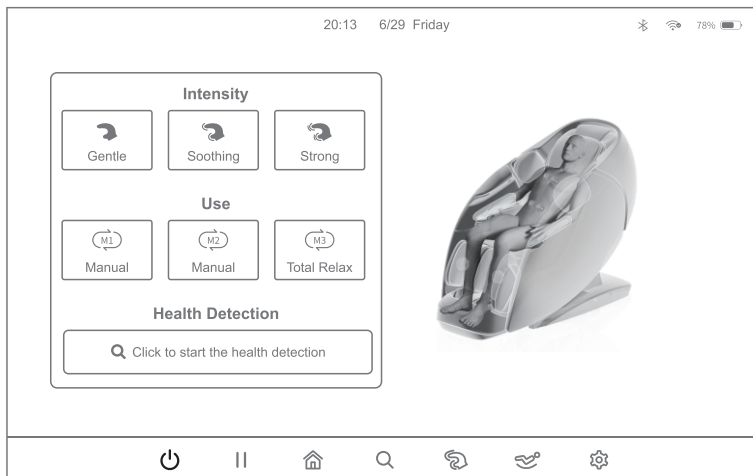

- 2.1. Po wejściu do interfejsu wybierz odpowiednią intensywność masażu zgodnie z własnymi potrzebami – do wyboru są opcje: „Delikatny, Umiarkowany i Mocny”. Po wybraniu jednej z intensywności system automatycznie przejdzie do interfejsu automatycznego rozkładania/ skanowania ciała.

- 2.2. Jeśli wcześniej był już używany i zapisany program masażu, można również nacisnąć przycisk „Use”, aby uruchomić zapisany program masażu (dostępne są trzy różne tryby: M1, M2 i M3).
- 2.3. Kliknij przycisk „Start Detection”, a system automatycznie przejdzie do interfejsu wykrywania stanu zdrowia. Po zakończeniu wykrywania system zaproponuje program masażu dopasowany do aktualnego poziomu zmęczenia na podstawie zebranych danych.

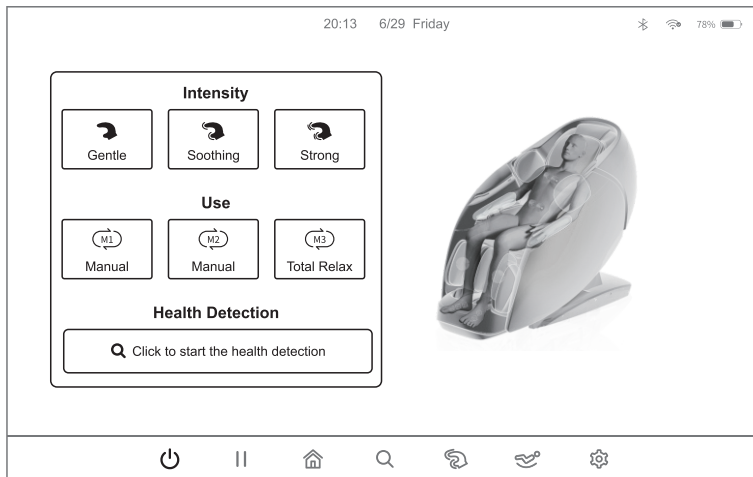


3. Automatyczne rozkładanie/skanowanie ciała: Po włączeniu fotel masujący automatycznie dostosuje kąt oparcia i rozpocznie wykrywanie kształtu ciała użytkownika. Proszę zachować aktualną pozycję ciała, aby zapewnić jak najlepsze dopasowanie do fotela (można również kliknąć przycisk „Skip”, aby pozostać w aktualnym położeniu i przejść do kolejnego interfejsu).




III. Pauza (możesz korzystać z tej funkcji po włączeniu fotela)

Po włączeniu fotela masującego, naciśnij ikonę pauzy na stronie głównej, aby przejść w tryb pauzy – jak pokazano na ilustracji poniżej. Wszystkie funkcje masażu zostaną wtedy wstrzymane. Ponowne naciśnięcie ikony pauzy wznowi poprzedni tryb masażu.

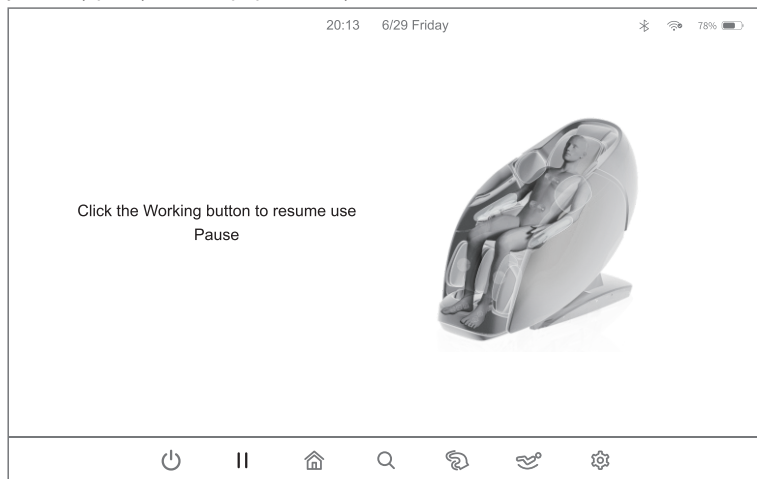


IV. Funkcje strony głównej (możesz korzystać z tej funkcji po włączeniu fotela)


Na stronie głównej, jak pokazano na ilustracji poniżej, możesz wybrać odpowiednią funkcję masażu zgodnie ze swoimi potrzebami, np. tryb automatyczny, tryb manualny, intensywność masażu, ustawienia połączenia, regulację czasu, funkcje pomocnicze, funkcję pamięci, regulację pozycji ramion, muzykę relaksacyjną, zapis zdrowotny i inne funkcje masażu.

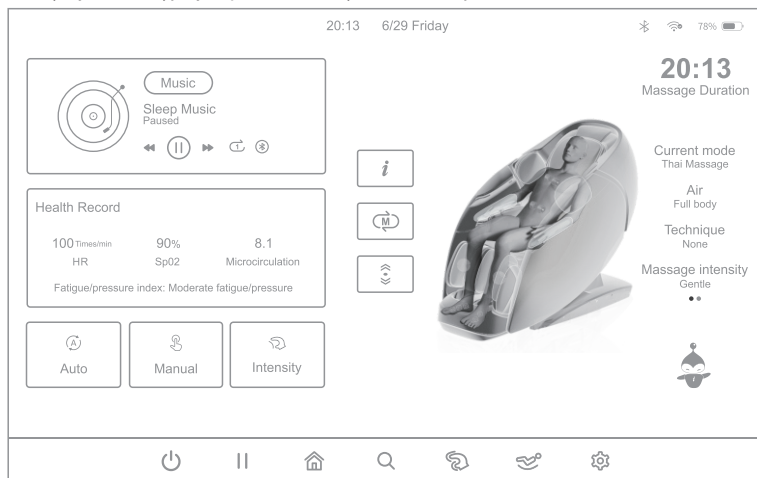

1. Tryb automatyczny: Na stronie głównej wybierz przycisk „Auto”, jak pokazano poniżej, aby przejść do interfejsu programów automatycznych. Następnie wybierz odpowiedni zgodnie ze swoimi potrzebami.

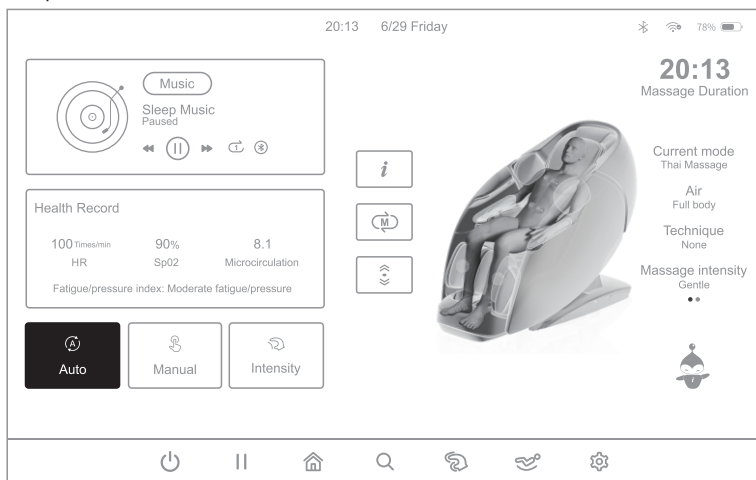

- 1.1. W interfejsie trybu automatycznego znajdują się cztery różne sekcje. Każda sekcja zawiera 5 różnych programów automatycznych – łącznie dostępnych jest 20 programów automatycznych, w tym: Totalny relaks, Uwolnienie stresu, Masaż poduszkami powietrznymi, Masaż chiński, Masaż tajski, Masaż meridianów, W trosce o szyję i ramiona, Pielęgnacja talii, Modelowanie talii i pośladków, Ulga dla nóg i stóp, Komfortowy, Dbanie o kondycję, Nadzwyczajna przyjemność, Pracownik biurowy, Regeneracja, Zastrzyk energii, Przerwa na lunch, Na dobranoc, Odświeżenie umysłu, Odmładzający.

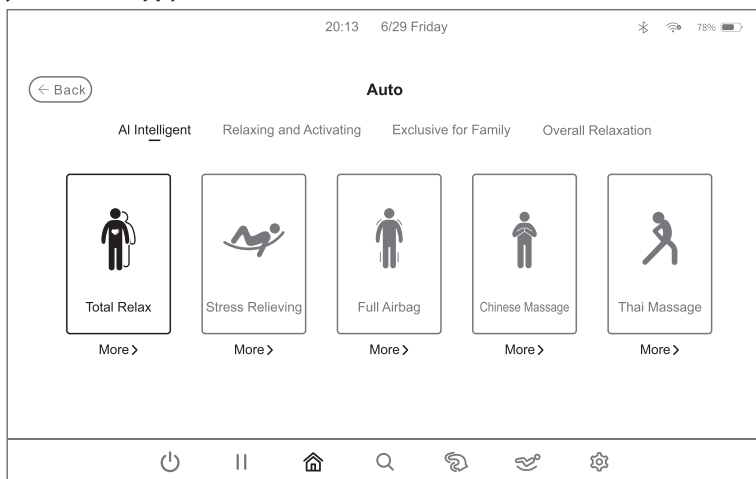

Programy masażu z wykorzystaniem algorytmu sztucznej inteligencji AI	
Funkcja	Opis
Totalny relaks	Ramiona górnego masażera masują szyję, ramiona i punkty akupunktury Fengchi poprzez ugniatanie, ostukiwanie oraz technikę Shiatsu (masażu całego ciała). Dolny masażer masuje talię i biodra poprzez ugniatanie i ostukiwanie. Oba masażery współpracują ze sobą, aby pomóc rozluźnić mięśnie całego ciała i złagodzić zmęczenie.
Uwolnienie stresu	Masaż szyi, ramion i punktów akupunktury Dazhui, głównie poprzez technikę ugniatania, aby złagodzić ogólne napięcia i obniżyć ciśnienie.
Masaż poduszkami powietrznymi	Masaż kompresyjny (uciskowy) całego ciała, połączony z masażem rolkowym stóp i ugniatającym łydek. Dzięki funkcji rozciągania łydek ucisk mechaniczny działa automatycznie jak pod wpływem nacisku dłoni.
Masaż chiński	Masaż oparty na tradycyjnej medycynie chińskiej, z zastosowaniem masażu 4D pleców i talii, aby pobudzić krążenie krwi w plecach i talii, ukoić meridiany i złagodzić blokady pleców oraz talii.
Masaż tajski	Masaż odbywa się głównie za pomocą poduszek powietrznych, które zaciskają nogi, dłonie, ramiona i biodra, a następnie łydki. Kombinacja kąta odchylenia oparcia oraz siła nacisku ramion masujących w linii talii powoduje efekt rozciągania. Uwaga: są trzy poziomy intensywności rozciągania. Aby uzyskać delikatne rozciąganie, wybierz najniższy poziom intensywności masażu. Aby uzyskać mocne rozciągnięcie, wybierz najsilniejszy poziom intensywności masażu.


Programy masażu (Relaks i pobudzenie)	
Funkcja	Opis
Masaż meridianów	Masaż ramion, szyi, pleców i talii za pomocą technik ugniatania, oklepywania i shiatsu. Jego celem jest aktywacja meridianów.
W trosce o szyję i ramiona	Masaż szyi i ramion głównie za pomocą technik ugniatania i rozciągania, a także górnej części pleców za pomocą masażu leczniczego oraz nacisk na punkty akupunktury Jianjing,. Łagodzi spondylozę szyjną oraz daje efekt rozluźnienia mięśni szyi i ramion.
Pielęgnacja talii	Masaż talii z zastosowaniem technik ugniatania, oklepywania i opukiwania oraz masaż talii 4D.

Modelowanie talii i pośladków	Masaż zaczyna się od pośladków głównie poprzez ugniatanie i masaż leczniczy. Następnie poprzez opukiwanie i ugniatanie masażer dociera głęboko pod pośladki aby rozluźnić mięśnie i unieść biodra. Odpowiedni dla kobiet rozluźnia mięśnie w okolicy bioder a także dla mężczyzn, którzy dbają o prostatę.
Ulga dla nóg i stóp	Masaż łydek i stóp odbywa się poprzez pracę poduszek powietrznych, jest to masaż kompresyjny, odpężający. Jednocześnie masowane są ramiona i talia, głównie poprzez zastosowanie technik ugniatania i oklepywania.


Programy masażu (Rodzinne)	
Funkcja	Opis
Komfortowy	Łagodzi zmęczenie, pobudza krążenie krwi i pozwala uwolnić się od stresu poprzez głęboki masaż przy zastosowaniu technik ugniatania i oklepywania, każdej oddzielnie oraz w trybie mieszanym.
Dbanie o kondycję	Masaż ramion, szyi, talii i bioder za pomocą technik ugniatania i Shiatsu. Pozwala zrelaksować ciało i umysł poprzez masaż całego ciała. Intensywność masażu jest delikatna.
Nadzwyczajna przyjemność	Delikatny masaż całego ciała wraz z masażem rolkowym stóp oraz z zastosowaniem masażu ugniatającego łydki. Łagodzi napięcia w obszarze pleców.
Pracownik biurowy	Masaż ramion, szyi i talii, głównie za pomocą technik ugniatania, oklepywania, oraz łączenia obu technik. Łagodzi napięcia ramion i szyi, a także zmniejsza bolesność mięśni w odcinku lędźwiowym kręgosłupa poprzez głęboki masaż. Odpowiedni dla osób pracujących umysłowo i prowadzących siedzący tryb życia.
Regeneracja	Głęboki masaż całego ciała za pomocą ugniatania, oklepywania i technik Shiatsu. Pobudza krążenie krwi w całym ciele i zapobiega tworzeniu się skrzepów krwi. Jest odpowiedni dla osób, które spędzają dużo czasu w domu i nie lubią wychodzić. Intensywność masażu jest umiarkowanie delikatna.

Programy masażu (Pełen relaks)	
Funkcja	Opis
Zastrzyk energii	Głęboki masaż całego ciała za pomocą ugniatania, oklepywania i technik Shiatsu. Ma na celu wzmocnić siły vitalne i pobudzić energię.
Przerwa na lunch	Masaż pleców i talii za pomocą technik ugniatania i oklepywania, a następnie uciskania punktów akupunktury Shenyu. Zastrzyk energii na kolejną połowę dnia pracy.
Na dobranoc	Masaż ramion, szyi, pleców i talii za pomocą technik ugniatania, masażu leczniczego oraz poprzez nacisk na punkty akupunkturuwe Fengchi i Shenyu. Ma na celu pomóc w zasypianiu i poprawić jakość snu.
Odświeżenie umysłu	Masaż ramion, szyi, pleców i talii za pomocą technik ugniatania, ugniatania 4D I Shiatsu Pozwala osiągnąć wysoki stopień harmonii fizycznej i psychicznej poprzez głęboki masaż. Intensywność masażu jest delikatna.
Odmładzanie	Masaż pleców oraz talii, głównie poprzez technik ugniatania i ostukiwania, aby pobudzić krążenie krwi, wyeliminować miejscowy ból mięśni, przyspieszyć wydalanie kwasu mlekowego i pobudzić vitalność.


- 1.2. Dowiedz się więcej: Po wejściu do interfejsu automatycznego kliknij przycisk „More” pod programem automatycznym, jak pokazano na rysunku poniżej, aby wyświetlić szczegółowy opis programu w wyskakującym oknie, a następnie kliknij „Start Massage”, aby rozpocząć masaż.

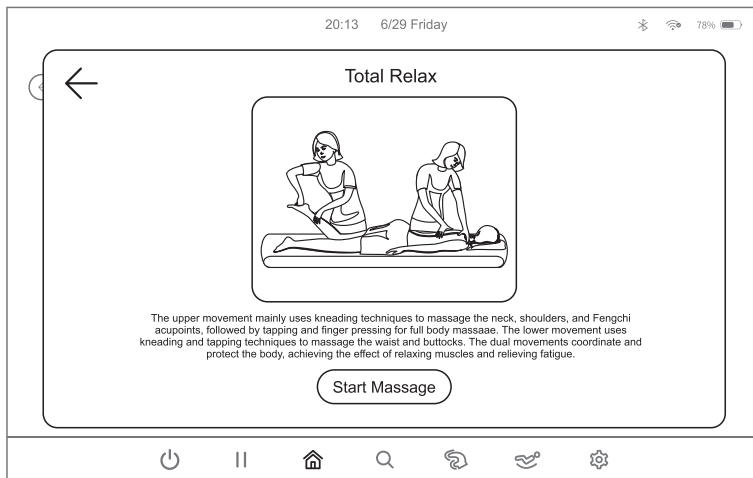

2. Tryb manualny: Na stronie głównej kliknij przycisk „Manual”, jak pokazano na rysunku poniżej. Po wejściu do interfejsu trybu manualnego wybierz odpowiednią funkcję masażu zgodnie z potrzebą — do wyboru są m.in. masaż górnej części ciała, masaż dolnej części ciała, masaż poduszkami powietrznymi i inne funkcje.

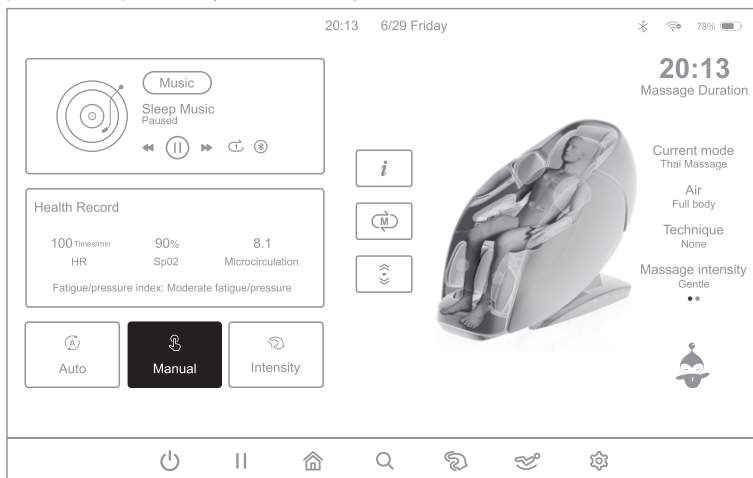


- 2.1. Mechanizm (góra): Po wejściu do trybu manualnego, jak pokazano na rysunku poniżej, kliknij przycisk „Mechanism (upper)”, a następnie wybierz odpowiednią funkcję masażu górnej części ciała zgodnie z potrzebą; dostępne są ustawienia technik masażu, prędkości, pozycji ramion masujących, obszaru masażu, szerokości masażu i inne.
- 2.1.1. Techniki masażu: Wejdź do interfejsu trybu manualnego i wybierz przycisk „technique”, aby uruchomić techniki masażu. Dostępnych jest 18 technik do wyboru.

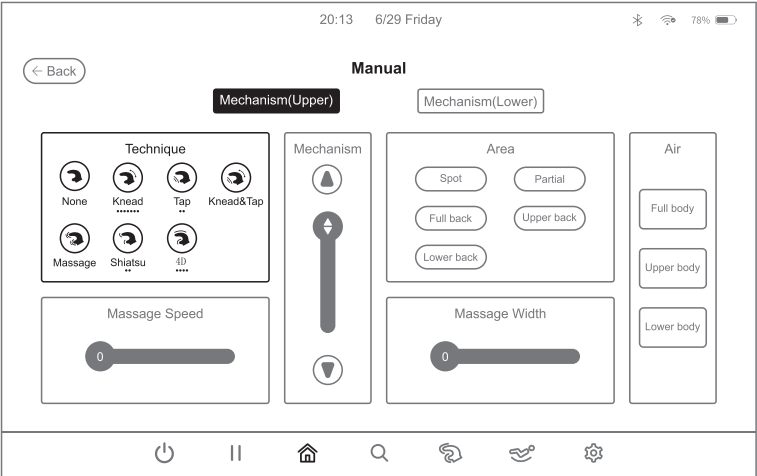


Program manualny - schemat wyboru technik

Funkcja		Regulacja	
Brak		Naciśnij ten przycisk, aby masować bez zastosowania jakiegokolwiek techniki. Możliwość regulacji intensywności.	5 poziomów prędkości 5 poziomów szerokości 5 poziomów intensywności
Ugniatanie (7 technik)		Możliwość regulacji prędkości i szerokości	
Oklepywanie (2 techniki)		Regulacja prędkości, szerokości i intensywności	
Ugniatanie + Oklepywanie (1 technika)		Regulacja prędkości i intensywności	
Chwyatanie (1 technika)		Regulacja prędkości i intensywności	
Shiatsu (2 techniki)		Regulacja prędkości, szerokości i intensywności	
4D (4 techniki)		Regulacja prędkości, szerokości i intensywności	

2.1.2.Prędkość masażu: Po wejściu w tryb manualny wybierz suwak „Massage Speed”, jak pokazano na rysunku poniżej, i przesun go w lewo lub w prawo w zależności od potrzeb. Prędkość można regulować od 1 do 5, gdzie 1 to najwolniejszy, a 5 to najszybszy poziom. Regulacja prędkości dostępna jest przy technikach: ugniatanie (7), oklepywanie (2), ugniatanie i oklepywanie (1), chwytanie (1), Shiatsu (2), 4D (4). Regulacja możliwa dopiero po wyborze techniki lub obszaru masażu w trybie manualnym i uruchomieniu masażu.

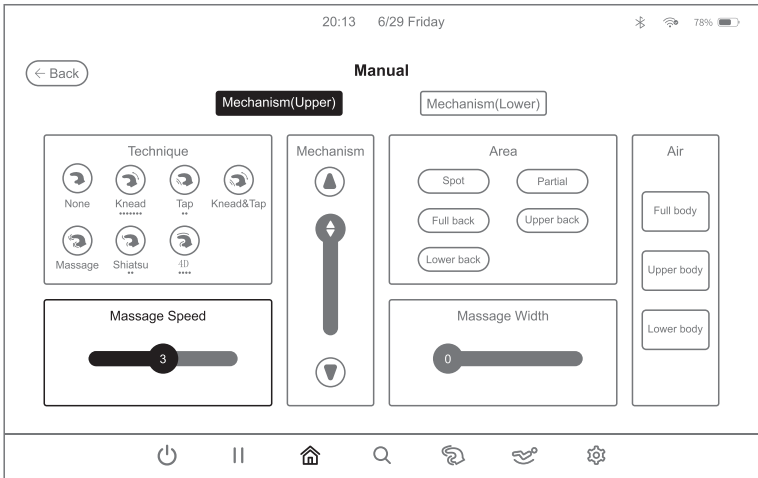


Schemat wyboru prędkości masażu – Mechanizm górny

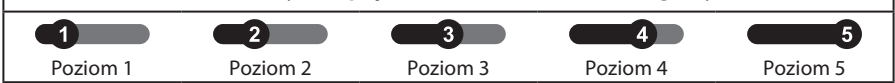

Przycisk	Opis
	Przesun w prawo, aby zwiększyć prędkość masażu (od 1 do 5)
	Przesun w lewo, aby zmniejszyć prędkość masażu (od 1 do 5)

2.1.3.Regulacja mechanizmu masującego (górze):


Wejdź w tryb manualny, jak pokazano na poniższym rysunku, i zgodnie z potrzebami masażu wybierz przycisk „strzałka w górę” lub „strzałka w dół”, aby precyzyjnie dostosować położenie górnego mechanizmu masującego. Regulacja ramion masujących możliwa jest tylko w trybie manualnym, w masażu punktowym lub odcinkowym.

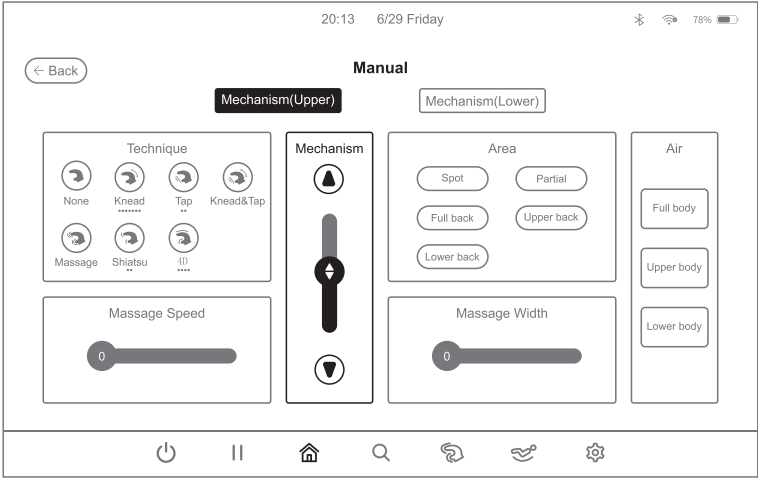

Przycisk	Opis
	Naciśnij strzałkę w górę, aby przesunąć mechanizm masujący do góry; zwolnij przycisk, aby zatrzymać.
	Naciśnij strzałkę w dół, aby przesunąć mechanizm masujący w dół; zwolnij przycisk, aby zatrzymać.

2.1.4.Obszar masażu:


Po wejściu w tryb manualny, jak pokazano na rysunku, kliknij przycisk „Area”, a następnie wybierz funkcję masażu górnego segmentu pleców według własnych potrzeb. Dostępne obszary masażu to: masaż punktowy, odcinkowy, pełny, górna część pleców, dolna część pleców — łącznie 5 opcji.

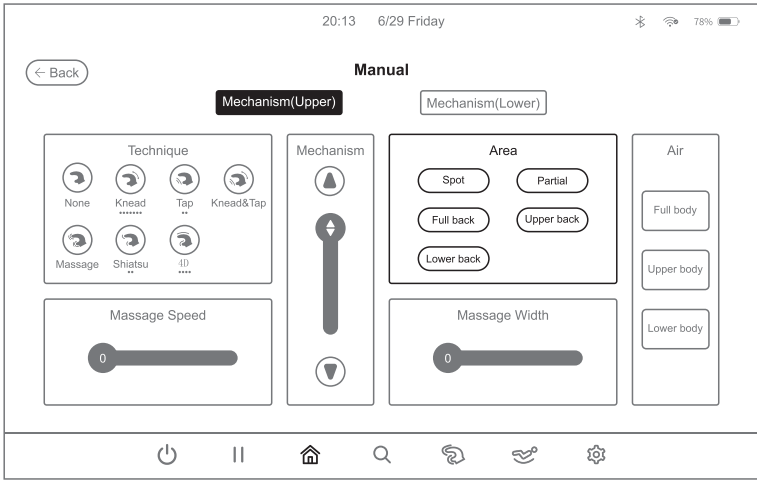

Przycisk	Opis	
Spot	Masaż punktowy w wybranym miejscu.	Uwaga: Przy wyborze technik masażu punktowego lub odcinkowego obszar masażu można dostosować za pomocą przycisków „góra” i „dół” obok przycisku ramion masujących w interfejsie informacyjnym.
Partial	Masaż odcinkowy w małym zakresie — ruchy tam i z powrotem.	
Full back	Masaż w pełnym zakresie — ruchy tam i z powrotem.	
Upper back	Masaż górnej części pleców — ruchy tam i z powrotem.	
Lower back	Masaż dolnej części pleców — ruchy tam i z powrotem.	

2.1.5.Szerokość masażu:

Po wejściu w tryb manualny kliknij suwak „Massage Width”, jak pokazano na rysunku, a następnie przesun w lewo lub w prawo, aby dostosować szerokość masażu do własnych potrzeb. Zakres od 1 (najwęższy) do 5 (najszerszy). Szerokość można regulować tylko przy technikach masażu: oklepywanie (2 techniki), Shiatsu (2 techniki), 4D (techniki 3 i 4). Regulacja możliwa tylko po wyborze techniki masażu lub obszaru masażu w trybie manualnym.

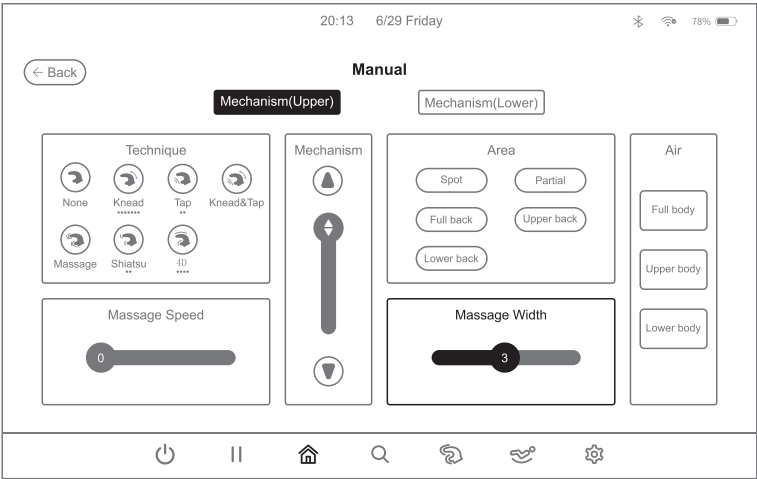

Regulacja szerokości górnego mechanizmu masującego				
1	2	3	4	5
Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5


Przycisk	Opis
5	Przesun w prawo, aby zwiększyć szerokość masażu (zakres 1–5).
1	Przesun w lewo, aby zmniejszyć szerokość masażu (zakres 1–5).

2.2. Mechanizm masujący (dolny):

Po wejściu w tryb manualny, jak pokazano na rysunku, kliknij przycisk „Mechanism (lower)”, a następnie wybierz odpowiednią funkcję masażu — techniki masażu, prędkość, regulacja ramion masujących, obszar, szerokość itp. Kliknij „Back”, aby wrócić do strony głównej.

2.2.1. Techniki masażu:


Po wejściu w tryb manualny, jak pokazano na rysunku, wybierz odpowiedni przycisk „technique” dla dolnego segmentu i rozpocznij masaż. Dostępne techniki to: brak, ugniatanie (7 technik), oklepywanie (2 techniki), ugniatanie z oklepywaniem (1 technika), Shiatsu (2 techniki) — razem 13 technik do wyboru.

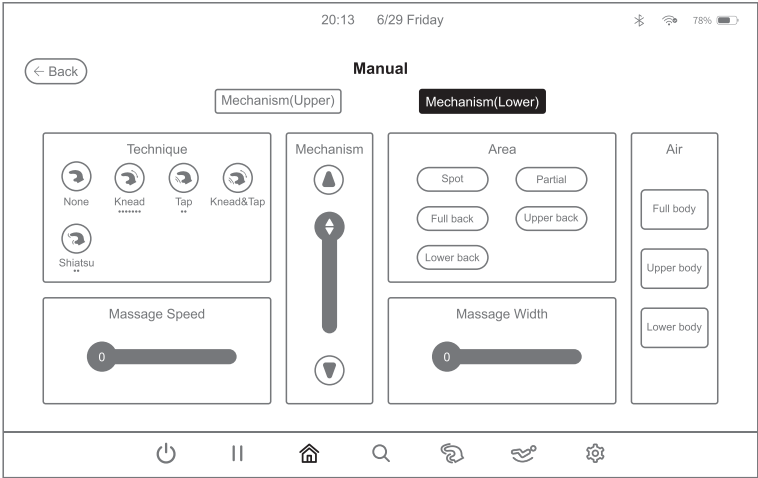

Funkcja		Regulacja	
Brak		Możliwa regulacja intensywności.	5 poziomów regulacji prędkości, szerokości, intensywności
Ugniatanie (7 technik)		Regulacja prędkości i intensywności.	
Oklepywanie (2 techniki)		Regulacja prędkości, szerokości i intensywności.	
Ugniatanie i oklepywanie (1 technika)		Regulacja prędkości i intensywności.	
Shiatsu (2 techniki)		Regulacja prędkości, szerokości i intensywności.	

2.2.2. Prędkość masażu:

Po wejściu w tryb manualny kliknij suwak „Massage Speed”, jak pokazano na rysunku, i przesun w lewo lub w prawo, aby dopasować prędkość masażu. Zakres od 1 (najwolniejszy) do 5 (najszybszy). Regulacja dostępna tylko przy technikach: ugniatanie (7), oklepywanie (2), ugniatanie i oklepywanie (1), Shiatsu (2). Możliwa tylko po wyborze techniki lub obszaru masażu w trybie manualnym.

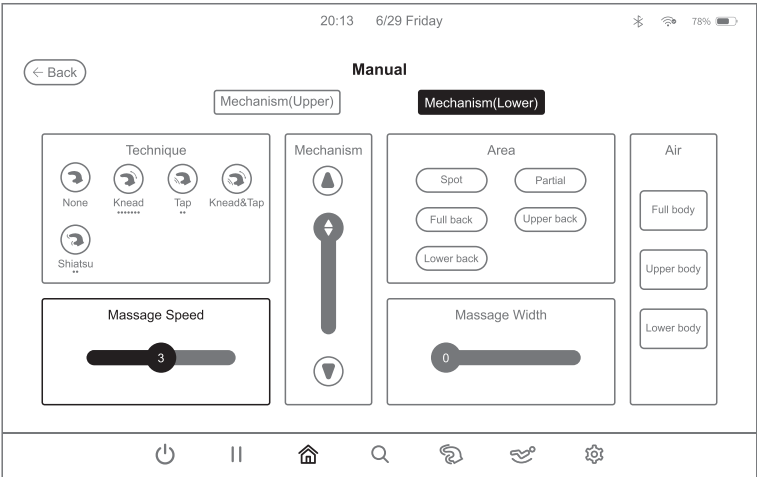


Regulacja prędkości masażu dolnego mechanizmu masującego				
Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5

Przycisk	Opis
	Przesun w prawo, aby zwiększyć prędkość masażu (zakres 1–5).
	Przesun w lewo, aby zmniejszyć prędkość masażu (zakres 1–5).


2.2.3. Regulacja mechanizmu masującego:

Wejdz w tryb manualny, jak pokazano na rysunku, i zgodnie z potrzebami wybierz przycisk „strzałka w górę” lub „strzałka w dół”, aby precyzyjnie dostosować pozycję mechanizmu masującego (dolnego). Regulacja możliwa tylko w trybie manualnym, w masażu punktowym lub odcinkowym.

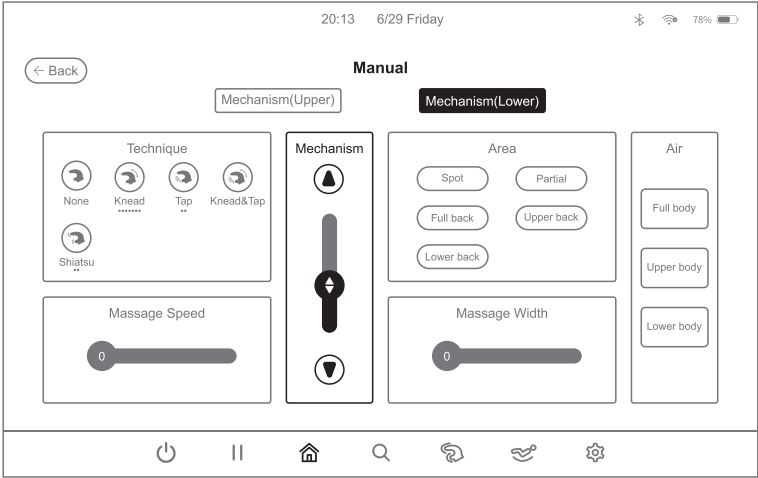


Przycisk	Opis
	Naciśnij, aby przesunąć ramiona masujące do góry; zwolnij przycisk, aby zatrzymać.
	Naciśnij, aby przesunąć ramiona masujące w dół; zwolnij przycisk, aby zatrzymać.

2.2.4. Obszar masażu: Po wejściu w tryb manualny, jak pokazano na poniższym rysunku, należy kliknąć przycisk „Area”, a następnie wybrać funkcję masażu zgodnie z potrzebami. Dostępne obszary masażu to: masaż punktowy, odcinkowy, pełny, górna część pleców, dolna część pleców — łącznie 5 opcji.

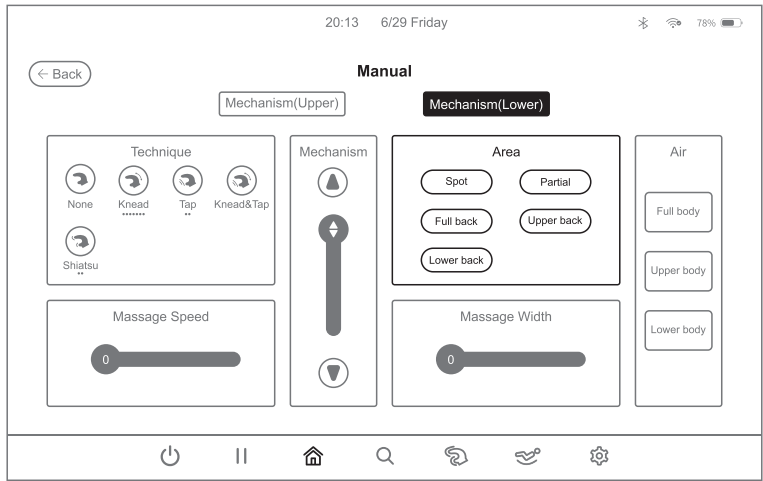

Przycisk	Opis	
Spot	Masaż punktowy w wybranym miejscu.	Przy wyborze technik masażu punktowego lub odcinkowego obszar masażu można dostosować za pomocą przycisków „góra” i „dół” obok przycisku ramion masujących w interfejsie informacyjnym.
Partial	Masaż odcinkowy w małym zakresie — ruchy tam i z powrotem.	
Full back	Masaż w pełnym zakresie — ruchy tam i z powrotem.	
Upper back	Masaż górnej części pleców — ruchy tam i z powrotem.	
Lower back	Masaż dolnej części pleców — ruchy tam i z powrotem.	


2.2.5. Szerokość masażu: Po wejściu w tryb manualny kliknij suwak „Massage Width”, jak pokazano na rysunku, a następnie przesunąć w lewo lub w prawo, aby dostosować szerokość masażu do własnych potrzeb. Zakres od 1 (najwęższy) do 5 (najszerzy). Szerokość można regulować tylko przy technikach masażu: oklepywanie (2 techniki) i Shiatsu (2 techniki). Regulacja możliwa tylko po wyborze techniki masażu lub obszaru masażu w trybie manualnym.

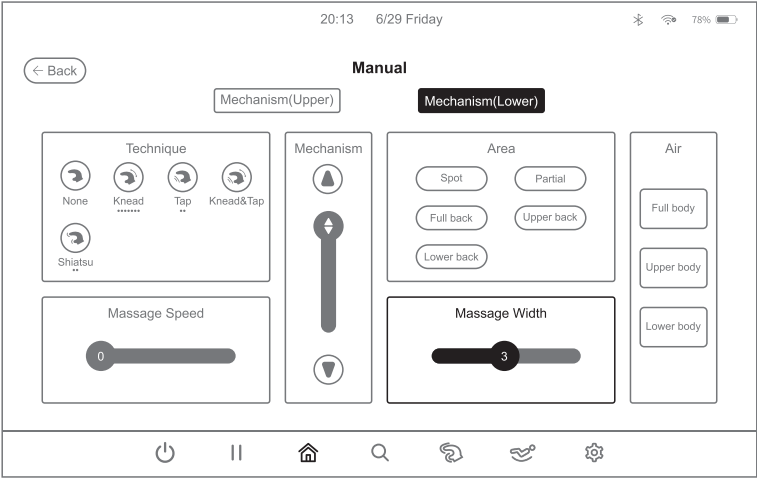

Regulacja szerokości dolnego mechanizmu masującego				
1	2	3	4	5
Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5

Przycisk	Opis
5	Przesunąć w prawo, aby zwiększyć szerokość masażu (zakres 1–5).
1	Przesunąć w lewo, aby zmniejszyć szerokość masażu (zakres 1–5).


2.3. Masaż poduszkami powietrznymi: Po wejściu w tryb manualny kliknij „Air”, a następnie wybierz funkcję masażu poduszkami w zależności od potrzeb. Dostępne tryby: całe ciało, górna część ciała, dolna część ciała.

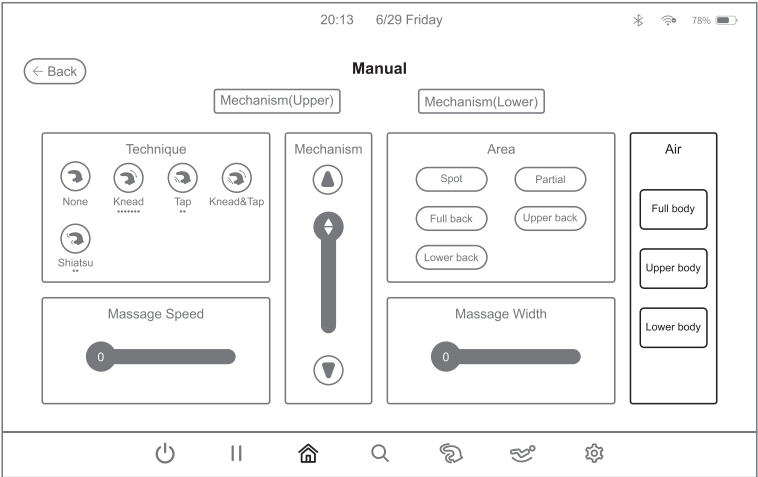


Przycisk	Opis
Full body	Włącz/wyłącz masaż poduszkami powietrznymi całego ciała.
Upper body	Włącz/wyłącz masaż poduszkami powietrznymi górnych partii ciała.
Lower body	Włącz/wyłącz masaż poduszkami powietrznymi dolnych partii ciała.

Schemat masażu poduszkami powietrznymi		
Masaż poduszkami powietrznymi górnych partii ciała.	Masaż poduszkami powietrznymi dolnych partii ciała.	Masaż poduszkami powietrznymi całego ciała.


3. Intensywność masażu: Na stronie głównej kliknij przycisk „Intensity”, jak pokazano na poniższym rysunku, aby przejść do interfejsu regulacji intensywności masażu. Następnie wybierz odpowiednie funkcje masażu zgodnie ze swoimi potrzebami, w tym: intensywność masażu ramionami masującymi, siłę masażu poduszkami powietrznymi dla górnej części ciała, siłę masażu poduszkami powietrznymi dla dolnej części ciała.

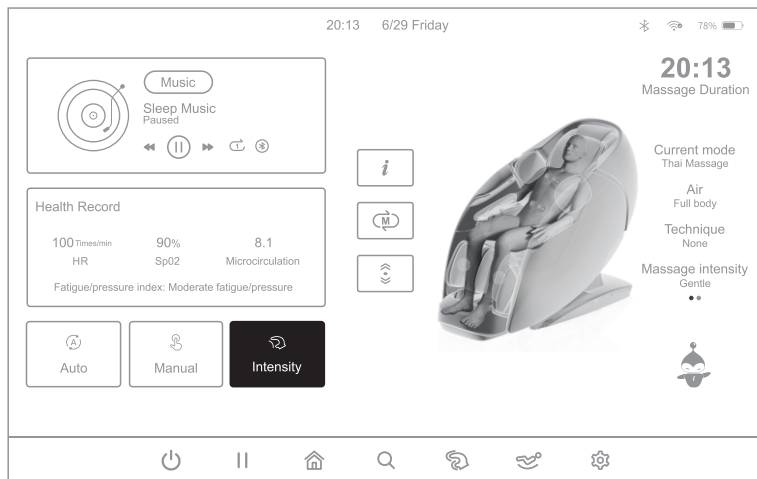

- 3.1. W interfejsie regulacji intensywności masażu można ustawić amplitudę wysuwania się mechanizmu masującego – dostępne jest 5 poziomów, gdzie poziom 1 oznacza najmniejszą amplitudę, a poziom 5 – największą. Można również regulować intensywność ciśnienia w poduszkach powietrznych dla górnej i dolnej części ciała – również w skali 1–5 (1 – najłagodniejsze, 5 – najmocniejsze).

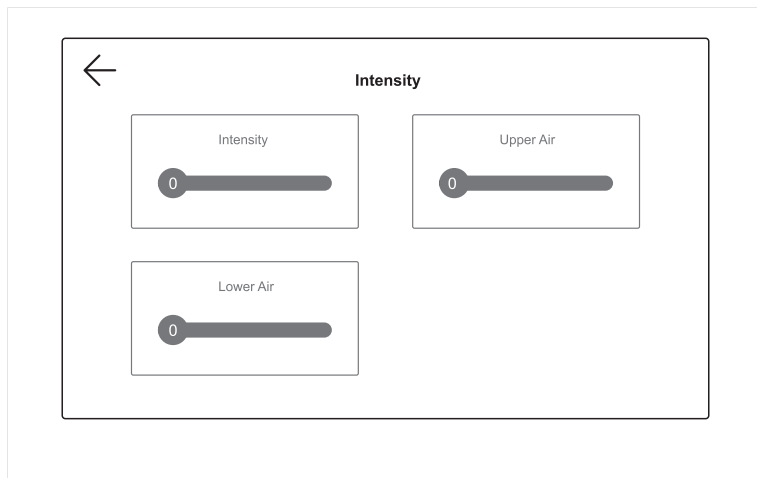

- 3.2. Intensywność masażu ramionami masującymi: Po wejściu do interfejsu intensywności masażu, wybierz suwak "Intensity", jak pokazano na poniższym rysunku, a następnie przesunij go w lewo lub w prawo, aby dostosować intensywność masażu do swoich potrzeb. Zakres regulacji: od 1 (najsłabsza) do 5 (najsilniejsza).
Regulacja intensywności dostępna jest tylko po wybraniu techniki lub obszaru masażu i rozpoczęciu masażu. Dotyczy następujących technik: brak, ugniatanie (7 technik), oklepywanie (2 techniki), ugniatanie z oklepywaniem (1 technika), chwytanie (1 technika), Shiatsu (2 techniki) oraz 4D (4 techniki).

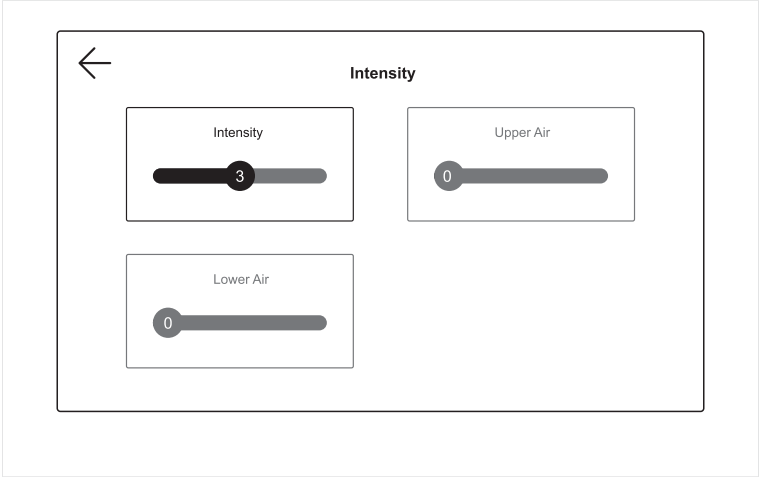


Uwaga: dolny mechanizm masujący nie umożliwia regulacji intensywności masażu.

Regulacja intensywności masażu				
Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5

Przycisk	Opis
	Przesunij suwak w prawo, aby zwiększyć intensywność masażu (zakres 1–5).
	Przesunij suwak w lewo, aby zmniejszyć intensywność masażu (zakres 1–5).


3.3. Siła masażu poduszkami powietrznymi górnej części ciała: Po wejściu do interfejsu regulacji intensywności masażu, wybierz i kliknij suwak „Upper Air”, jak pokazano na poniższym rysunku, a następnie przesunij go w lewo lub prawo, aby dostosować intensywność ciśnienia powietrza w poduszkach powietrznych do swoich potrzeb. Zakres regulacji: od 1 (najsłabsze) do 5 (najsilniejsze).

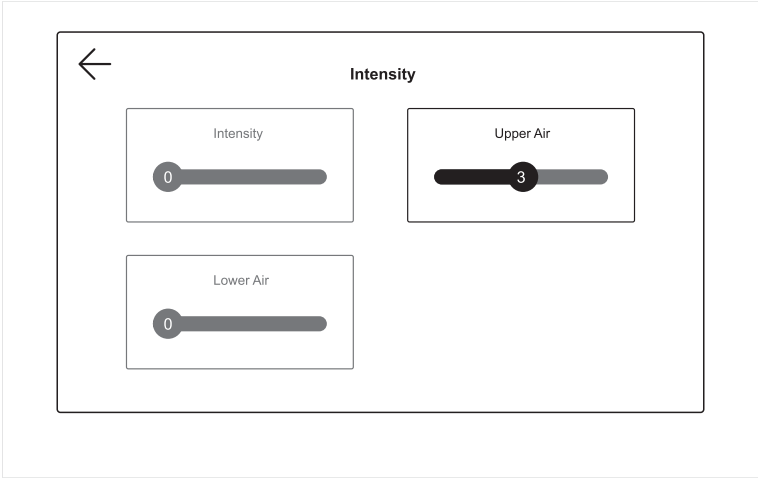

Regulacja siły masażu poduszkami powietrznymi górnej części ciała				
Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5

Przycisk	Opis
	Przesuń suwak w prawo, aby zwiększyć intensywność masażu poduszkami powietrznymi. Intensywność można regulować w zakresie od 1 do 5.
	Przesuń suwak w lewo, aby zmniejszyć intensywność masażu poduszkami powietrznymi. Intensywność można regulować w zakresie od 1 do 5.


3.4. Siła masażu poduszkami powietrznymi dolnej części ciała: Po wejściu do interfejsu regulacji intensywności masażu, wybierz i kliknij suwak „Lower Air”, jak pokazano na poniższym rysunku, a następnie przesunij go w lewo lub prawo, aby dostosować intensywność ciśnienia powietrza w poduszkach powietrznych do swoich potrzeb. Zakres regulacji: od 1 (najsłabsze) do 5 (najsilniejsze).

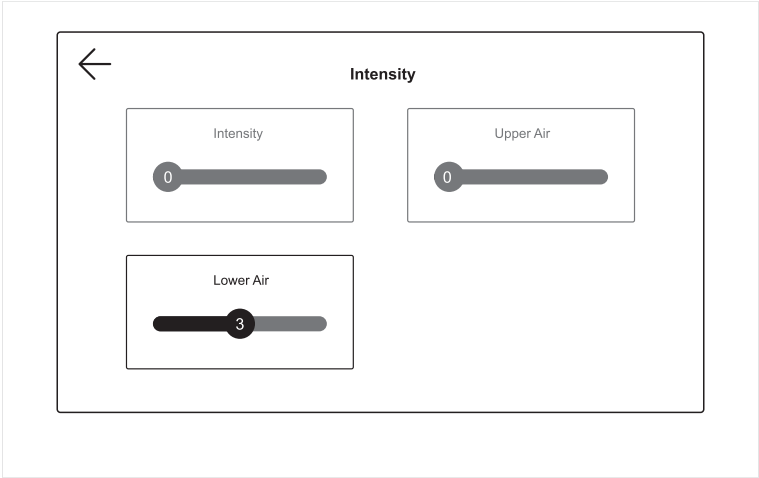


Regulacja siły masażu poduszkami powietrznymi dolnej części ciała				
Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5

Przycisk	Opis
	Przesuń suwak w prawo, aby zwiększyć intensywność masażu poduszkami powietrznymi. Intensywność można regulować w zakresie od 1 do 5.
	Przesuń suwak w lewo, aby zmniejszyć intensywność masażu poduszkami powietrznymi. Intensywność można regulować w zakresie od 1 do 5.


4. Funkcje pomocnicze: Na stronie głównej kliknij przycisk „i”, jak pokazano na poniższym rysunku, aby przejść do interfejsu wyboru funkcji pomocniczych. Następnie wybierz odpowiednią funkcję masażu z wyskakującego okna zgodnie ze swoimi potrzebami. Do wyboru są: masaż łydek, masaż poduszkami powietrznymi, masaż Piano rąk, rolkowy masaż stóp, ogrzewanie w ramionach masujących, jonizator powietrza, kołnierz grzewczy.

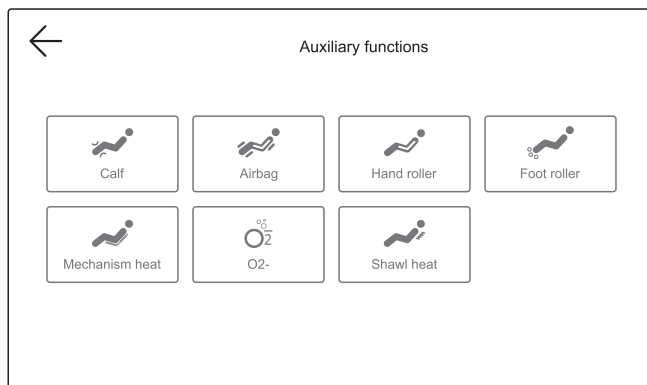


- 4.1. Masaż łydek: Po wejściu do interfejsu funkcji pomocniczych, jak pokazano na rysunku poniżej, kliknij przycisk „Calf”, aby włączyć lub wyłączyć funkcję masażu łydek. Po wewnętrznej stronie nóg działa funkcja masażu ugniatającego, a po zewnętrznej stronie – masaż poduszkami powietrznymi. Funkcja ta pomaga złagodzić sztywność lub napięcie mięśni łydek spowodowane długotrwałym wysiłkiem.

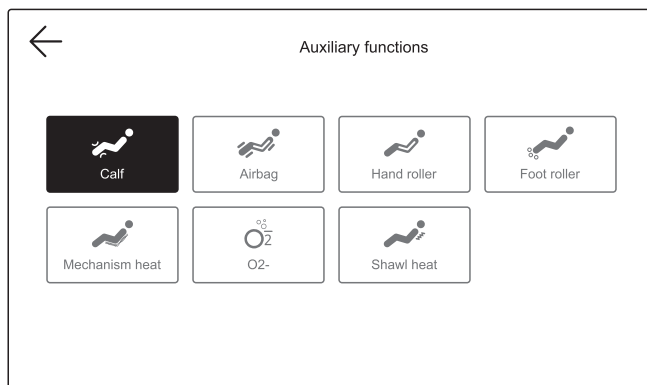

- 4.2. Masaż poduszkami powietrznymi: po wejściu do interfejsu funkcji pomocniczych, jak pokazano na poniższym rysunku, kliknij przycisk „Airbag”, aby uruchomić masaż poduszkami powietrznymi górnych części ciała, dolnych części ciała, całego ciała lub całkowicie wyłączyć tę funkcję.

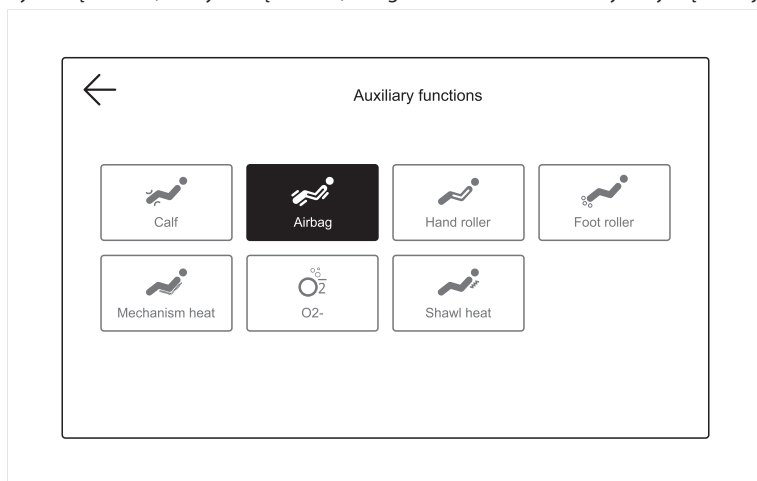

- 4.3. Masaż Piano: po wejściu do interfejsu funkcji pomocniczych, kliknij przycisk „Hand roller”, jak pokazano na rysunku poniżej, aby włączyć lub wyłączyć funkcję masażu Piano. Po włączeniu uruchomi się mechaniczny masaż rąk, który pomaga złagodzić sztywność i napięcie mięśni w przedramionach i dłoniach.

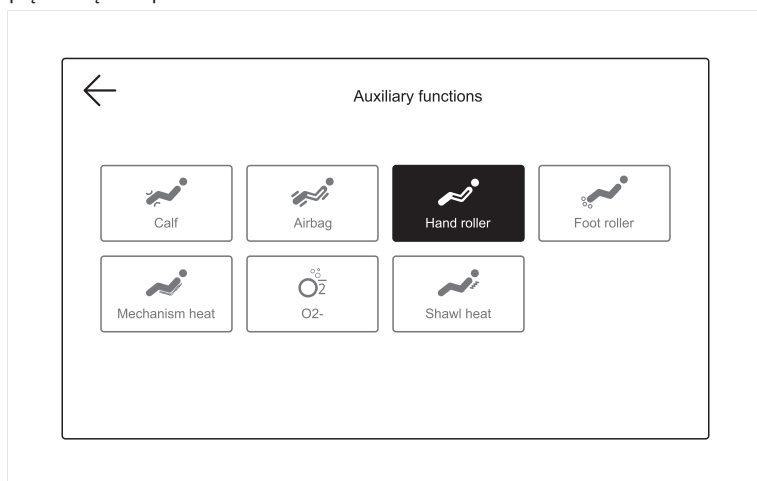

4.4. Rolki na stopy: po wejściu do interfejsu funkcji pomocniczych, kliknij przycisk „Foot roller”, jak pokazano na poniższym rysunku, aby włączyć lub wyłączyć funkcję rolkowego masażu stóp.


Dostępne są trzy prędkości:

Naciśnij pierwszy raz – prędkość 1;

Naciśnij drugi raz – prędkość 2;


Naciśnij trzeci raz – prędkość 3;

Naciśnij czwarty raz – wyłączenie funkcji. Przełączanie cykliczne.

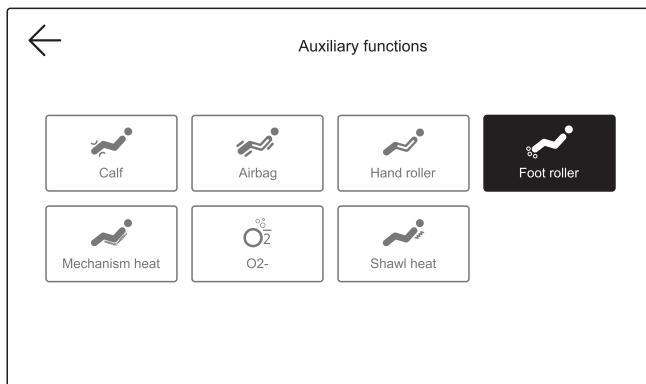


4.5. Ogrzewanie w mechanizmie masującym: po wejściu do interfejsu funkcji pomocniczych, jak pokazano na poniższym rysunku, kliknij przycisk „Mechanism heat”, aby włączyć lub wyłączyć funkcję ogrzewania (ogrzewanie za pomocą rozgrzanych kamieni nefrytowych).


Po 3 minutach od włączenia funkcji pojawia się uczucie ciepła.

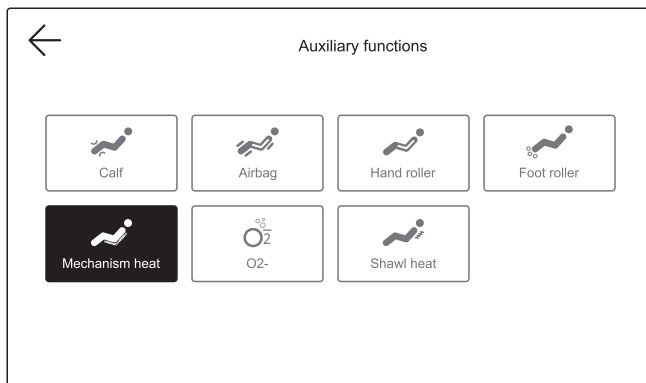

- 4.6. Jonizator powietrza: po wejściu do interfejsu funkcji pomocniczych, kliknij przycisk „O2-”, jak pokazano na poniższym rysunku, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

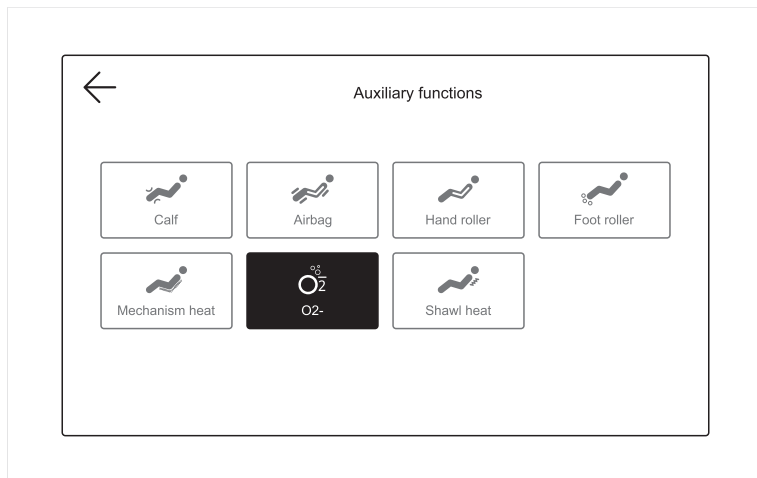


- 4.7. Kołnierz grzewczy: po wejściu do interfejsu funkcji pomocniczych, jak pokazano na rysunku poniżej, kliknij przycisk „Shawl heat”, aby włączyć lub wyłączyć funkcję ogrzewania za pomocą kołnierza grzewczego. Po 3 minutach od włączenia funkcji pojawia się uczucie ciepła.

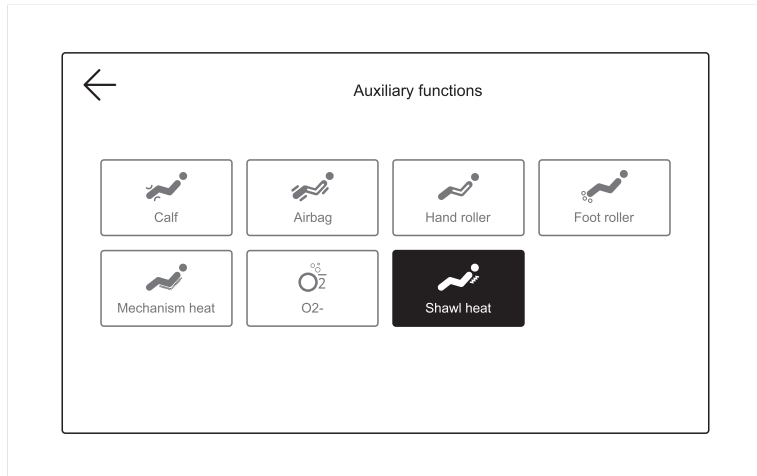


5. Pamięć programów własnych: Na stronie głównej, jak pokazano na rysunku, wybierz przycisk „M”, a następnie w wyskakującym oknie wybierz odpowiednią funkcję zapisu lub przywołania w zależności od potrzeb. Dostępne są dwie kategorie: zapis masażu (Save) i przywołanie zapisanego wcześniej masażu (Use).


- 5.1. Zapis masażu obejmuje: M1, M2, M3. Po wybraniu jednej z opcji zapisu (M1, M2, M3), kliknij przycisk „Save”, a system automatycznie zapisze aktualnie uruchomiony program masażu i przypisze go do wybranego miejsca.
- 5.2. Przywołanie masażu obejmuje: M1, M2, M3; po wybraniu wariantu, kliknij przycisk „Use”, a system przywoła i uruchomi wcześniej zapisany program masażu.

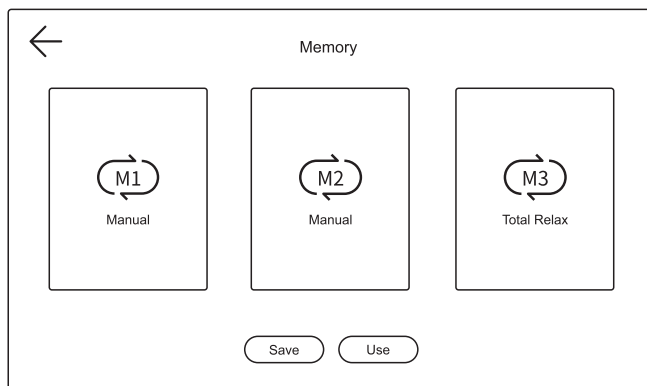


6. Regulacja ramion: Na stronie głównej, jak pokazano na rysunku poniżej, kliknij przycisk regulacji pozycji ramion, aby wejść do interfejsu regulacji i w wyskakującym oknie wybrać odpowiednią funkcję masażu zgodnie z potrzebami: regulacja ramion lub dopasowanie rozmiaru stopy.

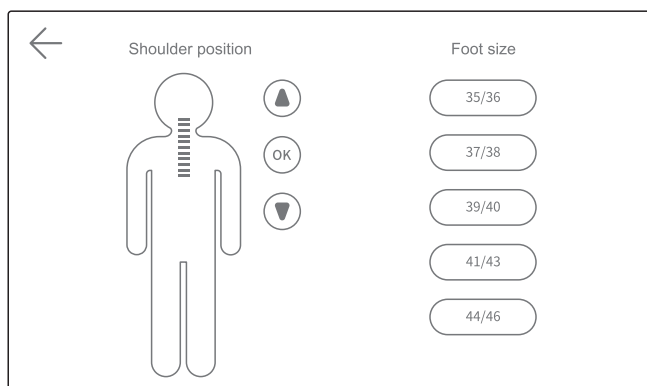


- 6.1. Regulacja pozycji ramion: Po wejściu do interfejsu regulacji ramion, jak pokazano na rysunku poniżej, wybierz górny przycisk „▲” lub dolny przycisk „▼” w wyskakującym oknie, aby dostosować pozycję ramion przesuwając je w górę lub w dół. Do wyboru jest łącznie 11 pozycji. Kliknij przycisk „OK”, aby zatwierdzić.

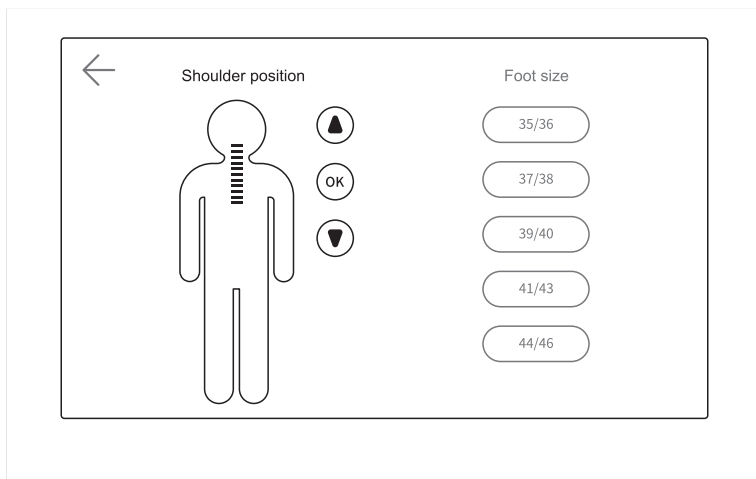

- 6.2. Wybór rozmiaru stopy: Po wejściu do interfejsu regulacji ramion, jak pokazano na rysunku poniżej, wybierz rozmiar stopy zgodnie z potrzebami. Dostępnych jest 5 rozmiarów: 35/36, 37/38, 39/40, 41/43, 44/46.

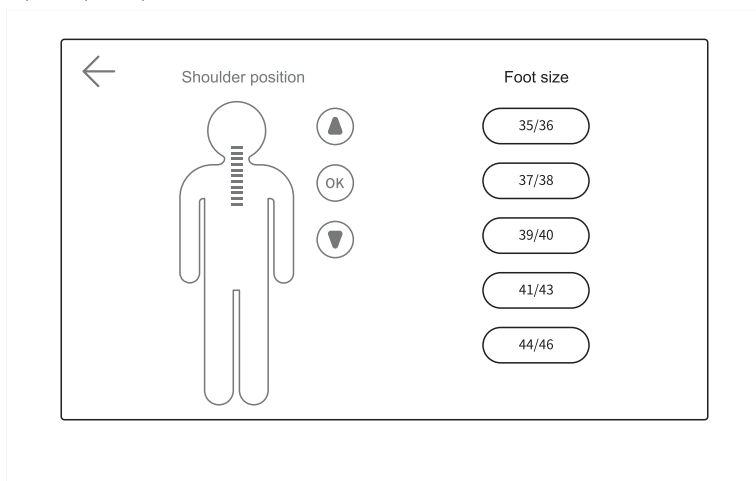

7. Regulacja czasu masażu: Na stronie głównej, jak pokazano na rysunku poniżej, kliknij przycisk z czasem masażu, aby wejść do interfejsu regulacji. W wyskakującym oknie możesz dostosować czas trwania masażu, klikając „+” lub „-”, lub wybrać jeden z ustalonych czasów: 10, 20 lub 30 minut.

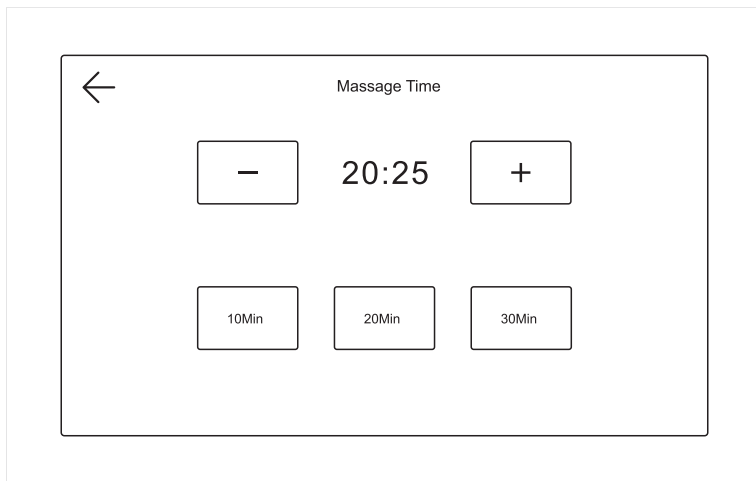

8. Wyświetlacz statusu masażu: Na stronie głównej przesunij obszar wyświetlania statusu masażu w lewo lub w prawo, jak pokazano na rysunku poniżej, aby zobaczyć aktualny status masażu: program masażu, tryb poduszek powietrznych, technika masażu, moc, intensywność, szerokość, prędkość, rolki na stopy.



9. Sterowanie głosowe: Na stronie głównej, jak pokazano na rysunku poniżej, kliknij na ikonę w prawym dolnym rogu pilota, aby aktywować funkcję asystenta głosowego (należy najpierw sprawdzić, czy przycisk sterowania głosowego w interfejsie ustawień jest włączony. Jeśli nie jest, przejdź do ustawień i aktywuj funkcję sterowania głosowego), lub zbliż się do prawego podłokietnika i wypowiedz „Hi Alice” albo „Hey Alice”, aby obudzić asystenta głosowego. Gdy asystent odpowie „I’m here”, oznacza to, że został aktywowany. Po uruchomieniu asystenta głosowego można sterować fotelem masującym za pomocą poleceń głosowych.
- 9.1. Użytkownik może również krótko nacisnąć przycisk sterowania głosowego na podłokietniku, aby obudzić asystenta głosowego, a długie naciśnięcie tego przycisku przez 3 sekundy włącza lub wyłącza asystenta.
- 9.2. Po aktywacji asystenta głosowego należy wypowiedzieć polecenie w ciągu 6 sekund. Gdy asystent odpowie na polecenie wybudzające, można kontynuować wydawanie poleceń. Odstęp między dwoma powiązаныmi komendami nie może przekroczyć 6 sekund – w przeciwnym razie konieczne będzie ponowne wybudzenie asystenta. Szczegółowa tabela komend głosowych znajduje się poniżej:

Uwaga: Aby aktywować sterowanie głosowe, należy używać języka angielskiego. Mów wolno i używaj dokładnych sformułowań z poniższej tabeli.


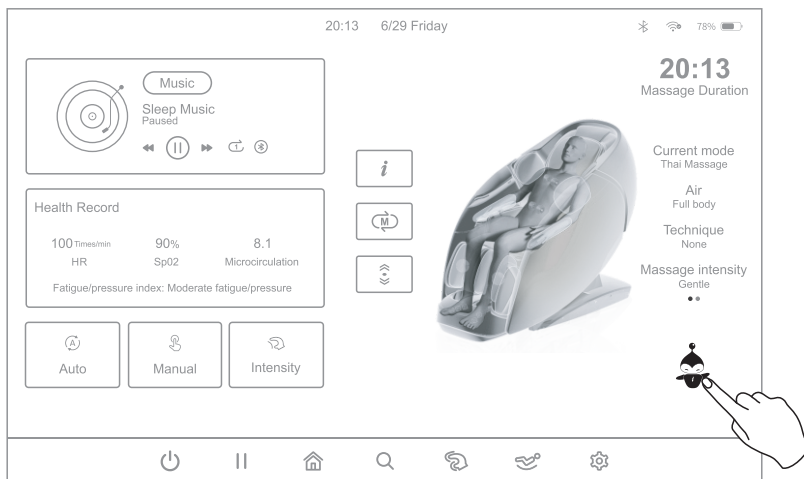



Tabela komend głosowych		
Wybudzenie asystenta: „Hi Alice” lub „Hey Alice”. Odpowiedź: I am here		
1	Massage on	Odpowiedź: Ok, Massage on
2	Massage close	Odpowiedź: Ok, Massage close
3	Total Relax	Odpowiedź: Ok, Total Relax
4	Energy Boost	Odpowiedź: Ok, Energy Boost
5	Sweet Dream	Odpowiedź: Ok, Sweet Dream
6	Neck & Shoulder Care	Odpowiedź: Ok, Neck & Shoulder Care
7	Lunch Break	Odpowiedź: Ok, Lunch Break
8	Thai Massage	Odpowiedź: Ok, Thai Massage
9	Open the air pressure	Odpowiedź: Ok, Open the air pressure
10	Close the air pressure	Odpowiedź: Ok, Close the air pressure
11	Up the seat position	Odpowiedź: Ok, Up the seat position
12	Down the seat position	Odpowiedź: Ok, Down the seat position
13	Change the other mode	Odpowiedź: Ok, Change the other mode
14	Go little down	Odpowiedź: Ok, Go little down
15	Go little up	Odpowiedź: Ok, Go little up

Uwaga: polecenia 14 i 15 można używać tylko po poleceniu 13.


10. Ustawienia najczęściej używanych funkcji: Na stronie głównej, jak pokazano na poniższej ilustracji, kliknij przycisk „WiFi, Bluetooth” w prawym górnym rogu ekranu, aby przejść do interfejsu najczęściej używanych ustawień. W wyskakującym oknie dostosuj ustawienia, w tym połączenie WiFi, połączenie Bluetooth, regulację głośności, jasności i inne.

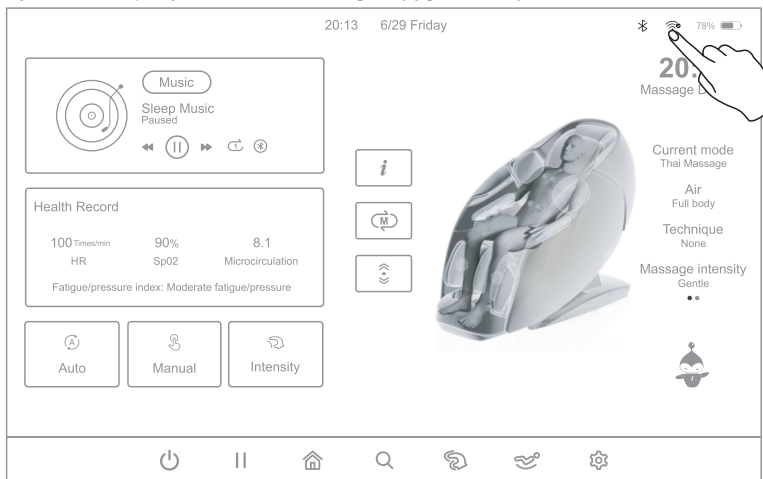


- 10.1. Połączenie WiFi: Po wejściu do interfejsu ustawień najczęściej używanych funkcji, kliknij przycisk „WiFi Connection” w wyskakującym oknie. System automatycznie przejdzie do interfejsu ustawień Internetu – wybierz sieć, z którą chcesz się połączyć, a następnie nawiąż połączenie.

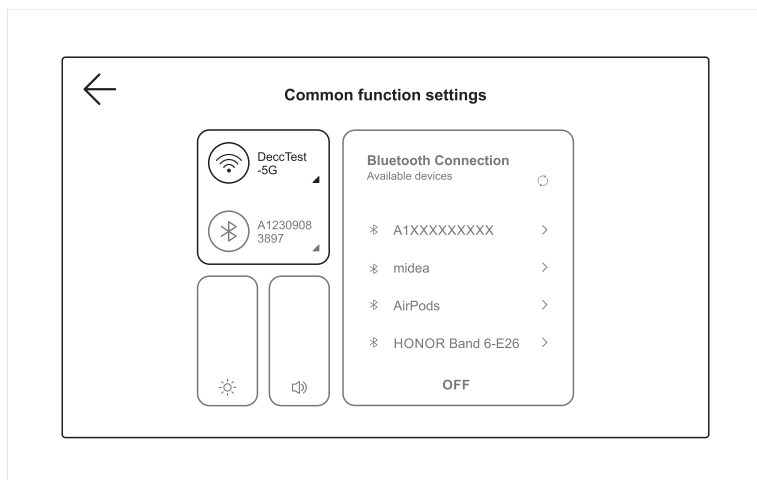


- 10.2. Połączenie Bluetooth: Po wejściu do interfejsu ustawień najczęściej używanych funkcji, kliknij przycisk „Bluetooth Connection” w wyskakującym oknie, a następnie kliknij, aby rozwinąć okno Bluetooth. Wybierz nazwę urządzenia Bluetooth, z którym chcesz się połączyć, dokonaj parowania i połączenia (podczas korzystania z fotela masującego należy najpierw połączyć się przez Bluetooth, a dopiero potem rozpocząć masaż).

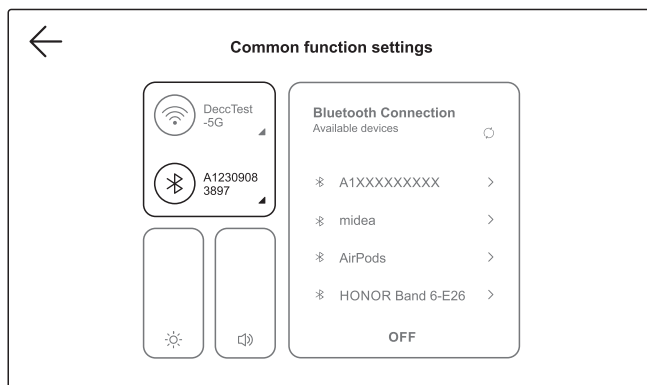


- 10.3. Regulacja jasności ekranu: Po wejściu do interfejsu ustawień najczęściej używanych funkcji, kliknij suwak „Brightness Adjustment” w wyskakującym oknie, a następnie przesun w górę lub w dół, aby dostosować jasność panelu sterującego.

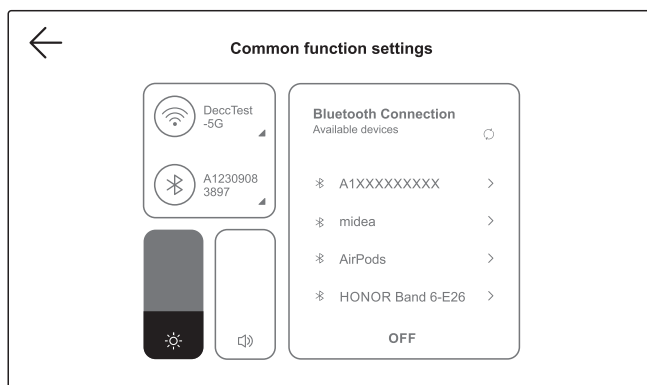

- 10.4. Regulacja głośności: Po wejściu do interfejsu ustawień najczęściej używanych funkcji, kliknij przycisk suwaka „Volume Adjustment” w wyskakującym oknie, a następnie przesun w górę lub w dół, aby dostosować poziom głośności.

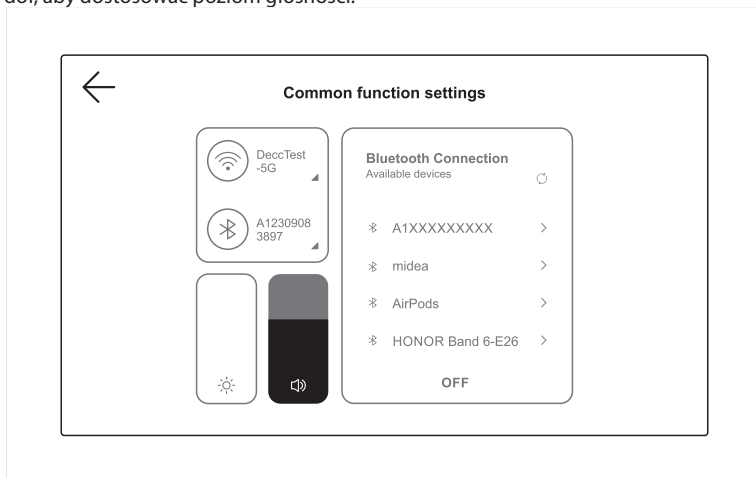


11. Muzyka relaksacyjna: Na stronie głównej, jak pokazano na ilustracji, można kliknąć ikonę „Sleep Music” w stanie odtwarzania muzyki, aby korzystać z podstawowej funkcji odtwarzania – przełączanie utworów, pauza/wznowienie, odtwarzanie w pętli, połączenie Bluetooth i inne funkcje.

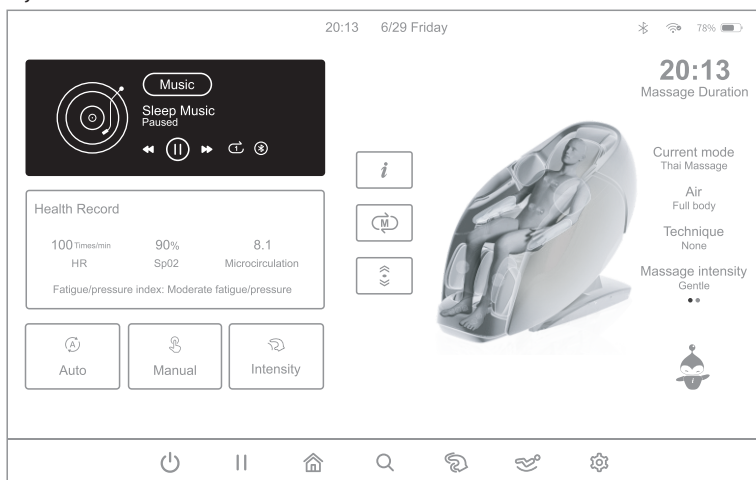


V. Wykrywanie stanu zdrowia (możesz korzystać z tej funkcji po włączeniu fotela masującego):


Kliknij ikonę lupki na pasku menu w dolnej części ekranu, aby wejść do interfejsu wykrywania stanu zdrowia, który obejmuje rozpoczęcie pomiaru, rekomendację programów i zakończenie wykrywania.

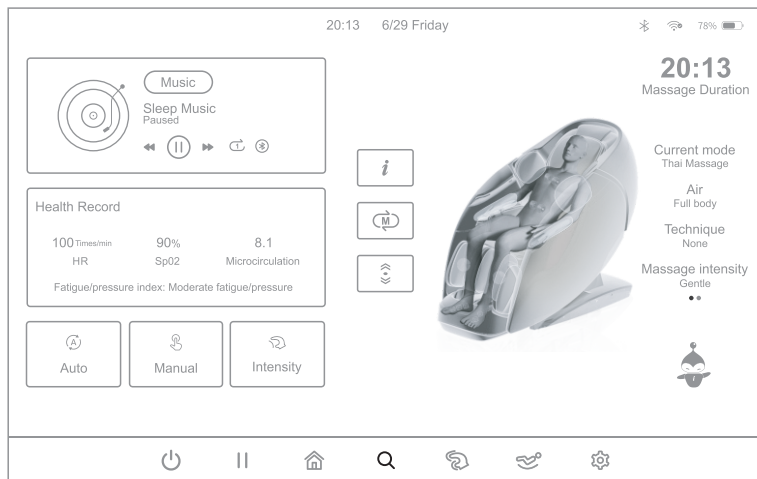


1. **Rozpoczęcie wykrywania:** Po wejściu do interfejsu wykrywania stanu zdrowia, delikatnie umieść palec wskazujący lub środkowy na czujniku, a następnie naciśnij przycisk rozpoczęcia wykrywania. Po kilku sekundach zostaną wyświetlone dane w czasie rzeczywistym: tętno, poziom tlenu we krwi oraz mikrocyrkulacja – należy poczekać na zakończenie pomiaru.

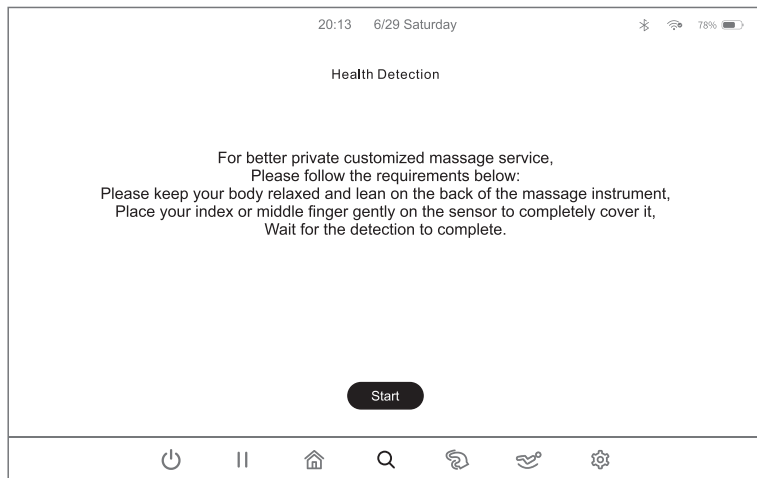


- Oczekiwanie na wykrycie: Po zakończeniu zbierania danych i wykrywania, na ekranie pojawią się aktualne dane użytkownika: tętno, mikrocyrkulacja, poziom tlenu we krwi oraz wskaźnik zmęczenia/stresu.

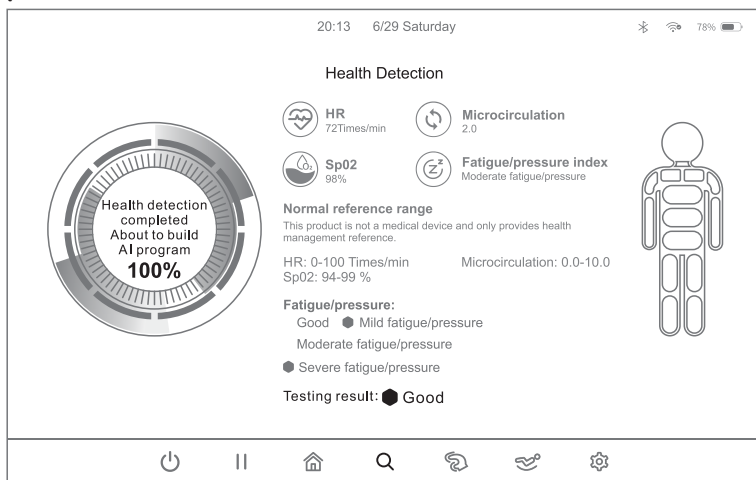


- Rekomendowany program: Po zakończeniu prawidłowego wykrywania, zostaną wyświetlone wyniki: tętno, poziom tlenu we krwi oraz poziom zmęczenia. Poziom tlenu oznacza stężenie tlenu we krwi. Na podstawie tych wyników sztuczna inteligencja zaproponuje odpowiedni program automatyczny. Wybierz „Yes”, aby rozpocząć korzystanie z zalecanego programu masażu.

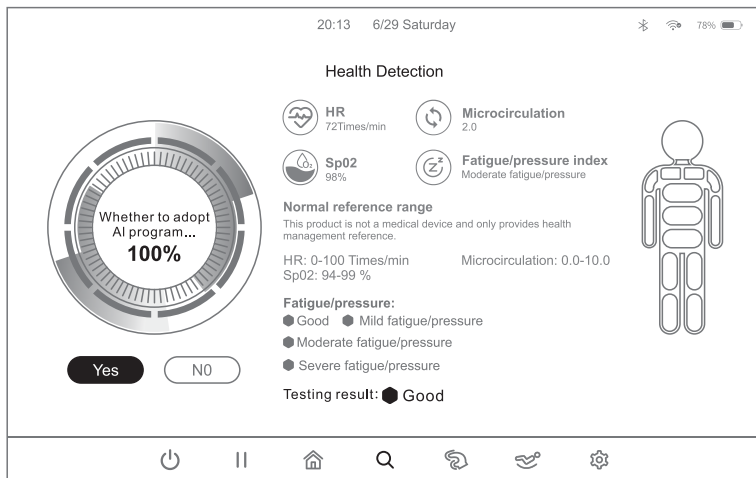

4. Zakończenie wykrywania: W trakcie wykrywania stanu zdrowia naciśnij przycisk „Exit”, aby przerwać pomiar i powrócić do stanu masażu sprzed wykrywania..

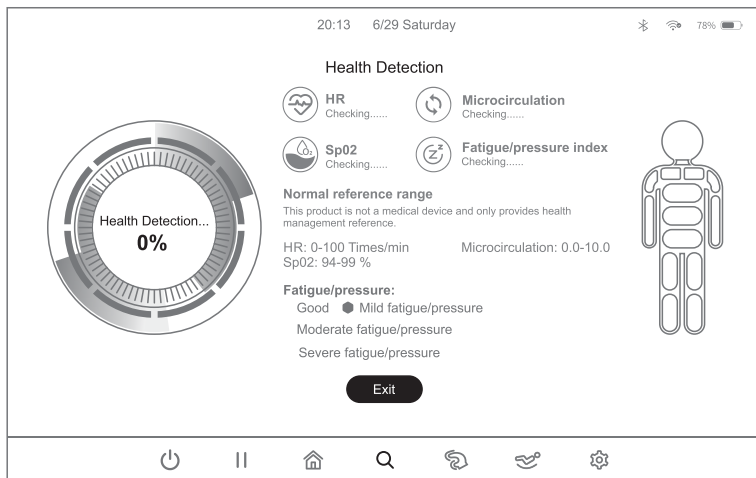


5. Brak wykrycia prawidłowych danych: Jeśli nie zostaną wykryte prawidłowe dane, pojawi się komunikat z prośbą o ponowne wykrycie. Wybierz „Retest”, aby uruchomić pomiar jeszcze raz, lub wybierz „Exit”, aby wrócić do trybu masażu sprzed pomiaru.

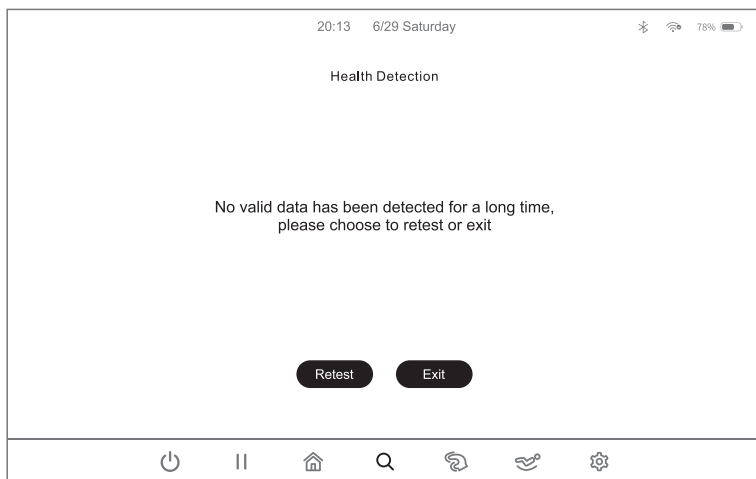


VI. Regulacja intensywności masażu (możesz korzystać z tej funkcji po włączeniu fotela masującego)

Kliknij przycisk intensywności na pasku menu u dołu ekranu, aby przejść do interfejsu regulacji intensywności masażu. Do wyboru są trzy poziomy intensywności: delikatny, umiarkowany, mocny.

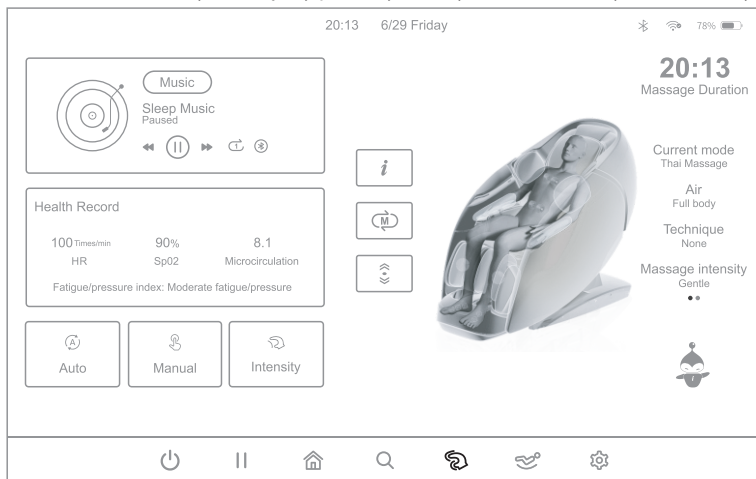


1. Wybór intensywności masażu: Po wejściu do interfejsu regulacji intensywności masażu, jak pokazano poniżej, kliknij odpowiedni przycisk intensywności. Tryb delikatny "Gentle" oznacza najniższy poziom, a tryb mocny "Strong" – najwyższy.

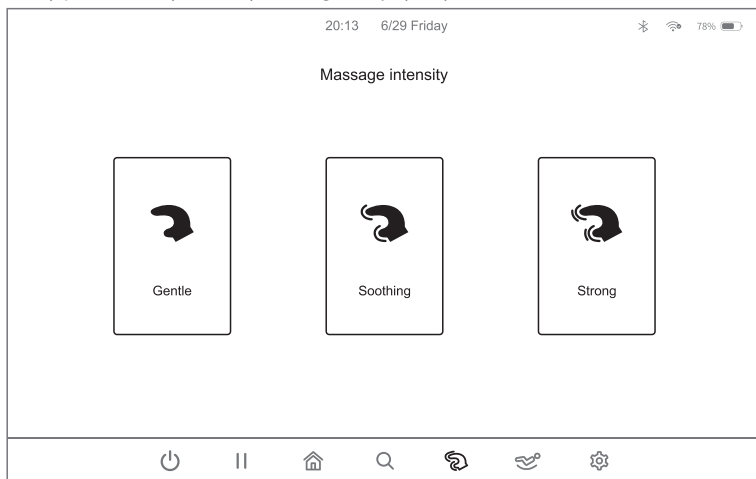


VII. Regulacja pozycji (możesz korzystać z tej funkcji po włączeniu fotela masującego)

Kliknij przycisk regulacji pozycji na pasku menu u dołu ekranu, aby przejść do interfejsu regulacji pozycji masażu, a następnie dostosuj kąt rozłożenia fotela w zależności od potrzeb.

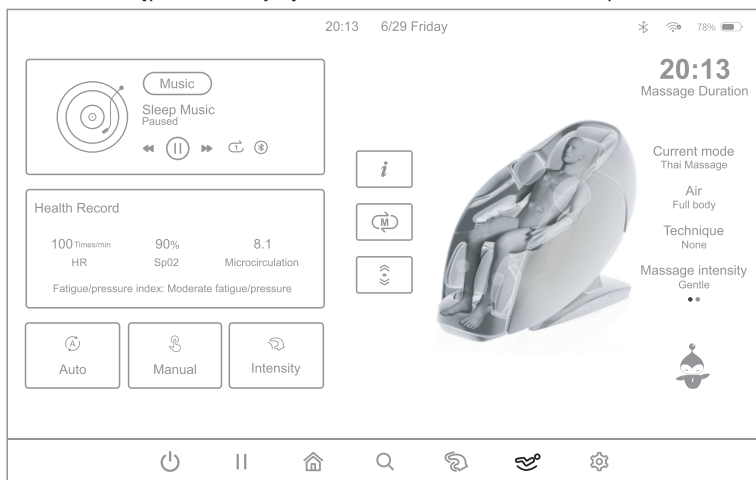

1. Wybór ustawienia pozycji siedzącej: Po wejściu do interfejsu regulacji pozycji, jak pokazano na ilustracji, możesz kliknąć odpowiednie ikony regulacji, w tym: zmniejszanie wysunięcia podnóżka, zwiększanie wysunięcia podnóżka, unoszenie podnóżka, opuszczanie podnóżka, unoszenie całego fotela, opuszczanie całego fotela, oparcie w górę, oparcie w dół, Zero Gravity I, Zero Gravity II.

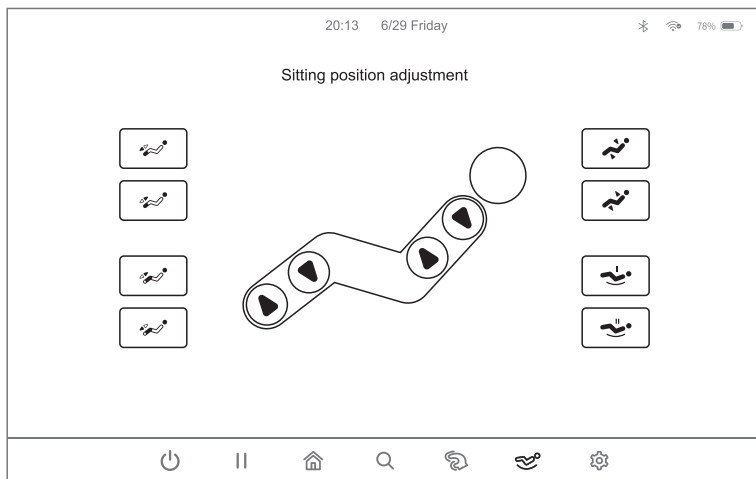

1.1. Regulacja pozycji Zero Gravity

Przycisk	Opis
	Automatycznie ustawia fotel masujący w pozycji Zero Gravity I.
	Automatycznie ustawia fotel masujący w pozycji Zero Gravity II.

1.2. Regulacja wysunięcia podnóżka

Przycisk	Opis
	Skracanie wysunięcia podnóżka: przytrzymaj, aby podnóżek poruszał się powoli w górę; puść, aby zatrzymać. Przy osiągnięciu granicy usłyszysz sygnał dźwiękowy.
	Wydłużanie wysunięcia podnóżka: przytrzymaj, aby podnóżek poruszał się powoli w dół; puść, aby zatrzymać. Przy osiągnięciu granicy usłyszysz sygnał dźwiękowy.

1.3. Regulacja długości masażera nóg

Przycisk	Opis
	Przytrzymaj, aby mechanizm poruszał się powoli w górę; puść, aby zatrzymać. Przy osiągnięciu granicy usłyszysz sygnał dźwiękowy.
	Przytrzymaj, aby mechanizm poruszał się powoli w dół; puść, aby zatrzymać. Przy osiągnięciu granicy usłyszysz sygnał dźwiękowy.

1.4. Regulacja podnoszenia/opuszczania całego urządzenia

Przycisk	Opis
	Przytrzymaj, by oparcie poruszało się powoli w górę, a podnózek w dół; puść, by zatrzymać. Przy osiągnięciu granicy usłyszysz sygnał dźwiękowy. Po zakończeniu system automatycznie wykryje długość nóg.
	Przytrzymaj, by oparcie poruszało się powoli w dół, a podnózek w górę; puść, by zatrzymać. Przy osiągnięciu granicy usłyszysz sygnał dźwiękowy. Po zakończeniu system automatycznie wykryje długość nóg.

1.5. Regulacja kąta wychylenia podnóżka


Przycisk	Opis
	Przytrzymaj, by mechanizm poruszał się powoli w górę; puść, by zatrzymać. Przy osiągnięciu granicy usłyszysz sygnał dźwiękowy. Po zakończeniu system automatycznie wykryje długość nóg.
	Przytrzymaj, by mechanizm poruszał się powoli w dół; puść, by zatrzymać. Przy osiągnięciu granicy usłyszysz sygnał dźwiękowy. Po zakończeniu system automatycznie wykryje długość nóg.

1.6. Regulacja kąta rozłożenia oparcia


Przycisk	Opis
	Podnoszenie oparcia: przytrzymaj, by oparcie poruszało się powoli w górę; puść, by zatrzymać. Przy osiągnięciu granicy usłyszysz sygnał dźwiękowy.
	Opuszczanie oparcia: przytrzymaj, by oparcie poruszało się powoli w dół; puść, by zatrzymać. Przy osiągnięciu granicy usłyszysz sygnał dźwiękowy.

VIII. Ustawienia (możesz korzystać z tej funkcji po włączeniu fotela do masażu)


Kliknij przycisk „Ustawienia” na pasku menu znajdującym się na dole ekranu, aby wejść do interfejsu ustawień, a następnie dokonaj ustawień systemowych zgodnie z potrzebami.

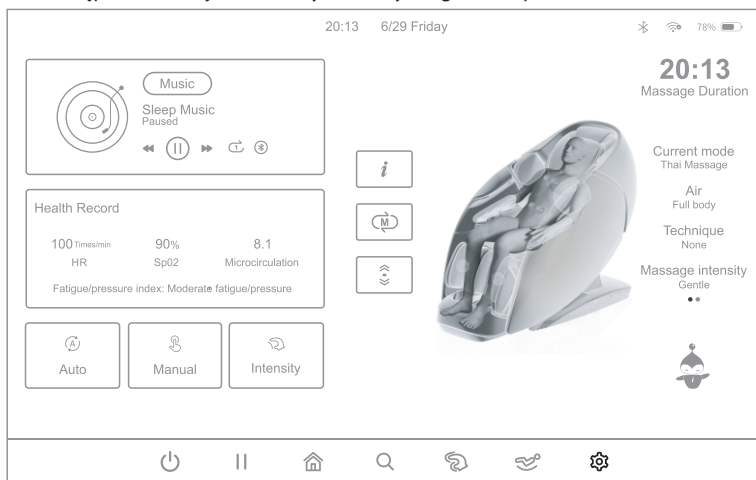


1. Po wejściu do interfejsu ustawień kliknij odpowiednią ikonę ustawień systemowych, jak pokazano na poniższym rysunku; następnie skonfiguruj ustawienia systemowe - znajdziesz tu ustawienia podstawowe, aktualizację oprogramowania i informacje o nas.

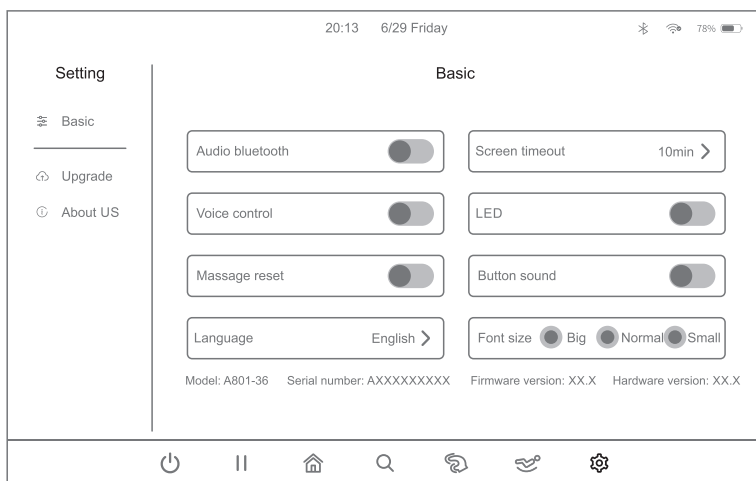


2. Ustawienia podstawowe: po wejściu do interfejsu ustawień kliknij ikonę „Basic”, jak pokazano na rysunku poniżej; następnie skonfiguruj system fotela do masażu zgodnie z wymaganiami, w tym: Bluetooth, czas wygaszania ekranu, sterowanie głosowe, oświetlenie LED, reset pozycji fotela po zakończonym masażu, dźwięk przycisków, wybór języka, rozmiar czcionki. Możesz tu również sprawdzić model produktu, wersję oprogramowania, wersję firmware'u, wersję sprzętową i inne informacje o produkcie i urządzeniu.

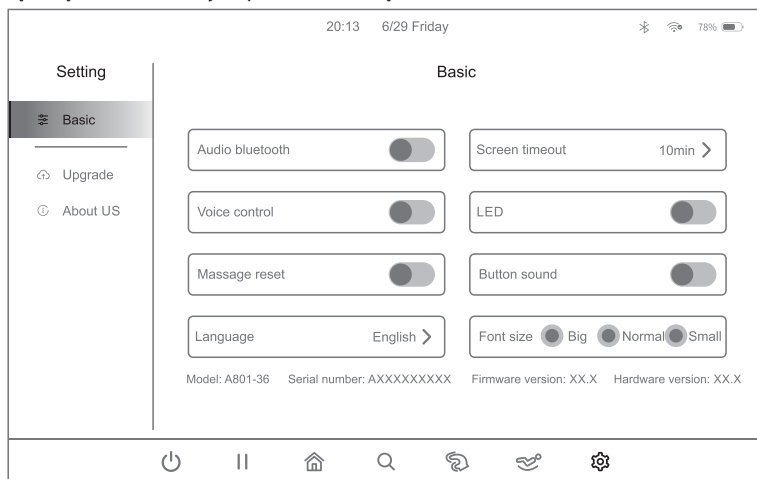


- 2.1. Audio Bluetooth: po wejściu do interfejsu ustawień wybierz przełącznik „Audio Bluetooth”, jak pokazano na rysunku poniżej; następnie włącz lub wyłącz funkcję Bluetooth. Po włączeniu funkcji Bluetooth można sparować i połączyć urządzenie źródła dźwięku z funkcją Bluetooth (np. telefon komórkowy, tablet MID itp.) z modulem Bluetooth fotela do masażu, a muzyka odtwarzana przez urządzenie źródłowe zostanie przesłana bezprzewodowo do systemu audio fotela i odtworzona.

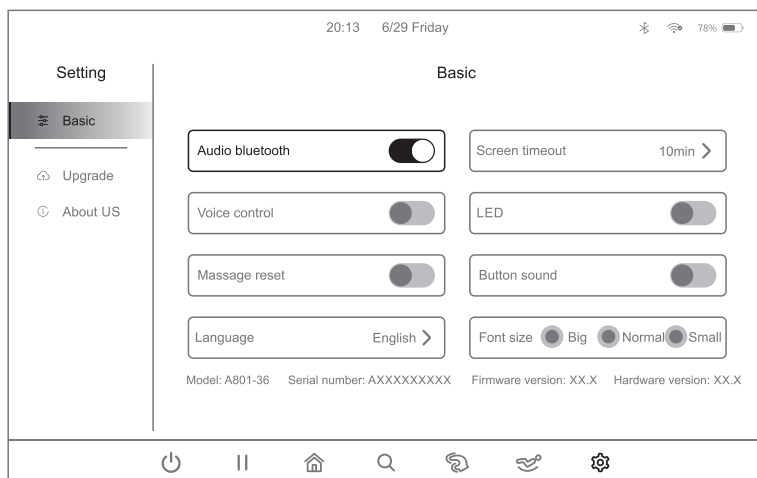


2.2. Wygaszanie ekranu: po wejściu do interfejsu ustawień kliknij prawy przycisk „Screen timeout”, jak pokazano na rysunku poniżej, i dostosuj czas wygaszania ekranu w wyskakującym interfejsie.

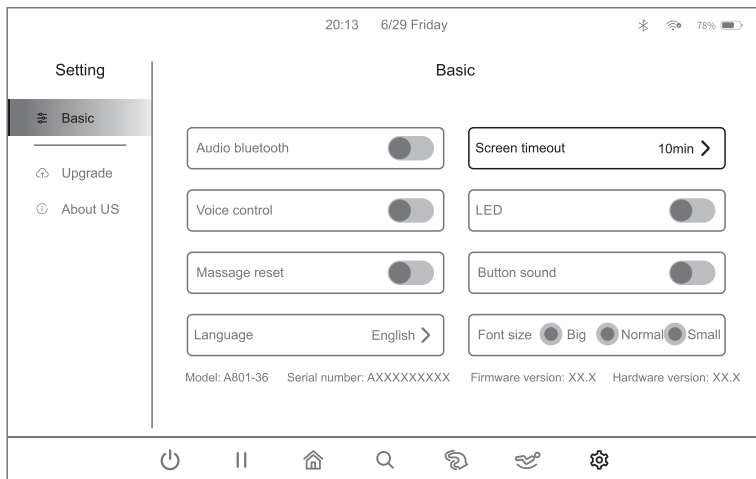


2.2.1. Po wejściu do interfejsu wygaszania ekranu ustaw automatyczny czas wyłączenia ekranu zgodnie z preferencjami. Dostępnych jest 8 opcji czasu: 15 sekund, 30 sekund, 1 minuta, 2 minuty, 5 minut, 10 minut, 30 minut oraz brak wygaszania.

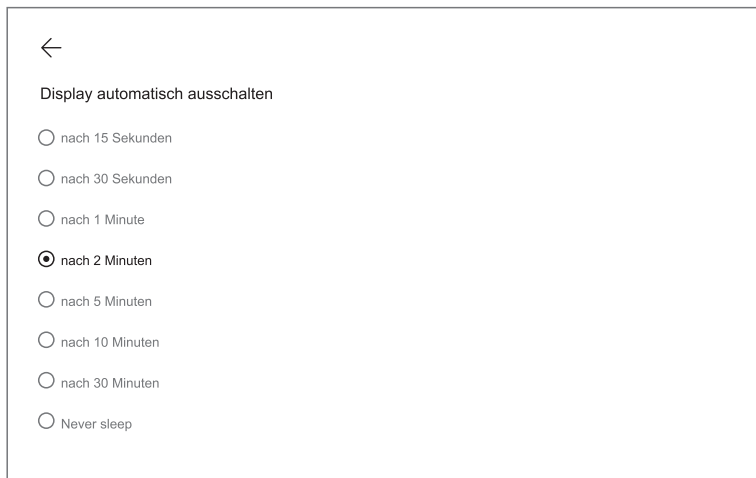


- 2.3. Sterowanie głosowe: po wejściu do interfejsu ustawień wybierz przełącznik „Voice control”, jak pokazano na rysunku poniżej, a następnie włącz lub wyłącz funkcję sterowania głosowego. Po włączeniu tej funkcji możesz sterować fotelem do masażu głosem, korzystając z odpowiednich komend głosowych. Szczegóły dotyczące fraz aktywujących głos znajdziesz na stronie 53.

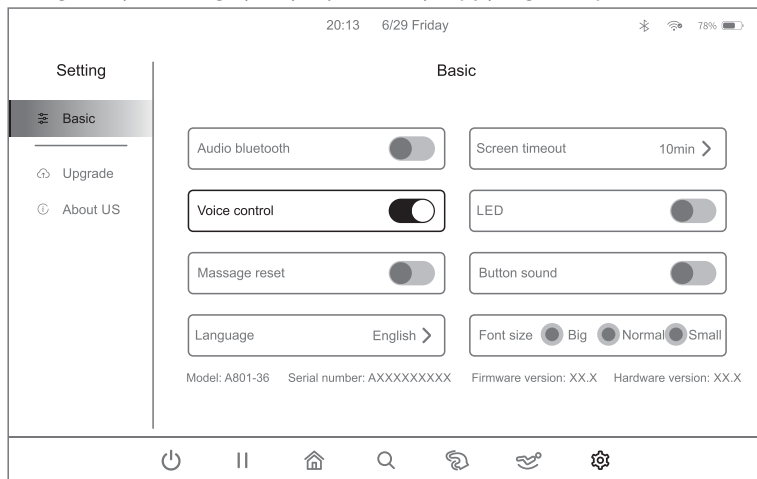


- 2.4. Oświetlenie LED: po wejściu do interfejsu ustawień kliknij przełącznik „LED”, jak pokazano na rysunku poniżej, a następnie włącz lub wyłącz funkcję oświetlenia nastrojowego.

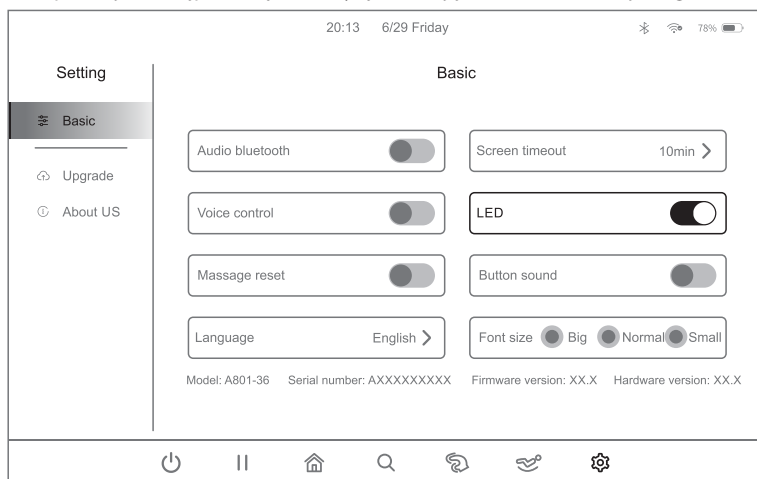


- 2.5. Reset pozycji fotela: po wejściu do interfejsu ustawień kliknij przycisk „Massage Reset”, jak pokazano na poniższym rysunku, aby włączyć lub wyłączyć funkcję resetowania pozycji fotela. Fotel do masażu zostanie zresetowany po zakończeniu czasu pracy, jeśli funkcja resetowania jest włączona. Jeśli funkcja jest wyłączona, fotel nie zostanie zresetowany po zakończeniu pracy i pozostanie w aktualnej pozycji.

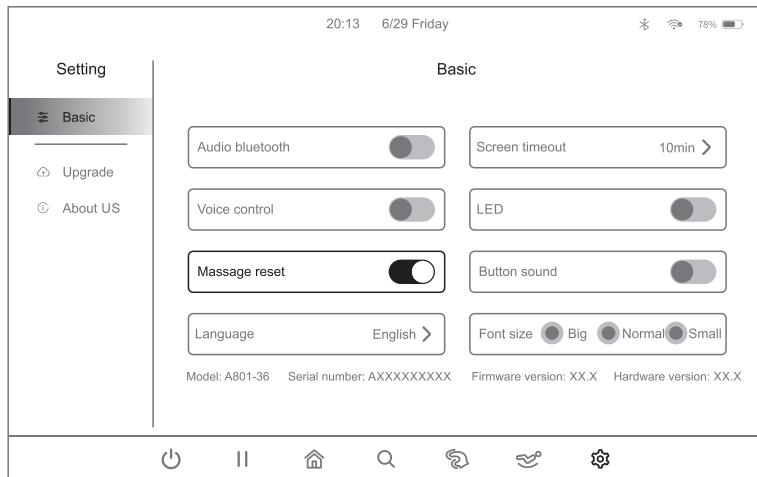


- 2.6. Dźwięk przycisków: po wejściu do interfejsu ustawień kliknij przełącznik „Button sound”, jak pokazano na poniższym rysunku, aby włączyć lub wyłączyć dźwięki przycisków podczas obsługi kontrolera.

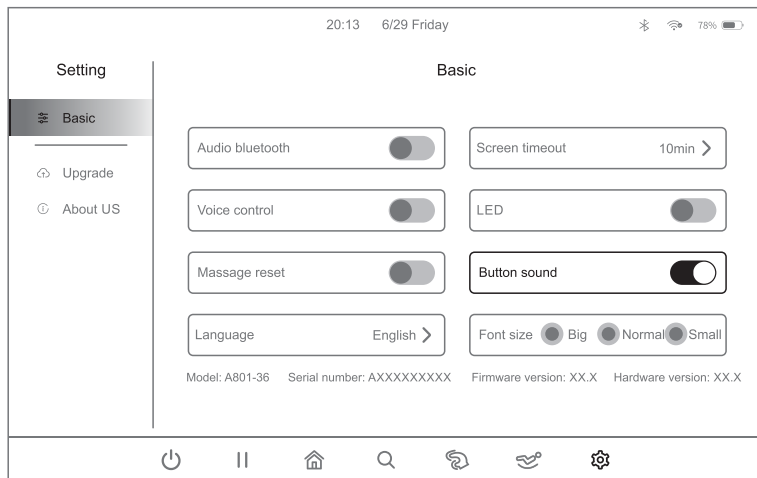


- 2.7. Wybór języka: po wejściu do interfejsu ustawień kliknij przycisk „**Language**” w kolumnie wyboru języka, jak pokazano poniżej, a następnie wybierz język zgodnie z potrzebami; domyślnie ustawiony jest język niemiecki, można również wybrać język angielski.

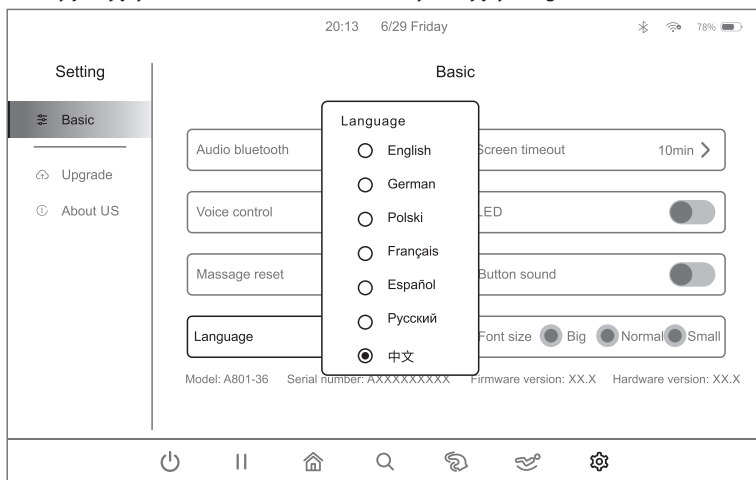


- 2.8. Rozmiar czcionki: po wejściu do interfejsu ustawień kliknij przycisk „**Font size**” w kolumnie rozmiaru czcionki, jak pokazano na rysunku poniżej, a następnie wybierz odpowiedni rozmiar czcionki zgodnie z potrzebami; domyślnie ustawiona jest czcionka standardowa, można też wybrać dużą lub małą.

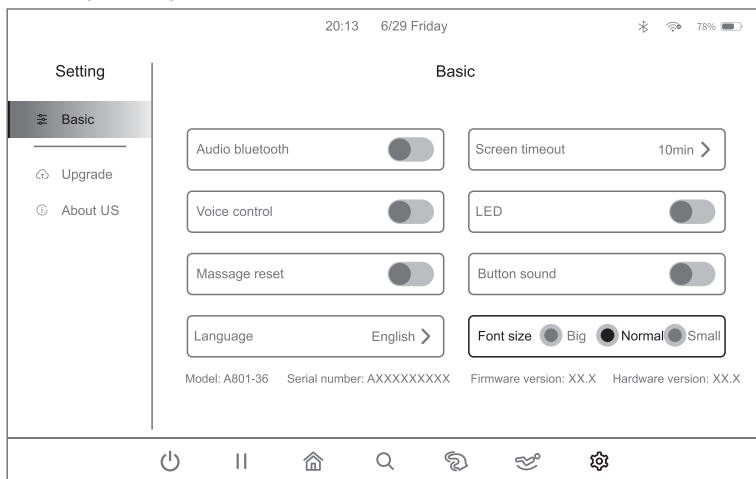


- 2.9. Ustawienia fotela do masażu (informacje o produkcie): Po wejściu do interfejsu ustawień można wyświetlić informacje o modelu fotela do masażu, wersji oprogramowania, numerze seryjnym oraz wersji firmware'u, jak pokazano na rysunku poniżej.

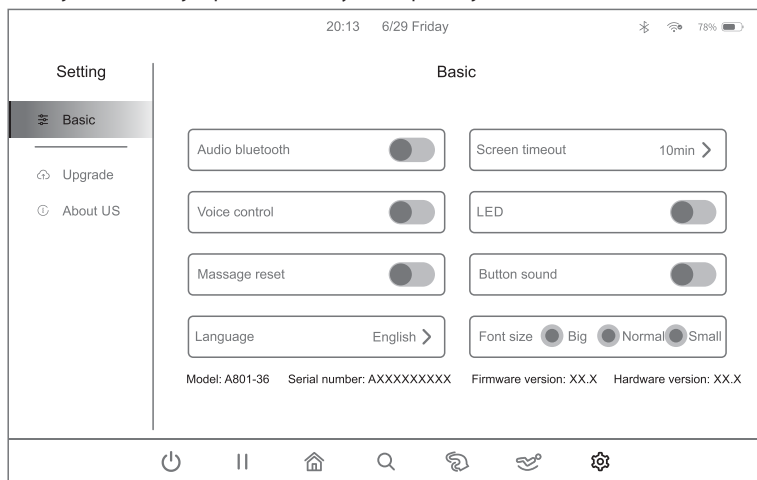


3. Aktualizacja oprogramowania: Po wejściu do interfejsu ustawień kliknij ikonę „Upgrade”, jak pokazano na poniższym rysunku; następnie zaktualizuj oprogramowanie fotela do masażu lub tabletu.

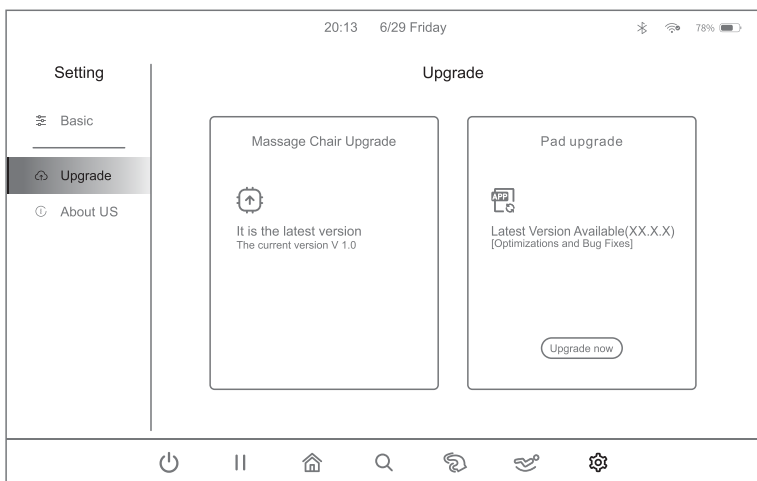

- 3.1. Aktualizacja: Po wejściu do interfejsu ustawień, jeśli system wykryje dostępność aktualizacji, można kliknąć przycisk „Upgrade now”, aby zaktualizować wersję fotela do masażu lub tabletu. Jeśli aktualna wersja jest najnowsza, przycisk aktualizacji nie będzie wyświetlany.

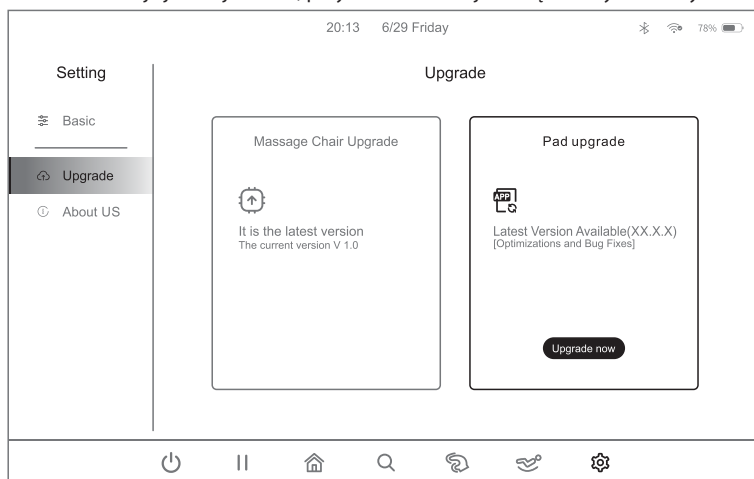


4. O nas: Po wejściu do interfejsu ustawień kliknij opcję „About us”, jak pokazano na poniższym rysunku. W tym interfejsie można zeskanować kod QR, aby uzyskać więcej informacji o iRest.

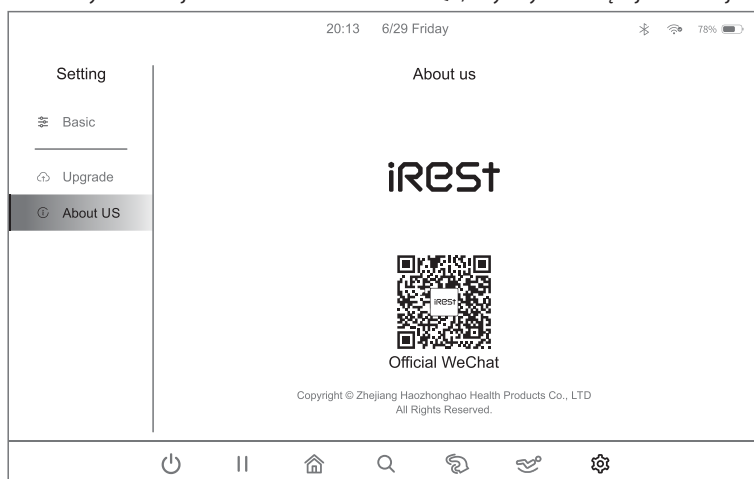


IX. Przywracanie ustawień fabrycznych (możesz używać tej funkcji po włączeniu fotela do masażu)


Naciśnij przycisk regulacji głośności w prawym górnym rogu kontrolera (tabletu), a po prawej stronie ekranu pojawi się pasek głośności. Kliknięcie trzech kropek na dole paska głośności otworzy interfejs dźwięku i wibracji.

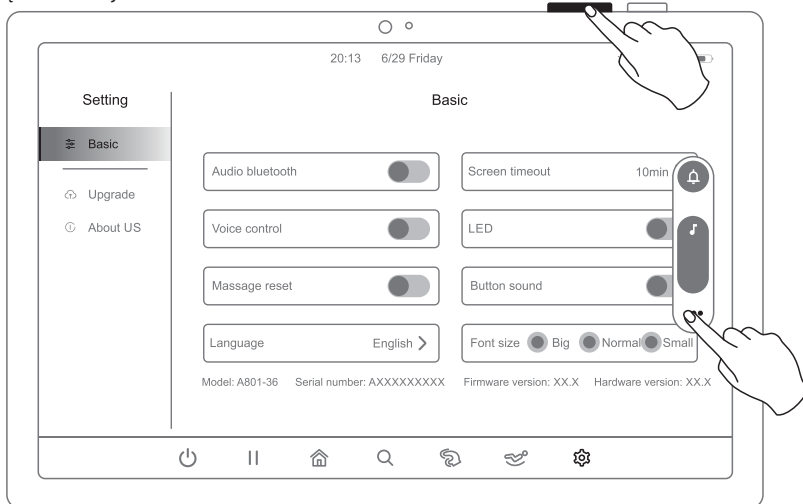


1. Po otwarciu okna pop-up „Sound & vibration” i kliknij przycisk „Settings” w lewym dolnym rogu, aby wejść do wbudowanego interfejsu ustawień systemowych tabletu.

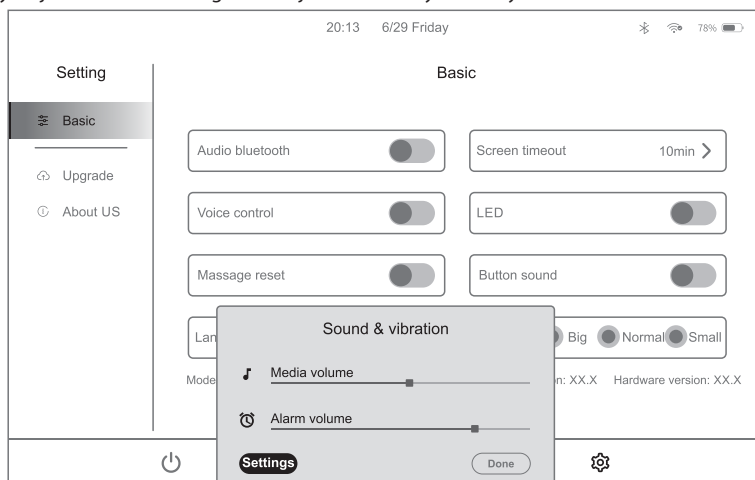

2. Po wejściu do wbudowanego interfejsu ustawień systemu tabletu można wprowadzać odpowiednie ustawienia systemowe, w tym: sieć i internet, dźwięk i wibracja, ekran, system, informacje o tablecie. Wybierając opcję przywrócenia ustawień fabrycznych, tablet przywróci wszystkie dane i ustawienia systemowe do stanu fabrycznego.

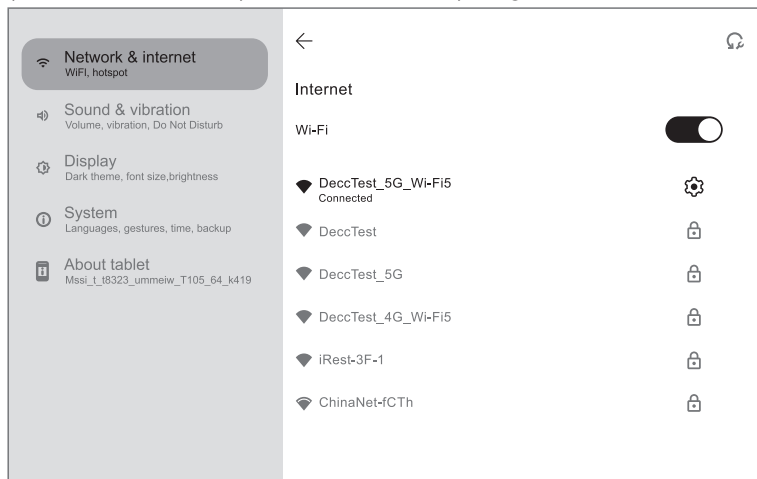


- 2.1. Wejdź do ustawień systemowych tabletu, wybierz opcję „Reset options” w zakładce „System”, aby przywrócić ustawienia fabryczne. Usunięte zostaną dane użytkownika, w tym wszystkie dane osobiste, takie jak zdjęcia, filmy, muzyka, dokumenty itp. Rest ustawień jest równoznaczny z pełnym czyszczeniem danych na tablecie.
- 2.1.1. Reset ustawień systemowych: Ustawienia tabletu, takie jak tapeta, dzwonek, jasność, ustawienia ekranu, ustawienia sieci (hasła Wi-Fi itp.), parowanie Bluetooth itd. zostaną przywrócone do wartości fabrycznych.

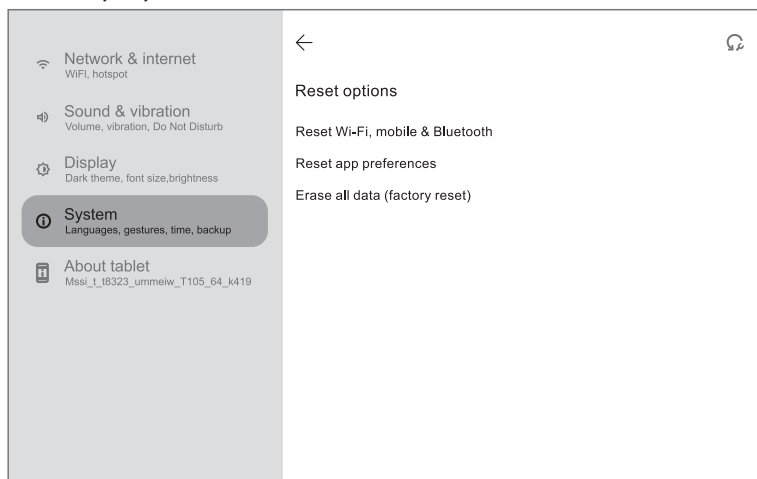

X. Wyłączanie kontrolera (tabletu)

Podczas masażu lub po jego zakończeniu, naciśnij krótko przycisk w prawym górnym rogu bocznej krawędzi tabletu, by uśpić ekran. Przytrzymanie przycisku przez 3 sekundy spowoduje wyświetlenie interfejsu z opcjami „wyłącz”, „uruchom ponownie”, „zrzut ekranu”. Wybór opcji „Power off” spowoduje przejście tabletu w tryb niskiego poboru mocy. Wybór „Restart” zrestartuje system tabletu.

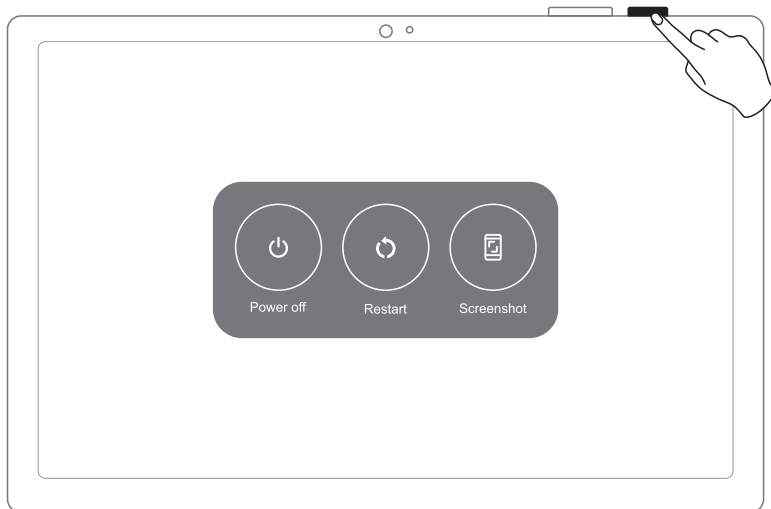


Zakończ działania fotela do masażu za pomocą kontrolera (tabletu).

XI. Zakończenie masażu (za pomocą tabletu)

Podczas masażu:

1. Naciśnij przycisk włącz/wyłącz w interfejsie tabletu – wszystkie funkcje masażu zostaną wyłączone, a rozłożenie fotela przywrócone do pozycji wyjściowej.
2. Przytrzymaj przycisk włącz/wyłącz na podłokietniku – wszystkie funkcje masażu zostaną wyłączone, a rozłożenie fotela przywrócone do pozycji wyjściowej.
3. Użyj komendy głosowej do wyłączenia urządzenia – wszystkie funkcje masażu zostaną wyłączone, a rozłożenie fotela przywrócone do pozycji wyjściowej.
4. Po upływie ustawionego czasu – wszystkie funkcje masażu zostaną wyłączone; jeśli funkcja resetowania jest aktywna, rozłożenie fotela zostanie przywrócone do pozycji wyjściowej, w przeciwnym razie pozostanie bez zmian.

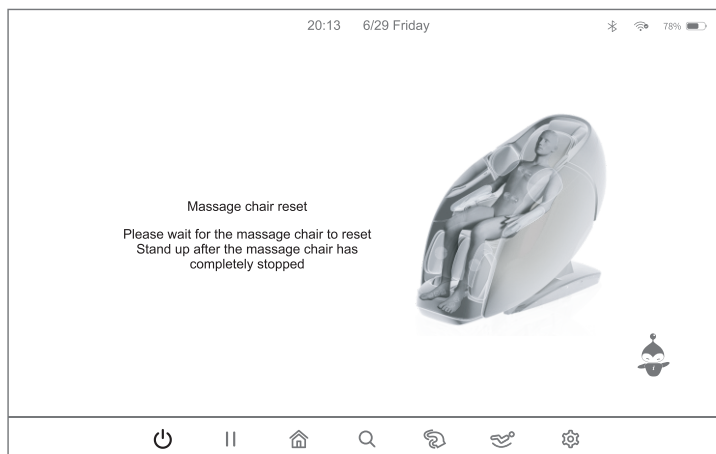

XII. Pobieranie i instalacja aplikacji Bluetooth

1. Pobieranie i instalacja aplikacji

- 1.1. Dla systemu Android: Wyszukaj aplikację „Robot Massage” w Google Play (Sklep Google) i zainstaluj ją. Można też zeskanować poniższy kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację. Po instalacji możesz obsługiwać fotel do masażu przez aplikację Bluetooth.
- 1.2. Dla systemu Apple (iOS): Wyszukaj i pobierz wersję iOS aplikacji „Robot Massage” w App Store (Sklep Apple), lub zeskanuj kod QR poniżej, aby zainstalować. Po instalacji możesz obsługiwać fotel do masażu przez aplikację Bluetooth.




Massage controller



Uwaga: Jeśli chcesz używać aplikacji na telefonie, najpierw rodułącz połączenie Bluetooth tabletu lub przytrzymaj przycisk zasilania tabletu przez 3 sekundy, aby go wyłączyć – w przeciwnym razie aplikacja mobilna nie połączy się z fotelem do masażu.

2. Połączenie Bluetooth z aplikacją: Po pomyślnej instalacji aplikacji, w interfejsie urządzenia kliknij ikonę Bluetooth aplikacji, aby ją otworzyć. Aplikacja automatycznie przejdzie do interfejsu połączenia Bluetooth. Jednocześnie rozpocznie automatyczne wyszukiwanie numeru Bluetooth odpowiadającego urządzeniu (np. A1XXXXXXXXXXXXX). Kliknij właściwy numer Bluetooth urządzenia. Po pomyślnym połączeniu możesz sterować fotelem do masażu za pomocą aplikacji.


Uwaga: Przed połączeniem należy włączyć funkcję Bluetooth oraz lokalizację w systemie urządzenia.

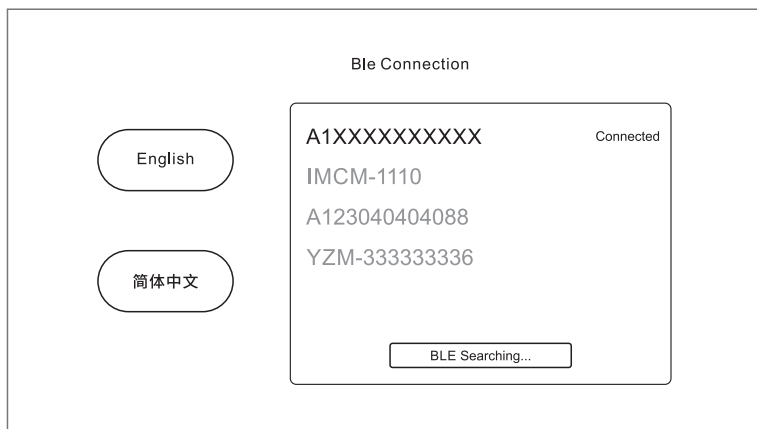

2.1. Zmiana nazwy Bluetooth w aplikacji:

Jeśli zmieniono położenie fotela do masażu lub jego nazwę Bluetooth, należy ponownie połączyć urządzenie zgodnie z aktualną sytuacją. Jak pokazano na poniższym rysunku, po wejściu do interfejsu aplikacji kliknij przycisk „Settings” w pasku menu po lewej stronie, a następnie połącz z urządzeniem.

Uwaga: Funkcja Bluetooth i lokalizacja w urządzeniu muszą być włączone przed połączeniem.

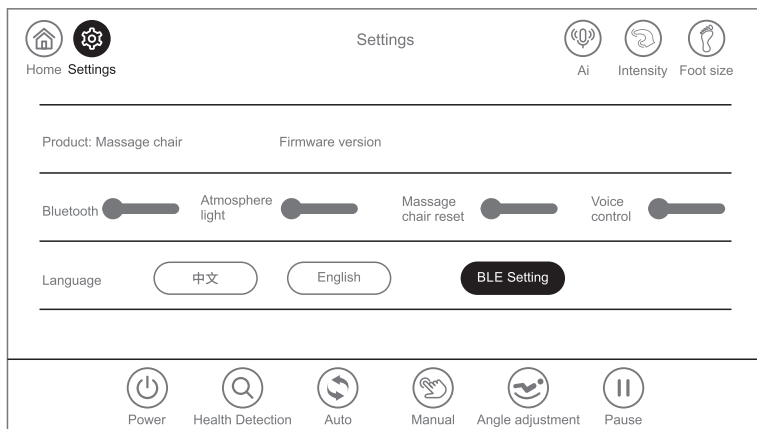


- 2.2. Jak pokazano na poniższym rysunku, aby wejść do interfejsu ustawień, kliknij przycisk „Connection”. Aplikacja automatycznie wyszuka numer Bluetooth urządzenia (np. A1XXXXXXXXXXXX) w wyskakującym oknie. Następnie kliknij wybrany numer. Po pomyślnym połączeniu możesz sterować fotelem do masażu za pomocą aplikacji.



3. Instrukcja obsługi aplikacji Bluetooth: Po pomyślnym połączeniu urządzenia aplikacja automatycznie przejdzie do interfejsu trybu gotowości. Jak pokazano na rysunku poniżej, wybierz przycisk „Power” w dolnym pasku, aby uruchomić funkcje masażu.



3.1. Po włączeniu fotela do masażu przejdź do interfejsu aplikacji Bluetooth — od tego momentu możesz sterować urządzeniem za pomocą telefonu.

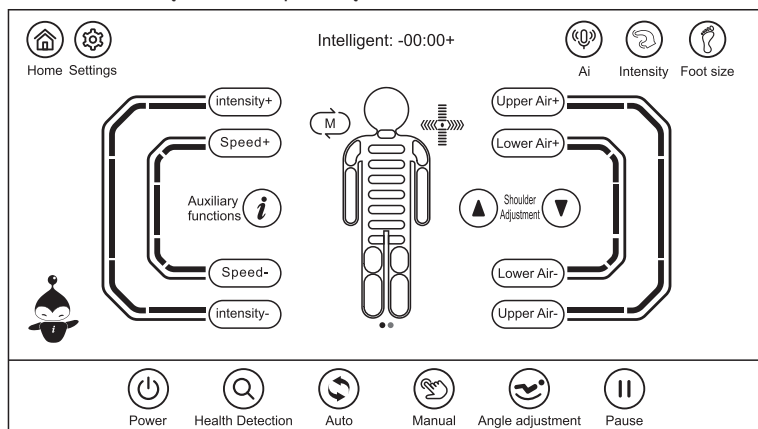


XIII. Zakończenie masażu (za pomocą aplikacji)

Podczas masażu:


1. Naciśnij przycisk włącz/wyłącz w aplikacji bluetooth – wszystkie funkcje masażu zostaną wyłączone, a rozłożenie fotela przywrócone do pozycji wyjściowej.
2. Przytrzymaj przycisk włącz/wyłącz na podłokietniku – wszystkie funkcje masażu zostaną wyłączone, a rozłożenie fotela przywrócone do pozycji wyjściowej.
3. Użyj komendy głosowej do wyłączenia urządzenia – wszystkie funkcje masażu zostaną wyłączone, a rozłożenie fotela przywrócone do pozycji wyjściowej.
4. Po upływie ustawionego czasu – wszystkie funkcje masażu zostaną wyłączone; jeśli funkcja resetowania jest aktywna, rozłożenie fotela zostanie przywrócone do pozycji wyjściowej, w przeciwnym razie pozostanie bez zmian.




Instrukcja wyłączenia zasilania całego urządzenia (schemat przełącznika zasilania głównego):

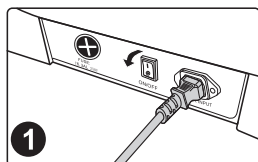

1
Wyłącz przełącznik zasilania (pozycja „0”)

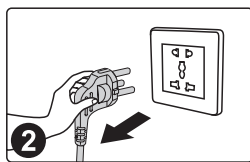

2
Schemat odłączenia wtyczki zasilającej

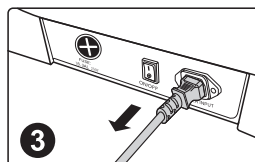

3
Odłącz przewód zasilający urządzenia




Metodę obsługi aplikacji Bluetooth można porównać z instrukcją obsługi interfejsu tabletu.

Czyszczenie skóry syntetycznej i elementów plastikowych

Przetrzyj skórę miękką, suchą szmatką.

- Nie używaj do czyszczenia urządzenia środków chemicznych, takich jak rozcieńczalnik, benzyna, alkohol itp.
- Używając dostępnych w sprzedaży środków do pielęgnacji skóry, postępuj zgodnie z instrukcją obsługi.
- Jeśli skóra syntetyczna jest szczególnie brudna, wytrzyj ją w następujący sposób:
 1. Zanurz miękką szmatkę w wodzie lub ciepłej wodzie z dodatkiem 3% do 5% neutralnego detergentu, a następnie dokładnie ją odciśnij.
 2. Użyj miękkiej ściereczki do wytarcia powierzchni skóry.
 3. Wytrzyj roztwór czyszczący szmatką namoczoną w czystej wodzie i dokładnie wyciśnij.
 4. Przetrzyj miękką ściereczką.
 5. Pozostaw do swobodnego wyschnięcia
- Jeśli trudno jest usunąć plamy, zanurz dostępną w sprzedaży gąbkę z melaminy w neutralnym detergencie, a następnie wytrzyj nią urządzenie.
- Nie używaj suszarki do włosów do suszenia powierzchni.
- Zachowaj ostrożność podczas korzystania z urządzeń w džinsach i tkaninach kolorowych, ponieważ kolor tkaniny może zabarwić powierzchnię skóry syntetycznej.
- Nie utrzymuj tych części w kontakcie z tworzywem sztucznym przez dłuższy czas, ponieważ spowoduje to zabrudzenie powierzchni skóry syntetycznej.
- Syntetyczna skóra może się odbarwić, dlatego po użyciu np. farby do włosów przykryj część dotkniętą przez włosy ręcznikiem.

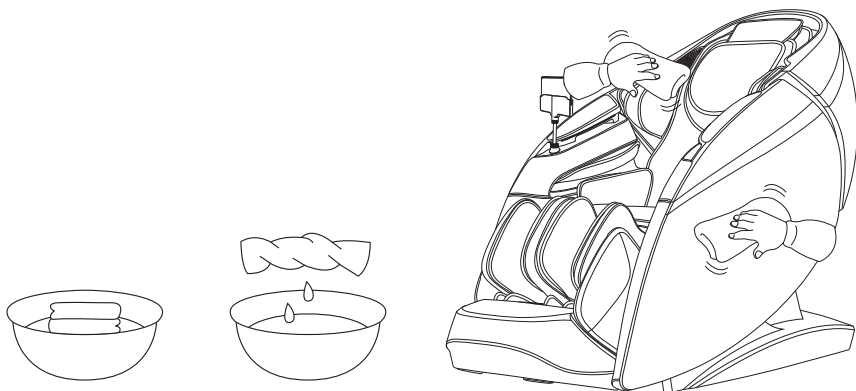

Rozwiązywanie problemów

Problem	Kiedy podnózek lub oparcie osiągną określoną pozycję, naciskasz odpowiedni przycisk regulacji, ale nie następuje żadna zmiana i emitowany jest przerywany sygnał dźwiękowy.
Rozwiązanie	Ze względu na konstrukcję oraz wymagania ergonomiczne, produkt posiada zabezpieczenie ograniczające ruchy do ustalonego zakresu. Dźwięk informuje o osiągnięciu granicy.

Problem	Po włączeniu urządzenia nie działa żadna funkcja lub tylko część z nich.
Rozwiązanie	Po włączeniu zasilania należy ręcznie wybrać program masażu lub tryb pracy. Jeśli nic nie zostanie uruchomione, urządzenie automatycznie wyłączy się po 20 minutach. W trybie manualnym należy samodzielnie ustawić wszystkie potrzebne funkcje.

Problem	Podczas regulacji pozycji fotela słychać odgłos tarcia skóry
Rozwiązanie	Fotel wykonany jest z wysokiej jakości, ekologicznej skóry syntetycznej. Lekki dźwięk ocierania się materiałów to zjawisko naturalne. Uwaga: Jeśli podczas pracy usłyszysz dźwięk rozdzierania materiału, natychmiast zaprzestań użytkowania fotela masującego i skontaktuj się z serwisem.

Problem	Ramiona masujące nie docierają do barków i karku.
Rozwiązanie	Jeśli głowa nie opiera się o zagłówek lub plecy nie przylegają do oparcia, fotel może błędnie wykryć pozycję ramion. Usiądź głęboko, oprzyj głowę i rozpocznij skanowanie od nowa.

Problem	Urządzenie jest uszkodzone. Przewód lub wtyczka są nadmiernie gorące.
Rozwiązanie	Aby uniknąć wypadków, skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym.

W razie pytań lub wątpliwości skontaktuj się z wyznaczonym serwisem.

Specyfikacja produktu

Nazwa: Fotel masujący Dual Core V8

Model: A801-36

Napięcie znamionowe: 110-120V~ 60Hz ☐
220-240V~ 50Hz/60Hz ☐

Moc znamionowa: 220W

Czas znamionowy: 20 min

Klasa bezpieczeństwa: Klasa I

ZACHOWAJ
INSTRUKCJĘ