


iRest

**iRest Supearl +
A336 MASSAGE CHAIR
OPERATION INSTRUCTIONS**

SAVE THESE INSTRUCTIONS

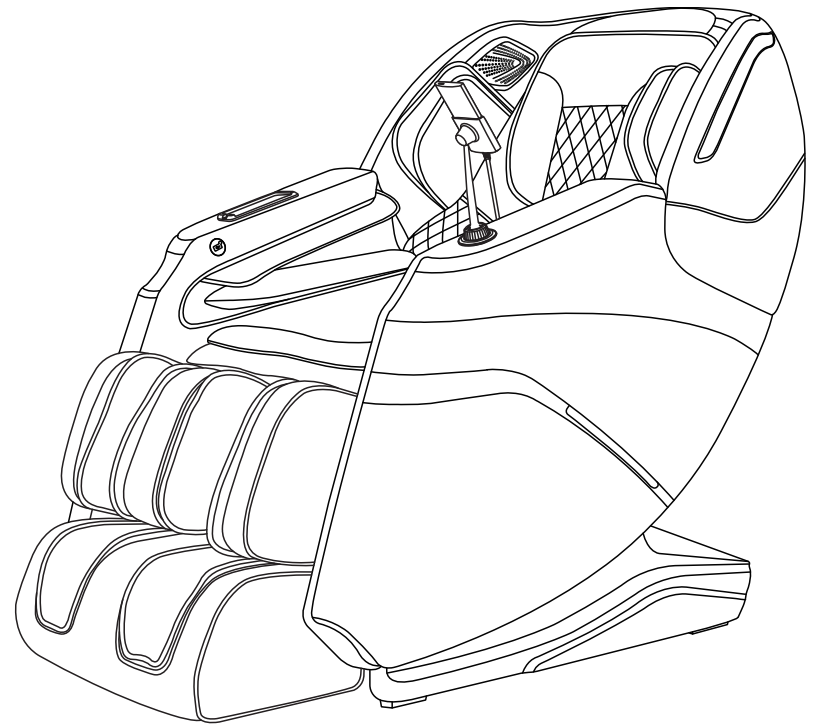

Thanks for purchasing this product. Please read this manual instruction carefully in order to know how to use this product correctly before operation. Please pay more attention to some important safety warning and keep this manual book properly for future use.

Note: Our company reserves the right to change and explain the design of the product. If there is some difference between the product function in market circulation and the description in the manual, it is a normal update of the product, and our company will not inform you otherwise. The specific product function and color shall prevail in kind.

CONTENTS

Before Use

Safety Precautions	02-04
Installation Parts	05-06
Place Massage Chair	07-08
Before Use	09-10
Product Structure	11-14

Usage Method

Operation Instructions	15-42
------------------------	-------

Maintain

Cleaning and Maintenance	43
--------------------------	----

Important

Troubleshooting	44
Product Specifications	45

Safety Precautions must be observed

- Please read all relevant instructions carefully before use.
- The notes marked here will help you to use the product safely and correctly.
- In order to clearly indicate the extent of harm and damage, precautions are divided into **"Warning"** and **"Caution"** that may be caused by incorrect use. Both of them are important for safety and must be followed.

 Warning	Indicates that serious injury or death may result from improper use.
 Caution	Indicates that misuse may cause minor injury or property damage.

- Please pay attention to the symbol before each safety item.

 Forbidden	Absolute prohibition
--	----------------------

The following populations should not use this product

 Forbidden	■ The device is not intended for use by persons (including children) with physical disabilities, sensory or neurological impairments or who lack experience and common sense, unless they are supervised and instructed in the use of the device by those responsible for their safety. Children must be supervised to ensure they do not play with instruments. ■ Patients with osteoporosis. ■ Patients with heart disease or wearing electronic medical devices such as a pacemaker. ■ People who have a fever. ■ Pregnant women or women on their menstrual period. ■ Patients who are injured or have a skin disease. ■ When unsupervised, any children are under the age of 14 and those unconscious are not allowed to use this product. ■ People who are told by their physicians to have rest or who feel unwell. ■ People whose bodies are wet are forbidden to use this product. ■ This product has a hot surface. Persons insensitive to heat must pay attention when using this product. ■ If the supply cord is damaged, to avoid danger, it must be replaced by a professional from the manufacturer, its maintenance department or similar department
--	---

Safety Precautions must be observed

Important safety warnings

 Warnings	■ Do not allow children to touch any movable part of this product. ■ Use the well-grounded power supply unit suitable for this product. ■ Pull out the plug after use or before cleaning to avoid any physical injury or damage to the product. ■ Operate this product as instructed in this manual. ■ Do not use any parts or accessories which are not recommended. ■ Do not use this product outdoors. ■ Please read the Operation Instructions carefully before operation. ■ Never use this product for any other purpose not listed herein. ■ 20 minutes of usage each time is recommended. ■ Do not use this product if the cover or leather is broken or damaged. ■ Do not drop anything into this product. ■ Never fall asleep while using this product. ■ Do not use this product if you are drunk or feel unwell. ■ Do not use this product within one hour after a meal. ■ Do not use this product with excessive force to avoid any injury.
---	---

Safety precautions

 Caution	■ Check whether voltage is consistent with the specification of this product. ■ Never insert or pull out the plug with a wet hand. ■ Do not let water flow into this product to avoid electric shock or cause damage to this product. ■ Do not pull the power cord when plugging or unplugging it. Rough handling is forbidden. ■ Do not damage the wire or modify the circuit of this product. ■ Do not clean live parts of this product with a wet cloth such as a power switch and plug. ■ Be away from this product in case of power failure to avoid any injury if power is restored suddenly. ■ Stop using this product at once while it works abnormal, and consult your local supplier. ■ Stop using this product if you feel unwell, and consult your health care practitioner.
--	--

Storage conditions

 Caution	■ Storage room temperature: 5 °C to 40 °C. ■ Relative humidity (RH) between 20% and 80%; free of corrosive gases, and a well-ventilated room.
--	--

Product service and maintenance	
 Caution	■ This product should be maintained by the service center designated by the manufacturer only. No user should disassemble or maintain it without permission. ■ Do not forget to turn off the main power switch after usage. ■ Do not use this product if the power socket becomes loose. ■ If this product will be left unused for a long period of time, it is necessary to roll up the power cord of this product and store this product in a dry and dust-free environment. ■ Do not store this product at a high temperature or near open flame. Avoid prolonged exposure to direct sunshine. ■ Please clean this product with dry cloth. Never use thinner, benzene or alcohol. ■ The mechanical components of this product are specially designed and manufactured, so no special maintenance is needed. ■ Do not use a sharp object to stab at this product. ■ Do not roll or pull this product on any uneven ground. Instead, it should be lifted before moving. ■ Please use this product intermittently. Do not keep it working continuously for a long period of time.





Operating environment	
 Caution	■ Do not use this product in a very moist environment such as the bathroom. ■ Stop using this product immediately when the ambient temperature changes sharply. ■ Do not use this product in any heavily-dusty or caustic environment. ■ Do not use this product in a small space or a place without good ventilation.

Solutions to ordinary malfunctions	
 Caution	■ If the motor sounds during operation of this product, this is the normal operation sound. ■ If the controller cannot work normally, check whether the plug and the power socket are connected reliably, and whether the power switch is turned on. ■ If the rated working time is over, this product will automatically activate the power-off button; If this product keeps operating for a long period of time, the temperature protector will stop this product automatically. The product can be used again after half an hour.

Calf installation instructions

1. Insert the wire of the calf and the air pipe into the front socket of the steel frame assembly (Figure 1).
2. Then push the connected wire and air pipe into the hole in the backrest frame (Figure 2).
3. After the wire docking is completed, open the calf fixing covers on both sides of the steel frame assembly (Figure 3).
4. Lift the calf into the notch, close the fixing covers, and secure it in place with 2 pieces screws (Figure 4).





Note: this step can be ignored for all-in-one installation.

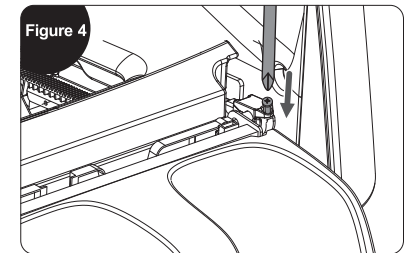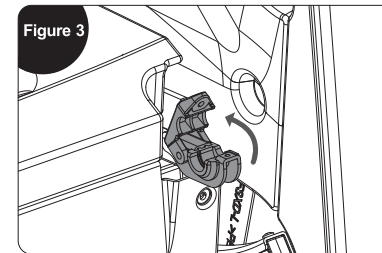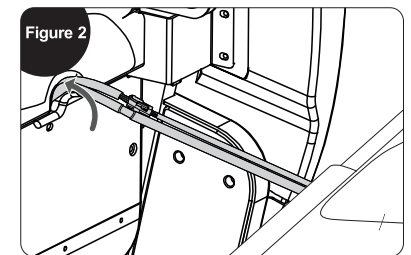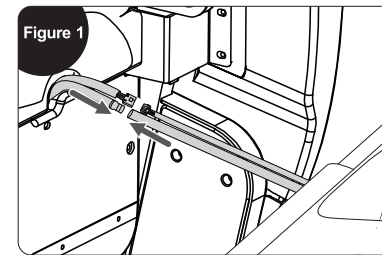

Installation parts

Installation instructions for manual controller aerial plug

Non-fixed aerial plug installation method: insert the aerial plug (Fig. 1 Fig. 3) tightly after aligning it with the arrow mark of the aerial plug (Fig. 2 Fig. 4), and then lock the nut in a clockwise direction.

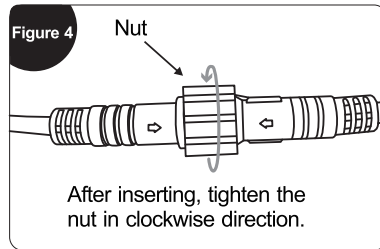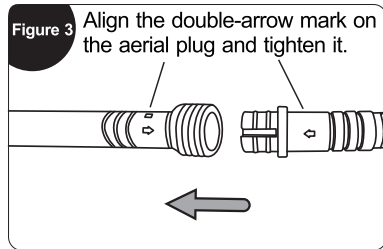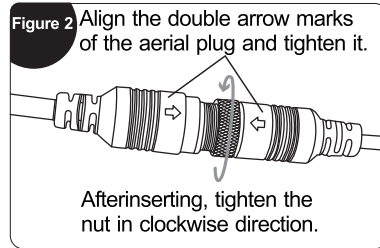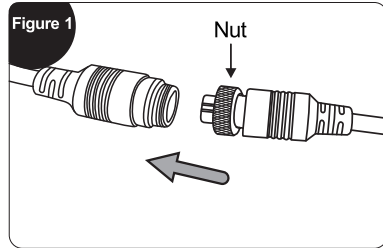


Place massage chair

Installation placement

Make sure there is enough space for the massage chair can be tilted at least 15 cm.



Do not expose the massage chair directly to high temperature environment due to sunlight (such as: in front of heating equipment), and place it to where can avoid high temperature and direct sunlight. It is recommended to lay a soft cushion for long-term use in a designated location. When laying the cushion, the size of the cushion should be enough to cover. Keep the range where the machine touches the floor and the range where your feet touch the floor.

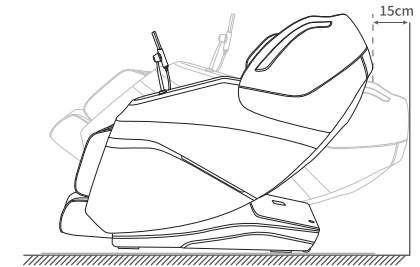


Product lift instruction

Require team work to lift and move the chair to avoid injury.



1. Please lift the massage chair to move it on vulnerable ground such as wooden floor.
2. When moving on a similar wooden floor, it is recommended to lift it. Avoid damage to the casters. When the floor is lifted and moved to the designated position, be careful to keep your hands out of the way to avoid injury, and be careful of your feet being crushed. Do not let go of the unit until the unit is completely flat, the floor may be damaged, therefore, it is recommended to place mats, etc. on the floor.

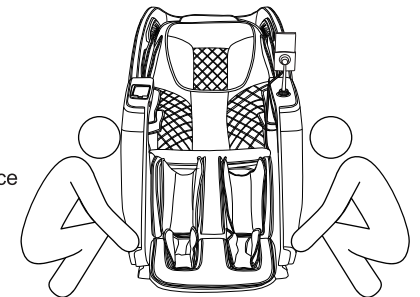


Place massage chair

Move method

Use the rear casters to move the massage chair. Move the chair by tilting it down and backward about 45° as shown in the diagram.



NOTE: Excessive force to tilt will cause the chair to tip over completely and product damage.

1. Before moving, please shut down the machine properly to reset the whole machine, and then cut off the power.
2. Please keep the chair vacant when moving. (People, pets or clutter will not be able to stay on the chair.)
3. When moving, do not cross a drop barrier higher than 2mm or a gap greater than 5mm.
4. When using casters to move this product, single continuous movement is not supported; if the distance exceeds 50 meters, please make this product move slowly and evenly.

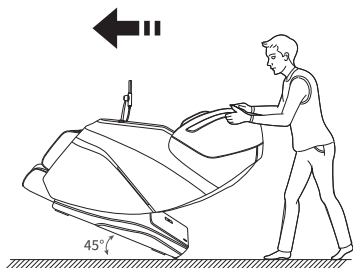

How to disassemble and use headrest cushion and backrest cushion


Using a headrest cushion can reduce the intensity of kneading massage on the neck and shoulders, and you can decide whether to use a headrest cushion according to your needs (recommended to use a headrest cushion). The backrest cushion and the backrest are connected by a zipper (1), and the headrest cushion and the backrest cushion are connected by a zipper (2).

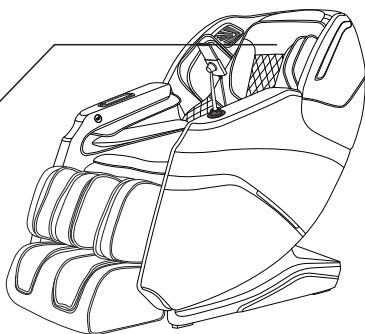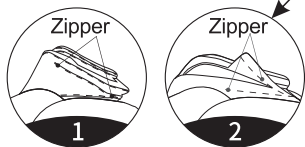

Before use


Check around

Make sure that there are no people, pets and other objects around the unit.

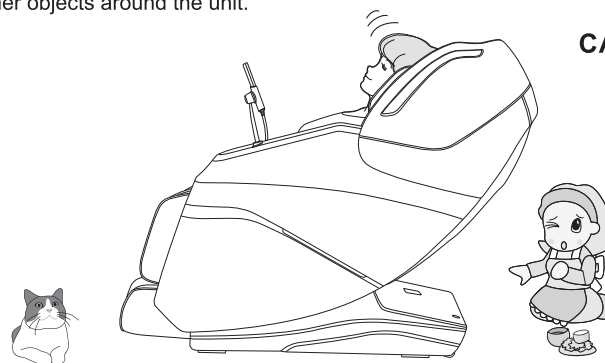

Make sure there are no foreign objects in the gaps of the machine

Before massaging, make sure that no foreign objects are caught in the legs, feet, etc. Under no circumstances allow hands, feet, and head to penetrate into the area between the lower leg mechanism and main body, or the area between the armrest and the capsule. Under no circumstances should hands, feet, or head sink under the fabric or leather covering of the massage area.

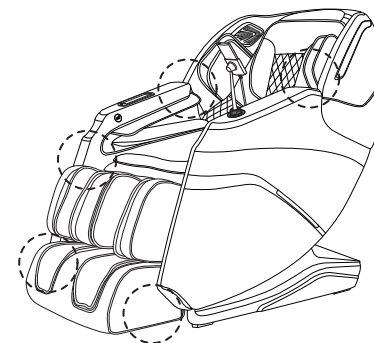


Before Use


Turn on the power

**Caution**


Plug in power cord

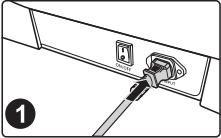

Schematic diagram of power on

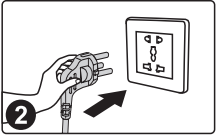

Turn on the power switch ("I" position)

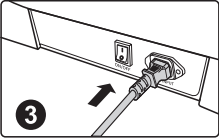

**Warn**

■ Please check whether the power cord and power plug are damaged before use.

■ Please supply power to this product in accordance with the working power requirements of this product's calibration.

■ It is strictly forbidden to use a power supply other than the nominal power supply of this product.

■ It is strictly forbidden to connect various power conversion devices to supply power to this product without authorization.

10


Product Structure

Parts description


11

Product Structure

Function distribution

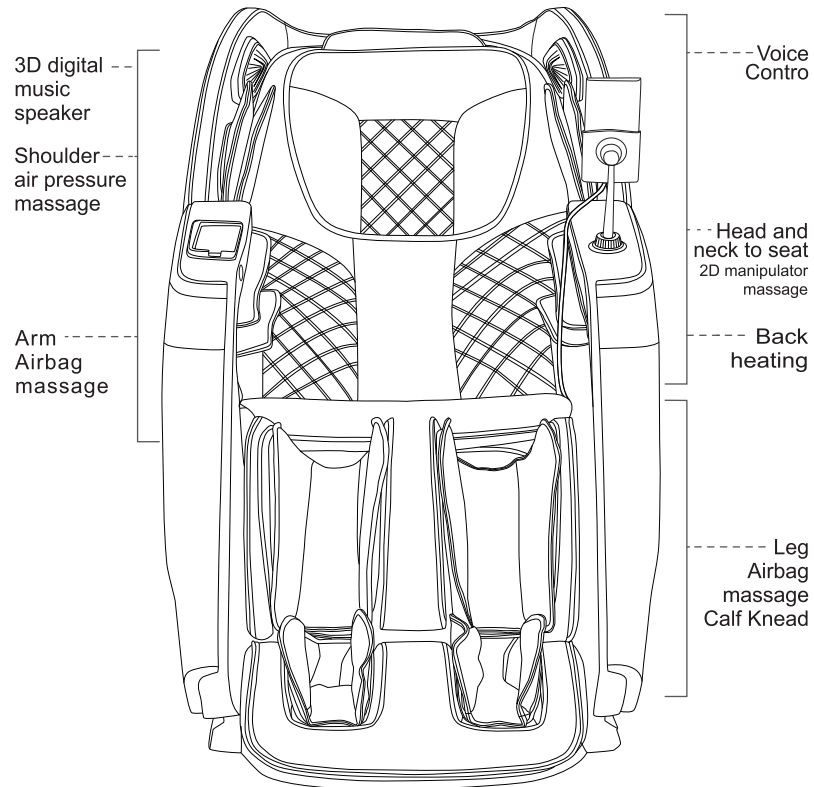


Product Structure

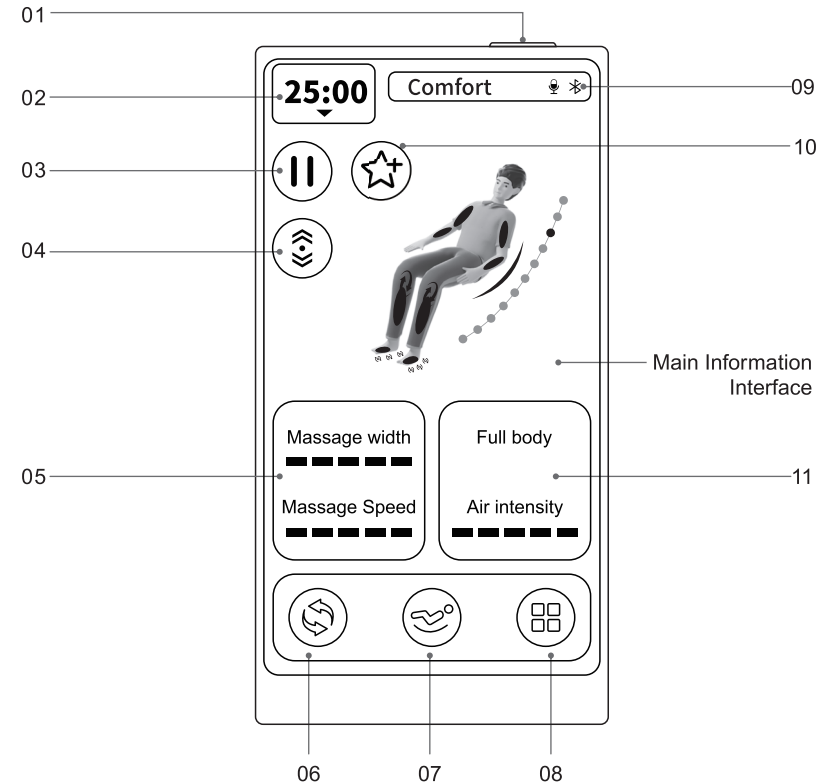

01. On/Off key: Long press to turn on or off the massage chair.
02. Time adjustment key: Adjust the massage time.
03. Pause key: Pause all operations/ resume.
04. Shoulder position adjustment key: Enter into the shoulder position adjustment.
05. Massage Width/Speed Key: Enter the massage width/speed interface to adjust the massage width (3 adjustable levels) or massage speed (5 adjustable levels).
06. Auto key: Enter the automatic massage course selection.
07. Sitting posture adjustment key: Enter into the sitting position adjustment.
08. Menu key: Enter into the menu interface can choose automatic course, manuacourse, sitting angle, auxiliary function, memory, settings and other functions.
09. Status display bar: Display the current massage function status.
10. Save function key: Store the current massage program.
11. Air Pressure Massage/Intensity Key: Enter the air pressure massage selection interface to choose the corresponding air pressure massage and adjust the air pressure intensity (5 adjustable levels).

Product Structure

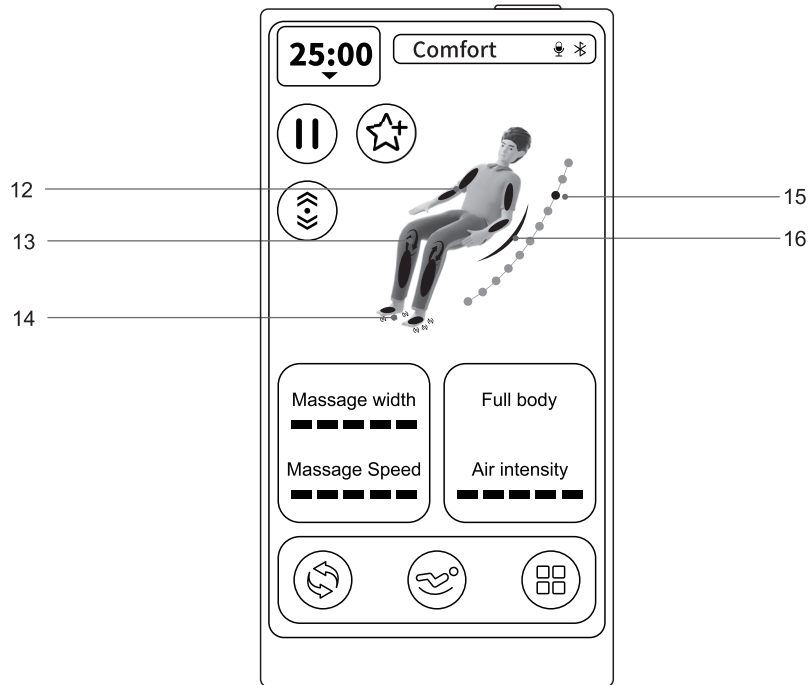


- 12、Air pressure display: Display the current air pressure massage position.
- 13、Calf knead: display the calf knead situation.
- 14、Foot roller: display the Foot roller situation.
- 15、Massage hand display: Display the current hand massage position.
- 16、Back heating display: Display the current back heating status.

Operation Instructions


I 、Start massage

1. Press and hold the power key at the top of the manual controller to turn on the massage chair. Then, wait for the manual controller system to boot up, and the system will automatically enter the "Automatic Recline" selection interface.

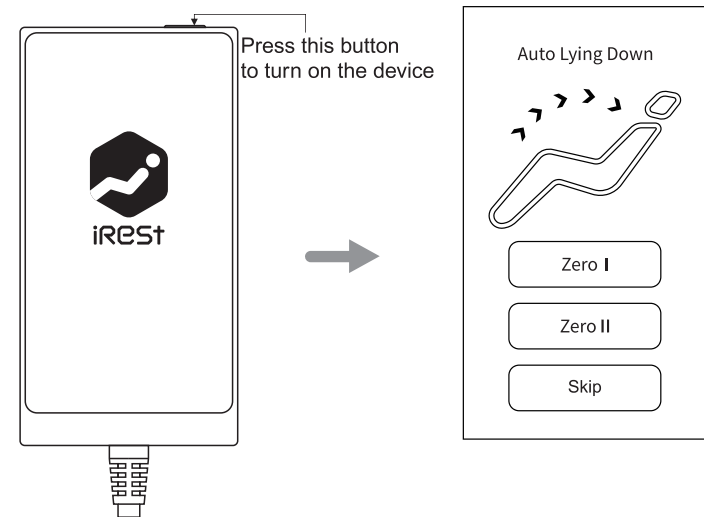


Operation Instructions

- (1).The angle of the massage chair is automatically adjusted after entering the automatic lying interface, and you can also manually select other zero-gravity angle, "Zero-gravity I or Zero-gravity II". When the angle adjustment is completed, the body shape detection will start automatically. If you do not need to adjust, you can also directly press the "skip" button, the massage chair will keep the current sitting position and proceed to the next step of body shape detection.
- (2).Enter the body shape detection interface, the massage chair will automatically detect the user's body shape. After the detection is completed, the massage ball will be positioned to the shoulder automatically, and enter the shoulder position adjustment interface. If you do not need to detect, you can also press "skip" key to use the system's default body shape and start the massage directly.

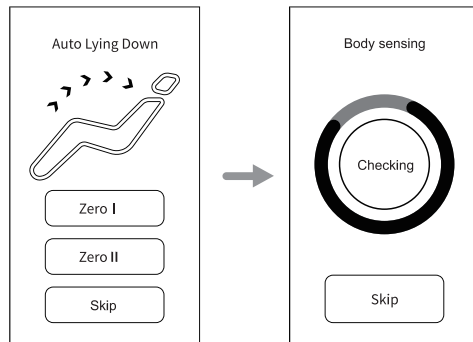


- (3).After entering the shoulder position adjustment interface, the manual controller will prompt you to manually fine-tune the shoulder position. As shown in the figure below, if the massage rollers stop at your shoulder position, no adjustment is needed—simply click "Confirm" to start the massage. If the massage rollers are not at your shoulder position, click the up and down arrows to adjust the rollers to the shoulder position (11 adjustable levels available). Once adjusted, click "Confirm" to start the massage. Note: If no action is taken for more than 10 seconds, the system will default the current roller position as your shoulder position and start the massage directly.

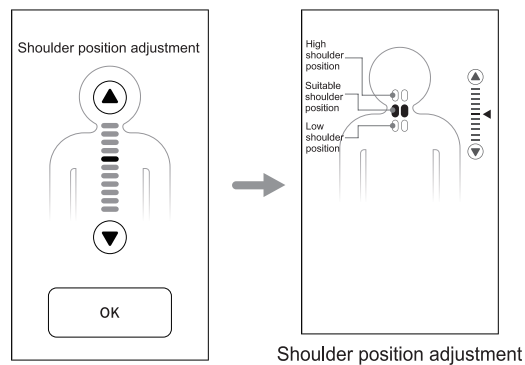

Operation Instructions


- 2.Pause: On the home page, as shown in the figure below, click the "Pause" icon during program operation, and the massage chair will enter a paused state, stopping all massage functions. Click "Resume Massage" to restore the previous massage state. Note: In the paused state, except for powering off, other massage functions cannot be used.

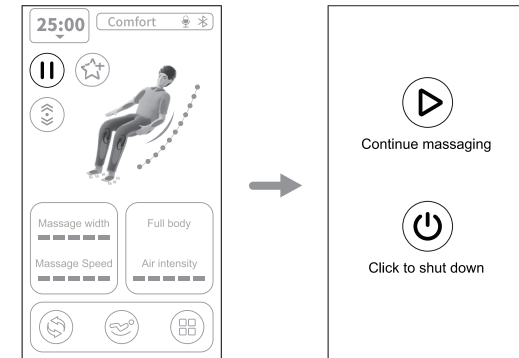

Home Page-Pause/Running Diagram

- 3.Memory function: In the home page, as shown in the figure below, choose to press the "Save" icon to enter the save function selection interface, and then choose to store or recall according to the needs of massage. Choose to press the "Save" button, system will record the current state of the massage chair to run the program, choose to press the "Use" button, system will run the previously saved program. There are three sets of save modes for "Save" and "Use". Press the "Back" button to return to the home page.


Note: This function can also be operated from the main menu interface.

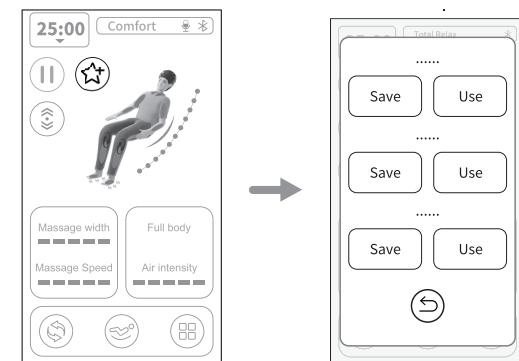

Home Page -Save Diagram


Operation Instructions

4.Shoulder position adjustment: in the home page, as shown in the figure below, press the“**shoulder position adjustment**” icon to enter the shoulder position adjustmentinterface, and then adjust the position of the massage hand according to the massageneeds. If the massage ball is not in the position of your shoulder, press the up and downarrows to adjust the massage ball to the position of the shoulder (a total of 1-11 levelscan be adjusted), then press to confirm the selection and return to the home page.

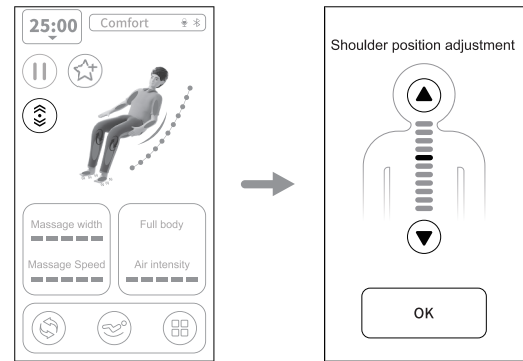

Home Page-Shoulder Position Adjustment Diagram

5.Status Display: On the home page, as shown in the figure below, the current message function status information is displayed, such as Bluetooth, and other status details.

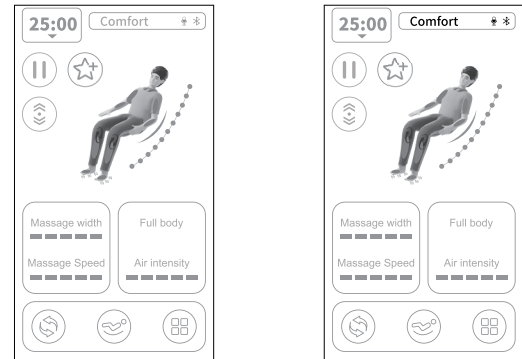


Home Page
Program Running Diagram


Home Page
Technique Display Diagram

Operation Instructions

6.Message Width Adjustment: On the home page, as shown in the figure below, select and click the "Message Width/Speed" key to enter the message width adjustment interface. Then, according to the message needs, slide the "Message Width" slider left or right to adjust the message width. There are 5 adjustable levels for width, with level 1 indicating the narrowest width and level 5 indicating the widest width. Click the "Return" key to go back to the home page.

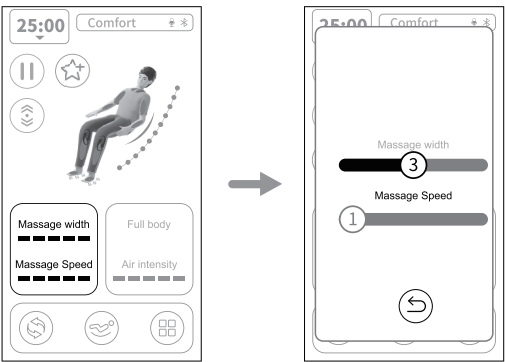


Home Page – Message Width Diagram

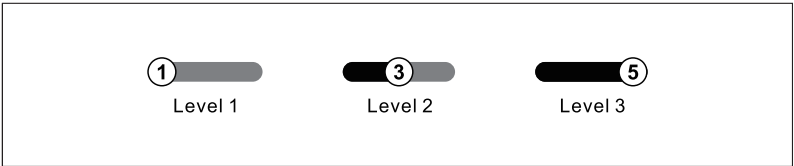


Button	Description
	Hold the slider key and slide to the right to increase the message width, adjustable from levels 1-3.
	Hold the slider key and slide to the left to decrease the message width, adjustable from levels 1-3.

Operation Instructions

7. Massage Speed: On the home page, as shown in the figure below, click the "Massage Width/Speed" key to enter the massage speed adjustment interface. Then, according to the massage needs, slide the "Massage Speed" slider left or right to adjust the massage speed, allowing free adjustment of the upper and lower massage arms' massage speed. There are 5 adjustable levels for speed, with level 1 indicating the slowest speed and level 5 indicating the fastest speed. Click the "Return" key to go back to the home page.
(speed is ok adjusted only on Manual program, Auto program cant adjust speed)

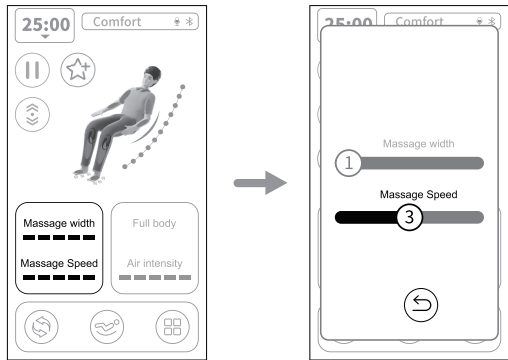


Home Screen - Massage Speed Diagram

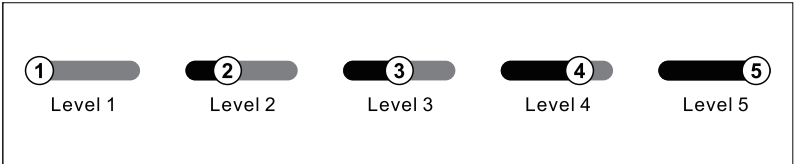

Button	Description
	Hold the slider key and slide to the right to increase the massage speed, adjustable from levels 1-5
	Hold the slider key and slide to the left to decrease the massage speed, adjustable from levels 1-5

Operation Instructions

8. Air Pressure Mode: In the home page, as shown in the figure below, select the "AirPressure Massage /Air Pressure Intensity" key, enter the air pressure massageinterface, and then according to the massage needs to choose the corresponding ailpressure massage function. Air pressure modes including upper body, lower body,whole body, off and air pressure intensity adiustment, press off key is to turn off allthe air pressure function. Press the "Back" key to return to the home page.

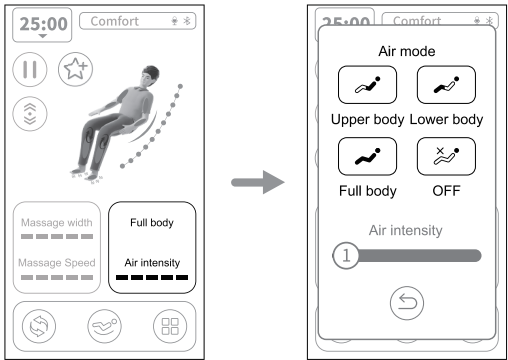


Home Page -Air Pressure Massage Diagram

Button	Description
	Press this key to turn off the air pressure function.
	Press this key to turn on the upper body air pressure massage function.
	Press this key to turn on the lower body air pressure massage function.
	Press this key to turn on the whole body air pressure massage function.


Air pressure display		
Upper body air pressure	Lower body air pressure	Whole body air pressure

Operation Instructions

(01).Air Pressure Intensity: in the home page , click the icon " air massage/air intensity" to enter to Air pressure massage operation surface. air massage mode including : Upper body ,Lower body , Full boady, OFF . Air intensity totally 5 levels , Slide the icon to adjust the intensity .

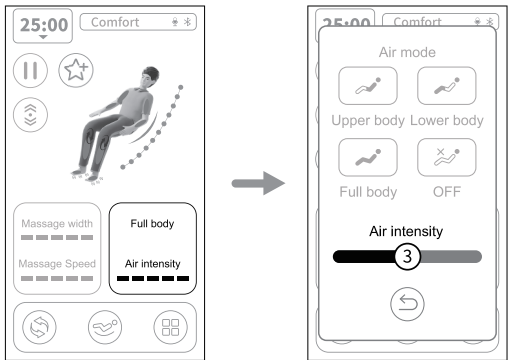

Home Page -Air Pressure Intensity Diagram

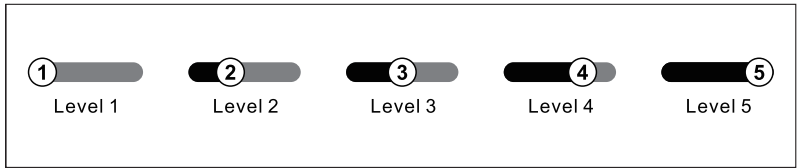


Button	Description
	Press and hold the slider to the right to increase the air pressure intensity, 1-5 levels of intensity can be adjusted.
	Press and hold the slider to move to the left to decrease the air pressure intensity, 1-5 levels of intensity can be adjusted.

Operation Instructions

II .Automatic Mode (please use this function after powering on the message chair)

Press the “Auto key” icon in the menu bar at the bottom of the screen as shown in the figure below ,the system will enter the automatic mode selection interface. Then according to the message needs to choose different automatic message course for massage. Note: This function can also be operated in the menu.

1. In the automatic mode interface, slide left or right to select from 12 automatic modes including Relaxing Massage, Comfortable Massage, Stretching massage, Back & Waist Massage, Neck & Shoulder Massage, Full Body Massage, Spine Care Massage, Fatigue Recovery, Meridian Treatment, Sitting Comfort, Soothing Sleep, and Leisure Health. Click the "Return" key to go back to the home page.

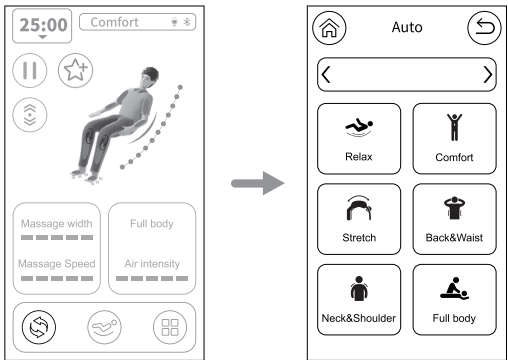

Home Page -Automatic Function Selection Diagram


Operation Instructions

Overall Relaxation	
Function	Description
Comfort	Most comfortable massage experience.
Relax	Gentle and soothing deep massage to relieve body fatigue and promote relaxation.
Stretch	Frame and backrest frame rise and fall, and air pressure massage, and stretch or traction on the leg, remove fatigue, restore vitality.
Back & Waist	Focuses on the back and waist area.
Neck & Shoulder	Targets shoulders and neck for relief.
Full Body	Invigorating massage for the whole body.
Spine Care	Emphasizes spinal relaxation.
Fatigue Recovery	Relieves fatigue and improves microcirculation.
Meridian Relaxation	Promotes meridian balance and enhances the immune system.
Sitting Comfort	Reduces excess fat accumulation in hips and thighs.
Soothing Sleep	Improves sleep quality through acupoint massage.
Leisure Health	Combats sedentary lifestyle by improving body functions.

Operation Instructions

III. Sitting posture adjustment (please use this function after powering on the massage chair)

Press the **"Sitting posture"** icon on the menu bar at the bottom of the screen as shown in the figure below, enter the sitting posture adjustment interface, and then select the corresponding sitting posture adjustment function according to the massage needs, including linkage up, linkage down, backrest up, backrest down, calf up, calf down, zero gravity I, zero gravity II, reset and other sitting posture adjustment functions. Press the "Back" button to return to the home page. Note: This function can also be operated from the menu interface.

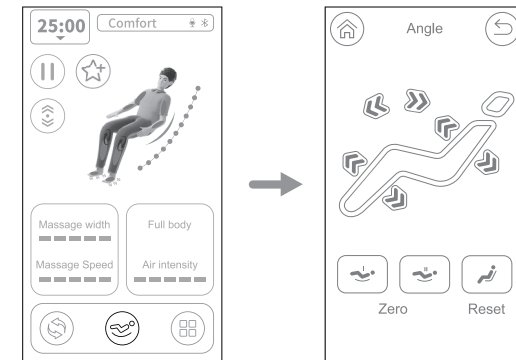

Home Page -Sitting Posture Adjustment Diagram

1. Zero gravity adjustment

Button	Description
	Zero gravity I key: Automatically adjust the position of leg mechanism and backrest mechanism to zero gravity I position.
	Zero gravity II key: Automatically adjust the position of leg mechanism and backrest mechanism to zero gravity II position.

Operation Instructions

2.Calf angle adjustment

Button	Description
	Calf mechanism rising key: Press and hold this key, the calf mechanism rises slowly, release to stop rising.
	Calf mechanism descending key: Press and hold this key, the calf mechanism descends slowly, release to stop descending.

3.Backrest angle adjustment

Button	Description
	Backrest mechanism rising key: Press and hold this key, the backrest mechanism rises slowly, release to stop rising; when adjusting to the limit position, it will stop adjusting and emit a "be-be" sound.
	Backrest mechanism descending key: Press and hold this key, the backrest mechanism descends slowly, release to stop descending; when adjusting to the limit position, it will stop adjusting and emit a "be-be" sound.

4.Linkage angle adjustment

Button	Description
	Linkage rising key: Press and hold this key, the backrest mechanism rises slowly and the calf mechanism descends slowly at the same time, release to stop the backrest mechanism rising and the calf mechanism descending. when adjusting to the limit position, it will stop adjusting and emit a "di-di" sound.
	Linkage descending key: Press and hold this key, the backrest mechanism descends slowly and the calf mechanism rises slowly at the same time, release to stop the backrest mechanism descending and the calf mechanism rising; when adjusting to the limit position, it will stop adjusting and emit a "di-di" sound.


Operation Instructions

5.Reset

Button	Description
	Restore key: The angle of the massage chair is reset to its original position.

IV. Menu function (please use the function after powering on the massage chair)


Click the "Menu" icon in the menu bar at the bottom of the display screen, as shown in the figure below, to enter the menu function interface. Then, select the corresponding massage function according to your needs, including automatic functions, manual functions, posture adjustment, auxiliary functions, memory recall, settings, and other massage functions. Click the "Return" button to go back to the home page.

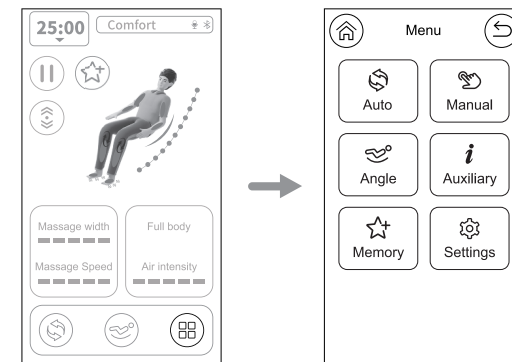

Home Page -Menu Selection Diagram


1. Automatic Functions: After entering the menu interface, as shown in the figure below, click the "Automatic" icon to enter the automatic function interface. Then, choose the corresponding automatic function icon for massage according to your needs. Note: For detailed descriptions of automatic functions, refer to pages 22-23. Click the "Return" key to go back to the home page.

Operation Instructions

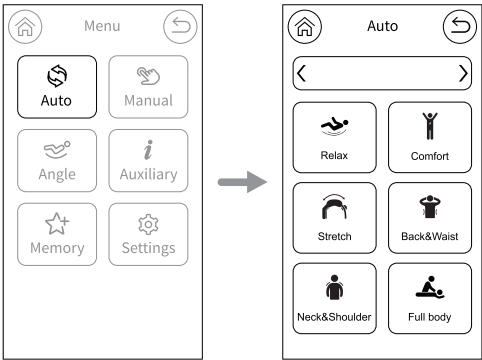

Menu Interface -Automatic Function Selection Diagram


2.Manual function: After entering the menu interface, press the “Manual” icon as shown in the figure below, and then select the manual massage function according to the massage needs. Choose the “Back” key to return to the home page.

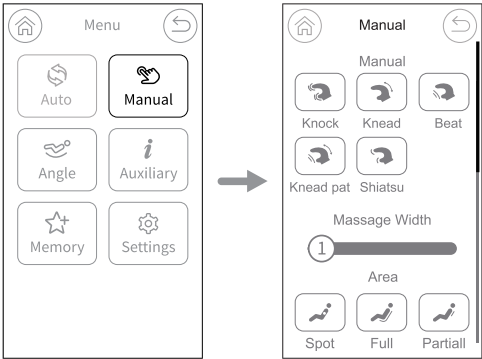

Menu Interface-Manual Mode Diagram

01).Massge Techniques: After entering the manual interface, as shown in the figure below, click the "Manual" icon, then choose the corresponding massage technique icon according to the massage needs. Available techniques include, kneading, Beating, Kead pat , knocking and Shiatsu (5 techniques available)

Operation Instructions

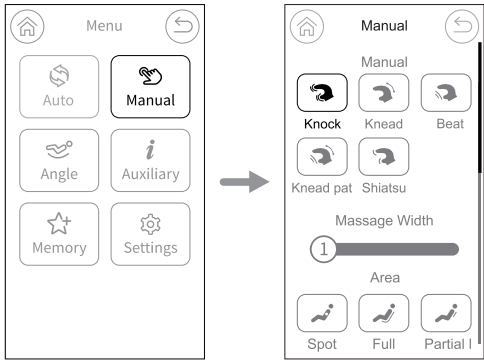


Menu Interface-Manual Mode Techniques Selection Diagram


Function	Massage roller adjustment	
Knock		Speed
Knead		Speed
Beat		Speed and width
Knead pat		Speed
Shiatsu		Width
		Adjustable speed in five levels Adjustable width in three levels

Operation Instructions

02).Massage Width: After entering the manual interface, as shown in the figure below, select and click the "Massage Width" slider button, then adjust the massage width by sliding left or right according to the massage needs. There are 3 adjustable levels for width, with level 1 indicating the narrowest width and level 3 indicating the widest width. Width adjustment is available for the following massage techniques: Lifting and Grasping, Kneading, Grasping, kneading, Beating, Kead pat , knocking and Shiatsu. Users must select a massage technique or massage area to enter manual mode before adjusting the width. Click the "Return" button to go back to the home screen.

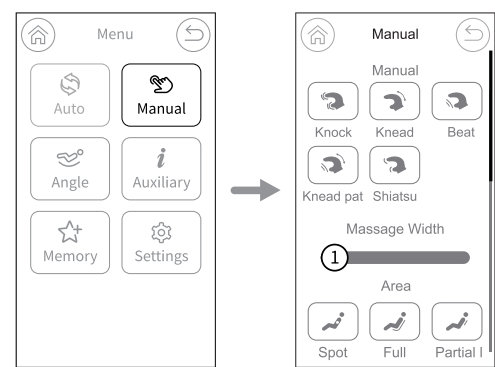


MenuInterface -Manual Mode Width Selection Diagram

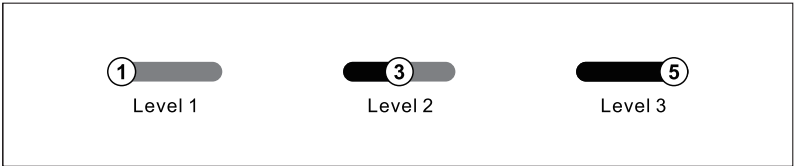

Button	Description
	Press and hold the sliding key to slide to the right to widen the massagewidth, 1-3 levels of width can be adjusted.
	Press and hold the sliding key to slide to the left to narrow the massagewidth, 1-3 levels of width can be adjusted.

Operation Instructions

03).massage Area: in the manual surface , as show in the figure below choose the "Area"icon. there are totally 4 kinds of Massage Area for choose. Spot, Full, Partial I, Partial II. click the icon to start. press the "Back" button to turn to the home surface.

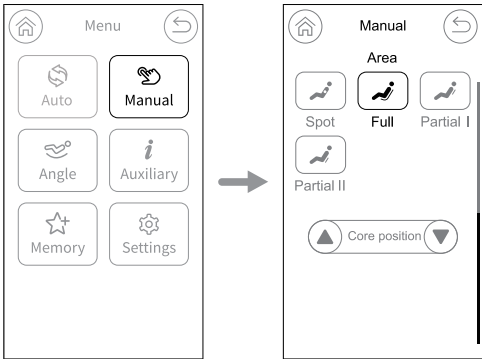


Menu Interface -Manual Mode Massage Area Selection Diagram

Button	Description
Spot	Fixed-point massage at fixed-point position press" Core position" to change the massage spot.
Full	Full back massage back and forth.
Partial I	Upper back massage back and forth.
Partial II	Lower back massage back and forth.

Operation Instructions

04).Message hand adjustment: After entering the manual interface, as shown in the figure below, select the core position according to the massage needs, press the "up arrow"or "down arrow" to fine-tune the massage hand up and down. Adjustment of the massage needs to be made in the manual mode of the fixed point press the "Back" key to return to the home page.

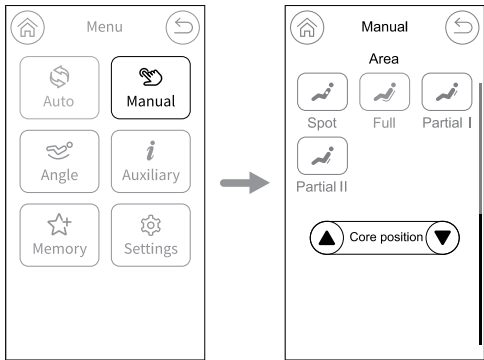

Menu Interface -Manual Mode Message hand adjustment diagram


Message Hand Display Diagram

A 3D illustration of a person sitting in a chair. A series of black dots connected by a line represents the path of a massage hand along the person's back, starting from the lower back and moving upwards.

Button	Description
	Press and hold the upper key to move the massage hand upward, andrelease the key to stop moving the massage hand upward.
	Press and hold the lower key to move the massage hand downward, andrelease the key to stop the massage hand moving downward.


Operation Instructions

3.Sitting posture function:
Note: Seepages 27-29 for detailed description of the sitting posture functions. Press the "Backkey" to return to the home page.

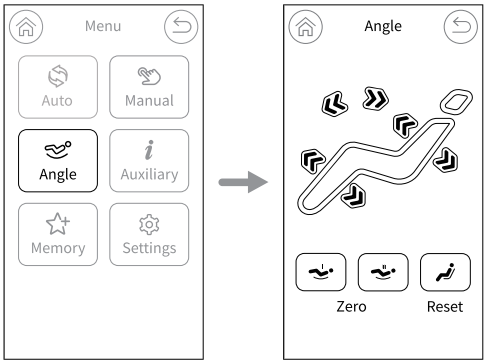

Menu Interface -Sitting Posture Diagram


4.Auxiliary functions: After entering the menu interface, select and click the "auxiliary" icon button as shown in the following figure to enter the auxiliary function selection interface, and then select the corresponding auxiliary massage functions according to the massage needs, such as foot roller, back heating, calf kneadg and other massage functions. Click the "Back" button to return to the home page.

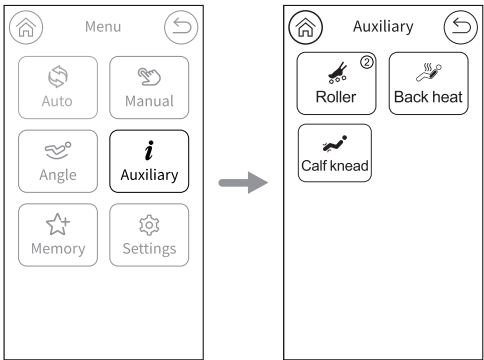

Menu Interface -Auxiliary Function Diagram

Operation Instructions

(1).Foot roller: After entering the auxiliary interface, select and click the " roller" icon as shown in the following figure to turn on/off , and choose the intensity . there are 1-3 levels for choosing. Four state Loop switches.select and click "back" button to return to the home page interface.

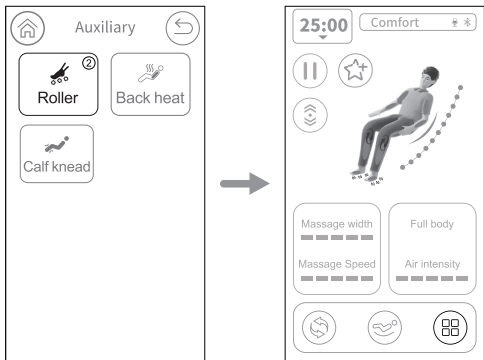


Foot roller diagram




Operation Instructions

(2).Back: After entering the auxiliary interface, as shown in the figure below, click the "Back Heating" icon, then turn on or off the back heating function according to the massage needs. The heating function will provide warmth after 3 minutes. Click the "Return" key to go back to the home page.


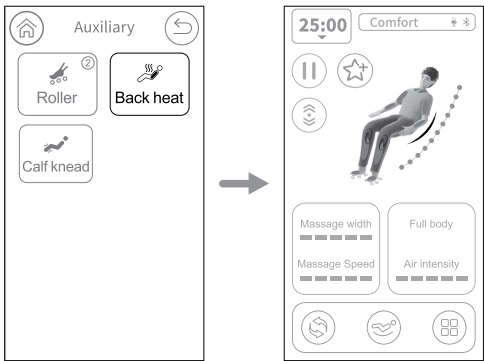


Home Heat display

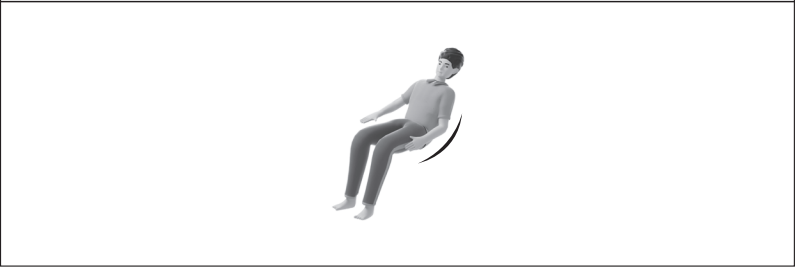


Operation Instructions

- (3).Calf knead: After entering the auxiliary interface, as shown in the figure below, click the "Calf knead" icon, then turn on or off the calf knead function according to the massage needs. Click the "Calf knead" key to go back to the home page.

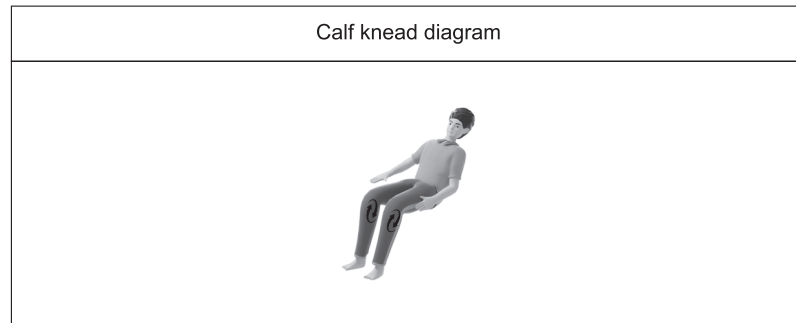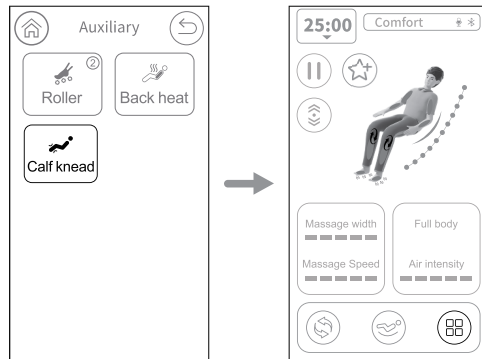


Operation Instructions

- 5.Memory Function: it is customized program by user self. easy for next time massage in the same status. Click "Memory" Icon, it will go to next surface. there are three Group "Save and Use". totally can store three customized programe. Save: click "Save" to stroge the program. it will save Current status of massage in use: autot or manual, chair lying angle, heating or not, intensity, ect Use: Click: "Use" to use the Saved massage.

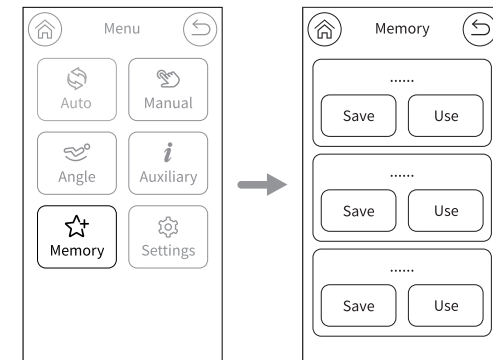

Menu Interface -Storage Diagram


6. Setting function: in the Menu surface, there are "settings" icon. click this icon to find: Product information, Voice control, Bluetooth, Auto upright, Language. click "back" to back to home page.

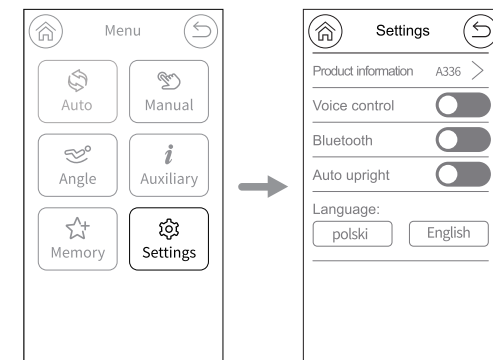

Menu Interface -Setting Diagram

Operation Instructions

(1).Prdouct information: View Product information like product model, ID code, Software version.click "back" to back to home page.

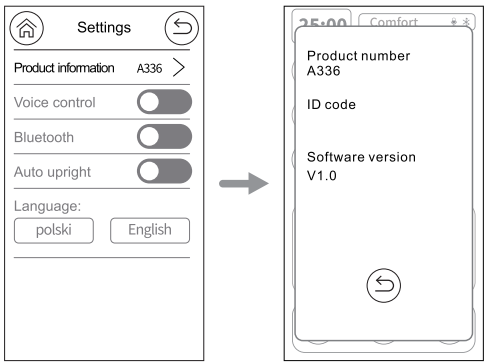


(2). Voice control: click to turn on/off voice control function. Click "back" to back to home page.

- 1)、 When the massage chair is turned on or in standby mode the sound "Hi Alice"or "Hey Alice"will be produced to enable the voice control function.
- 2)、 After such function is enabled successfully, the massage chair will reply "I am here" At this moment, once a corresponding voice control entry to be implemented is given within six seconds, the corresponding voice control entry to be implemented is given within six seconds, the corresponding voice control function can be performed after a reply is received from the massage chair if no correct voice control entry is given within six seconds, the voice control function automatically will be off automatically and needs to be enabled again.
- 3)、 Note: When using the voice control function, the speech speed should not be too fast, and the voice commands should be issued according to the voice control entries. After each successful use of the voice-activated entry, it is recommended to give out the voice command after 1-2 seconds.

Operation Instructions

Voice Control Entry		
Entry: "Hi Alice" or "Hey Alice". Answer: I am here.		
No.	Voice control entry	Answer entry
1	Massage on	Answer: Ok, massage on
2	Massage close	Answer: Ok, massage close
3	Comfort Massage	Answer: Ok, comfort massage
4	Relax massage	Answer: Ok, relax massage
5	Full body massage	Answer: Ok, full body massage
6	Neck and shoulder massage	Answer: Ok, neck and shoulder massage
7	Back and waist massage	Answer: Ok, back and waist massage
8	Stretch massage	Answer: Ok, stretch massage
9	Open the air pressure	Answer: Ok, open the air pressure
10	Close the air pressure	Answer: Ok, close the air pressure
11	Up the seat position	Answer: Ok, up the seat position
12	Down the seat position	Answer: Ok, down the seat position
13	Change the other mode	Answer: Ok, change the other mode
14	Go little down	Answer: Ok, go little down
15	Go little up	Answer: Ok, go little up
16	Fixed massage	Answer: Ok, Fixed massage
17	Stop adjustment	Answer: Ok, Stop adjustment

Operation Instructions

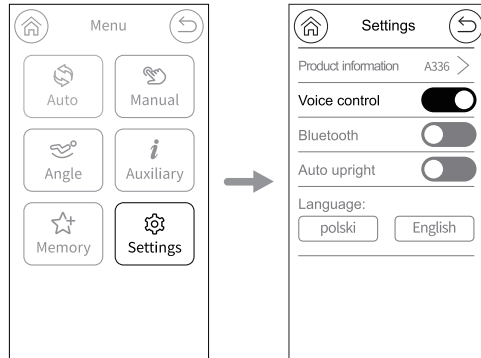


(3).Bluetooth: After entering the setting interface, press the **"Bluetooth"** key as shown in the figure below, and then turn on or off the Bluetooth function according to the massage needs. After turning on the Bluetooth function, you can pair and connect the audio source device with Bluetooth function (such as cell phone, MiD tablet PC, etc.) with the Bluetooth module of the massage chair, and then the music played by the audio source device can be transmitted wirelessly via Bluetooth to the sound system of the massage chair for music playback. Choose to press the "Back" key to return to the home page.

01) Enter the smart device main menu, Open "Settings" and select the "Bluetooth" options. Open "Bluetooth", and Bluetooth will automatically "Search for a New Bluetooth Device".


02) The smart device will search for the corresponding Bluetooth model (e.g. IMCM-XXXX), Click the "Match" button, if you are asked whether to match with the device, you just select "Match" to complete matching.

03) Open the music player of the smart device and select a song to play. Press the "Back" key to return to the home page.

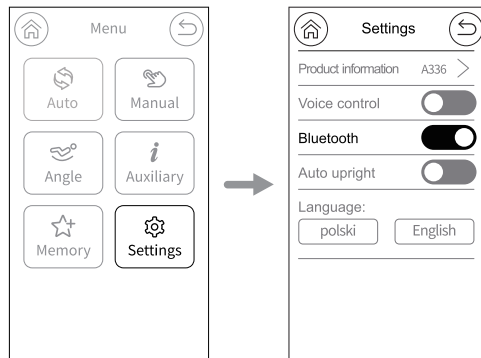


Operation Instructions

(4).Auto upright: it is a Default setting . Turn on the "Auto upright " the chair will Default automatically reset when massage finished. Turn off "Auto upright" ,the massage chair will default not reset after massage finished. please setting according to your Usage habit.

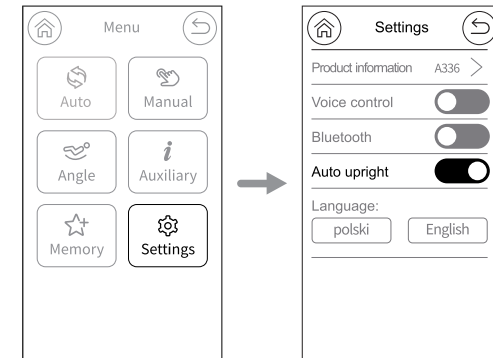


(5).Language Selection: After entering the settings interface, as shown in the figure below, set the system language according to the massage needs. The system offers 2 language options, with English as the default and Polish as an alternative. Click the "Return" key to go back to the home page.

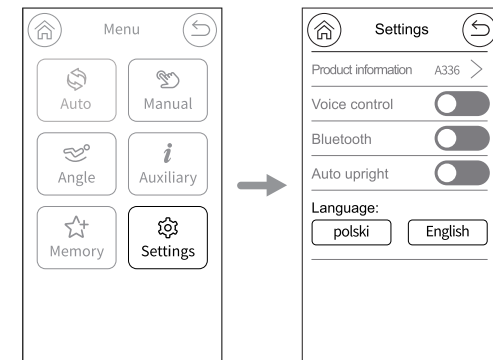


Operation Instructions

V、End massage in the massage process:


1. Long press the power button on the top of the hand control, all massage functions off, massage chair angle restore.
2. Press the pause key, then press the off key on the hand control interface, all massage functions off, massage chair angle restore.
3. Use the voice control command to power off, which will close all massage functions and reset the massage chair angle.
4. The massage time is over, all massage functions off, if the auto upright function is turned on, then the massage chair angle is restore, otherwise the massage chair angle remains unchanged.

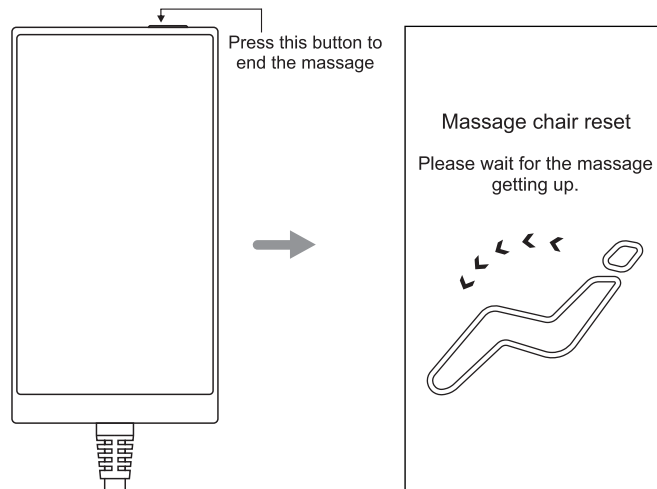


Turn off the power to the entire machine.

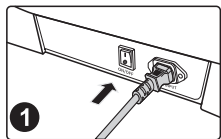

Power off ("0" position)

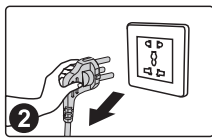

Take off the power plug

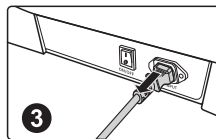

Take off the product power cable.

Cleaning and Maintenance

Clean PU leather and plastic parts

Wipe the leather with a soft, dry cloth.

- Do not use chemicals such as thinner, gasoline, alcohol, etc. to clean the unit.
- When using commercially available leather care products (rags), please follow the instructions for use.
- If the PU leather is particularly dirty, wipe it by the following methods.

- ① Immerse a soft cloth in water or hot water containing 3% to 5% neutral detergent, then wring it out thoroughly.
- ② Use the above soft cloth to wipe the leather surface.
- ③ Wipe off the cleaning solution with a cloth soaked in clean water and thoroughly wrung out.
- ④ Wipe with a wrung soft cloth.
- ⑤ Let it air dry naturally.


- When it is difficult to remove stains, please immerse commercially available melamine foam in neutral detergent, and then wipe the machine with it.

- Do not use a hair dryer to dry the surface.

- As the color of the fabric will stain the surface of the PU leather, be careful when wiping the chair with denim and colored fabrics.

- Do not keep these parts in contact with plastic for a long time, as this will cause discoloration.

- PU leather may be discolored, so when using hair dye, please cover the touched part with a towel.

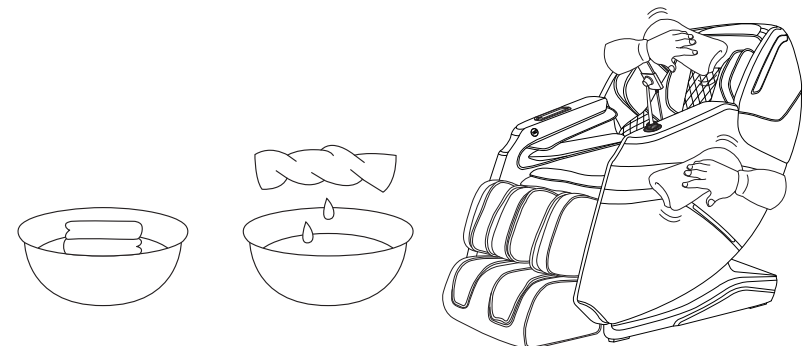

Troubleshooting

Fault	When the calf mechanism or the backrest reaches a certain position, press the corresponding adjustment button and it will no longer change, and a continuous "beep, beep" sound will be emitted.
Solution	Due to product structure design and ergonomic requirements, this product has a limited protection design for the limit state of attitude adjustment. At the same time, a reminder sound will sound when the limit is reached.
Fault	The function does not work or some functions do not work after the machine is turned on.
Solution	After the machine is turned on by pressing the switch key, it is necessary to manually select an automatic massage program or other working state. If it is not operated, the machine will automatically shut down after 20 minutes. If the manual operation mode is selected, the functions that are not selected may be disabled, and the working mode needs to be manually set in the manual mode.
Fault	The machine makes a leather rubbing sound when adjusting its posture.
Solution	This product adopts high-grade anti-corrosion leather that meets environmental protection requirements. Due to the inherent characteristics of leather materials, there will be a normal slight noise when rubbing at the relative movement, which is a normal phenomenon. Note: If you hear fabric or leather tearing sound when the machine is running, please stop using it immediately and seek professional maintenance.
Fault	The massage wheel did not reach the shoulders or neck.
Solution	If the head does not touch the head cushion or the back does not touch the backrest, the shoulder position may be lower than the actual position during the body shape detection process. Sit in the deepest position of the seat, rest your head on the headrest, and start over from the beginning.
Fault	The unit is damaged. The power cord or power plug is abnormally hot.
Solution	To prevent accidents, be sure to contact an authorized service center.

Please feel free to contact the designated service personnel for any questions or doubts about this product.

Product Specifications

Model: A336

Name: Massage Chair

Rated voltage: 110-120V~ 60Hz ☐
220-240V~ 50Hz/60Hz ☐

Rated power: 140W

Rated time: 20min

Safety structure: Class I

Material description: PVC, PA, steel parts, electric and electron components

MATERIAL	PU	LEATHER	CLOTH	WOOD

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Producer:

Zhejiang Haozhonghao Health Product Co., Ltd

No.18 XingLong Road, Furniture Garden, Wanquan Industrial Base, Pingyang, Zhejiang, China

e-mail: irest@irest.com

Importer and authorized representative in the EU:

iRest Europe Sp. z o.o.

Szewczeni 7/11

10-274 Olsztyn, Poland

e-mail: irest@irest-europe.com


Dear user, you can contribute to environmental protection. Be environmentally responsible and return your used equipment to the relevant collection point designated by your local administration. The materials used to manufacture the device may be valuable recyclable resources and, if disposed of incorrectly, can pose a risk to the natural environment. Remember - do not dispose of the device together with your household waste.



iRest

Fotel masujący iRest Supearl Open+ (A336) INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ

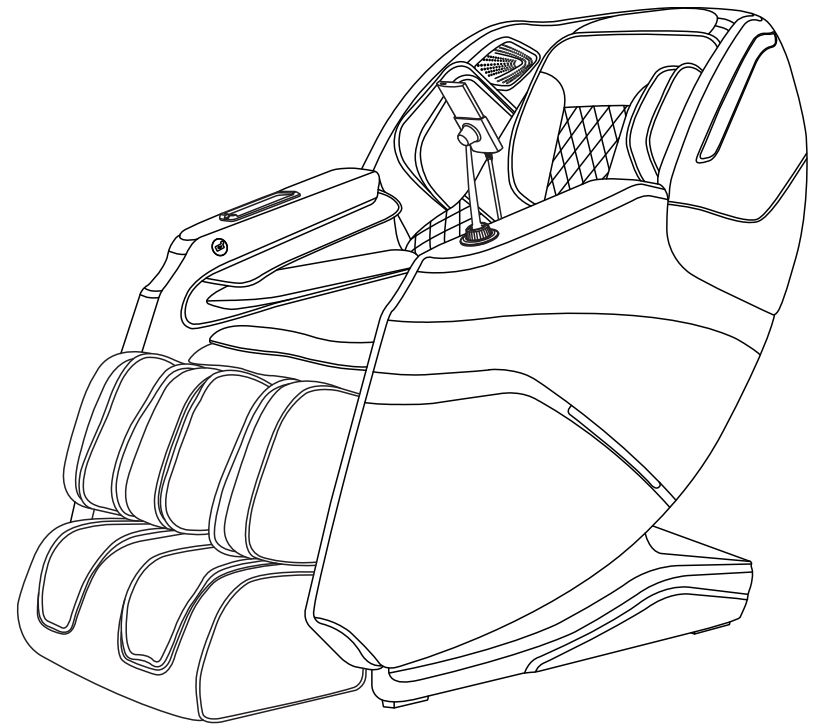

Dziękujemy za zakup urządzenia. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, aby przed uruchomieniem fotela masującego dowiedzieć się, jak prawidłowo z niego korzystać. W szczególności prosimy o zapoznanie się z przeciwwskazaniami oraz zasadami bezpiecznego użytkowania.

Uwaga: Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w projekcie urządzenia i jego opisie. Jeśli istnieje jakaś różnica między funkcją urządzenia dostępnego na rynku a opisem w instrukcji, to wynika ona ze zwykłej aktualizacji urządzenia, a producent nie ma obowiązku informowania o tym fakcie. Kolor zilustrowany w instrukcji obsługi nie reprezentuje aktualnej kolorystyki fotela masującego.

SPIS TREŚCI

Przed pierwszym użyciem

Środki ostrożności	02-04
Części montażowe	05-06
Umieszczenie fotela masującego	07-08
Przed użyciem	09-10
Budowa urządzenia	11-14

Sposób użytkowania

Instrukcja obsługi	15-42
--------------------	-------

Konserwacja

Czyszczenie i konserwacja	43
---------------------------	----

Ważne

Rozwiązywanie problemów	44-45
Specyfikacja urządzenia	46

Środki ostrożności (muszą być przestrzegane)

Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie istotne instrukcje. Zawarte tu wskazówki pomogą bezpiecznie i prawidłowo korzystać z urządzenia. Aby wyraźnie wskazać zakres możliwych urazów i uszkodzeń, które mogą być spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, informacje zostały opatrzone nagłówkiem "Ostrzeżenie" lub "Uwaga". Jedne i drugie są ważne dla bezpieczeństwa i należy ich przestrzegać.

 Ostrzeżenie	Sygnalizuje, że w wyniku niewłaściwego użycia może dojść do poważnych obrażeń lub śmierci.
 Uwaga	Sygnalizuje, że w wyniku niewłaściwego użytkowania może dojść do niewielkich obrażeń lub uszkodzenia mienia.

■ Należy zwrócić uwagę na symbol przed każdym elementem dotyczącym bezpieczeństwa.

 Zabronione	Absolutny zakaz
---	-----------------

Zabrania się używania fotela przez poniższe osoby

 Zabronione	■ Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z upośledzeniami fizycznymi, sensorycznymi lub neurologicznymi lub nieposiadające doświadczenia i zdrowego rozsądku, chyba że są one nadzorowane i poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Dzieci muszą być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniami. ■ Pacjenci z osteoporozą. ■ Pacjenci z chorobami serca lub posiadające elektroniczne urządzenia medyczne jak rozrusznik serca. ■ Osoby, które mają gorączkę. ■ Kobiety w ciąży lub kobiety w trakcie miesiączki. ■ Pacjenci, którzy są ranni lub cierpią na chorobę skóry. ■ Dzieci poniżej 14 roku życia lub osoby niezdolne umysłowo bez nadzoru nie mogą korzystać z tego urządzenia. ■ Osoby, którym lekarze zalecili odpoczynek lub którzy źle się czują. ■ Osoby, których ciała są mokre, nie mogą używać tego produktu. ■ Urządzenie ma podgrzewaną powierzchnię. Osoby niewrażliwe na ciepło muszą zachować ostrożność podczas korzystania z urządzenia. ■ Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta/serwisanta, lub kogoś o podobnych uprawnieniach.
--	--

Środki ostrożności (muszą być przestrzegane)

Ważne uwagi co do bezpieczeństwa

 Ostrzeżenia	■ Nie pozwalaj dzieciom dotykać ruchomych części tego fotela masującego. ■ Używaj dobrze uziemionego zasilacza odpowiedniego dla tego produktu. ■ Wyciągnij wtyczkę po użyciu lub przed czyszczeniem, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia produktu. ■ Obsługuj fotel masujący zgodnie z instrukcją obsługi. ■ Nie używaj akcesoriów, które nie są zalecane. ■ Nie używaj fotela masującego na zewnątrz. ■ Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi. ■ Nigdy nie używaj tego produktu do innych celów niż wymienione w niniejszym dokumencie. ■ Zaleca się każdorazowo 20 minut użytkowania. ■ Nie używaj fotela, jeśli pokrywa lub skóra jest zepsuta lub uszkodzona. ■ Nie upuszczaj niczego nad fotelem masującym. ■ Nie zasypiaj podczas korzystania z fotela masującego. ■ Nie używaj fotela masującego, jeśli jesteś nietrzeźwy lub źle się czujesz. ■ Nie korzystaj z masażu w ciągu godziny po posiłku. ■ Nie ustawiaj dużej siły masażu aby uniknąć obrażeń.
--	--

Środki ostrożności

 Uwaga	■ Sprawdź, czy napięcie jest zgodne ze specyfikacją tego produktu. ■ Nigdy nie używaj mokrej ręki do wyciągania wtyczki. ■ Nie wolno dopuścić do przedostania się wody do wnętrza tego produktu, aby uniknąć porażenia prądem lub uszkodzenia produktu. ■ Nie ciągnij za przewód zasilający podczas podłączania lub odłączania. Nieostrożne obchodzenie się ze sprzętem jest zakazane. ■ Nie uszkodz przewodu ani nie modyfikuj obwodu tego urządzenia. ■ Używaj suchej ściereczki do czyszczenia elementów elektrycznych, takich jak wyłącznik i wtyczka. ■ Nie siadaj na urządzeniu w stanie odcięcia zasilania, aby uniknąć obrażeń w przypadku nagłego powrotu napięcia. ■ Zaprześć korzystania z urządzenia, gdy działa ono nieprawidłowo i natychmiast skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem producenta. ■ Zaprześć używania tego produktu w przypadku pogorszenia się samopoczucia i skonsultuj się z lekarzem.
--	---

Warunki przechowywania

 Uwaga	■ Temperatura w pomieszczeniu : od 5°C do 40°C. ■ Wilgotność względna od 20% do 80%, brak gazów powodujących korozję, dobrze wentylowane pomieszczenie.
--	--

Serwis i konserwacja fotela	
 Uwaga	■ Ten produkt powinien być konserwowany wyłącznie przez centrum serwisowe wyznaczone przez producenta. Żaden użytkownik nie powinien go rozmontowywać ani konserwować bez pozwolenia. ■ Nie zapomnij wyłączyć głównego wyłącznika zasilania po zakończeniu użytkowania. ■ Nie używaj produktu, jeśli gniazdo zasilania poluzuje się. ■ Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy zwinąć przewód zasilający produktu i przechowywać go w suchym i wolnym od kurzu miejscu. ■ Nie przechowywać produktu w wysokiej temperaturze lub w pobliżu otwartego ognia. Unikać długotrwałego wystawiania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. ■ Produkt należy czyścić suchą szmatką. Nigdy nie używaj rozcieńczalnika, benzenu lub alkoholu. ■ Elementy mechaniczne tego produktu są specjalnie zaprojektowane i wyprodukowane, więc nie jest wymagana żadna specjalna konserwacja. ■ Nie używaj ostrych przedmiotów do kłucia tego produktu. ■ Nie należy toczyć ani ciągnąć urządzenia po nierównym podłożu. Przed przemieszczeniem należy go podnieść. ■ Produkt powinien być używany w sposób przerywany. Nie używaj go w sposób ciągły przez dłuższy czas..





Środowisko użytkowania	
 Uwaga	■ Nie używaj tego produktu w pomieszczeniach o bardzo wysokiej wilgotności, takich jak łazienka. ■ Należy natychmiast zaprzestać używania produktu w przypadku gwałtownej zmiany temperatury otoczenia. ■ Nie używaj tego produktu w środowisku silnie zapyłonym lub żrącym. ■ Nie używaj tego produktu na małej przestrzeni lub w miejscu bez dobrej wentylacji.

Rozwiązywanie zwykłych usterek	
 Uwaga	■ Naturalnym jest odgłos pracujących siłowników w momencie używania fotela masującego. ■ Jeśli sterownik nie działa normalnie, należy sprawdzić, czy wtyczka i gniazdo zasilania są prawidłowo podłączone i czy wyłącznik zasilania jest włączony. ■ Jeśli znamionowy czas pracy dobiegnie końca, fotel automatycznie aktywuje przycisk wyłączania; Jeżeli fotel masujący używany jest bez przerwy przez długi czas, to w momencie osiągnięcia wysokiej temperatury nastąpi automatyczne wyłączenie. Należy odczekać co najmniej pół godziny, aby móc dalej korzystać z fotela masującego.

Instrukcja montażu podnóżka

- 1.Włóż przewód i rurkę powietrzną do przedniego gniazda zespołu stalowej ramy (Rysunek 1).
- 2.Następnie wysuń podłączony przewód i rurkę powietrzną do otworu w ramie oparcia (Rysunek 2).
- 3.Po zakończeniu mocowania drutu otwórz pokrywę mocującą podnóżka po obu stronach zespołu stalowej ramy (Rysunek 3).
- 4.Unieś podnóżek do wycięcia, zamknij pokrywę mocującą i przymocuj ją za pomocą 2 śrub (Rysunek 4).




Uwaga: ten krok można zignorować w przypadku instalacji typu „wszystko w jednym”

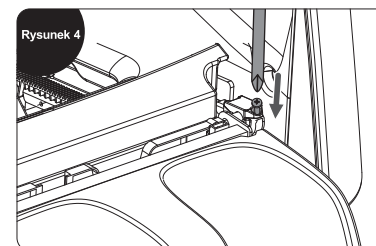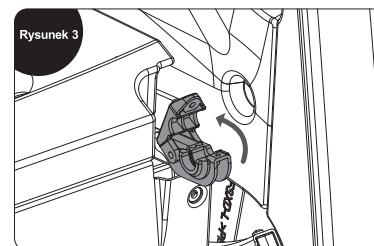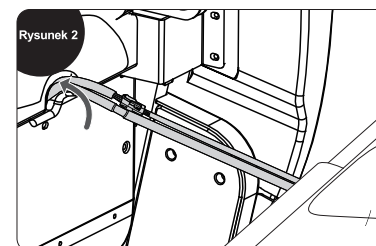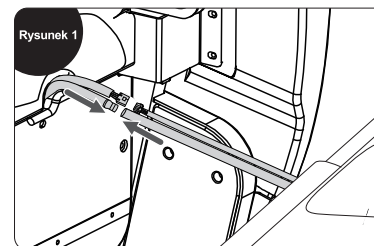

Części montażowe

Instrukcja instalacji przewodu pilota

Instrukcja połączenia wtyków przewodu: Połącz wtyki w ten sposób, aby strzałki znajdujące się na nich znalazły się naprzeciw siebie (rys. 1, rys. 3). Następnie zablokuj połączone wtyki za pomocą nakrętki, dokręcając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara (rys. 2, rys. 4).

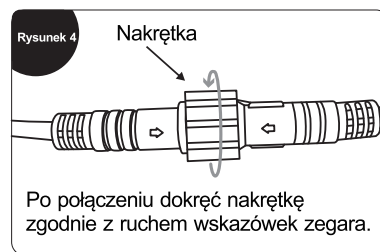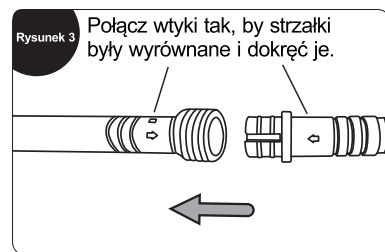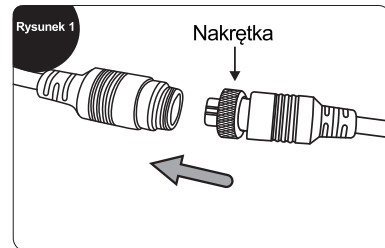


Umieszczenie fotela masującego

Miejsce montażu

Upewnij się, że jest wystarczająco dużo miejsca, ponieważ fotel masujący potrzebuje do rozłożenia co najmniej 15 cm.



Nie wystawiaj fotela masującego bezpośrednio na działanie wysokiej temperatury (np. przed urządzeniami grzewczymi) i promieni słonecznych; umieść go w miejscu, gdzie można uniknąć wysokiej temperatury i bezpośredniego działania promieni słonecznych. Zaleca się ułożenie miękkiej maty w przypadku długotrwałego użytkowania w wyznaczonym miejscu. Podczas układania takiej maty, jej rozmiar powinien być wystarczający do objęcia podstawy urządzenia. Miej na uwadze zakres, w którym urządzenie dotyka podłogi i miejsce, w którym stopy dotykają podłogi.

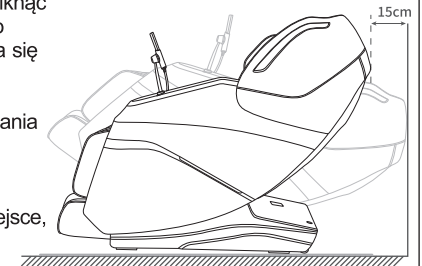


Instrukcja dotycząca podnoszenia urządzenia

Wymagana jest praca zespołowa przy podnoszeniu i przesuwaniu fotela, aby uniknąć ryzyka obrażeń.



1. Podnieś fotel masujący, aby przenieść go na delikatnym podłożu, np. na drewnianych podłogach.
2. W przypadku przemieszczania urządzenia na drewnianej podłodze, zaleca się podniesienie go. Należy unikać uszkodzenia kółek. Gdy fotel jest podnoszony i przesuwany do wyznaczonej pozycji, należy uważać na ręce, aby uniknąć obrażeń, oraz uważać na przygnięcie stóp. Nie puszczaj urządzenia, dopóki корпус nie stanie całkowicie płasko na ziemi, podłoga może zostać uszkodzona, dlatego zaleca się umieszczenie na niej maty.

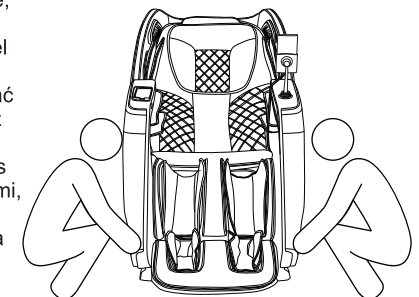

Umieszczenie fotela masującego

Metoda przemieszczania

Użyj tylnych kółek do przesuwania fotela masującego. Przesuń fotel, przechylając go do tyłu do około 45°, jak pokazano na rysunku.


UWAGA: Nadmierna siła przy wychylaniu spowoduje całkowite przewrócenie się fotela i uszkodzenie urządzenia.

1. Przed przemieszczeniem należy prawidłowo wyłączyć urządzenie, aby je zresetować i następnie odłączyć od zasilania.

2. Podczas przenoszenia na fotelu nie powinno nic leżeć. (Ludzie, zwierzęta domowe lub rzeczy).

3. Podczas przenoszenia nie należy upuszczać fotela z wysokości większej niż 2 mm ani przekraczać szczeliny większej niż 5 mm.

4. Podczas korzystania z kółek do przesunięcia urządzenia, pojedyncze pchnięcie nie jest zalecane; jeśli odległość przekracza 50 metrów, urządzenie należy przesuwac powoli i równomiernie.


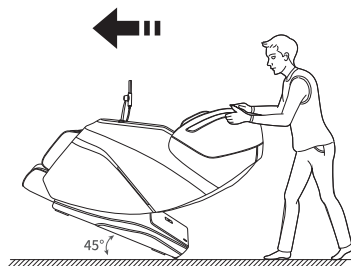


Uwaga

Jak zdemontować poduszkę na zagłówek i poduszkę na oparcie oraz jak z nich korzystać

Zastosowanie poduszki zagłówka może zmniejszyć intensywność masażu ugniatającego na szyi i ramionach.

O zastosowaniu poduszki zagłówka można zdecydować w zależności od potrzeb (zaleca się jej zastosowanie). Poduszka oparcia i oparcie są połączone zamkiem błyskawicznym (1), poduszka zagłówka i poduszka oparcia są również połączone zamkiem błyskawicznym (2).

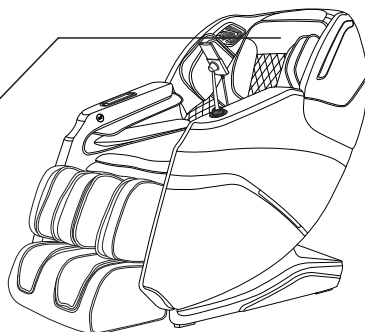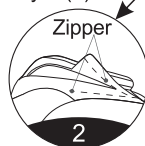


Uwaga

Przed użyciem

Sprawdzenie otoczenia


Upewnij się, że wokół urządzenia nie ma ludzi, zwierząt domowych i innych przedmiotów.

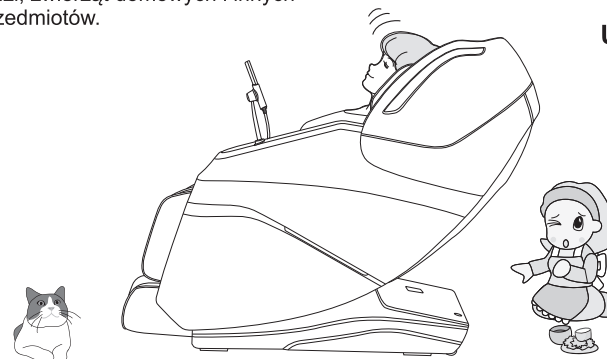

Uwaga

Upewnij się, że w szczelinach urządzenia nie ma żadnych przedmiotów

Przed masażem upewnij się, że w podnóżku, przy stopach itp. nie znajdują się żadne obce przedmioty. W żadnym wypadku nie wolno dopuścić, aby ręce, stopy i głowa zagłębiały się w obszar pomiędzy mechanizmem dolnej części podnóżka a korpusem głównym lub obszar pomiędzy podłokietnikiem a oparciem. W żadnym wypadku nie wolno dopuścić, aby ręce, stopy lub głowa dostały się pod tkaninę lub skórę pokrywającą powierzchnię masażu.

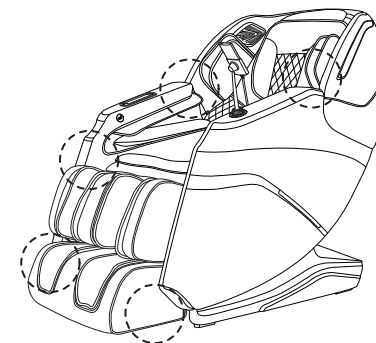


Uwaga

Przed użyciem


Włączanie zasilania

! Uwaga


Podłączenie kabla zasilającego

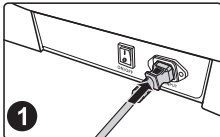

Schemat podłączenia zasilania

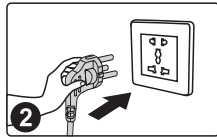

Włącz przełącznik zasilania (pozycja "I")

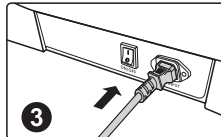


Ostrzeżenie

- Przed użyciem należy sprawdzić, czy przewód zasilający i wtyczka nie są uszkodzone.
- Zasilanie tego urządzenia należy dostarczać zgodnie z wymaganiami dotyczącymi mocy roboczej tego urządzenia.
- Surowo zabrania się używania zasilania innego niż nominalne zasilanie tego produktu.
- Surowo zabrania się podłączania różnych urządzeń do konwersji zasilania bez autoryzacji do zasilania tego produktu.


Budowa urządzenia

Opis poszczególnych elementów

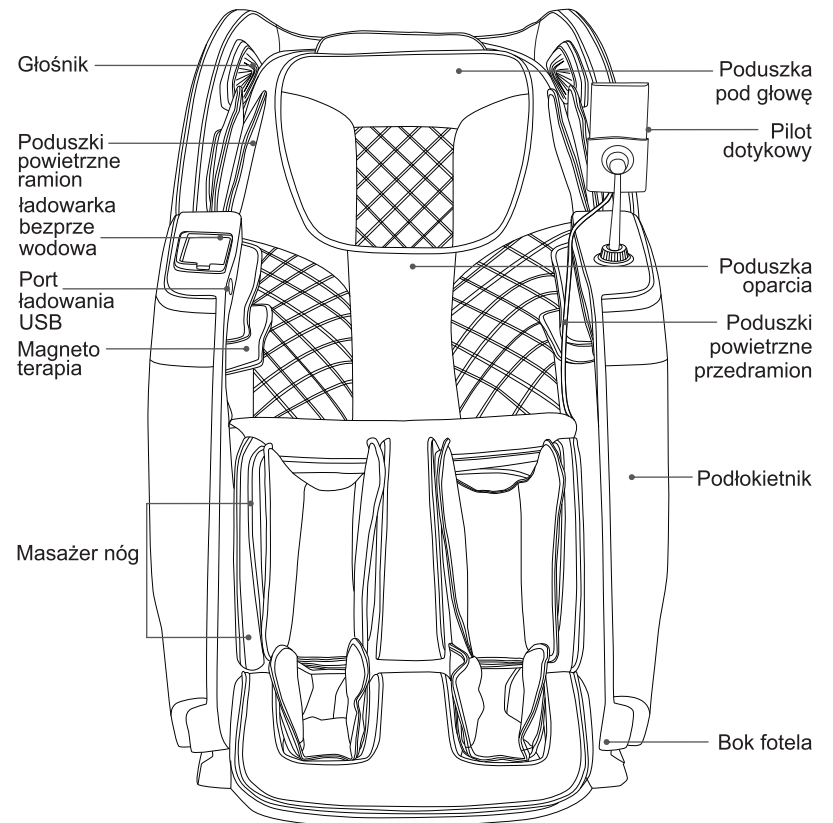


Budowa urządzenia

Rozkład funkcji

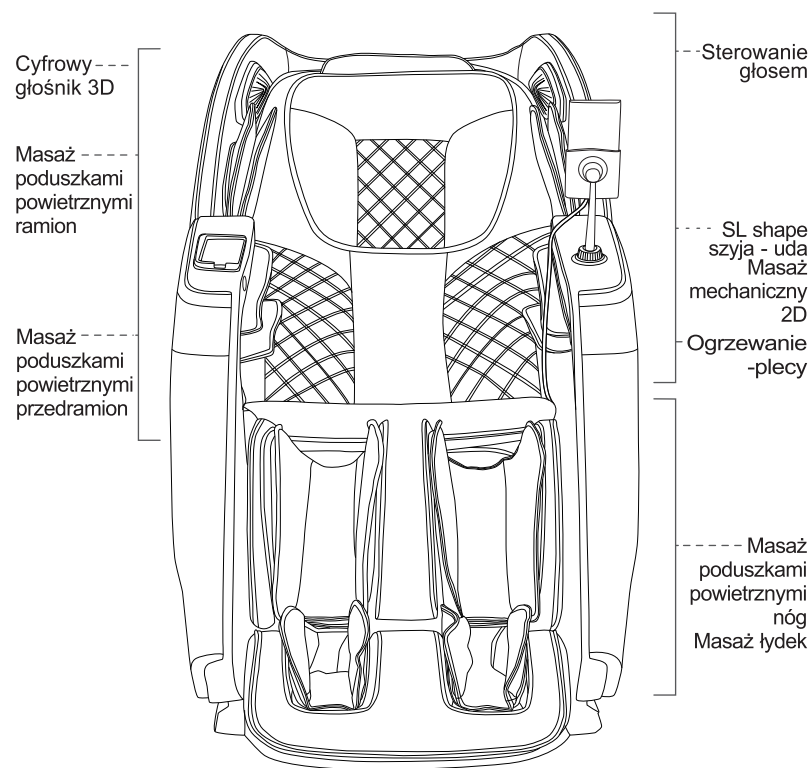


Budowa urządzenia

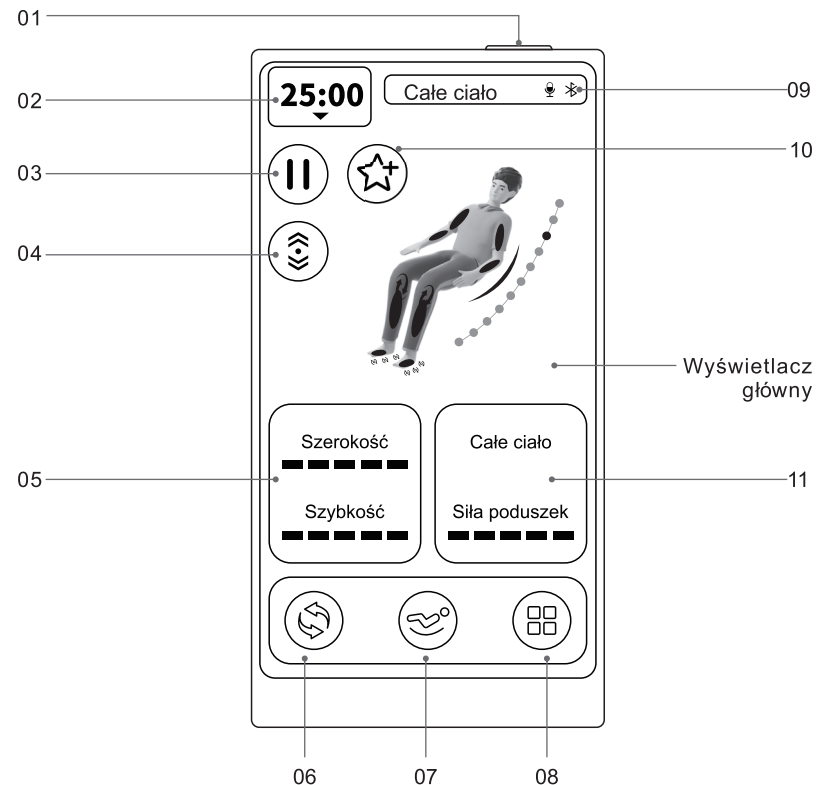

01. Włącz / wyłącz: przytrzymaj przycisk, by włączyć lub wyłączyć fotel.
02. Czas: dostosuj czas trwania masażu.
03. Pauza: wstrzymuje wszystkie funkcje fotela.
04. Pozycja ramion masujących: naciśnij, aby przejść do ustawień pozycji ramion masujących.
05. Szerokość / szybkość masażu: naciśnij, aby przejść do ustawień szerokości masażu (3 dostępne poziomy) lub szybkości masażu (5 poziomów).
06. Tryb automatyczny: naciśnij, aby przejść do programów automatycznych.
07. Pozycja: przejdź do ustawień pozycji fotela.
08. Menu: przejdź do menu, aby wybrać program automatyczny, technikę, ustawić pozycję fotela, dodatkowe funkcje, pamięć, ustawienia I inne.
09. Pasek statusu: wskazuje aktywne funkcje fotela.
10. Pamięć: zapisz aktualny program masażu.
11. Siła poduszek: naciśnij, aby dostosować poziom intensywności masażu poduszkami powietrznymi (5 poziomów siły).

Budowa urządzenia

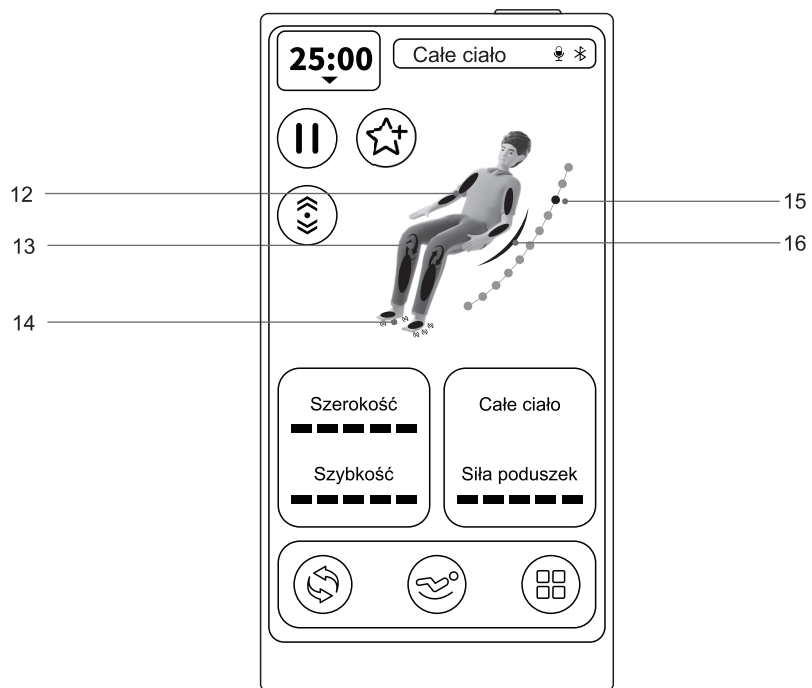


- 12. Strefy masażu poduszkami powietrznymi: wskazuje aktualne strefy masażu poduszkami powietrznymi.
- 13. Masaż tydek: ugniatający masaż tydek - pokazuje status funkcji.
- 14. Masaż stóp: pokazuje status funkcji.
- 15. Pozycja masażera: wskazuje aktualną pozycję masażera.
- 16. Ogrzewanie: wyświetla status ogrzewania pleców.

Instrukcja obsługi


I .Rozpoczęcie masażu

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na górze pilota, aby włączyć fotel masujący. Następnie poczekaj, aż pilot uruchomi się, a na ekranie pojawi się komunikat dotyczący automatycznego rozkładania fotela.

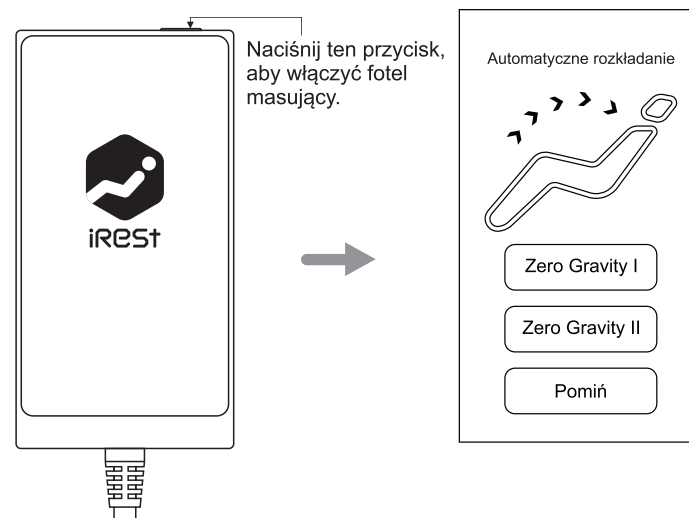


Instrukcja obsługi

- (1).Pozycja fotela masującego jest wybierana automatycznie po wyświetleniu ekranu automatycznego rozkładania. Można także ręcznie wybrać inną pozycję Zero Gravity: "Zero Gravity I" lub "Zero Gravity II". Po zakończeniu rozkładania fotel automatycznie rozpocznie skanowanie ciała. Możliwe jest pominięcie tego procesu przez naciśnięcie przycisku "Pomiń", a fotel pozostanie w bieżącej pozycji i przejdzie do kolejnego etapu skanowania.
- (2).Następnie fotel masujący automatycznie przeprowadzi skanowanie ciała użytkownika.Po zakończeniu skanowania ramiona masujące zostaną automatycznie ustawione na odpowiedniej wysokości, a na wyświetlaczu pojawi się możliwość ręcznego dostosowania ich położenia. Użytkownik może pominąć etap skanowania przez naciśnięcie przycisku „Pomiń”, skorzystać z domyślnych ustawień i rozpocząć masaż.

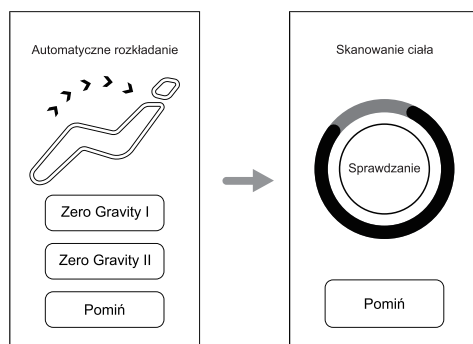


- (3).Po wyświetleniu się poniższego ekranu, dostosuj ręcznie pozycję ramion masujących. Jeśli ramiona masujące zatrzymają się na wysokości Twoich ramion, nie musisz dokonywać zmian – wystarczy nacisnąć „OK”, aby rozpocząć masaż. Jeśli pozycja nie jest odpowiednia, użyj strzałek w górę i w dół na pilocie, aby dostosować ją do położenia ramion (dostępnych jest 11 poziomów regulacji). Po wyregulowaniu naciśnij „OK”, aby rozpocząć masaż. Jeśli nie podejmiesz żadnej akcji przez ponad 10 sekund, fotel automatycznie zatwierdzi bieżącą pozycję ramion i rozpocznie masaż.

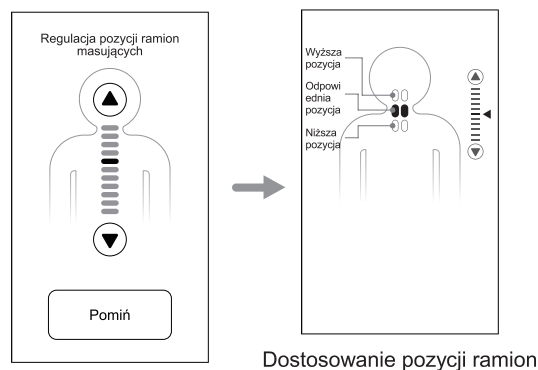

Instrukcja obsługi


- 2.Pauza: na ekranie głównym, jak pokazano na poniższym rysunku, kliknij ikonę „pauza” podczas działania programu, a fotel masujący przejdzie w stan pauzy, zatrzymując wszystkie funkcje masażu. Kliknij „kontynuuj masaż”, aby wznowić masaż. Uwaga: W stanie pauzy, poza wyłączeniem zasilania, inne funkcje masażu nie mogą być używane.

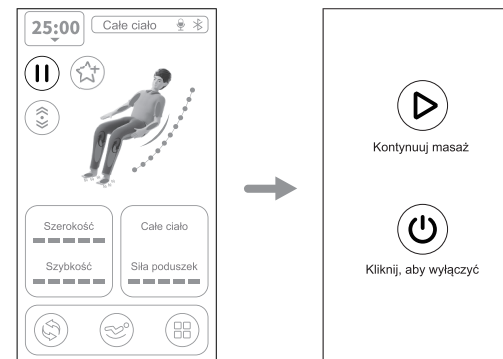

Ekran główny – schemat pauzy / kontynuacji pracy fotela

- 3.Pamięć: na ekranie głównym, tak jak pokazano na poniższym rysunku, wybierz ikonę „zapisz”, aby przejść do kolejnego ekranu, a następnie zdecyduj, czy chcesz zapisać, czy użyć wcześniej zapisanych ustawień masażu. Po wybraniu przycisku „zapisz”, system zapisze bieżący program na liście w celu uruchomienia go w przyszłości. Po naciśnięciu przycisku „użyj” fotel uruchomi wcześniej zapisany program. Dostępne są trzy pamięci. Naciśnij przycisk „powrót”, aby powrócić do strony głównej.


Uwaga: Funkcja ta może być również obsługiwana z poziomu menu głównego.

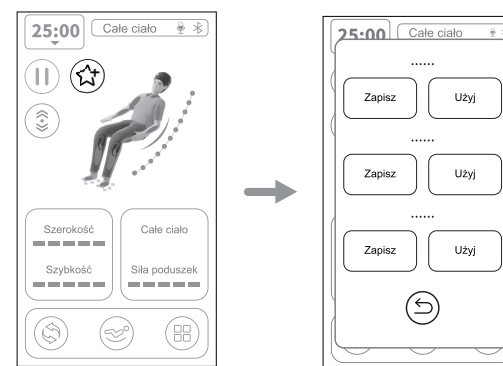

Ekran główny – schemat zapisu


Instrukcja obsługi

4.Regulacja pozycji ramion: na ekranie głównym, jak pokazano na poniższym rysunku, naciśnij ikonę regulacji pozycji ramion, aby przejść do regulacji pozycji ramion masujących. Następnie dostosuj położenie mechanizmu masującego zgodnie z własnymi potrzebami. Jeśli ramiona masujące nie znajdują się na wysokości Twoich ramion, użyj strzałek w górę i w dół, aby dopasować ich pozycję do wysokości ramion (możliwość regulacji w 11 poziomach). Po dostosowaniu naciśnij przycisk „OK”, aby zatwierdzić wybór i powrócić do ekranu głównego.

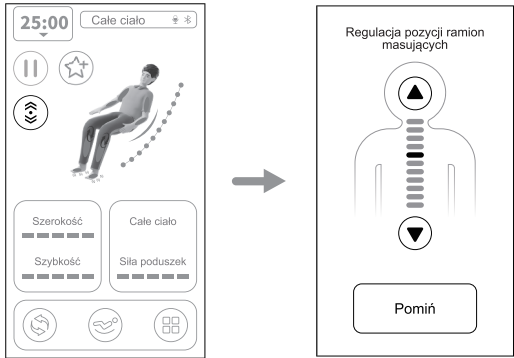

Ekran główny – schemat regulacji pozycji ramion masujących


5.Pasek statusu: na ekranie głównym, jak pokazano na poniższym rysunku, wyświetlane są informacje o aktualnie działających funkcjach masażu, takich jak Bluetooth i inne parametry pracy urządzenia.

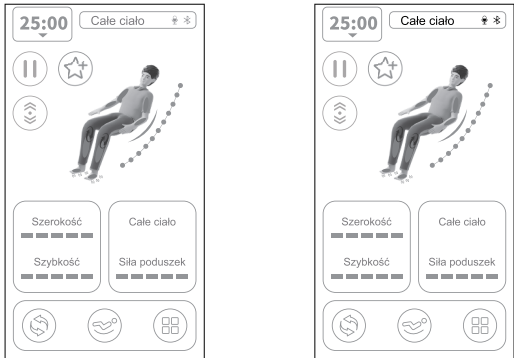

Ekran główny – schemat wyświetlania funkcji

Instrukcja obsługi

6.Regulacja szerokości masażu: na ekranie głównym, jak pokazano na poniższym rysunku, wybierz i kliknij przycisk „szerokość / szybkość”, aby przejść do interfejsu regulacji szerokości masażu. Następnie, zgodnie z własnymi potrzebami, przesun suwak „szerokość” w lewo lub w prawo, aby dostosować szerokość masażu. Dostępne są 3 poziomy regulacji, gdzie poziom 1 oznacza najwęższy zakres masażu, a poziom 3 – najszerszy. Naciśnij przycisk „powrót”, aby wrócić do ekranu głównego.

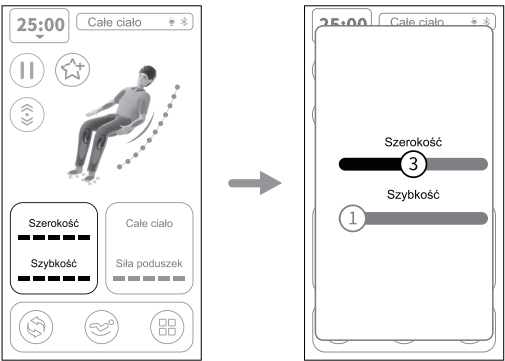


Ekran główny – schemat szerokości masażu




Przycisk	Opis
	Przytrzymaj suwak i przesun w prawo, aby zwiększyć szerokość masażu (3 poziomy regulacji).
	Przytrzymaj suwak i przesun w lewo, aby zmniejszyć szerokość masażu (3 poziomy regulacji).

Instrukcja obsługi

7.Szybkość masażu: na ekranie głównym, jak pokazano na poniższym rysunku, kliknij przycisk „szerokość / szybkość masażu”, aby przejść do interfejsu regulacji szybkości masażu. Następnie, zgodnie z własnymi potrzebami, przesun suwak „szybkość” w lewo lub w prawo, aby dostosować szybkość pracy ramion masujących. Dostępnych jest 5 poziomów regulacji, gdzie poziom 1 oznacza najmniejszą, a poziom 5 – największą szybkość. Naciśnij przycisk „powrót”, aby wrócić do ekranu głównego.
(Uwaga: szybkość masażu można regulować tylko w trybie manualnym. W trybie automatycznym regulacja prędkości nie jest możliwa.)

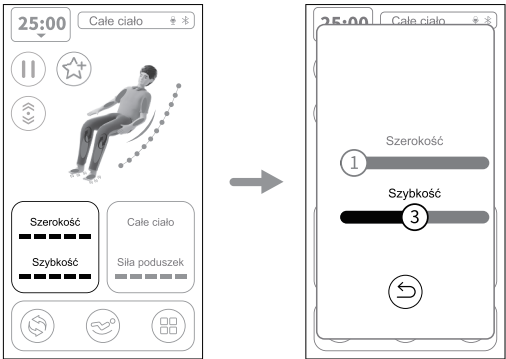


Ekran główny – schemat szybkości masażu

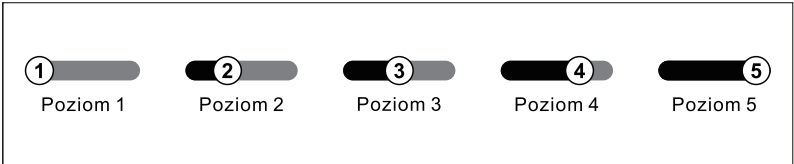

Przycisk	Opis
	Przytrzymaj suwak i przesun w prawo, aby zwiększyć szybkość masażu (5 poziomów regulacji).
	Przytrzymaj suwak i przesun w lewo, aby zmniejszyć szybkość masażu (5 poziomów regulacji).

Instrukcja obsługi

8.Masaż poduszkami powietrznymi: na ekranie głównym, jak pokazano na poniższym rysunku, wybierz przycisk „siła poduszek”, aby przejść do ustawień masażu poduszkami powietrznymi. Następnie, zgodnie z własnymi potrzebami, wybierz odpowiednią strefę masażu poduszkami powietrznymi. Możliwy jest masaż górnych partii ciała, dolnych partii, masaż całego ciała oraz wyłączenie funkcji masażu poduszkami powietrznymi. Naciśnięcie przycisku „wyłącz” powoduje całkowite wyłączenie funkcji masażu poduszkami. Naciśnij przycisk „powrót”, aby wrócić do ekranu głównego.

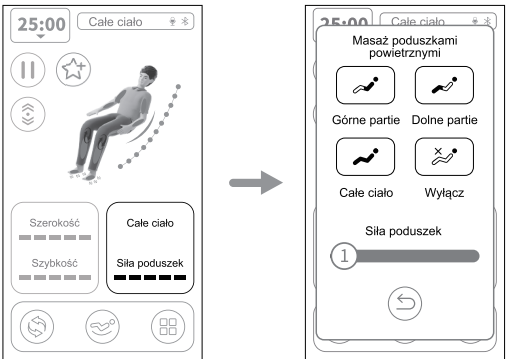


Ekran główny – schemat masażu poduszkami powietrznymi

Przycisk	Opis
Wyłącz	Wyłącz Naciśnij, aby wyłączyć funkcję masażu poduszkami powietrznymi.
Górne partie	Górne partie Naciśnij, aby włączyć masaż poduszkami powietrznymi górnych partii.
Dolne partie	Dolne partie Naciśnij, aby włączyć masaż poduszkami powietrznymi dolnych partii.
Cale ciało	Cale ciało Naciśnij, aby włączyć masaż poduszkami powietrznymi całego ciała.


Ekran aktywnych stref masażu poduszkami powietrznymi		
Masaż górnych partii	Masaż dolnych partii	Masaż całego ciała

Instrukcja obsługi

(01).Siła masażu poduszkami powietrznymi: na ekranie głównym, kliknij ikonę „siła poduszek”, aby przejść do interfejsu regulacji masażu poduszkami powietrznymi. Strefy masażu obejmują: górne partie, dolne partie, całe ciało oraz wyłączenie masażu poduszkami. Siłę masażu można regulować w 5 poziomach. Aby dostosować siłę, przesun suwak w lewo lub w prawo.

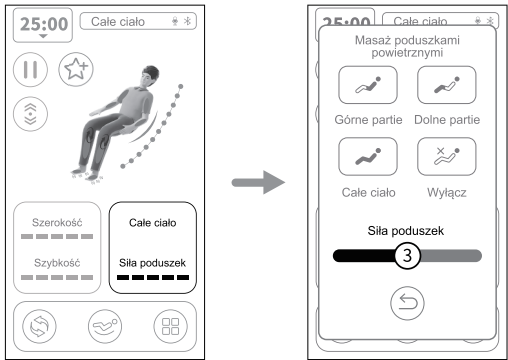

Ekran główny – schemat siły masażu poduszkami powietrznymi

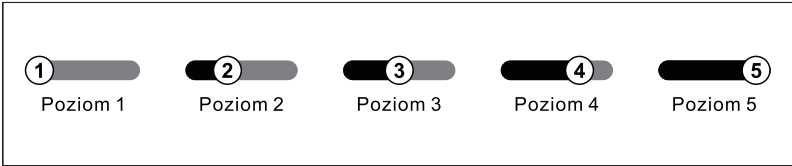


Przycisk	Opis
	Przytrzymaj suwak i przesun w prawo, aby zwiększyć siłę masażu poduszkami powietrznymi (5 poziomów regulacji).
	Przytrzymaj suwak i przesun w lewo, aby zmniejszyć siłę masażu poduszkami powietrznymi (5 poziomów regulacji).

Instrukcja obsługi

II . Tryb automatyczny (należy używać tej funkcji po włączeniu fotela masującego)

Naciśnij ikonę „Tryb automatyczny” na pasku menu na dole ekranu, jak pokazano na poniższym schemacie, aby przejść do wyboru trybu automatycznego. Następnie wybierz odpowiedni program automatyczny zgodnie z własnymi potrzebami. Uwaga: funkcja ta może być również obsługiwana z poziomu menu głównego. W interfejsie trybu automatycznego przesun w lewo lub w prawo, aby wybrać jeden z 12 dostępnych programów automatycznych: Masaż relaksujący, Masaż komfortowy, Masaż rozciągający, Masaż pleców i talii, Masaż szyi i ramion, Masaż całego ciała, Masaż kręgosłupa, Łagodzenie bólu, Poprawa krążenia, Modelowanie pośladków, Na dobranoc, W trosce o zdrowie. Naciśnij przycisk „powrót”, aby wrócić do ekranu głównego.

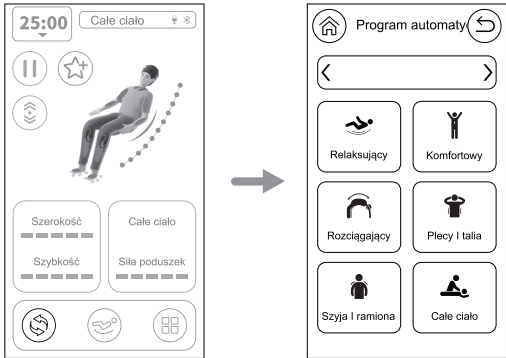

Ekran główny – schemat wyboru programu automatycznego

Instrukcja obsługi


Program	Opis
Masaż komfortowy	Najbardziej komfortowy masaż.
Masaż relaksujący	Delikatny i kojący, ale równocześnie głęboki masaż, który redukuje zmęczenie organizmu i sprzyja relaksacji.
Masaż rozciągający	Połączenie sekwencji podnoszenia i obniżania oparcia oraz podnóżka z uciskowym masażem poduszkami powietrznymi, które daje efekt rozciągania całego ciała. Pomaga usunąć zmęczenie i przywrócić vitalność.
Masaż pleców i talii	Skoncentrowany na obszarze pleców i talii.
Masaż szyi i ramion	Ukierunkowany na przyniesienie ulgi w okolicach szyi i ramion.
Masaż całego ciała	Energetyzujący masaż obejmujący całe ciało.
Masaż kręgosłupa	Skupia się na odprężeniu i regeneracji kręgosłupa.
Łagodzenie bólu	Redukuje zmęczenie i poprawia mikrokrażenie.
Poprawa krążenia	Wspiera równowagę meridianów i wzmacnia układ odpornościowy.
Modelowanie pośladków	Redukuje nadmierne odkładanie się tkanki tłuszczowej w okolicach bioder i ud.
Na dobranoc	Poprawia jakość snu poprzez masaż z użyciem akupresury.
W trosce o zdrowie	Przeciwdziała skutkom siedzącego trybu życia, wspomagając funkcjonowanie organizmu.

Instrukcja obsługi

III. Regulacja pozycji fotela (Należy używać tej funkcji po włączeniu fotela masującego)

Naciśnij ikonę „Pozycja” na pasku menu u dołu ekranu, jak pokazano na poniższym schemacie, aby przejść do interfejsu regulacji fotela. Następnie wybierz odpowiednią funkcję regulacji pozycji w zależności od swoich potrzeb. Dostępne funkcje obejmują: jednoczesne unoszenie / opuszczanie oparcia i podnóżka, unoszenie i opuszczanie oparcia, unoszenie i opuszczanie podnóżka, Zero Gravity I, Zero Gravity II, reset pozycji fotela oraz inne opcje regulacji pozycji. Naciśnij przycisk „powrót”, aby wrócić do ekranu głównego.

Uwaga: Funkcja ta może być również obsługiwana z poziomu menu.

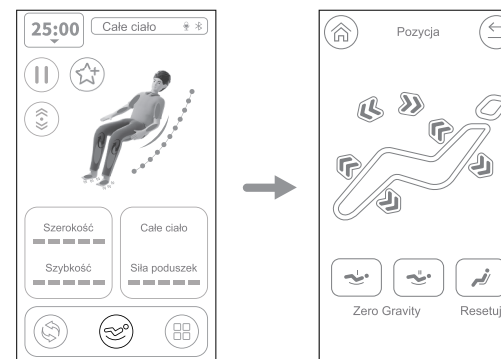

Ekran główny – schemat regulacji pozycji fotela

1. Regulacja pozycji Zero Gravity

Przycisk	Opis
	Zero Gravity I – Automatycznie dostosowuje pozycję podnóżka i oparcia do pozycji Zero Gravity I. Po zakończeniu rozkładania, podnóżek automatycznie wykryje długość nóg.
	Zero Gravity II – Automatycznie dostosowuje pozycję podnóżka i oparcia do pozycji Zero Gravity II. Po zakończeniu rozkładania, podnóżek automatycznie wykryje długość nóg.

Instrukcja obsługi

2.Regulacja kąta odchylenia podnóżka

Przycisk	Opis
	Podnoszenie podnóżka: naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby podnieść podnóżek; zwolnij przycisk, aby zatrzymać podnoszenie. Po osiągnięciu maksymalnej pozycji emitowany jest przerywany sygnał dźwiękowy.
	Opuszczanie podnóżka: przytrzymaj, aby opuścić podnóżek; zwolnij przycisk, aby zatrzymać opuszczanie. Po osiągnięciu minimalnej pozycji emitowany jest przerywany sygnał dźwiękowy.

3.Regulacja kąta nachylenia oparcia

Przycisk	Opis
	Podnoszenie oparcia Przytrzymaj, aby unieść oparcie; zwolnij przycisk, aby zatrzymać unoszenie. Po osiągnięciu maksymalnej pozycji emitowany jest przerywany sygnał dźwiękowy.
	Opuszczanie oparcia Przytrzymaj, aby opuścić oparcie; zwolnij przycisk, aby zatrzymać opuszczanie. Po osiągnięciu minimalnej pozycji emitowany jest przerywany sygnał dźwiękowy.

4.Zsynchronizowane podnoszenie / opuszczanie oparcia i podnóżka

Przycisk	Opis
	Podnoszenie zsynchronizowane Przytrzymaj, aby unieść oparcie i jednocześnie opuścić podnóżek; zwolnij przycisk, aby zatrzymać proces. Po osiągnięciu limitu emitowany jest przerywany sygnał dźwiękowy.
	Opuszczanie zsynchronizowane Przytrzymaj, aby opuścić oparcie i jednocześnie unieść podnóżek; zwolnij przycisk, aby zatrzymać proces. Po osiągnięciu limitu emitowany jest przerywany sygnał dźwiękowy.


Instrukcja obsługi

5.Reset pozycji

Przycisk	Opis
	Reset: Przywraca początkową pozycję fotela masującego.


IV. Menu (należy używać tej funkcji po włączeniu fotela masującego)

Kliknij ikonę menu na pasku menu u dołu ekranu, jak pokazano na poniższym schemacie, aby przejść do interfejsu menu. Następnie wybierz odpowiednią opcję zgodnie z własnymi potrzebami. Dostępne opcje obejmują: tryb automatyczny, tryb manualny, pozycję, pamięć, dodatkowe i inne ustawienia. Naciśnij przycisk „powrót”, aby wrócić do ekranu głównego.

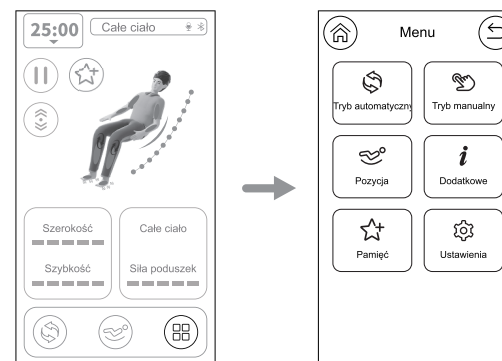


Ekran główny – schemat menu

1.Tryb automatyczny: Po wejściu do interfejsu menu, jak pokazano na poniższym schemacie, kliknij ikonę „Tryb automatyczny”, aby przejść do programów automatycznych. Następnie wybierz odpowiedni program masażu zgodny z własnymi potrzebami. Uwaga: Szczegółowe opisy programów automatycznych znajdują się na stronie 24 niniejszej instrukcji. Naciśnij przycisk „powrót”, aby wrócić do ekranu głównego.

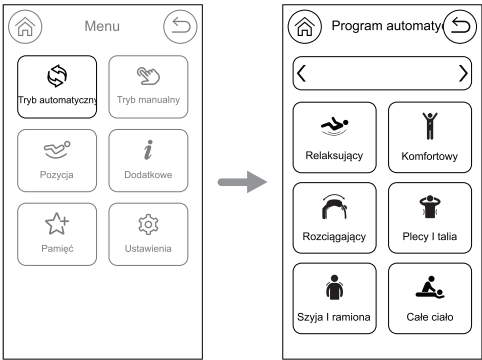


Menu – Schemat wyboru trybu automatycznego

2.Tryb manualny:Po wejściu do interfejsu menu naciśnij ikonę „Tryb manualny”, jak pokazano na poniższym schemacie, a następnie wybierz tryb masażu manualnego zgodnie z własnymi potrzebami. Naciśnij przycisk „powrót”, aby wrócić do ekranu głównego.

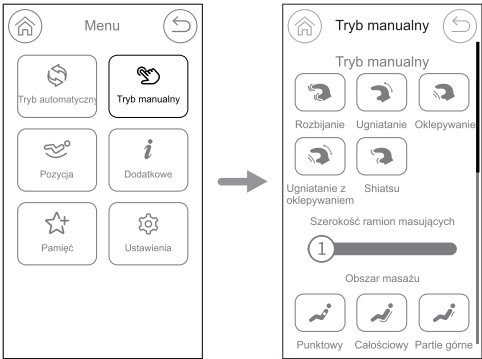

Menu – Schemat trybu manualnego

01).Techniki masażu:Po wejściu do menu, jak pokazano na poniższym schemacie, kliknij ikonę „Tryb manualny”, a następnie wybierz odpowiednią technikę masażu zgodnie z własnymi potrzebami. Dostępnych jest 5 technik masażu: rozbijanie, ugniatanie, oklepywanie, ugniatanie z oklepywaniem, Shiatsu.

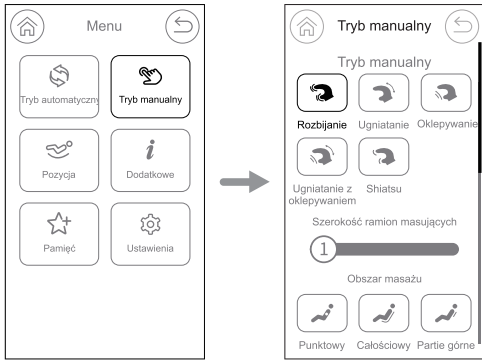


Menu – Schemat wyboru technik w trybie manualnym


Technika	Dostosowanie	
Rozbijanie	Szybkość	Regulacja szybkości w pięciu poziomach. Regulacja szerokości w trzech poziomach.
Ugniatanie	Szybkość	
Oklepywanie	Szybkość i szerokość	
Ugniatanie z oklepywaniem	Szybkość	
Shiatsu	Szerokość	

Instrukcja obsługi

02).Szerokość masażu: Po wejściu do interfejsu trybu manualnego, jak pokazano na poniższym schemacie, dostosuj szerokość masażu, przesuwając suwak w lewo lub w prawo, zgodnie z własnymi potrzebami. Dostępne są 3 poziomy regulacji szerokości, gdzie poziom 1 oznacza najwęższy zakres masażu, a poziom 3 – najszerszy.Regulacja szerokości jest dostępna dla technik oklepywania oraz Shiatsu. Przed regulacją szerokości w trybie manualnym użytkownik musi wybrać technikę masażu lub obszar masażu.Kliknij przycisk „powrót”, aby wrócić do ekranu głównego.

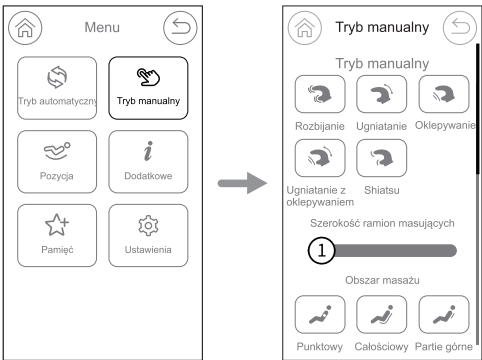


Menu – Schemat wyboru szerokości w trybie manualnym

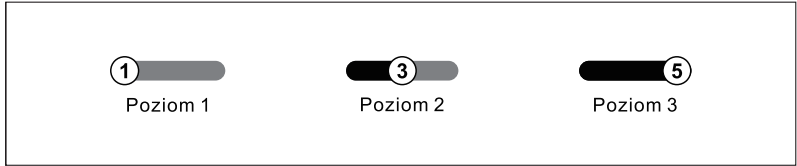

Przycisk	Opis
	Naciśnij i przesun w prawo, aby zwiększyć szerokość masażu (3 poziomy regulacji).
	Naciśnij i przesun w lewo, aby zmniejszyć szerokość masażu (3 poziomy regulacji).

Instrukcja obsługi

03).Obszar masażu: W interfejsie trybu manualnego, jak pokazano na poniższym schemacie, przejdź do sekcji "Obszar masażu". Do wyboru są 4 obszary masażu: Punktowy, Całościowy, Partie górne, Partie dolne. Kliknij w wybraną ikonę, aby rozpocząć masaż. Naciśnij przycisk „powrót”, aby wrócić do ekranu głównego.

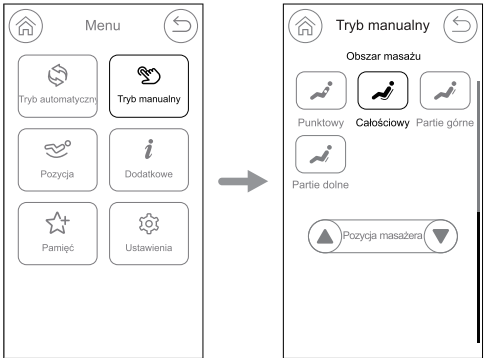


Interfejs menu – Schemat wyboru obszaru masażu w trybie manualnym


Przycisk	Opis
Punktowy	Masaż punktowy w jednej stałej pozycji. Naciśnij „Pozycja masażera”, aby zmienić punkt masażu.
Całościowy	Masaż całych pleców tam i z powrotem (góra-dół).
Partie górne	Masaż skupiony na górnej części pleców, tam i z powrotem.
Partie dolne	Masaż skupiony na dolnej części pleców, tam i z powrotem.

Instrukcja obsługi

04).Regulacja pozycji mechanizmu masującego: Po wejściu do interfejsu trybu manualnego, jak pokazano na poniższym schemacie, wybierz „Pozycja masażera”, a następnie naciśnij strzałkę w górę lub w dół, aby precyzyjnie dostosować pozycję ramion masujących. Regulacja mechanizmu masującego w trybie manualnym dostępna jest w masażu punktowym.Naciśnij przycisk „powrót”, aby wrócić do ekranu głównego.

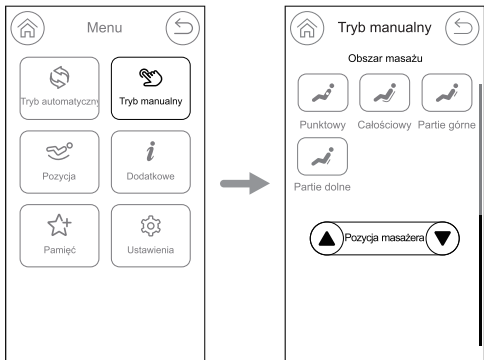


Interfejs menu – Schemat regulacji mechanizmu masującego w trybie manualnym

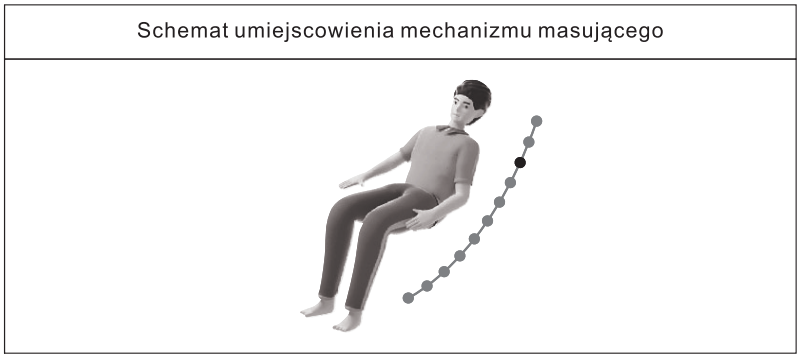

Przycisk	Opis
	Przytrzymaj, aby przesunąć mechanizm masujący w górę; zwolnij przycisk, aby zatrzymać.
	Przytrzymaj, aby przesunąć mechanizm masujący w dół; zwolnij przycisk, aby zatrzymać.


Instrukcja obsługi

3.Pozycja:
Uwaga: Szczegółowy opis ustawień pozycji znajduje się na stronach 25-27.
Naciśnij przycisk „powrót”, aby wrócić do ekranu głównego.

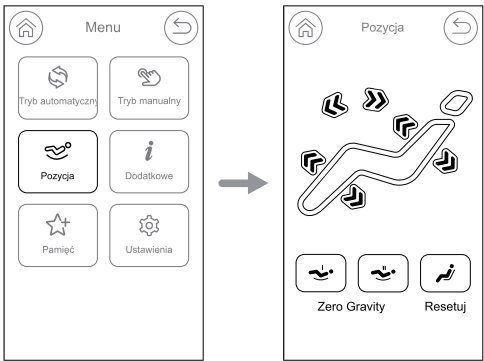

Interfejs menu – Schemat pozycji



4.Funkcje dodatkowe: Po wejściu do interfejsu menu wybierz i kliknij przycisk ikony „Dodatkowe”, aby wejść do interfejsu wyboru funkcji dodatkowych, a następnie wybierz odpowiednie funkcje dodatkowe: masaż stóp - uruchamia rolkowy masaż stóp, ogrzewanie pleców - uruchamia ogrzewanie, masaż łydek - uruchamia ugniatający masaż łydek. Kliknij przycisk „Powrót”, aby powrócić do strony głównej.

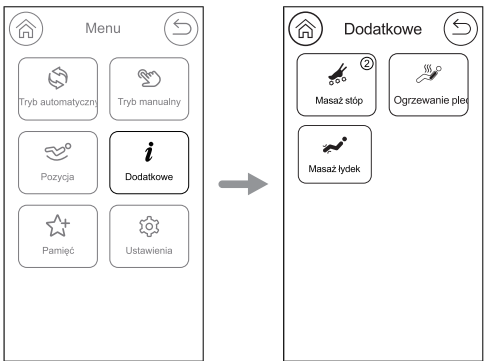

Interfejs menu – Schemat dodatkowych funkcji


Instrukcja obsługi

(1).Masaż stóp: Po wejściu do interfejsu z funkcjami dodatkowymi „Dodatkowe” wybierz i kliknij przycisk ikony „Masaż stóp”, jak pokazano na poniższym rysunku, aby włączyć/wyłączyć i wyregulować. Można wybierać spośród 3 poziomów. Wybierz i kliknij przycisk „Powrót”, aby powrócić do interfejsu strony głównej.

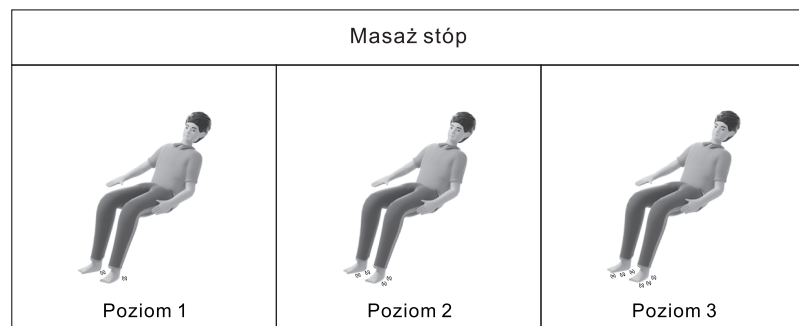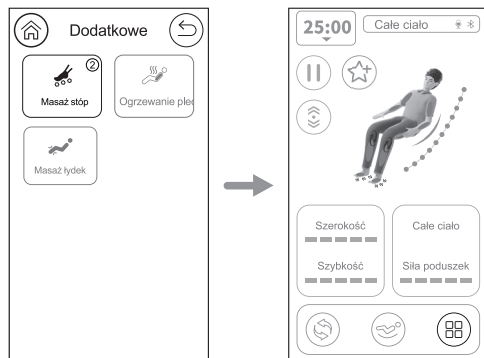


Instrukcja obsługi

(2).Ogrzewanie pleców:Po wejściu do interfejsu dodatkowych funkcji, jak pokazano na poniższym schemacie, kliknij ikonę „Ogrzewanie pleców”, aby włączyć lub wyłączyć funkcję ogrzewania pleców. Ciepło będzie odczuwalne po około 3 minutach.Kliknij przycisk „powrót”, aby wrócić do ekranu głównego.

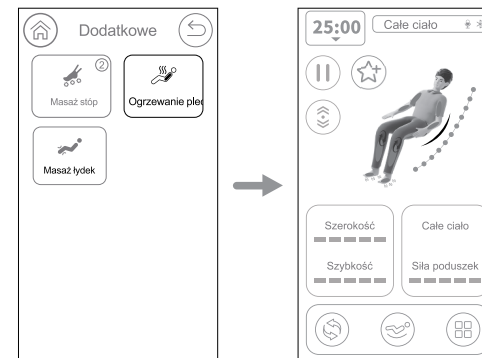


Instrukcja obsługi

- (3).Masaż łydek:Po wejściu do interfejsu dodatkowych funkcji, jak pokazano na poniższym schemacie, kliknij ikonę „Masaż łydek”, aby włączyć lub wyłączyć funkcję. Naciśnij przycisk „powrót” aby wrócić do ekranu głównego.

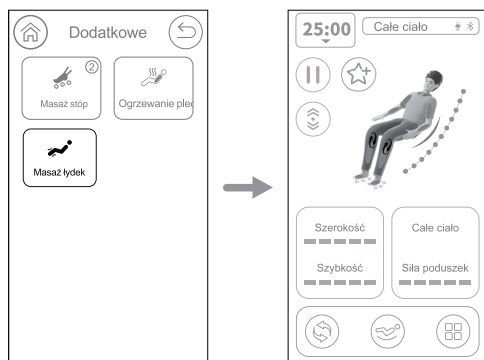


Instrukcja obsługi

- 5.Pamięć:Pozwala na zapisanie programu automatycznego i jego spersonalizowanych ustawień na liście. Kliknij ikonę „Pamięć”, aby przejść do następnego ekranu. Dostępne są trzy pamięci. Zapisz: Kliknij „Zapisz”, aby zapisać program. Fotel zapisze bieżące ustawienia masażu, w tym tryb automatyczny, technikę masażu, kąt odchylenia fotela, ogrzewanie, intensywność masażu itp.Użyj: Kliknij „Użyj”, aby uruchomić zapisany wcześniej program masażu.

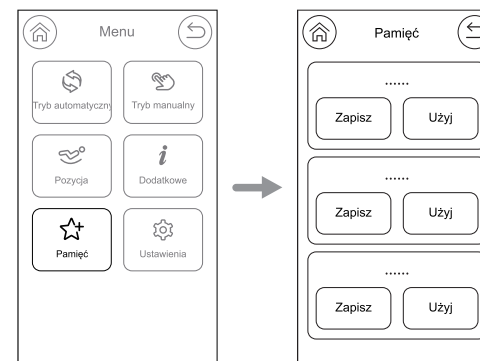

Menu – Schemat pamięci


6. Ustawienia:W menu znajduje się ikona „Ustawienia”. Kliknij ją, aby uzyskać dostęp do następujących opcji: Informacje o produkcie, Sterowanie głosowe, Bluetooth, Automatyczny reset pozycji fotela, Język.Kliknij „powrót”, aby wrócić do ekranu głównego.

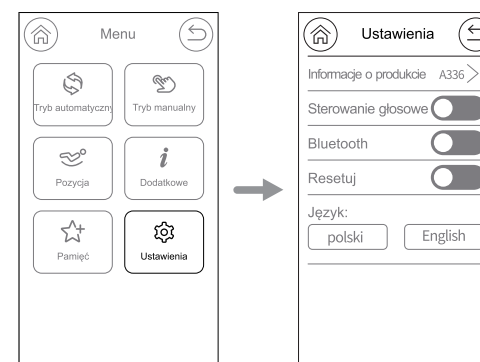

Menu – Ustawienia

Instrukcja obsługi

(1).Informacje o produkcie:Wyświetla dane dotyczące produktu, takie jak numer produktu, kod identyfikacyjny, wersja oprogramowania.Kliknij „powrót”, aby wrócić do ekranu głównego.

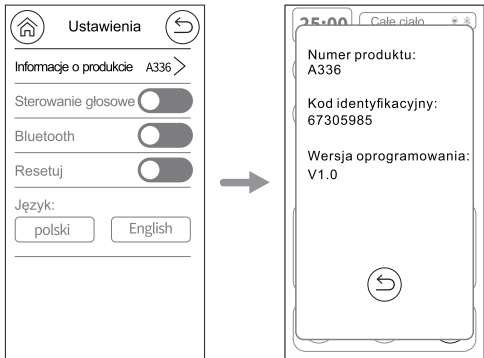


(2).Sterowanie głosowe:Kliknij, aby włączyć lub wyłączyć funkcję sterowania głosowego.Kliknij „powrót”, aby wrócić do ekranu głównego.

- 1).Gdy fotel masujący jest włączony lub znajduje się w trybie czuwania, wypowiedzenie przez użytkownika komendy „Hi Alice” lub „Hey Alice”, aktywuje funkcję sterowania głosowego.
- 2)、 Po pomyślnym włączeniu tej funkcji fotel masujący odpowie „I am here”. Jeśli w ciągu sześciu sekund od tego momentu zostanie wydana odpowiednia komenda głosowa, system wykona polecenie po otrzymaniu potwierdzenia od fotela. Jeśli w ciągu sześciu sekund nie zostanie podana poprawna komenda, funkcja sterowania głosowego wyłączy się automatycznie i będzie wymagała ponownej aktywacji.
- 3)、 Uwaga: Podczas korzystania z funkcji sterowania głosowego tempo mowy nie powinno być zbyt szybkie, a komendy powinny być wydawane w języku angielskim zgodnie z listą dostępnych poleceń. Po każdej udanej interakcji zaleca się oczekiwanie 1-2 sekund przed wydaniem kolejnej komendy.


Instrukcja obsługi

Komendy sterowania głosowego		
Komenda: „Hi Alice” lub „Hey Alice”Odpowiedź: „I am here” ("jestem tu")		
Nr	Komenda głosowa	Odpowiedź fotela
1	Massage on	Answer: Ok, massage on
2	Massage close	Answer: Ok, massage close
3	Comfort Massage	Answer: Ok, comfort massage
4	Relax massage	Answer: Ok, relax massage
5	Full body massage	Answer: Ok, full body massage
6	Neck and shoulder massage	Answer: Ok, neck and shoulder massage
7	Back and waist massage	Answer: Ok, back and waist massage
8	Stretch massage	Answer: Ok, stretch massage
9	Open the air pressure	Answer: Ok, open the air pressure
10	Close the air pressure	Answer: Ok, close the air pressure
11	Up the seat position	Answer: Ok, up the seat position
12	Down the seat position	Answer: Ok, down the seat position
13	Change the other mode	Answer: Ok, change the other mode
14	Go little down	Answer: Ok, go little down
15	Go little up	Answer: Ok, go little up
16	Fixed massage	Answer: Ok, Fixed massage
17	Stop adjustment	Answer: Ok, Stop adjustment

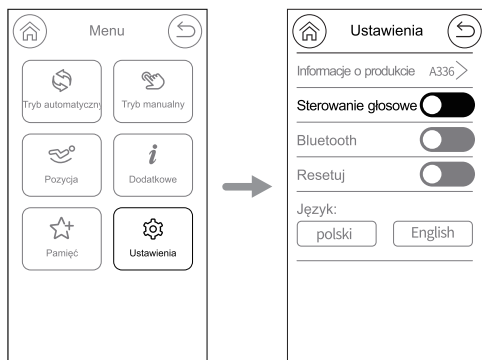


- (3).Bluetooth:Po wejściu do interfejsu ustawień naciśnij przycisk „Bluetooth”, jak pokazano na poniższym schemacie, a następnie włącz lub wyłącz funkcję Bluetooth.Po włączeniu funkcji Bluetooth możesz sparować i połączyć urządzenie audio obsługujące Bluetooth (np. telefon komórkowy, tablet itp.) z modulem Bluetooth fotela masującego. Po nawiązaniu połączenia muzyka odtwarzana na urządzeniu audio będzie przesyłana bezprzewodowo przez Bluetooth do fotela, umożliwiając odtwarzanie muzyki z głośników.Naciśnij przycisk „powrót”, aby wrócić do ekranu głównego.


- 01).Otwórz menu swojego urządzenia, przejdź do „Ustawienia” i wybierz opcję „Bluetooth”. Włącz Bluetooth – urządzenie automatycznie rozpocznie wyszukiwanie nowych urządzeń Bluetooth.
- 02).Urządzenie wyszuka dostępne modele Bluetooth (np. IMCM-XXXX). Kliknij przycisk „Połącz” – jeśli pojawi się zapytanie o potwierdzenie parowania, wybierz opcję „Połącz”, aby zakończyć proces.
- 03).Otwórz odtwarzacz muzyki na swoim urządzeniu i wybierz utwór do odtworzenia. Naciśnij przycisk „powrót”, aby wrócić do ekranu głównego pilota.

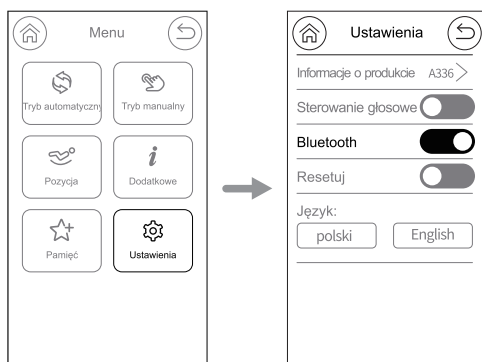

- (4).Automatyczny powrót do pozycji początkowej:Jest to domyślne ustawienie fotela. Po włączeniu funkcji „Reset” fotel automatycznie powraca się do pozycji wyjściowej po zakończeniu masażu. Po wyłączeniu tej funkcji fotel pozostanie w pozycji, w której zakończył masaż. Ustawienia należy dostosować zgodnie z własnymi preferencjami użytkownika.

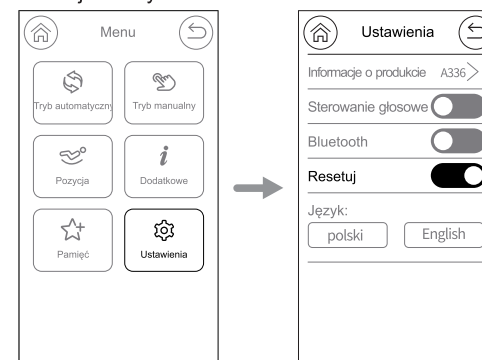


- (5).Wybór języka:Po wejściu do ustawień, jak pokazano na poniższym schemacie, można ustawić język systemowy zgodnie z własnymi potrzebami. Fotel oferuje dwie wersje językowe – domyślnie ustawiony jest język polski, a alternatywą jest język angielski.Naciśnij przycisk „powrót”, aby wrócić do ekranu głównego.

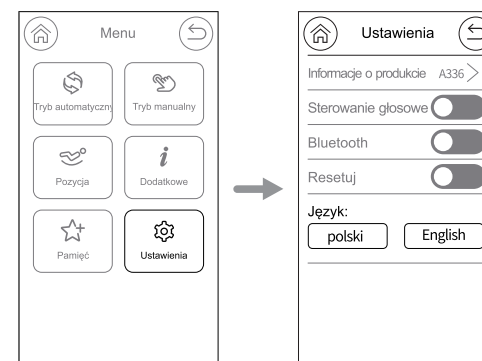


IV. Zakończenie masażu w trakcie trwania programu


1. Przytrzymaj przycisk zasilania znajdujący się na górze pilota, aby wyłączyć wszystkie funkcje masażu i przywrócić fotel do pozycji początkowej.
2. Naciśnij przycisk pauzy, a następnie przycisk wyłączania na pilocie – spowoduje to wyłączenie wszystkich funkcji masażu oraz przywrócenie fotela do pozycji początkowej.
3. Skorzystaj z polecenia głosowego do wyłączenia fotela – wyłączy to wszystkie funkcje masażu i przywróci fotel do pozycji początkowej.
4. Po zakończeniu ustawionego czasu masażu wszystkie funkcje masażu zostaną wyłączone. Jeśli funkcja „Reset” jest włączona, fotel powróci do pozycji początkowej. Jeśli funkcja jest wyłączona, fotel pozostanie w tej samej pozycji.

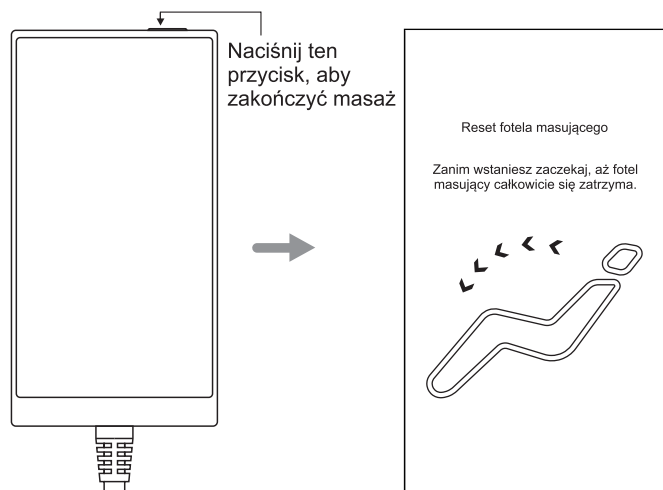


Wyłączanie zasilania całego urządzenia

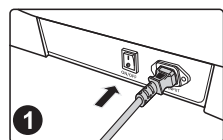

1. Przełącz przycisk zasilania (pozycja „0”).

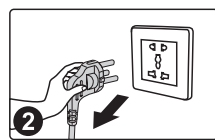

2. Odłącz wtyczkę zasilania.

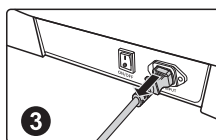

3. Odłącz przewód zasilający urządzenia.

Czyszczenie skóry syntetycznej i elementów plastikowych

Przetrzyj skórę miękką, suchą szmatką

■ Nie używaj do czyszczenia urządzenia środków chemicznych, takich jak rozcieńczalnik, benzyna, alkohol itp.

■ Używając dostępnych w sprzedaży środków do pielęgnacji skóry, postępuj zgodnie z instrukcją obsługi.

■ Jeśli skóra syntetyczna jest szczególnie brudna, wytrzyj ją w następujący sposób:

- ① Zanurz miękką szmatkę w wodzie lub ciepłej wodzie z dodatkiem 3% do 5% neutralnego detergentu, a następnie dokładnie ją odciśnij.
- ② Użyj miękkiej ściereczki do wytarcia powierzchni skóry.
- ③ Wytrzyj roztwór czyszczący szmatką namoczoną w czystej wodzie i dokładnie wyciśniętą.
- ④ Przetrzyj miękką ściereczką.
- ⑤ Pozostaw do swobodnego wyschnięcia.


■ Jeśli trudno jest usunąć plamy, zanurz dostępną w sprzedaży gąbkę z melaminy w neutralnym detergencie, a następnie wytrzyj nią urządzenie.

■ Nie używaj suszarki do włosów do suszenia powierzchni.

■ Zachowaj ostrożność podczas korzystania z urządzeń w dżinsach i tkaninach kolorowych, ponieważ kolor tkaniny może zabarwić powierzchnię skóry syntetycznej.

■ Nie utrzymuj tych części w kontakcie z tworzywem sztucznym przez dłuższy czas, ponieważ spowoduje to zabrudzenie powierzchni skóry syntetycznej.

■ Syntetyczna skóra może się odbarwić, dlatego po użyciu np. farby do włosów przykryj część dotkniętą przez włosy ręcznikiem.

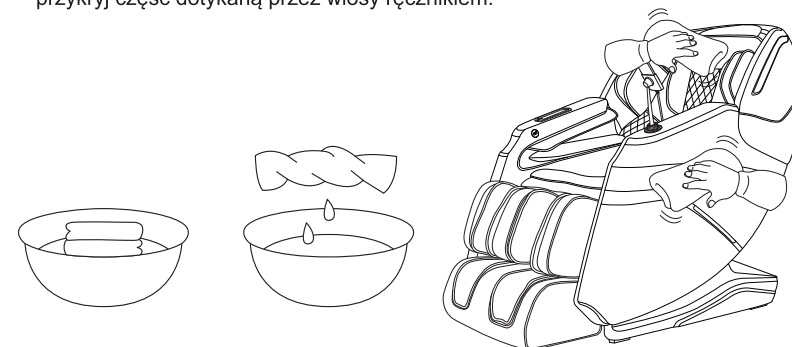

Rozwiązywanie problemów

Problem	Kiedy podnóżek lub oparcie osiągną określoną pozycję, naciskasz odpowiedni przycisk regulacji, ale nie następuje żadna zmiana i emitowany jest przerywany sygnał dźwiękowy.
Rozwiązanie	Ze względu na konstrukcję fotela i wymagania ergonomiczne, fotel ma ograniczenie ochronne dla max stanu regulacji położenia. Po osiągnięciu granicy pojawi się dźwięk przypominający.

Problem	Funkcja nie działa lub niektóre funkcje nie działają po włączeniu fotela.
Rozwiązanie	Po włączeniu fotela przez naciśnięcie przycisku włącznika należy ręcznie wybrać automatyczny program masażu lub inny tryb pracy. Jeśli fotel nie będzie działał, wyłączy się automatycznie po 20 minutach. Jeśli wybrano tryb programu manualnego, funkcje, które nie zostały wybrane, mogą zostać wyłączone, a tryb pracy należy ustawić ręcznie w trybie manualnym.

Problem	Podczas regulacji pozycji fotela słychać odgłos tarcia skóry.
Rozwiązanie	W tym fotelu zastosowano wysokiej jakości skórę odporną na zużycie, która spełnia wymogi ochrony środowiska. Ze względu na właściwości materiałów skórzanых podczas tarcia przy ruchu względnym będzie występował słyszalny odgłos, co jest zjawiskiem normalnym. Uwaga: Jeśli podczas pracy fotela usłyszysz dźwięk rozrywania tkaniny lub skóry, natychmiast przestań z niego korzystać i zwróć się do profesjonalnego serwisu.

Problem	Ramiona masujące nie docierają do barków i karku.
Rozwiązanie	Jeśli głowa nie dotyka poduszki za głową lub plecy nie dotykają oparcia, pozycja ramion może być niższa niż rzeczywista pozycja podczas procesu skanowania sylwetki. Usiądź w najgłębszej pozycji siedzenia, oprzyj głowę na zagłówek i zacznij od początku.

Problem	Fotel jest uszkodzony. Przewód zasilający lub wtyczka są nienaturalnie gorące.
Rozwiązanie	Aby zapobiec wypadkom, skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Fotel masujący zastyga w pozycji rozłożonej.
Rozwiązanie	fotel masujący zastyga w pozycji rozłożonej w kilku sytuacjach: 1. awaria zasilania, 2. nagła przerwa w dostawie prądu, 3. po zakończeniu programu masażu (funkcje fotela masującego takie jak rolki, poduszki powietrzne czy ogrzewanie zostają wyłączone, natomiast sam fotel masujący zastyga w pozycji rozłożonej. Aby go złożyć należy go włączyć i wyłączyć za pomocą przycisku na pilocie lub panelu podręcznym.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących urządzenia, skontaktuj się z wyznaczonym serwisem.

Specyfikacja urządzenia

Model: A336

Name: Fotel masujący

Napięcie znamionowe: 110-120V~ 60Hz ☐

220-240V~ 50Hz/60Hz ☐

Moc znamionowa: 140W

Czas znamionowy: 20min

Klasa bezpieczeństwa: Class I

Użyte materiały: PCV, PA, części stalowe oraz części elektryczne i elektroniczne

TWORZYWA	PU	SKÓRA	TKANINA	DREWNO

ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ

Producent:

Zhejiang Haozhonghao Health Product Co., Ltd

No.18 XingLong Road, Furniture Garden, Wanquan Industrial Base, Pingyang,

Zhejiang, Chiny

e-mail: irest@irest.com

Importer i upoważniony przedstawiciel w UE:

iRest Europe Sp. z o.o.

Szewczenki 7/11

10-274 Olsztyn, Polska

e-mail: irest@irest-europe.com

Drogi użytkowniku, możesz przyczynić się do ochrony środowiska.

Bądź ekologicznie odpowiedzialny i zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania wyznaczonego przez lokalną administrację.

Użyte do produkcji urządzenia materiały mogą być cennym surowcem wtórnym, a gdy są niewłaściwie utylizowane mogą być niebezpieczne dla środowiska.

Pamiętaj - nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi.

